



„Für *mein*  
Wohlsein!“

## Bio-Puls-19<sup>®</sup> Automatik

**Medizinprodukt**  
zur Behandlung, Regulierung  
und Therapieanwendung.

Magnetfeld-Therapie

CE 0408

Gemäß der Richtlinie:  
93/42/EWG Medizinprodukte



Original ‚Bio-Puls-19‘ Magnetfeld-Therapieprodukte - seit 1988.



## Inhalt

Einführung	2	Therapiewahl / Frequenzeinstellungen	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	2	Technische Daten	7
Indikation	3	Betriebsbedingungen	7
Kontraindikationen	3	Transport und Lagerung	7
Lieferumfang	3	Technische Daten:	7
Sicherheitshinweise	4	Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)	8
Typografie	4	Wartung, Fehlerbehebung, Garantie	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	4	Wartung	9
Produktlabel	4	Reinigung	10
Beschreibung	5	Fehlersuche und Behebung	11
Bedienung/Anwendung	5	Garantie	11
		Kontakt Daten	11

## Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb von BIO-PULS-19 AUTOMATIK, bestehend aus der pulsierenden Magnetfeldunterlage und dem dazugehörigen Impulsgeber.

BIO-PULS-19 AUTOMATIK ist ein konformitätsbewertetes und äußerst bedienerfreundliches Medizinprodukt zur unterstützenden Behandlung von Knochenbrüchen, Tenopathien und Wunden sowie zur Linderung von Schmerzen.

### Erfolge und Erfahrungen - seit 1988

Unsere wirtschaftlichen Erfolge, die wir mit BIO-PULS-19 AUTOMATIK erzielen können, verdanken wir in erster Linie den Therapie-Erfolgen unserer Kunden. Verständlich, denn zufriedene Kunden empfehlen unsere Medizinprodukte gerne weiter.



Für BIO-PULS-19 AUTOMATIK entscheiden sich viele Menschen, die sich auch selbst und selbständig um ihr ganz persönliches Wohlbefinden kümmern.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

BIO-PULS-19 AUTOMATIK ist ein Medizinprodukt zur unterstützenden Behandlung von Knochenbrüchen, Tenopathien und Wunden sowie zur Linderung von Schmerzen mittels eines erzeugten Magnetfeldes. BIO-PULS-19 AUTOMATIK wird zu medizinisch therapeutischen Zwecken für Menschen verwendet, wobei die bestimmungsgemäße Hauptwirkung im Unterschied zu Arzneimitteln physikalisch erfolgt.

Es ist für die Anwendung an Menschen bestimmt. Der Patient ist dabei der Anwender und benötigt zur Verwendung keine medizinischen Vorkenntnisse.



Die Gebrauchsanweisung muss vor der Verwendung gelesen werden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie beim Veräußern des Gerätes die Gebrauchsanweisung mit.

## Indikation

Das „Aktive Medizinprodukt“ BIO-PULS-19 AUTOMATIK ist für nachfolgende Indikationen bewertet:

- Schmerzreduktion
- Unterstützende Wundbehandlung
- Unterstützende Behandlung von Knochenbrüchen
- Unterstützende Behandlung von Tendopathien (im Wesentlichen nicht-entzündliche Erkrankungen der Sehnen durch Über-, Fehlbelastung oder Verschleiß bzw. Degeneration)
- Bei Kindern sollte die Magnetfeldtherapie nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewandt werden.

## Kontraindikation

BIO-PULS-19 AUTOMATIK darf bei folgenden Merkmalen nicht, bzw. nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden:

- In Verbindung mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Implantaten
- Unbehandelter Bluthochdruck
- Unbehandeltes Vorhofflimmern
- Kongestive Herzinsuffizienz
- Während der Schwangerschaft
- Bei Epilepsie
- Bei Herzrhythmusstörungen
- Akute Tuberkulose
- Schwere Pilzkrankungen.

## Lieferumfang

BIO-PULS-19 AUTOMATIK wird wie folgt geliefert:

- Impulsgeber
- Gebrauchsanweisung
- 9 V Batterie



Je nach Bestellung liefern wir folgende Anwendungsteile (Applikatortypen):



### • Flächenunterlage

Art. Nr. 191 (ca. 80 bzw. 90 x 190 x 2,5 cm)  
Therapie-Flächenunterlage als Betteinlage (unter der Matratze) die optimale Lösung zur Langzeittherapie.

### • Therapie-Flächenauflage

(Abb. wie Flächenunterlage)

Art. Nr. 198 (ca. 80 bzw. 90 x 190 x 2,5 cm)  
Therapie Flächenauflage zur Verwendung bei Federkernmatratzen und Wasserbetten. Zur Verwendung unter dem Leintuch oder Matratzenschoner.



### • Therapie-Sitzauflage 88 cm

Art. Nr. 192

(ca. 88 x 44 x 2,5 cm)

Geeignet zur Anwendung am Arbeitsplatz (Bürostuhl), im Sessel, im Rollstuhl, auf Reisen (Wohnmobil), usw.



### • Therapie- und Sitzkissen

Art. Nr. 212

(ca. 42 x 42 x 2,5 cm)

Geeignet zur Anwendung am Arbeitsplatz (Bürostuhl), im Sessel, im Rollstuhl, auf Reisen (Wohnmobil), usw.



### • Therapie-Sitzauflage 140 cm

Art. Nr. 211

(ca. 140 x 45 x 2,5 cm)

Geeignet zur Anwendung am Arbeitsplatz (Bürostuhl), im Sessel, im Rollstuhl, auf Reisen (Wohnmobil), usw.

## Sicherheitshinweise

### Typografie

#### Folgende Symbolik wird verwendet:

##### WARNUNG

Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu sehr schweren Verletzungen führen kann.

##### ACHTUNG

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

##### HINWEIS

Hinweise sind rein informativer Natur. Hier erhalten Sie zusätzliche nützliche Informationen, Hinweise und Tipps.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

#### WARNUNG


- Es darf nicht versucht werden, die Magnetfeldunterlage mit einer Strom führenden Steckdose zu verbinden.
- Das Steuergerät sowie die Anwendungsteile dürfen nicht verändert werden. Durch eine Änderung kann der ordnungsgemäße und sichere Betrieb nicht mehr sichergestellt werden.

#### ACHTUNG

- Die Magnetfeldunterlage darf nur mit dem Original - Steuergerät BIO-PULS- 19 AUTOMATIK verbunden werden.
- Bei Beschädigung darf das Steuergerät nicht mehr verwendet werden.

- Die Magnetfeldunterlage darf bei Beschädigung nicht mehr in Gebrauch genommen werden.
- Sollten Sie Haustiere haben, darf das Gerät für die Tiere nicht erreichbar sein.
- Das Steuergerät darf nicht auf der nackten Haut verwendet werden, da es bei sensiblen Patienten zu Hautreaktionen führen kann.
- Die Oberflächen der Applikatoren bestehen aus hautverträglichen Stoffen. Dennoch dürfen die Applikatoren nicht auf nackter Haut verwendet werden, da es bei sensiblen Patienten zu Hautreaktionen führen kann. Verwenden Sie die Applikatoren immer bekleidet oder mit einer Abdeckung.
- (Bettlaken, Badetuch o. ä.).
- Das Gerät ist bei Bewegung nicht betriebsfähig.
- Fusseln oder Staub können die Funktionalität des Impulsgebers negativ beeinflussen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung in explosionsfähiger Atmosphäre oder in explosionsfähigen Gemischen von Anästhesiemittel oder Lachgas geprüft.
- Wird das Steuergerät längere Zeit nicht in Betrieb genommen, dann entnehmen Sie bitte die eingesetzten Batterien.
- Entsorgung gemäß nationaler Anforderungen für Elektrogeräte. Keine Entsorgung über den regulären Hausmüll.
- Verwenden Sie in der direkten Umgebung keine Magnete. Die vom Gerät generierten Magnetfelder werden dadurch beeinflusst.
- Halten Sie elektrische Geräte von Zündquellen fern.

## Produktlabel

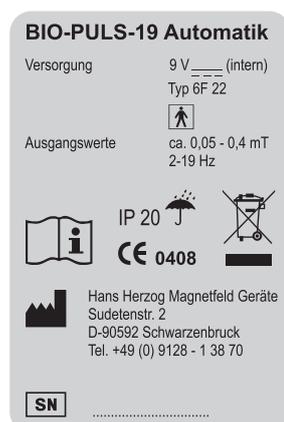

Schutzgrad Typ BF



Gebrauchsanweisung beachten



Vor Nässe schützen



CE gemäß den Richtlinien:  
93/42/EWG Medizinprodukte  
2011/65/EU RoHS II



Dieses Produkt darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Es sind die jeweiligen landesspezifischen Entsorgungsregeln zu beachten. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juni 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE II).




Symbol für Hersteller



Seriennummer

**LOT** Chargennummer

## Typenschild, exemplarisch für Flächenunterlagen

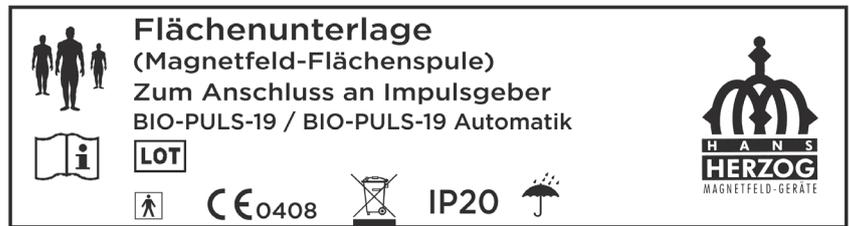

Hans Herzog Magnetfeld Geräte · Sudetenstraße 2 · 90592 Schwarzenbruck · Tel: +49 (0) 9128-13870

## Beschreibung

Das BIO-PULS-19 AUTOMATIK Magnetfeldsystem ist mit manuellen und automatischen Funktionen ausgestattet.


Die manuelle Funktion beinhaltet einstellbare Frequenzen von 2 bis 19 Hz.

Bei der zuschaltbaren Automatikfunktion werden automatisch 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz und 8 Hz in jeweils ca. zehn bis zwölf Minuten-Intervallen wiederkehrend durchlaufen.

## BIO-PULS-19 AUTOMATIK besteht aus zwei Einheiten:

1. Ein Steuergerät (Impulsgeber) mit interner Behandlungsspule.
2. Eine Magnetfeld-Flächenunterlage (eine Variante, der auf Seite 3 dargestellten Applikatorentypen) mit je einem Anschlusskabel und Spezialstecker.

## Funktionen des Gerätes

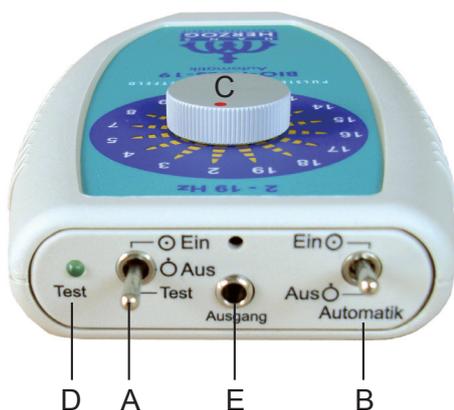

- A = 1 x Kippschalter  
EIN / AUS / TEST
- B = 1 x Kippschalter zuschaltbare Automatik  
EIN / AUS
- C = 1 x FREQUENZ- EINSTELLRAD
- D = 1 x Funktionskontrolllampe TEST
- E = 1 x AUSGANGS- BUCHSE

## Bedienung / Anwendung

Platzieren sie den Applikator an der gewünschten Stelle.

### ⚠ ACHTUNG


Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder geklemmt wird.

### ⚠ WARNUNG

Bei der Kabelverlegung ist darauf zu achten, dass es nicht zu Strangulierungen kommt. Das Gerät ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

## Flächenunterlage (Therapie-Bettunterlage):

Die Therapie- Bettunterlage muss unter die Matratze gelegt und darauf geachtet werden, dass der Aufnäher immer zum Körper gerichtet ist.

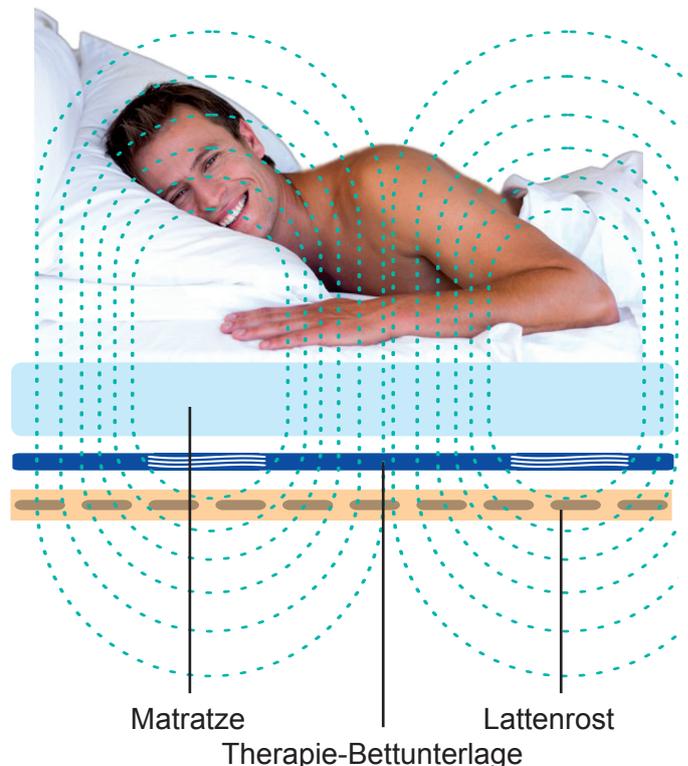

## Sitzauflagen

Die Sitzauflagen können nach belieben auf Stühlen, Sesseln, Sofas, Couch, Hocker oder Bürostühlen platziert werden.



Die unterschiedlichen BIO-PULS-19 AUTOMATIK Magnetfeldunterlagen (Applikortypen, s. S. 3) können Sie für Ihre individuell angepasste Magnetfeld-Therapie sowohl zuhause, im Büro und natürlich auch auf Reisen einsetzen.

## Impulsgeber

Einschalten des Gerätes

1. Das Batteriefach auf der Rückseite des Steuergerätes mit leichtem Druck auf die markierte Fläche des Deckels in Pfeilrichtung aufschieben.

### ⚠ ACHTUNG

Bei defektem Deckel oder Batteriefach darf das Steuergerät nicht mehr in Betrieb genommen werden.

2. Eine 9V Batterie TYP 6F22 (kein Akkumulator) in das Batteriefach polungsrichtig (siehe Kennzeichnung) einlegen. Das Batteriefach schließen.

### 📄 HINWEIS

Wir empfehlen unseren Kunden nur die Verwendung von Batterien, deren Hersteller im Herstellerregister des Umweltbundesamtes registriert sind.

3. Mit dem Kippschalter **A** in Position **EIN** ist das Gerät in Betrieb.

4. Mit dem Kippschalter **A** in Position **EIN** und den Kippschalter **B** in Position **EIN** ist die Automatikfunktion eingeschaltet.

5. Die Magnetfeldunterlage wird mit dem herausgeführten Verbindungskabel (Klinkenstecker) mit dem Ausgang des Impulsgebers verbunden.

### 📄 HINWEIS

Ist eine Magnetfeldunterlage am Impulsgeber ange-

schlossen, dann ist die interne Behandlungsspule abgeschaltet. Ist keine Magnetfeldunterlage angeschlossen, dann ist die interne Behandlungsspule in Betrieb.

Sie können nun den Impulsgeber jederzeit am Körper tragen. In diesem Fall ist die Behandlungsspule im Gerät wirksam.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollten Sie darauf achten, dass Sie die Impulsgeberseite „Technische Daten“ zum Körper gerichtet tragen.

6. Mit dem Kippschalter **A** in Position **TEST** ist die Funktionskontrolle ausgewählt. Die grüne Kontrolllampe (Test) blinkt im Rhythmus der gewählten Frequenz und zeigt die Impulspausen an (Lampe dunkel).

7. Mit dem Frequenzeinstellrad **C** können Sie die benötigten **Frequenzen von 2 bis 19 Hertz** einstellen. Die von Ihnen eingestellten Frequenzen werden elektronisch in bestimmten Zeitabständen ein- und ausgeschaltet. Damit wird ein Gewöhnungseffekt vermieden (Impulspausen). Wegen dieser Automatikfunktion ist es empfehlenswert, bei Batterie- oder Funktionskontrollen einige Sekunden zu warten, bis das Testlämpchen aufleuchtet.

8. Mit dem Kippschalter **A** in Position **AUS** ist das Gerät abgeschaltet.

## Therapiewahl / Frequenzeinstellungen

Nicht jeder Mensch reagiert auf die Magnetfeldtherapie gleich. Aus diesem Grund dürfen allgemeine Einstellungshinweise nur als Hilfestellung angesehen werden.

Sie können aber auch jederzeit Ihren persönlichen BIO-PULS-19 AUTOMATIK Medizinprodukteberater befragen.

Wir empfehlen während den ersten 20 Therapietagen vermehrt Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Über Wechselwirkungen mit Medikamenten kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

INDIKATION	FREQUENZ
Schmerzreduktion	10 Hz, 12 Hz, 18 Hz
Wundbehandlung	12 bis 15 Hz
Behandlung von Knochenbrüchen	10 Hz, 15 Hz, 19 Hz
Behandlung von Tendopathien	2 bis 5 Hz, 10 Hz, 12 Hz

## Technische Daten

### Betriebsbedingungen

#### Temperatur (empfohlen):

+5°C bis 40°C über Taupunkt

#### Luftfeuchtigkeit (empfohlen):

15% bis 93%, nicht kondensierend

#### Luftdruck (barometrisch):

700 hPa bis 1060 hPa

### Transport und Lagerung

#### Umgebungstemperatur:

-25°C bis 70 °C über Taupunkt

#### Relative Luftfeuchtigkeit:

0 % - 93 %, nicht kondensierend

#### Luftdruck (barometrisch):

700 hPa bis 1060 hPa

## Technische Daten:

### Abmessungen (Steuergerät):

140 mm x 84 mm x 25 mm

### Frequenzen manuell:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19 Hz

(Abweichung kann 0 - 15% betragen)

### Frequenzen Automatik:

2, 3, 5, 8 Hz (Abweichung kann 0 - 15% betragen)

### Betriebsspannung:

9V DC Batterie TYP 6F22 intern  
(V=Volt, DC=Gleichstrom)

### Anwendungsteil:

TYP BF

### Elektrische Schutzklasse:

Intern versorgt

### IP Schutzklasse:

IP 20 (Geschützt gegen feste  
Fremdkörper > 12,5 mm, kein  
Schutz gegen Wasser)

### Nennstrom:

ca. 0,4 mA

### Medizinproduktklasse:

Ila (gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG)

### Magnetische Flussdichte:

ca. 0,05 mT - 0,4 mT

### Lebensdauer:


Die Lebensdauer ist mit 12 Jahren definiert.

### CE Zeichen:


Konformitätsbewertet nach Anhang I  
der Richtlinie 93/42/EWG.

### Signalform:

- am Beispiel 8 Hz

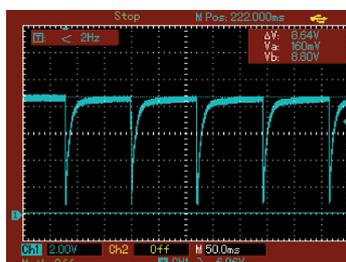

- am Beispiel 19 Hz

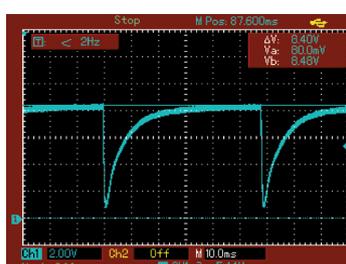

## Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Die wachsende Anzahl von elektronischen Geräten wie PCs und Mobiltelefonen kann dazu führen, dass medizinische Geräte beim Einsatz elektromagnetischen Störungen von anderen Geräten ausgesetzt sind. Elektromagnetische Störungen können zu Fehlfunktion des medizinischen Gerätes führen und eine potentiell unsichere Situation erzeugen.

Das BIO-PULS-19 AUTOMATIK erfüllt die Norm EN60601-1-2 sowohl in Bezug auf die Immunität als auch in Bezug auf Emissionen.

**Trotzdem sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:**

Verwenden Sie in der Nähe des medizinischen Gerätes keine Mobiltelefone und sonstige Geräte, die starke elektrische oder elektromagnetische Felder erzeugen. Dies könnte zu Fehlfunktion des medizinischen Gerätes führen und eine potentiell unsichere Situation erzeugen. Es wird ein Mindestabstand von 2 m empfohlen. Überprüfen Sie den richtigen Betrieb des Gerätes, falls der Abstand geringer ist.

*„BIO-PULS-19 AUTOMATIK erzeugt ein dem natürlichen Erdmagnetfeld angepasstes und für den Menschen positives und harmonisierendes Magnetfeld.“ Hans Herzog*



## Wartung, Fehlerbehebung, Garantie

### Wartung

Das Gerät ist bis auf das Ersetzen der Batterie wartungsfrei.

**Folgende Kontrollen sind durch den Anwender durchzuführen:**

KONTROLLE	DURCHFÜHRUNG	HÄUFIGKEIT
<b>Prüfen der Batteriespannung.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kippschalter in Position TEST bringen.</li><li>• Wenn die Testlampe nicht mehr blinkt, so müssen Sie die Batterie auswechseln. (s. unter „Einschalten des Gerätes“)</li></ul> Die Sichtkontrolle muss bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Dieser Testvorgang funktioniert mit oder ohne angeschlossener Magnetfeldunterlage.	wöchentlich
<b>Kabel auf Beschädigung prüfen.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sichtprüfung aller Kabel.</li></ul> <b>⚠ ACHTUNG</b> Die Sichtkontrolle muss bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Ist die Isolierung beschädigt oder die Zugentlastung gebrochen, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.	wöchentlich
<b>Gehäuse auf Beschädigung prüfen.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sichtprüfung des Gehäuses auf Beschädigung.</li></ul> <b>⚠ ACHTUNG</b> Die Sichtkontrolle muss bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Ist das Gehäuse beschädigt (gebrochen), darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.	monatlich
<b>Funktionsprüfung Drehschalter.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funktionsprüfung des Drehschalters.</li></ul> <b>⚠ ACHTUNG</b> Rastet der Drehschalter an den einzelnen Stellungen nicht mehr definiert ein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.	monatlich

#### ⚠ ACHTUNG

Steuergerät und Magnetfeldunterlage dürfen nur vom Hersteller oder von ihm dazu ermächtigten Personen geöffnet und repariert werden.

Im Falle eines Defektes darf das Gerät nicht selbst repariert, verwendet oder modifiziert werden.

Wiederkehrende Prüfungen sind gemäß EN 62353 in einem Intervall von höchstens 36 Monaten durchzuführen.

## Reinigung

### Impulsgeber

Zur Reinigung des Impulsgebers verwenden Sie bitte nur ein weiches, dampffeuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.

### ⚠ ACHTUNG

Vor der Reinigung muss das Gerät abgeschaltet sein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel (Verdünnungen oder andere Lösungsmittel)

### Magnetfeldunterlage


Die Magnetfeldunterlage wird mit einem Staubsauger abgesaugt.

### ⚠ ACHTUNG

Die Magnetfeldunterlage darf weder durch Waschmaschinen- oder Handwäsche gesäubert werden. Verwendung einer Magnetfeldunterlage von mehreren Anwendern: Verwenden Sie für jeden Anwender einen Schutzüberzug oder waschen Sie den Schutzüberzug vor dem Anwenderwechsel.

### ℹ HINWEIS

Stark verschmutzte Magnetfeldunterlagen können auf Wunsch vom Hersteller neu bezogen werden (kostenpflichtig).

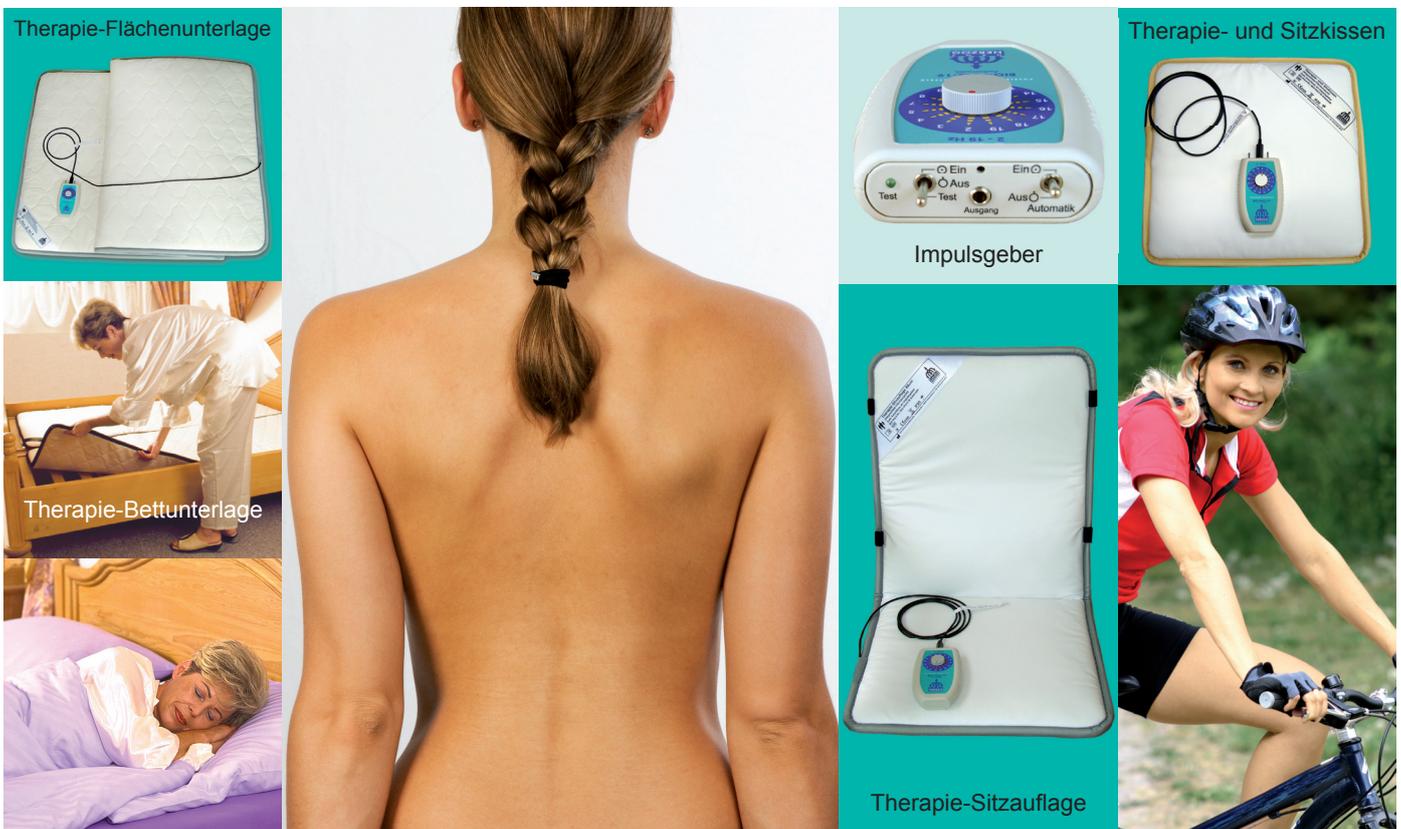

**BIO-PULS-19® AUTOMATIK - Ihre Magnetfeld-Therapie für zuhause und im Büro.**

## Fehlersuche und Behebung

FEHLERBILD	URSACHE	LÖSUNG
<b>Die Batterie ist eingelegt und die TEST-LED bei Schalterstellung TEST bleibt dunkel.</b>	Es können sich Fremdkörper im Batteriefach befinden. Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll und mit der richtigen Polarität eingelegt ist. Überprüfen Sie, ob die Batteriekontakte anliegen.	Falls Fremdkörper vorhanden sind, müssen diese entfernt werden. Die Batterie durch eine volle Batterie austauschen und auf die richtige Polarität achten.
	Applikator nicht richtig verbunden.	Applikator anschließen.
	Defekt im Applikator.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	Stecker des Anschlusskabels ist defekt oder gebrochen.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	Das Anschlusskabel ist aufgescheuert oder eingerissen.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	Die Zugentlastung des Kabels im Stecker ist herausgerissen.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	Das Anschlusskabel ist im Applikator herausgerissen.	Kontaktieren Sie den Hersteller.
	<b>Am Gerät ist eine Frequenz eingestellt, die LED blinkt jedoch nicht.</b>	Batterie ist zu schwach.
Geräteschalter steht auf EIN.		Umschalten auf TEST.
<b>Während des Betriebes geht die LED aus.</b>	Batterie ist zu schwach.	Die Batterie durch eine volle Batterie austauschen und auf die richtige Polarität achten.

### Garantie

Auf dieses Gerät gewähren wir nach Kaufdatum drei Jahre Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung von Mängeln, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreier Materialien oder Fabrikationen zurückzuführen sind.

#### HINWEIS

Steuergerät und Magnetfeldunterlage dürfen nur vom Hersteller oder von ihm dazu ermächtigten Personen geöffnet und repariert werden. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

Für den Fall einer Rücksendung oder eines Rücktransports verwenden Sie bitte die Originalverpackung.

### Kontaktdaten

Für Unterstützung, Fragen zur Installation, Anwendung und Wartung kontaktieren Sie uns unter den angegebenen Kontaktdaten. Das gilt auch, wenn es zu unerwarteten Fehlern oder Ereignissen kommt.

Hans Herzog Magnetfeld Geräte  
Sudetenstr. 2  
D-90592 Schwarzenbruck  
Tel. +49 (0) 9128 - 1 38 70

Stand der Gebrauchsanweisung:  
07/2015

## Für Ihr Wohlbsein !!!

„Es ist nicht genug zu wissen,  
man muss auch anwenden,  
es ist nicht genug zu wollen,  
man muss auch tun.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

„In einer Welt der Massenproduktion verbinde ich meinen Namen ausschließlich mit der Schaffung anspruchsvoller und höchster Qualität für Medizinprodukte. Das muss ich auch, wenn ich mir nur das Beste für unsere Kunden wünsche, die in verschiedensten Lebenssituationen auf die „Original BIO-PULS-19“ Medizinprodukte vertrauen. Für mich bedeutet das eine wunderbare Verpflichtung.



In über 26 Jahren habe ich viele, viele Einsatzmöglichkeiten und außergewöhnliche Wirkungsweisen mit meinen Magnetfeld-Therapieprodukten erfahren. Ich weiß also sehr genau, was die BIO-PULS-19 Medizinprodukte alles vermögen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden bildet Tag für Tag die Leitlinie unseres Handelns. Sprechen Sie mit uns, Ihren Medizinprodukteberatern, denn wir beraten Sie nicht nur

fachlich sondern persönlich und individuell.“

Ihr, Hans Herzog

Empfohlen von  
den Mitgliedern der  
**EURO-Radiästhesie.**



### Bio-Puls-19® Automatik

Medizinproduktklasse: II a  
(gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG)

### Bio-Puls-19® Medizinprodukt

zur Behandlung, Regulierung und  
Therapieanwendung.



© Copyright Hans Herzog Magnetfeld Geräte. Alle Rechte sowie Technische Änderungen vorbehalten.  
Für die Vollständigkeit und Aktualität übernehmen wir keine Gewähr. Stand 07/2015.

[www.biopuls.de](http://www.biopuls.de)

