
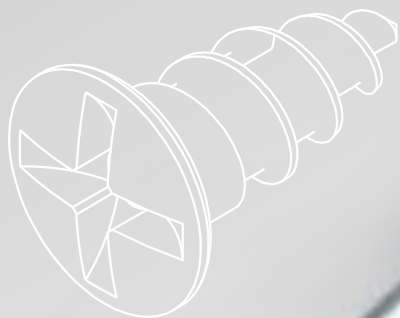


pro-fix™

PRECISION FIXATION SYSTEM

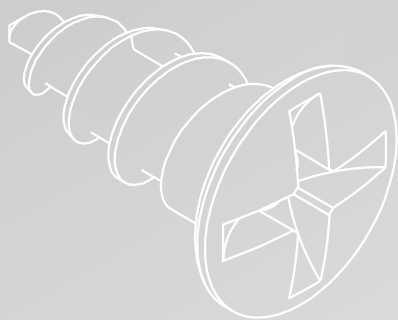

小さな**ネジ**が
大きな違いを生む。

Pro-Fix メンブレン フィクションキット

Pro-Fix メンブレン フィクションキットは、メンブレン固定用スクリューを安全かつ正確に操作するための専用キットです。セルフドリリングタイプのスクリューはパイロットホールの形成を必要とせず、歯槽骨への確実な固定が可能です。ドライバーとの優れた嵌合設計により、安定した操作性を実現。症例に応じて2種類のブレードを使い分けることで、幅広い臨床に対応します。すべてのコンポーネントは整理しやすい設計で、一括滅菌にも対応。スムーズで効率的な手術をサポートします。

Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 76mm

Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 56mm

Pro-Fixのドライバーブレードは、フリクションフィット(摩擦固定)構造を採用しており、スクリューに対して高い保持力を発揮します。ドライバーブレードとスクリューはミスマイメントを起こすことなく安定し、一貫したトルク伝達を実現します。一方で、固定状態の解除は非常に容易です。ドライバーハンドルを45度傾けるだけで、ブレードとの嵌合をスムーズに解除することができます。

スクリューオーガナイザーダイヤル

最大で100本のPro-Fix メンブレンフィクションスクリューを収納可能です。

Pro-Fix メンブレン フィクション スクリュー (20本)

セルフドリリングタイプのスクリューはパイロットホールの形成を必要とせず、歯槽骨への確実な固定が可能です。



写真提供: 菊池 康司先生(浦安ブランドENTALクリニック 理事長)

Pro-Fix ステンレススチール ドライバーハンドル

ドライバーハンドルと十字形ドライバーブレードの組み合わせにより、スクリューを確実に保持し、優れた嵌合設計によって高い操作性と安定性を実現します。

Pro-Fix Tecaproストレージトレイ

すべてのコンポーネントは整理しやすい構造で設計されており、オートクレーブによる一括滅菌にも対応しています。

販売名: Pro-Fix メンブレン フィクションキット

商品コード: PFMK20

キット内容: ・Pro-Fix メンブレン フィクション スクリュー 20本
・Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 56mm
・Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 76mm
・Pro-Fix ステンレススチール ドライバーハンドル
・Pro-Fix Tecapro ストレージトレイ&スクリューオーガナイザーダイヤル

一般的名称: 体内固定用ネジ 高度管理医療機器 承認番号: 30700BZX00046000

Pro-Fix メンブレン フィクションキット (単品販売)

販売内容・種類	商品コード	包装
Pro-Fix メンブレン フィクション スクリュー 5本入	PFMF-5	1パック (5本入り)
Pro-Fix メンブレン フィクション スクリュー 5本入	PFMF-10	2パック (10本入り)
Pro-Fix メンブレン フィクション スクリュー 5本入	PFMF-20	4パック (20本入り)
Pro-Fix ステンレススチール ドライバーハンドル	PFDH	1個
Pro-Fix Tecapro ストレージトレイ&スクリューオーガナイザーダイヤル	PFT	1個
Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 56mm	PFDB56	1個
Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 76mm	PFDB	1個

販売名: Pro-Fix クルサフォーム ドライバーブレード 一般的名称: 手術用ネジ回し 一般医療機器 医療機器届出番号: 14B1X900030B0001

Pro-Fix コントラアングルブレード (オプション (別途))



Pro-Fix コントラアングルブレードは、下顎および上顎の後方部や舌側部など、アクセスが困難な部位での使用に最適です。

本製品は、コントラアングルハンドピース用のコントラドライバーで、スクリューを確実に保持し、安定した操作を実現します。推奨回転数は50~100rpmです。

販売名: Pro-Fix コントラアングルブレード

商品コード: PFDBCA

一般的名称: 手術用ネジ回し

一般医療機器 医療機器届出番号: 14B1X900030B0002

詳しくは、ホームページ・動画で公開中

Pro-Fix メンブレン フィクションキット



Toshin Dental Supply

販売元: トーシンデンタル株式会社 〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2-5-12
TEL: 044-201-6171 <https://www.toshin-dental.com/>

