

SOPHIAReport 操作説明書

Users Manual

Version 5.1.0.69

株式会社アストロステージ
東京都千代田区神田司町 2-8-1
PMO 神田司町 5F
TEL : 03-5289-7740

目次

1. 概要	4
2. 起動方法	5
2.1 新規	5
・ STELLAROrder から文書作成	5
・ STELLAR／レポートの新規作成（文書管理）	9
2.2 レポート作成	10
・ STELLAROrder／起動ソフト	10
・ STELLAR／レポートの新規作成（画像）	11
・ NazcaView／レポートへ貼り付け	13
2.3 編集	14
・ STELLAR／レポートの起動（画像）	14
・ STELLAR／レポートの起動（文書管理）	17
2.4 プレビュー画面	18
3. レポート入力画面	21
3.1 履歴	22
3.1.1 過去報告	22
3.1.2 改版履歴	34
3.1.3 関連文書	36
3.1.4 登録症例	37
3.1.5 全文検索	42
3.2 検査結果	44
3.2.1 依頼情報	44
3.2.2 臨床検査	45
3.2.3 投薬	46
3.2.4 注射	47
3.2.5 傷病／入退院	48
3.2.6 共有情報	49
3.2.7 手術	50
3.3 テンプレート	51
3.3.1 テンプレ	51
3.3.2 セット	60
3.3.3 [検索]ボタン・[別画面起動]ボタン	67
3.4 付帯情報	70
3.4.1 開封確認	70
3.4.2 文章	77

3.4.3 キーワード	77
3.5 入力画面	78
3.5.1 全文検索	79
3.5.2 文字リンクの設定と解除	83
3.5.3 画像枠操作	85
3.6 カスタムボタン	93
4. レポート指示画面	106
4.1 [レポート]タブ画面	106
①検索条件（入力枠・部署枠）[検索]ボタン	107
②[全展開]・[全縮小]ボタン	109
③[入退院リスト]・[文書種リスト]ボタン	111
④[プレビュー]ボタン	117
⑤お気に入り	119
⑥[印刷]ボタン	120
⑦[レポート作成]ボタン	121
⑧[終了]ボタン	121
4.2 [ワークフロー]タブ画面	122
4.2.1 [新規]ボタン	123
4.2.2 [編集]ボタン	130
5. 全文検索	136
5.1 STELLAROrder から起動	136
5.2 全文検索画面	138
5.2.1 検索枠からの検索	139
5.2.2 レポート詳細枠	140
5.2.3 条件枠	144
5.2.4 検索結果	153
5.2.5 プリセット・症例	160
6. 過去比較	165

1. 概要

「SOPHIAReport」は、レポート、診断書、紹介状などのドキュメントを作成できるアプリケーションです。簡単な操作により、過去に記載した所見およびテンプレートの活用、診療画像の添付などの操作を行うことができます。

2. 起動方法

2.1 新規

・STELLAROrder から文書作成


STELLAROrder の任意リスト上で右クリックし「文書作成」を選択するとレポート指示画面が起動します。※画面は[患者一覧]タブで操作していますが[画像一覧]タブ等、他のタブからも操作できます。

STELLAR Order 画面の患者一覧タブ。右クリックメニューから「文書作成」を選択する操作が示されています。


作成するレポート種を選択し、[レポート作成]ボタンをクリックします。

レポート指示画面のスクリーンショット。レポートの種類を選択し、[レポート作成]ボタンをクリックする操作が示されています。


レポート入力画面に移動します。

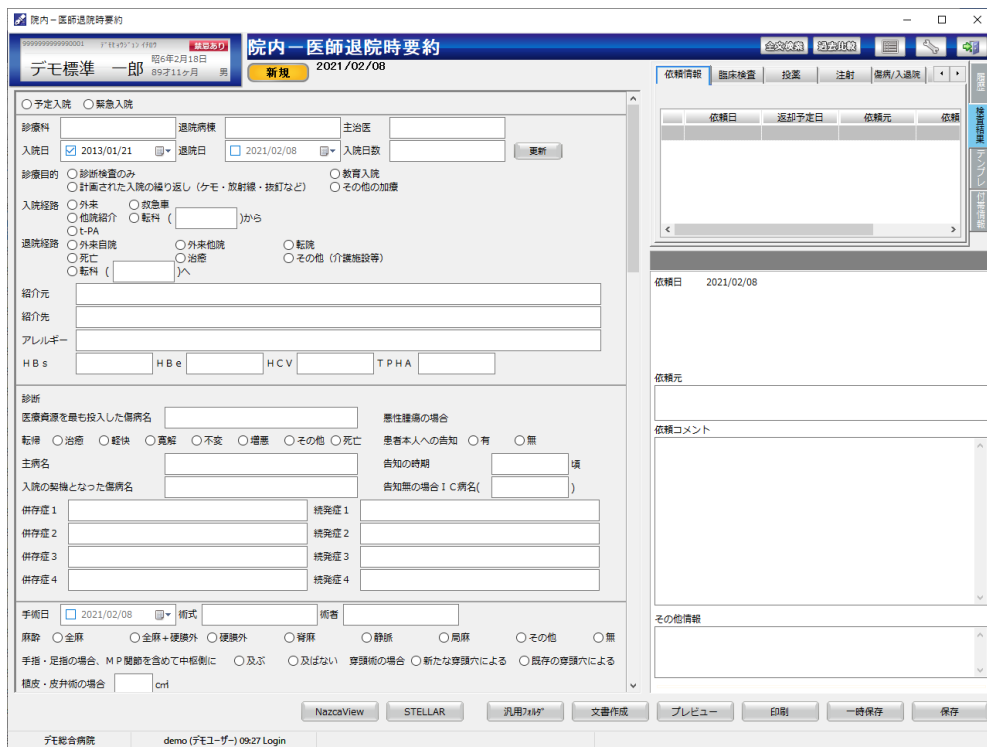

レポート記載後、[保存]ボタンをクリックします。

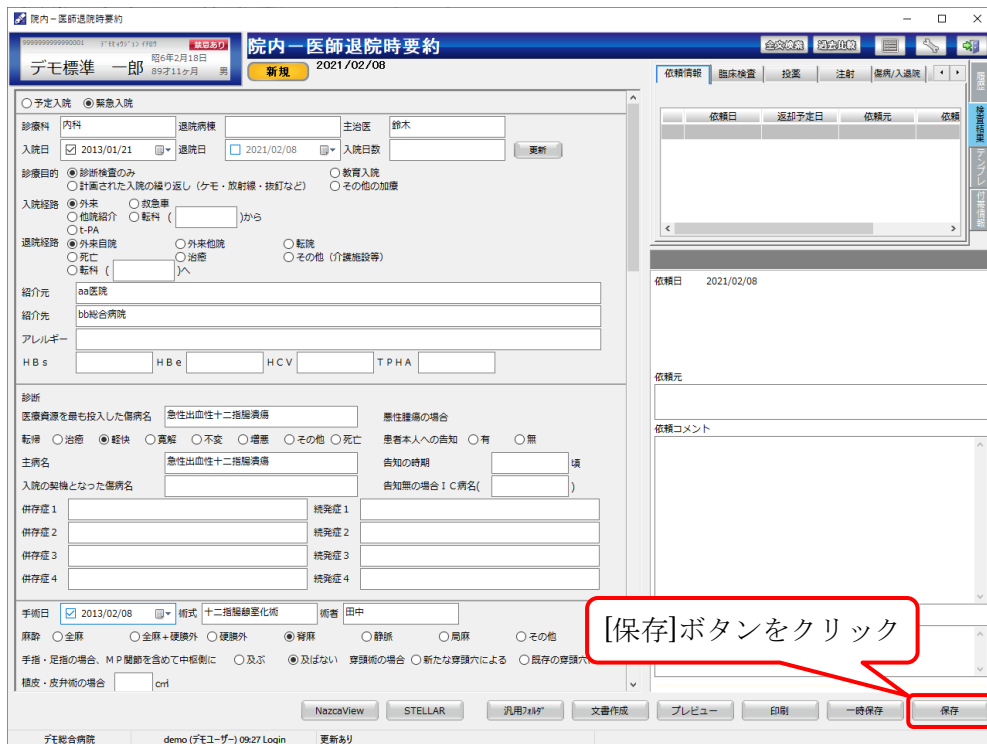


保存確認ダイアログでステータスを選択し保存します。

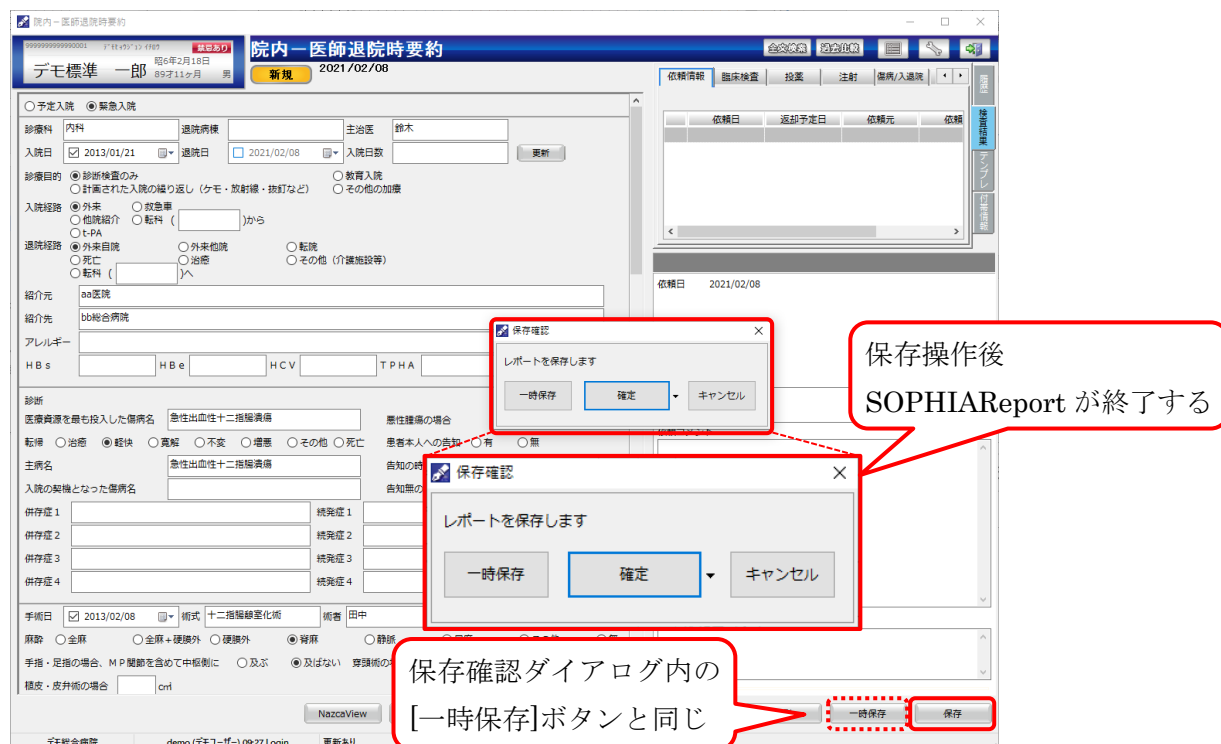


※保存確認ダイアログについて

ボタンの右側の「▼」からステータスを選択しレポートを保存できます。

(「▼」は設定により、表示されない場合もあります)

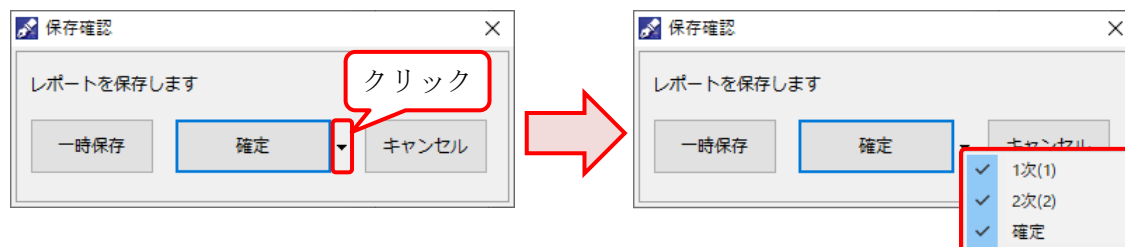


①最終確定

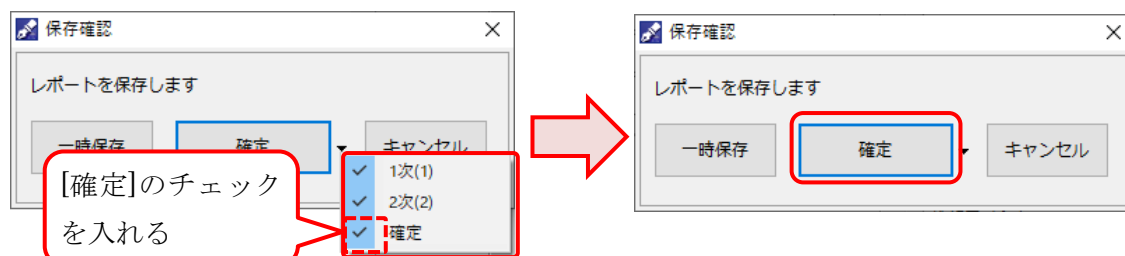

[確定]にチェックを入れると保存確認ダイアログの中央のボタンが[確定]と表示され、クリックすると最終確定で保存します。レポート内ではステータス「確定」と表示されます。




② 2次確定

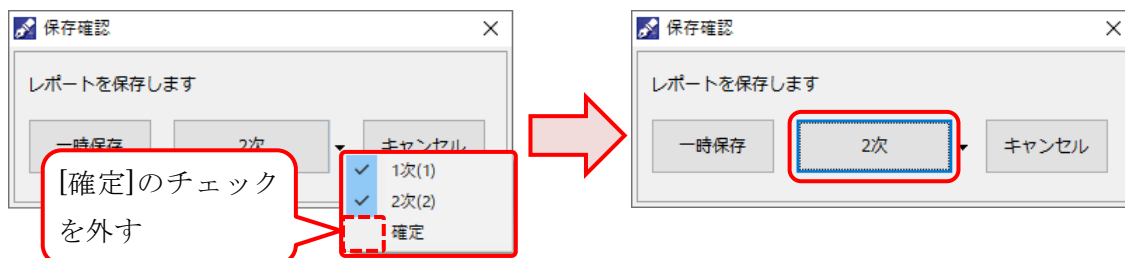

[確定]のチェックを外し、[2次]にチェックを入れると保存確認ダイアログのボタンは[2次]に変化し、2次確定で保存できます。レポート内ではステータス「2次」と表示されます。



③ 1次確定

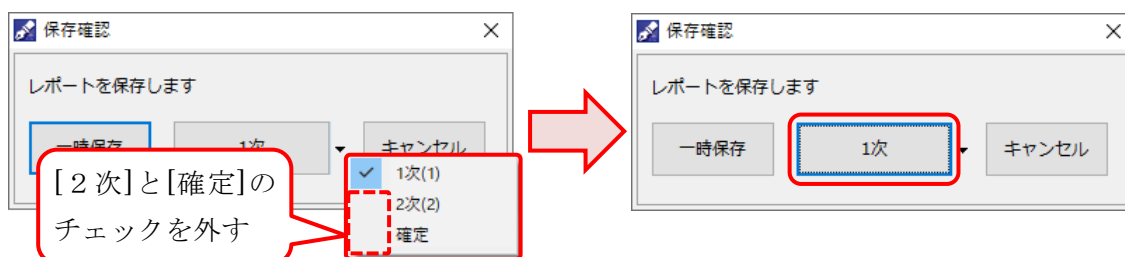


[2次][確定]のチェックを外し、[1次]にチェックを入れると保存確認ダイアログのボタンは[1次]に変化し、1次確定で保存できます。レポート内ではステータス「1次」と表示されます。



④ 一時保存

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成中のレポートを一時的に保存します。

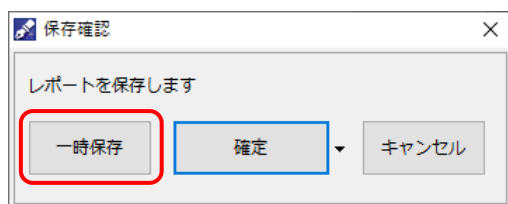

レポート内ではステータス「一時保存」と表示されます。




⑤ キャンセル

[キャンセル]ボタンはダイアログを閉じ、元の画面に戻ります。


・STELLAR／レポートの新規作成（文書管理）

文書管理枠で右クリックし、「レポートの新規作成」を選択します。

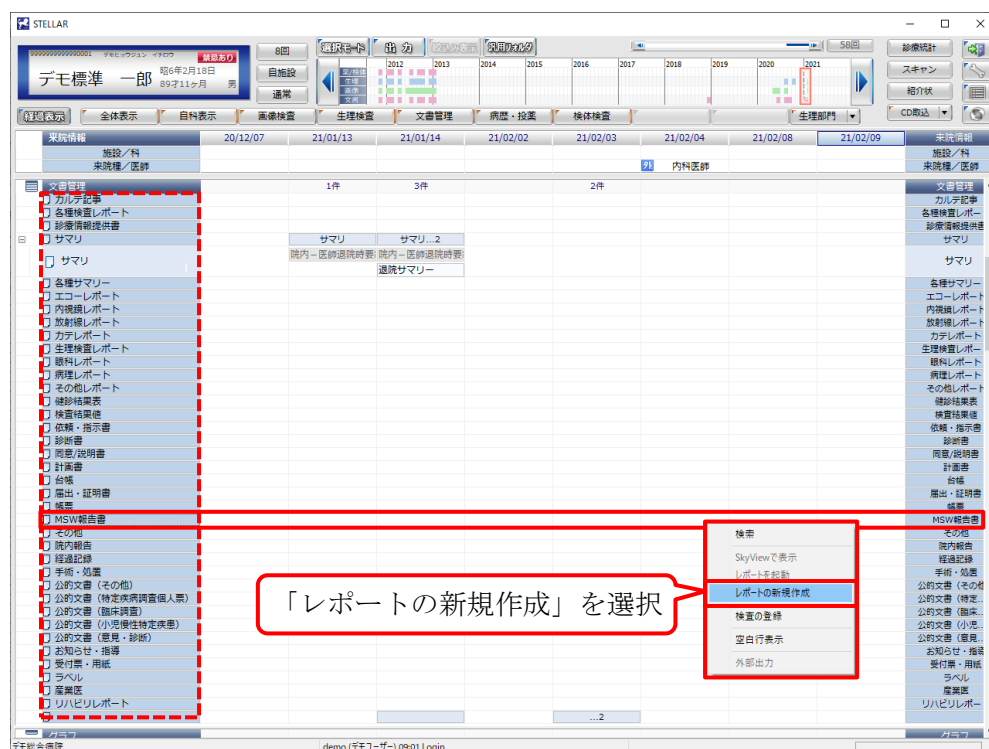

「MSW 報告書」行で右クリックし「レポートの新規作成」を選択すると、下図のレポート指示画面「MSW 報告書」に関連したレポートが表示されます。

（赤点線枠内はリンクしています）

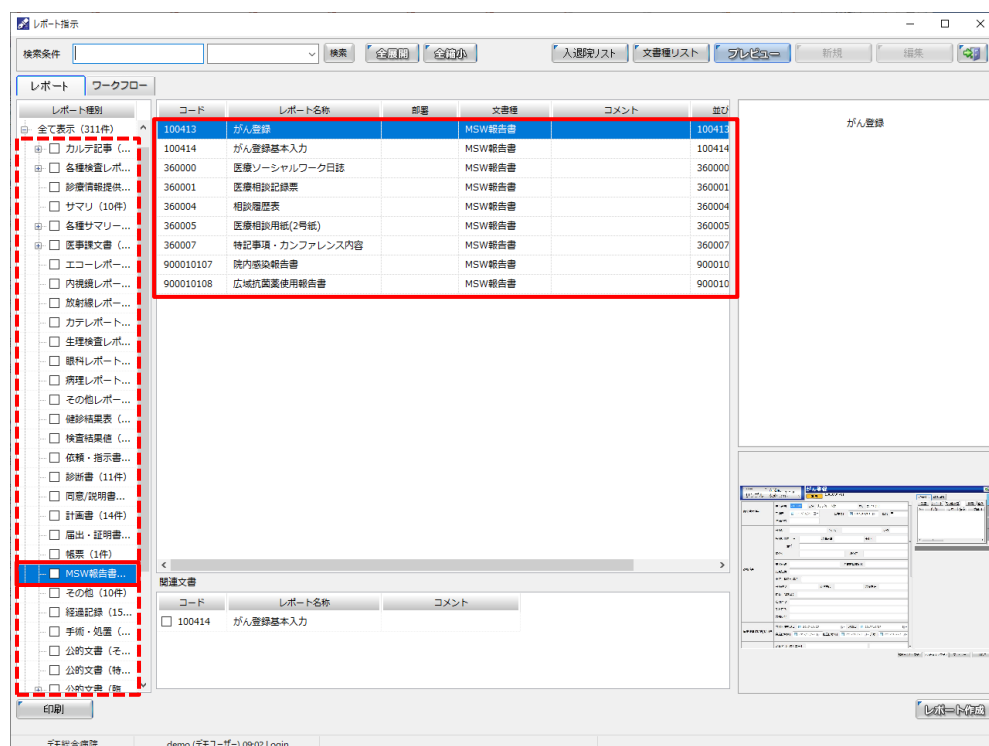

2.2 レポート作成

・STELLAROrder／起動ソフト

検査にレポートを記載する場合、リスト内の検査上で右クリックし、「起動ソフト」▶「SOPHIAReport」を選択します。

※「起動ソフト」内に「SOPHIAReport」が存在しない場合は、担当にお問い合わせください。


患者検査を右クリックし、「起動ソフト」▶「SOPHIAReport」を選択

レポート入力画面が表示されます。


※モダリティ単位で起動するレポートの設定が可能です（レポート候補）。
未設定の場合はレポート指示画面が起動します。

・STELLAR／レポートの新規作成（画像）

STELLAR 上で検査画像を右クリックし、「レポートの新規作成」を選択します。

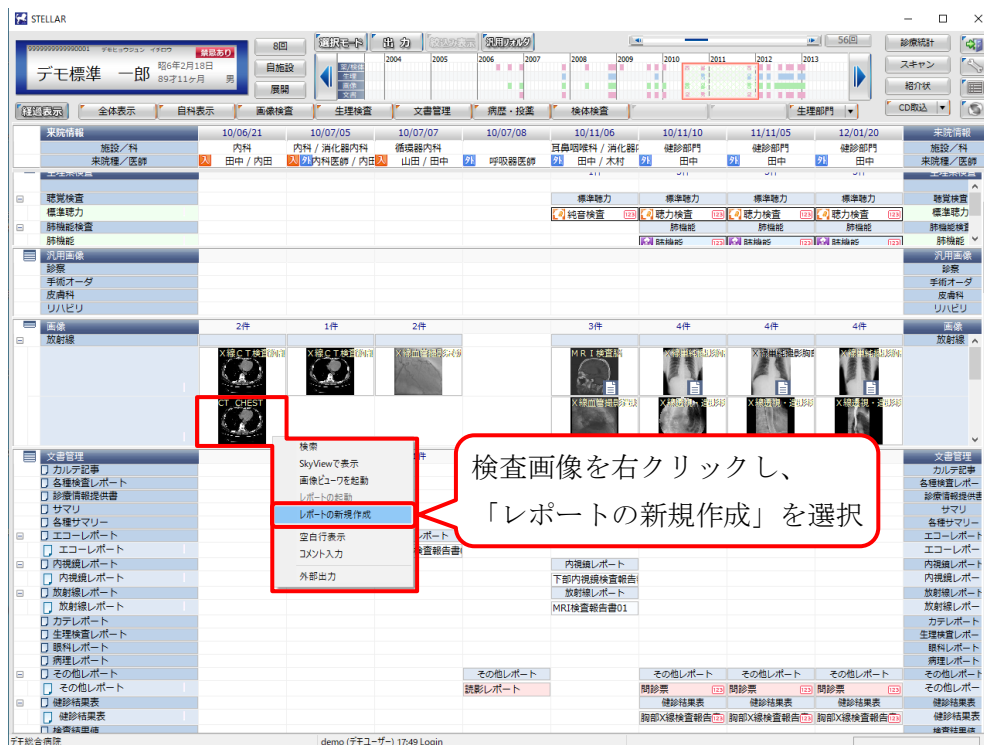

レポート入力画面を表示します。

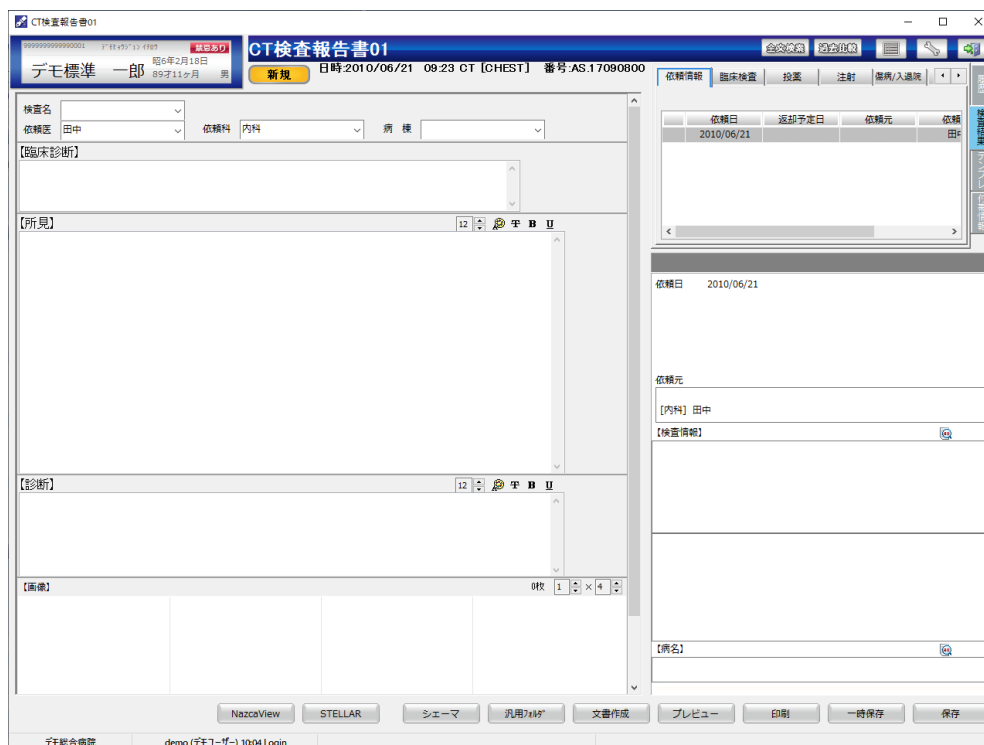

レポート入力を行い、保存をします。

CT検査報告書01

患者名: デモ標準 一郎 性別: 男 生年月日: 昭和6年2月18日 年齢: 89才11ヶ月

検査種別: CT [CHEST] 日時: 2010/06/21 09:23 番号: AS.17080801

【臨床診断】
胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。

【所見】
前回 平成29年11月02日 CTから転記
右側やや低位に両側少量胸水あり。肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。肝・胆・脾・腎: 肺: 頭部にLDAありcystic lesionを疑う。実質はatrophic。両腎にcystあり。右腎に小結石あり。左腎は一部充実性SOLがあるように見える。colonは全体に著明に異常は確認できません。液が多量。

【診断】
(不全骨折についてはOXRで同定できない可能性もあります。必要に応じ精査御検討下さい。)
胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。

【画像】
枚数: 12

保存

作成したレポートが STELLAR 上で反映していることを確認します。

STELLAR

患者名: デモ標準 一郎 性別: 男 生年月日: 昭和6年2月18日 年齢: 89才11ヶ月

検査種別: CT [CHEST] 日時: 2010/06/21 09:23 番号: AS.17080801

作成したレポートが検査と紐づいている場合、アイコンが表示される


レポートが作成・追加されるとレポート名が反映される

・NazcaView／レポートへ貼り付け

NazcaView 上で画像を右クリックし、「レポートへ貼り付け」を選択すると、既定のレポートへ貼り付けることができます。




新規レポート入力画面の画像領域へ貼り付けます

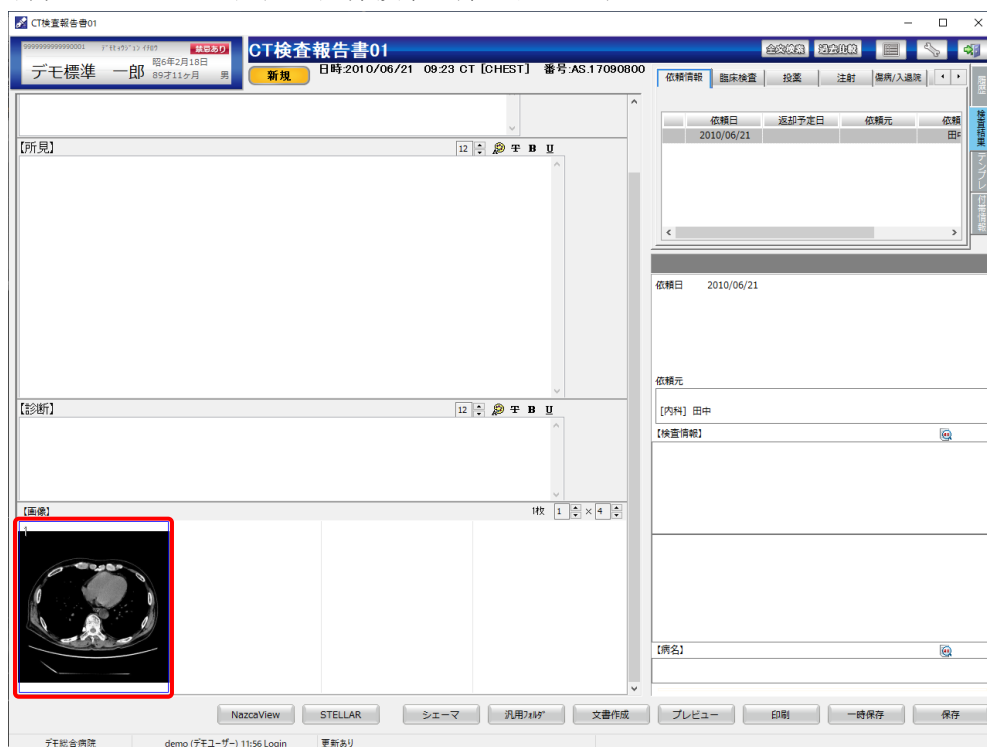

2.3 編集

・STELLAR／レポートの起動（画像）

STELLAR 上でアイコン付き画像を右クリックし、「レポートの起動」を選択します。

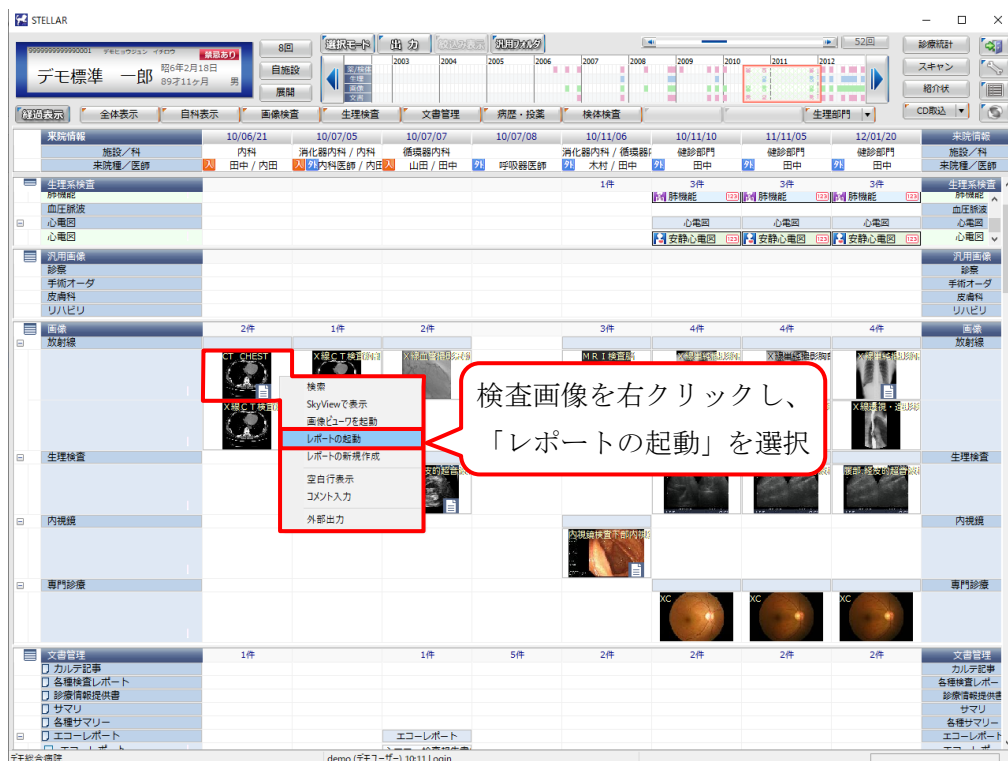

同じ検査でレポートが複数存在する場合、以下のダイアログが表示されます。



[選択したレポートを開く]ボタン：選択したレポートを開きます。

[キャンセル]ボタン：このダイアログを閉じます。

他のユーザが現在作成中のレポートを使用している場合、以下のダイアログが表示されます。



このレポートは現在作成中です。


	使用者	開始日	開始時刻	PC名	IPアドレス	端末
1	demo (デモユ...	21/07/08	17:48		192.168.1.111	12

[閉じる]ボタン：このダイアログを閉じます。

[読み取り専用で開く]：レポートを参照することができます。編集はできません。

[強制的に開く]：レポートを強制的に開き、編集ができます。（非推奨）

入力されたレポートが表示されます。確定で保存されている場合は下図の[訂正]ボタンをクリックします。一時保存・1次・2次で保存されているレポートは[訂正]ボタンは表示されません。

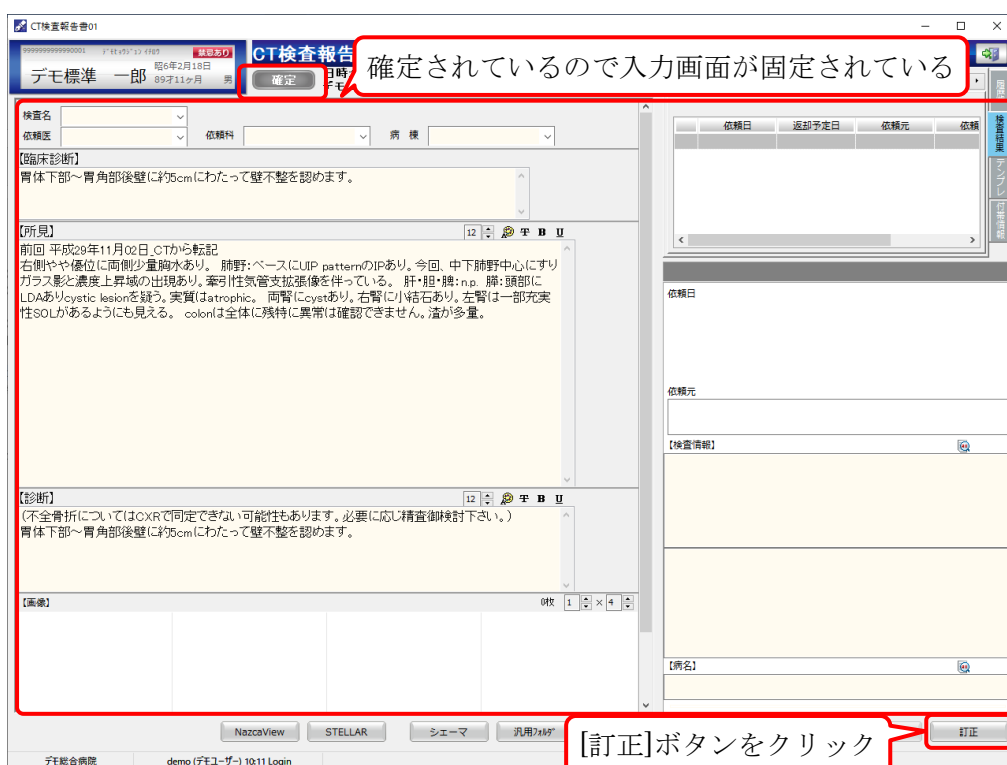

CT検査報告書01

CT検査報告書

確定されているので入力画面が固定されている

検査名

依頼先

依頼料

病棟

【臨床診断】

胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。

【所見】

前回 平成29年11月02日 CTから転記

右側やや低位に同側少量胸水あり。肺野：ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。肝・胆・膵・脾：頭部にLDAありcystic lesionを認う。実質はatrophic。両腎にcystあり。右腎に小結石あり。左腎は一部充実性SOLがあるようにも見える。colonは全体に残存に異常は確認できません。渣が多量。

【診断】

(不全骨折についてはCTで同定できない可能性もあります。必要に応じ精査御検討下さい。)


胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。

【画像】

訂正


[訂正]ボタンをクリック

[訂正]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示され、保存状態を確定から一時保存の状態に戻すことができます。変更理由は省略可能です。

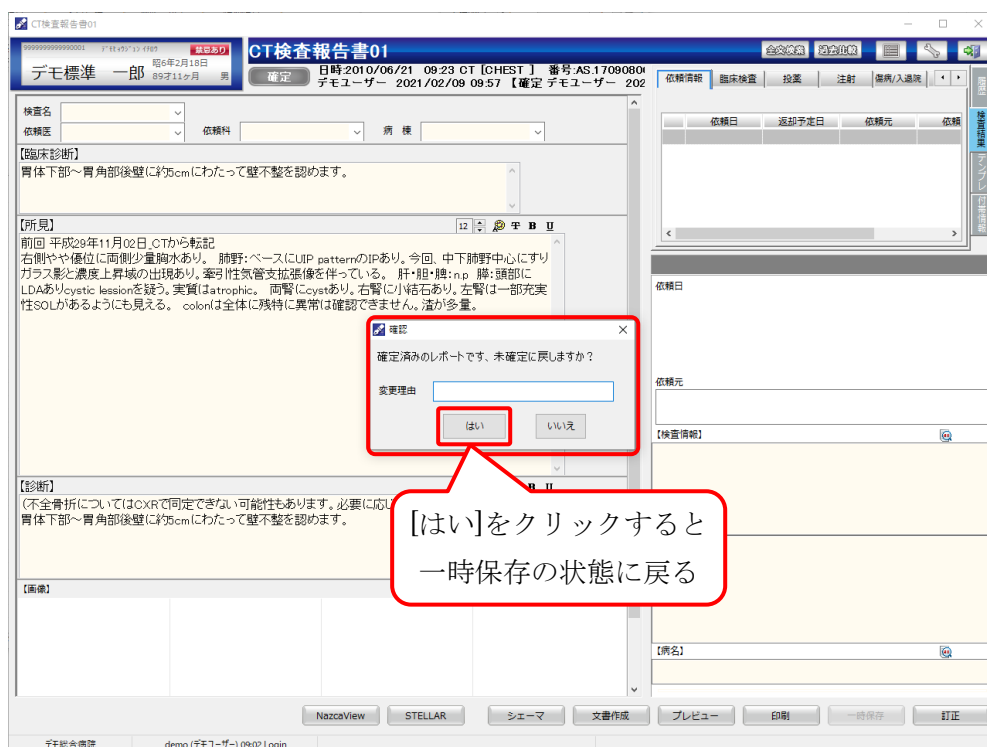

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' form. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking '確定済みのレポートです、未確定に戻しますか？' (This is a confirmed report, do you want to return it to draft?). The dialog has a text field for '変更理由' (Change reason) and two buttons: 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No). A red box highlights the 'はい' button, and a callout bubble points to it with the text '[はい]をクリックすると一時保存の状態に戻る' (Clicking [Yes] returns to draft status).


保存状態を一時保存に戻したため訂正ができます。

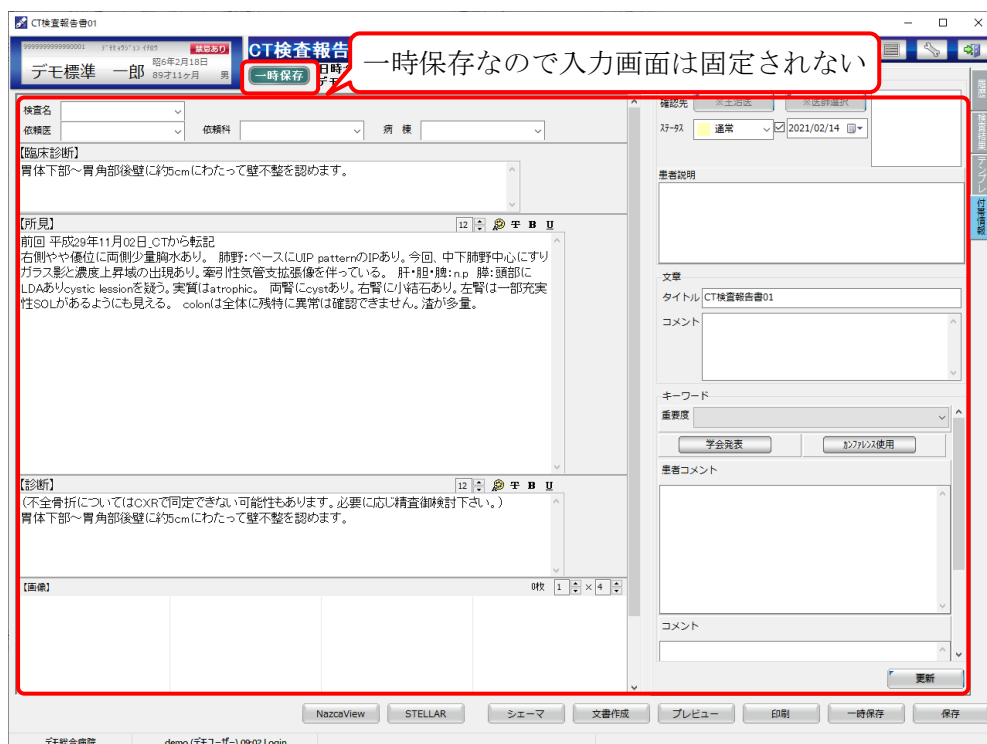


The screenshot shows the 'CT検査報告書01' form in draft status. A red box highlights the '一時保存' (Draft) button in the top right corner. A callout bubble points to it with the text '一時保存なので入力画面は固定されない' (Since it's draft, the input screen is not fixed). The form content is visible, including the '臨床診断' (Clinical diagnosis) and '所見' (Findings) sections.

・STELLAR／レポートの起動（文書管理）

STELLAR 上で既存レポートを右クリックし、「レポートを起動」を選択します。

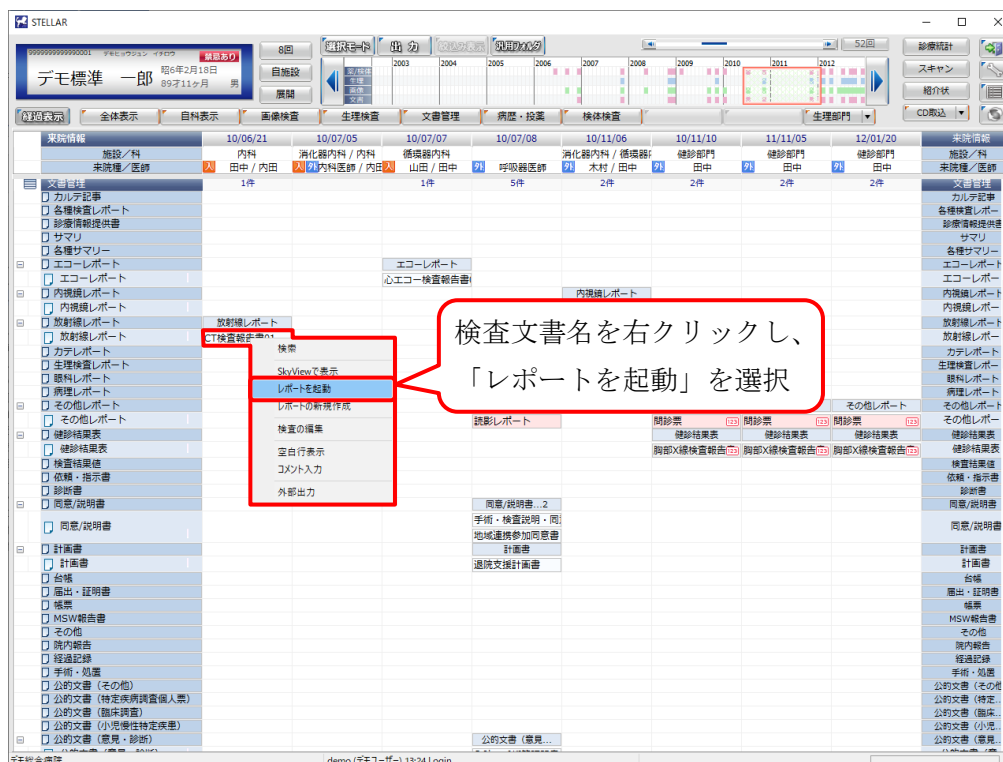

前述と同じように、確定で保存されている場合は[訂正]ボタンをクリックし、確認ダイアログ表示後に訂正を行います。

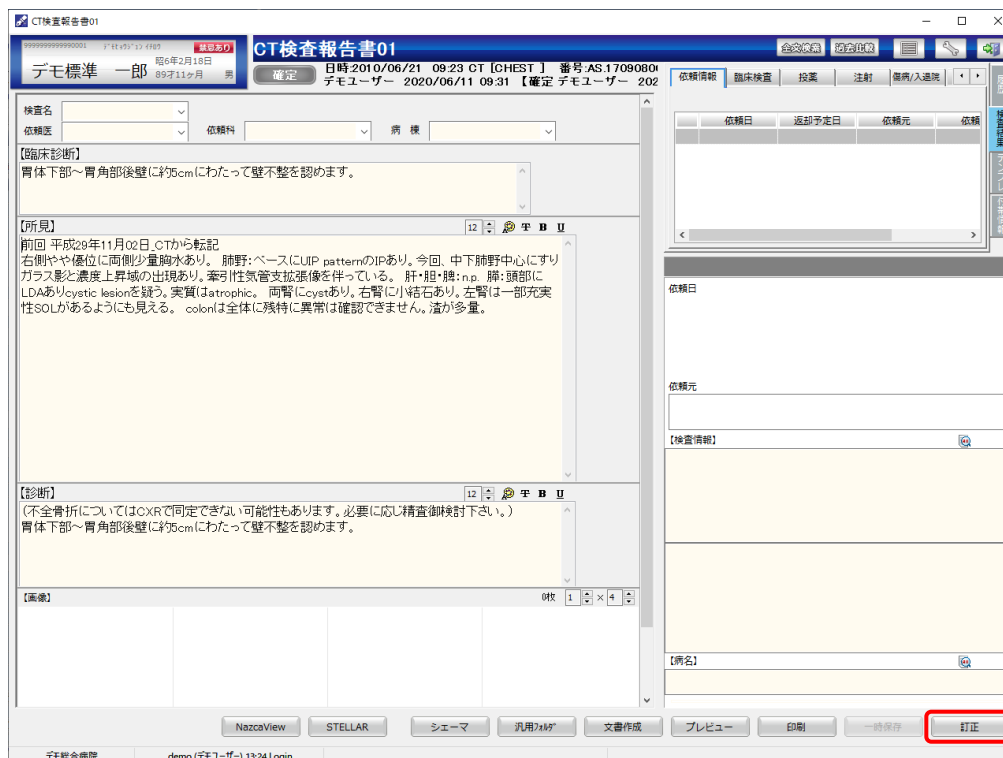

2.4 プレビュー画面

- ・STELLAR からプレビュー画面の起動


画像または汎用画像にあるアイコンをクリックすると、レポートのプレビュー画面を表示します。

※プレビュー画面の起動はレポートが確定で保存されている必要があります。

The screenshot shows the STELLAR application window. At the top, there's a header with 'STELLAR' and a user profile for 'デモ標準 一郎' (Demo Standard Ichirou). Below this is a calendar view for the year 2010. The main area is a grid of medical images, including CT scans and X-rays. A red box highlights one of the icons in the grid, with a callout bubble containing the text 'アイコンをクリック' (Click the icon). The bottom of the window shows a status bar with 'demo (デモユーザー) 10:11 Login'.

The screenshot shows the 'プレビュー画面' (Preview Screen) of the STELLAR application. On the left, there's a list of reports with columns for 'No.', 'レポート名称' (Report Name), '検査日' (Examination Date), '記載者' (Recorder), and 'A'-'F' counts. The report 'CT検査報告書01' is highlighted. On the right, the detailed view of the 'CT検査報告書' (CT Examination Report) is shown. It includes patient information (ID: 9999999999990001, Name: デモ標準 一郎 様, Age: 79, Sex: 男), examination date (2010/06/21), and a clinical summary. The summary mentions a CT scan performed on November 2, 2009, and describes findings related to the stomach and lungs. The bottom status bar shows 'demo (デモユーザー) 10:11 Login'.

プレビュー画面では以下の操作ができます。

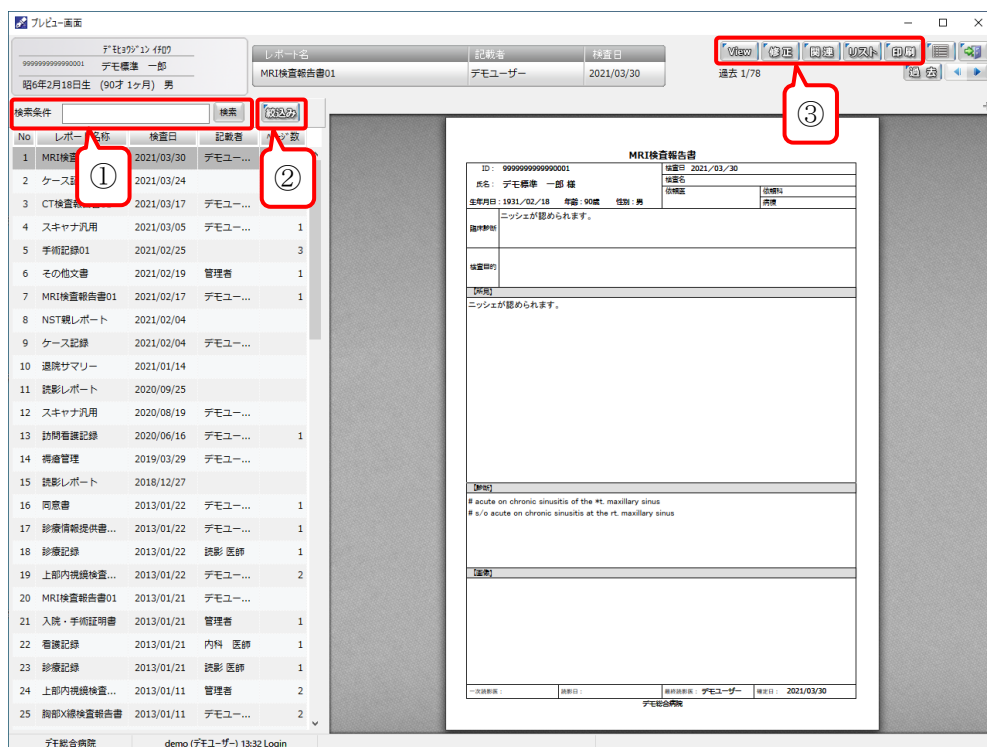

①検索条件：検索条件枠にレポート名称（一部でも可）を入力し[検索]ボタンをクリックすると、検索条件に合ったレポートを抽出します。

②[絞込み]ボタン：表示されているレポートと同じタイトルのレポートを抽出します。

③[View]ボタン：NazcaView を立ち上げ、画像を表示します。


[修正]ボタン：開いているレポートを SOPHIAReport で立ち上げ、修正を行います。

[関連]ボタン：開いているレポートに関連する文書を SOPHIAReport で作成します。

[リスト]ボタン：リストの表示／非表示を行います。

[印刷]ボタン：開いているレポートを印刷します。


[過去]ボタンについて

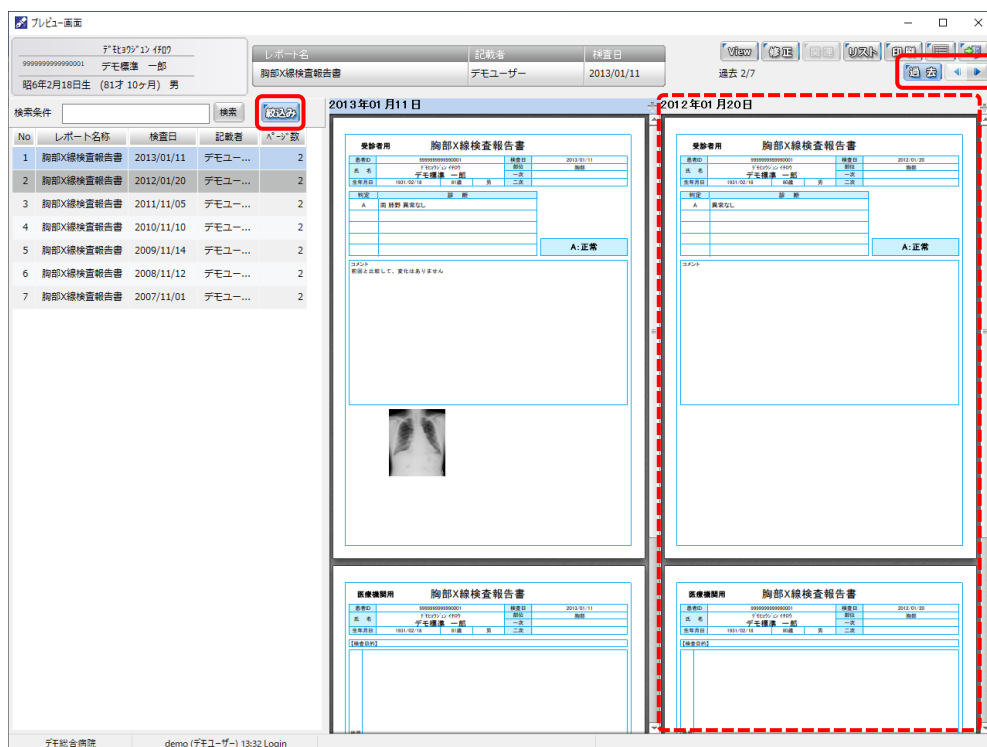

[過去]ボタン：開いているレポートから過去分のレポートを比較することができます。[過去]ボタンをクリックすると連動して[絞込み]ボタンが反応し、点線枠内のレポートを[◀]・[▶]ボタンで切り替えて表示します。

3. レポート入力画面

ここではレポート入力画面の操作方法を説明します。

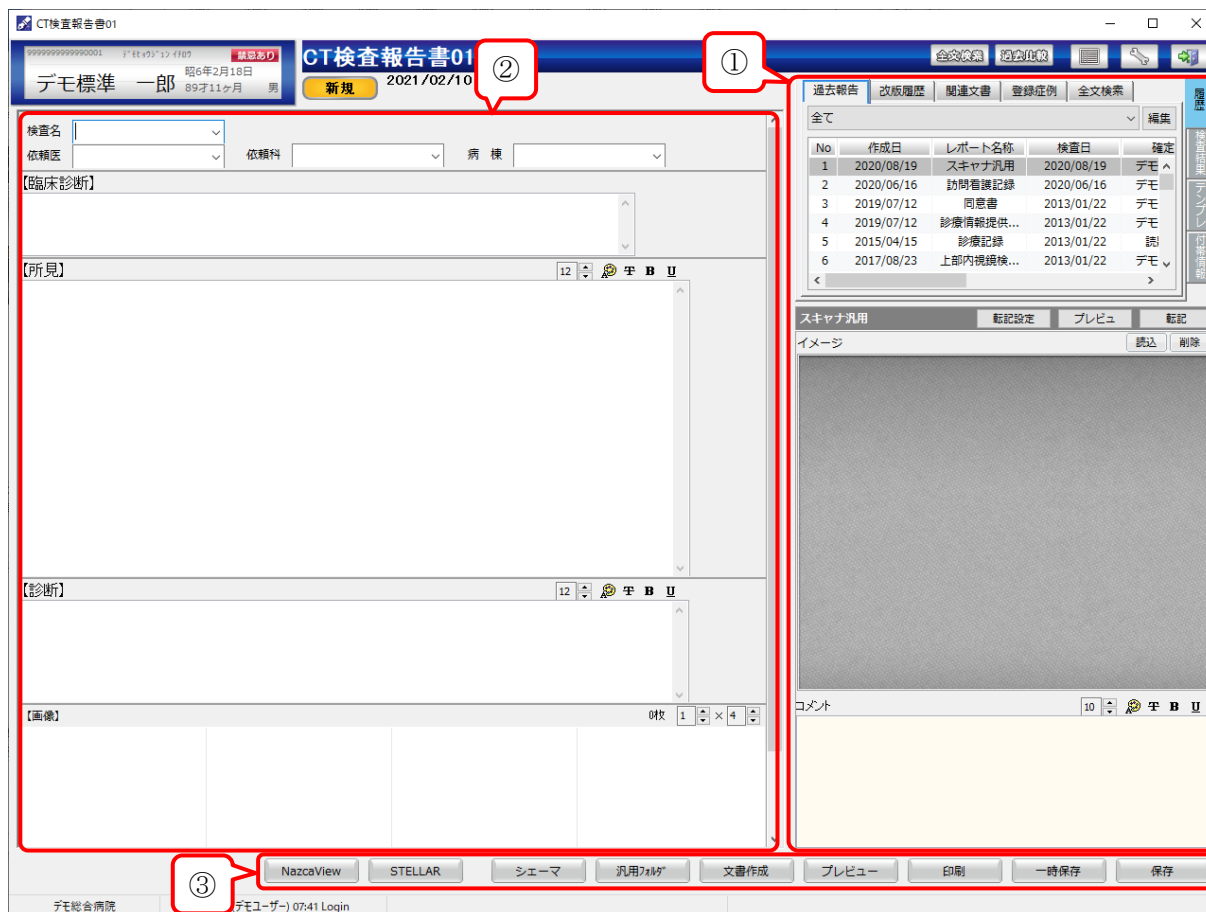

CT検査報告書01

CT検査報告書01

②

①

③

検査名

依頼医

依頼科

病棟

【臨床診断】

【所見】

【診断】

【画像】

過去報告 改変履歴 関連文書 登録症例 全文検索

No.	作成日	レポート名称	検査日	確定
1	2020/08/19	スキャナ汎用	2020/08/19	デモ
2	2020/06/16	訪問看護記録	2020/06/16	デモ
3	2019/07/12	同意書	2013/01/22	デモ
4	2019/07/12	診療情報提供...	2013/01/22	デモ
5	2015/04/15	診療記録	2013/01/22	デモ
6	2017/08/23	上部内視鏡検...	2013/01/22	デモ

スキャナ汎用

転記設定 プレビュー 転記

イメージ

コメント

NazcaView STELLAR シェーマ 汎用フォルダ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 デモユーザー 07:41 Login

①[履歴]タブ：

過去報告・改変履歴・関連文書・登録症例・全文検索を表示します。

[検査結果]タブ：

依頼情報・臨床検査・投薬・注射・傷病／入院歴・共有情報・手術を表示します。

[テンプレート]タブ：

テンプレート・テンプレートセットを表示します。

[付帯情報]タブ：

開封確認・患者説明等を表示します。

②入力画面：レポートを入力します。


③カスタムボタン：セットした内容でソフト等を実行します。

3.1 履歴

履歴タブは、過去報告・改版履歴・関連文書・登録症例・全文検索を表示します。


3.1.1 過去報告

過去に作成したレポートの履歴、プレビュー（サブ画面）を表示します。

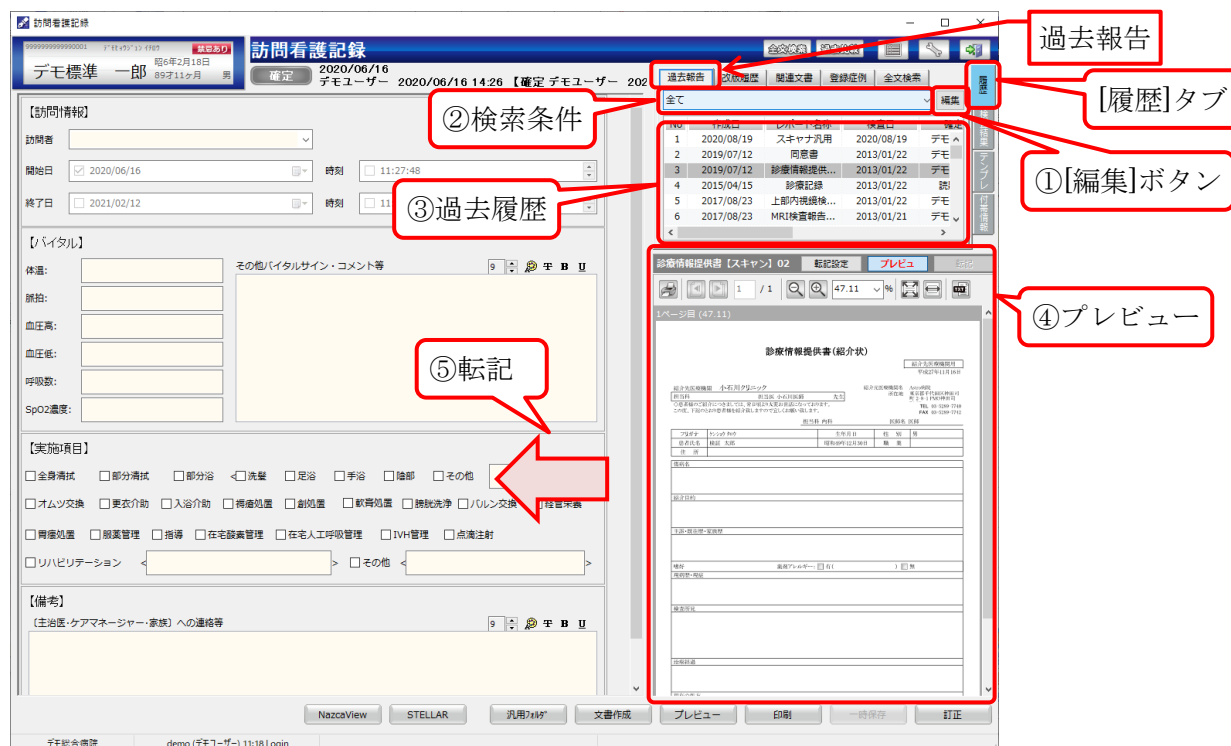

①[編集]ボタン

[編集]ボタンをクリックするとプリセット編集ダイアログが開き、検索条件を登録できます。

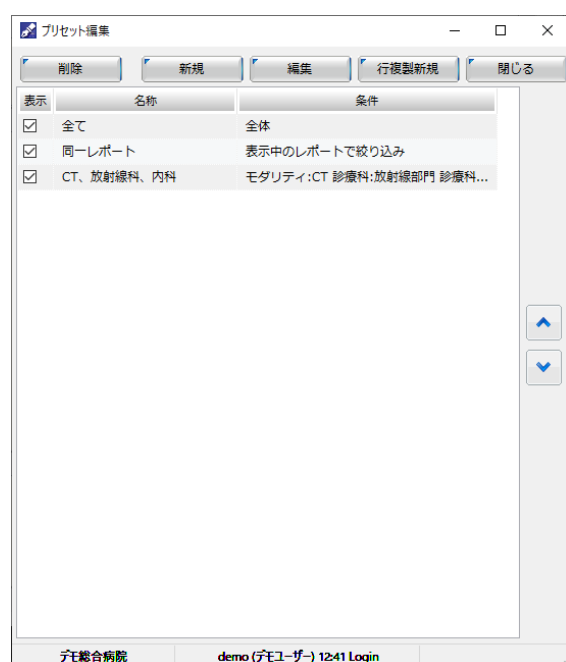

[削除]ボタン：

登録したプリセットを削除します。

[新規]ボタン：

プリセットを新規登録します。

[編集]ボタン：

登録済みのプリセットを編集します。

[行複製新規]ボタン：


登録済みのプリセットを複製し、新規登録します。

[閉じる]ボタン：


ダイアログを閉じます。

ここではプリセットを新規作成する方法を説明します。

[新規]ボタンをクリックし、起動したプリセット編集ダイアログから[条件追加]を選択します。

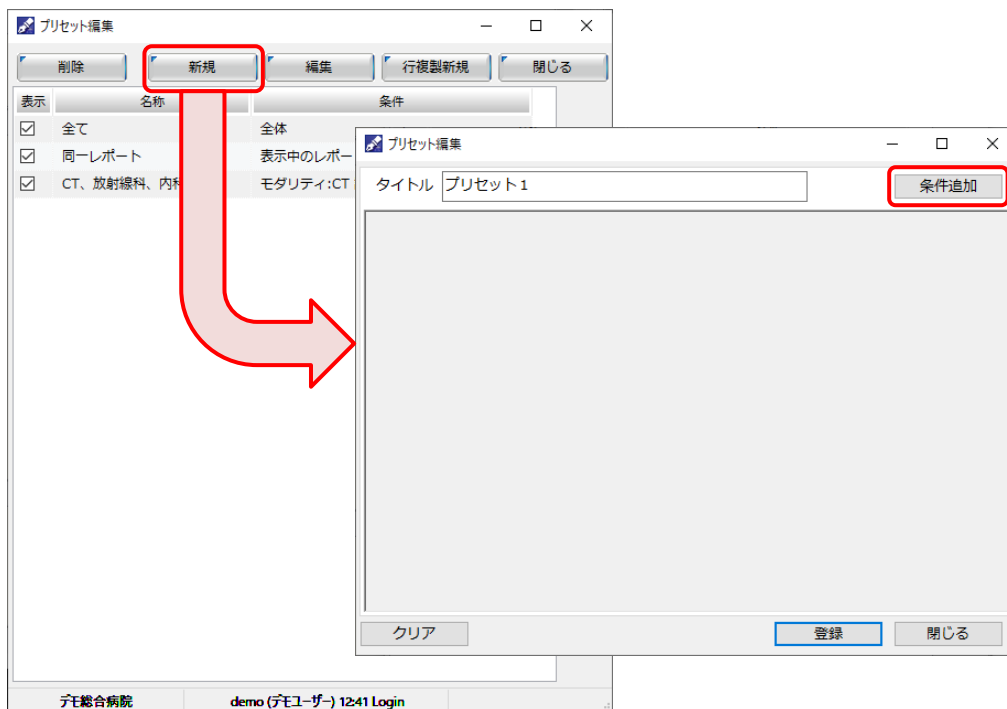


検索ダイアログが表示されます。

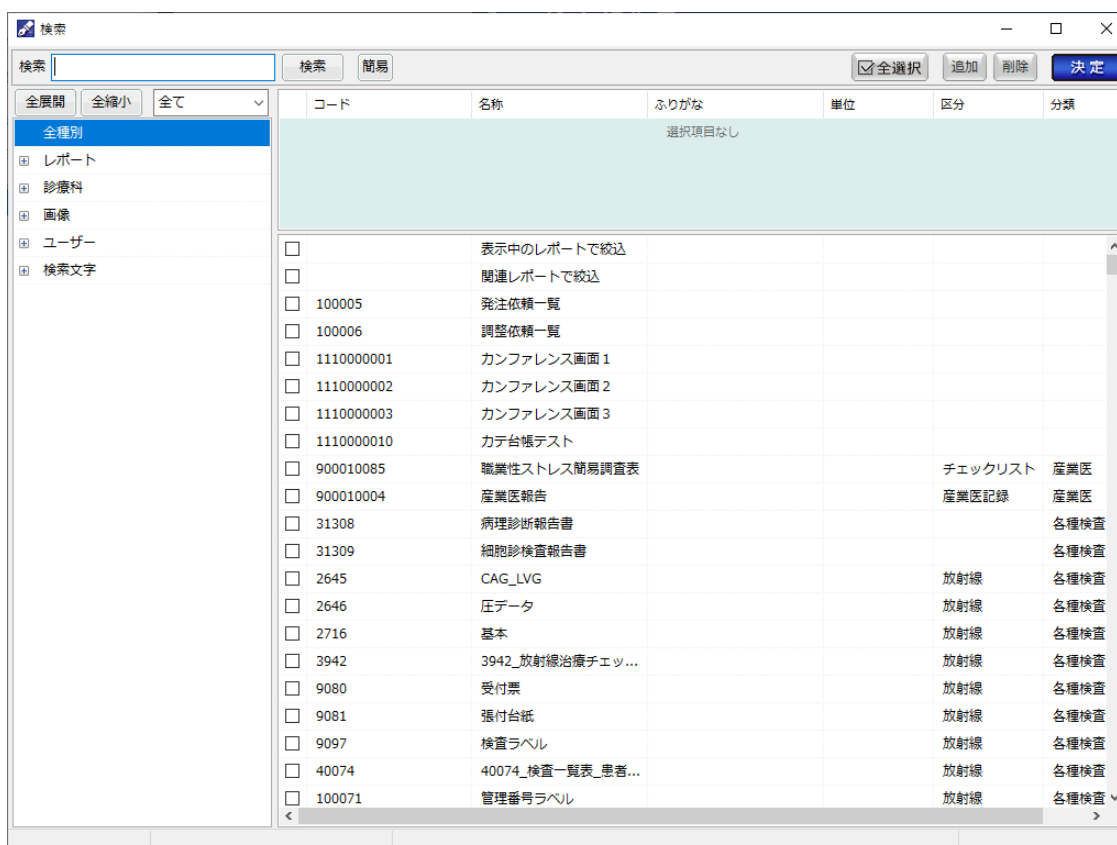

例として、検索枠に「胸部」と入力します。

検索文字が含まれる項目が下段リストに表示され、検索文字は赤くなります。

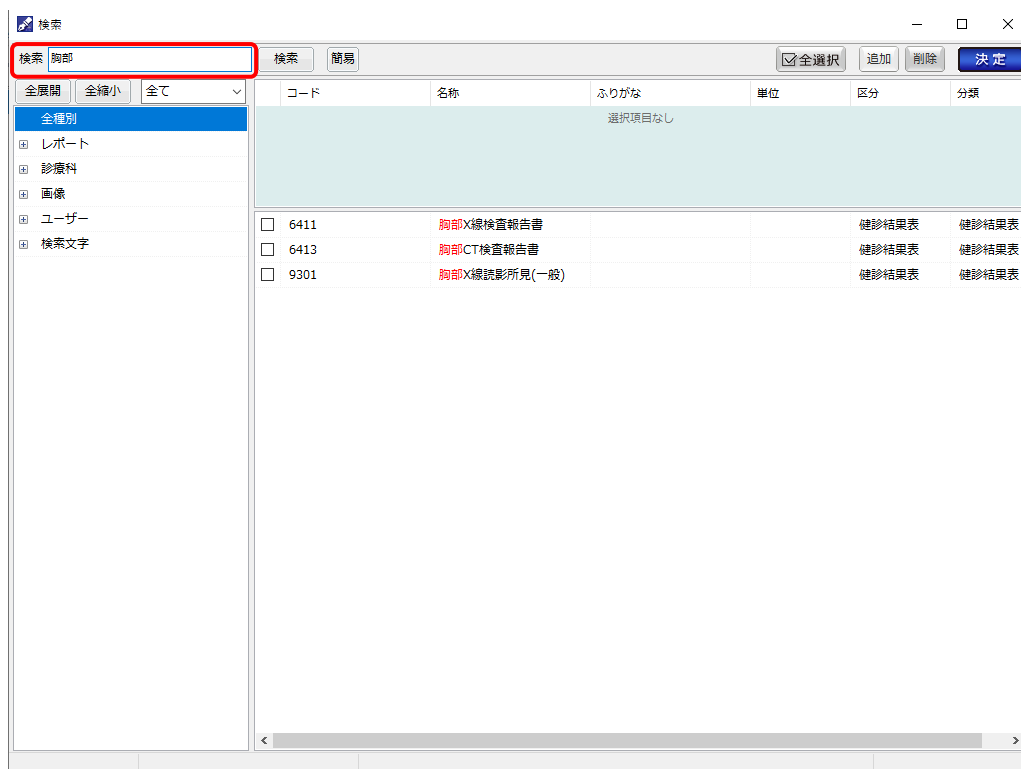

検索 胸部

全展開 全縮小 全て

全種別
レポート
診療科
画像
ユーザー
検索文字

コード 名称 ふりがな 単位 区分 分類


選択項目なし

☐	6411	胸部X線検査報告書			健診結果表	健診結果表
☐	6413	胸部CT検査報告書			健診結果表	健診結果表
☐	9301	胸部X線読影所見(一般)			健診結果表	健診結果表

全選択 追加 削除 決定

[全選択]ボタンをクリックするとチェックボックスが☑になります。

また[全選択]ボタンは[全解除]ボタンに変わります。

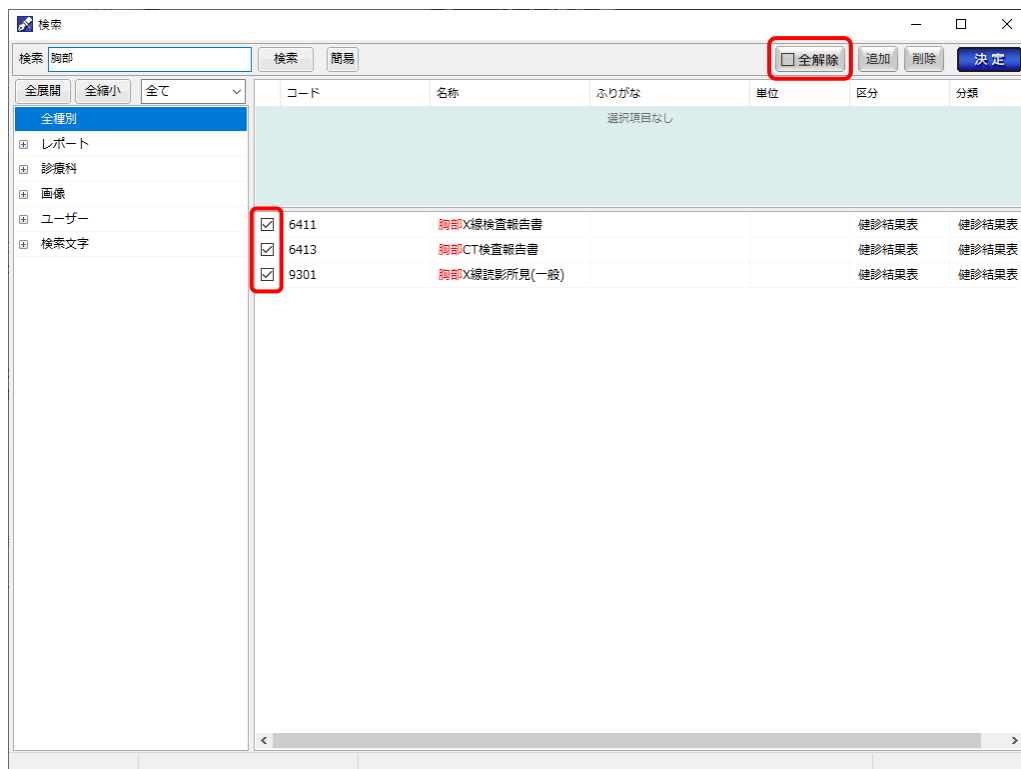

検索 胸部

全展開 全縮小 全て

全種別
レポート
診療科
画像
ユーザー
検索文字

コード 名称 ふりがな 単位 区分 分類


選択項目なし

☒	6411	胸部X線検査報告書			健診結果表	健診結果表
☒	6413	胸部CT検査報告書			健診結果表	健診結果表
☒	9301	胸部X線読影所見(一般)			健診結果表	健診結果表

全解除 追加 削除 決定


[追加]ボタンで選択項目枠に移動します。

[決定]ボタンをクリックすると、プリセット編集ダイアログに戻ります。

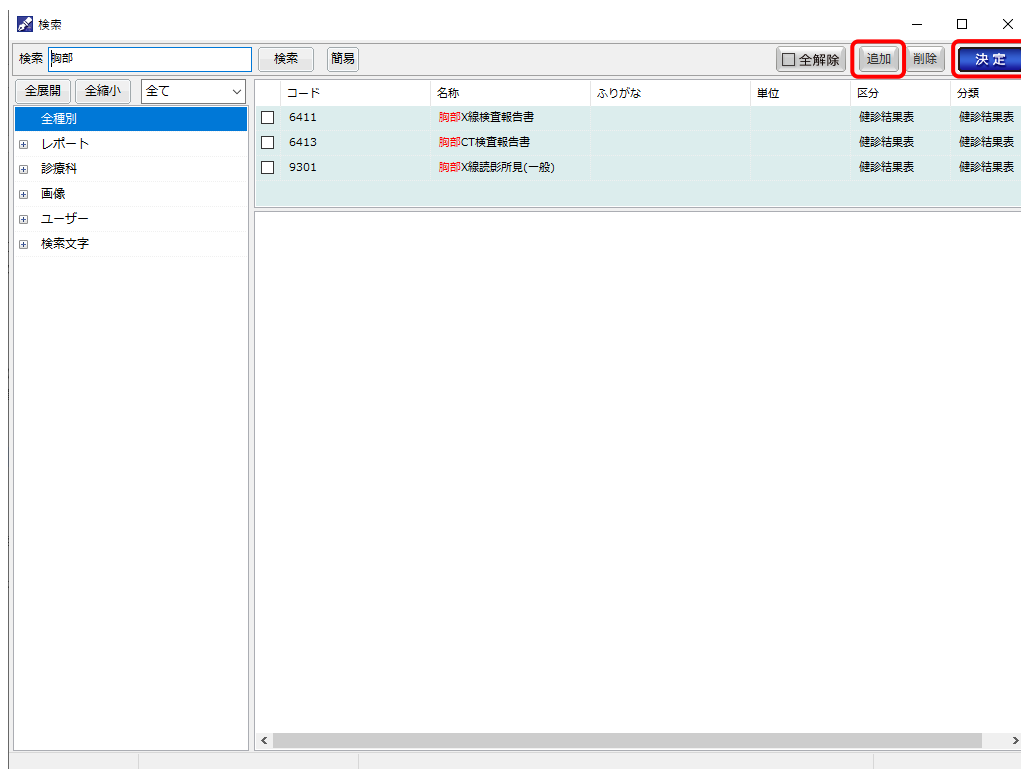

コード	名称	ふりがな	単位	区分	分類
☐ 6411	胸部X線検査報告書			健診結果表	健診結果表
☐ 6413	胸部CT検査報告書			健診結果表	健診結果表
☐ 9301	胸部X線読影所見(一般)			健診結果表	健診結果表

プリセット編集ダイアログに検索条件が追加されます。

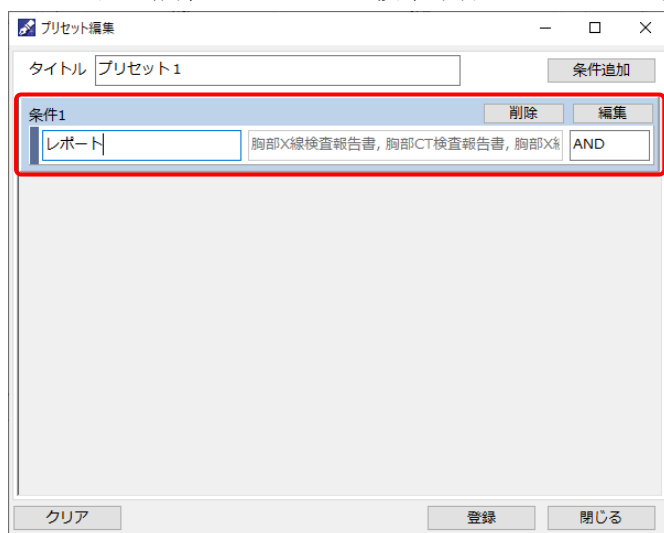

タイトル: プリセット1

条件追加

条件1: レポート

AND

クリア 登録 閉じる

- ・タイトル枠に登録名称を入力します
- ・検索条件を複数登録する場合は、[条件追加]ボタンをクリックします。
- ・条件の登録が終了したら[登録]ボタンをクリックすると、「登録します。よろしいですか？」のダイアログで[はい]を選択し、この画面を閉じます。

条件追加

登録した内容を編集する場合は[編集]ボタンをクリック。

登録した条件を削除する場合は[削除]ボタンをクリックすると、「削除します。よろしいですか？」のダイアログで[はい]を選択する。

💡 ワンポイント

- [クリア]ボタンをクリックすると、登録した条件が全て削除されます。
- [閉じる]ボタンをクリックすると、内容を保存せずにこの画面を閉じます。


条件が追加されていることを確認します。表示順位は[∧]・[∨]ボタンで変更可能です。

条件が追加される


表示順位を変更する

②検索条件


登録したプリセットで過去履歴から抽出を行うには、プルダウンから選択します。

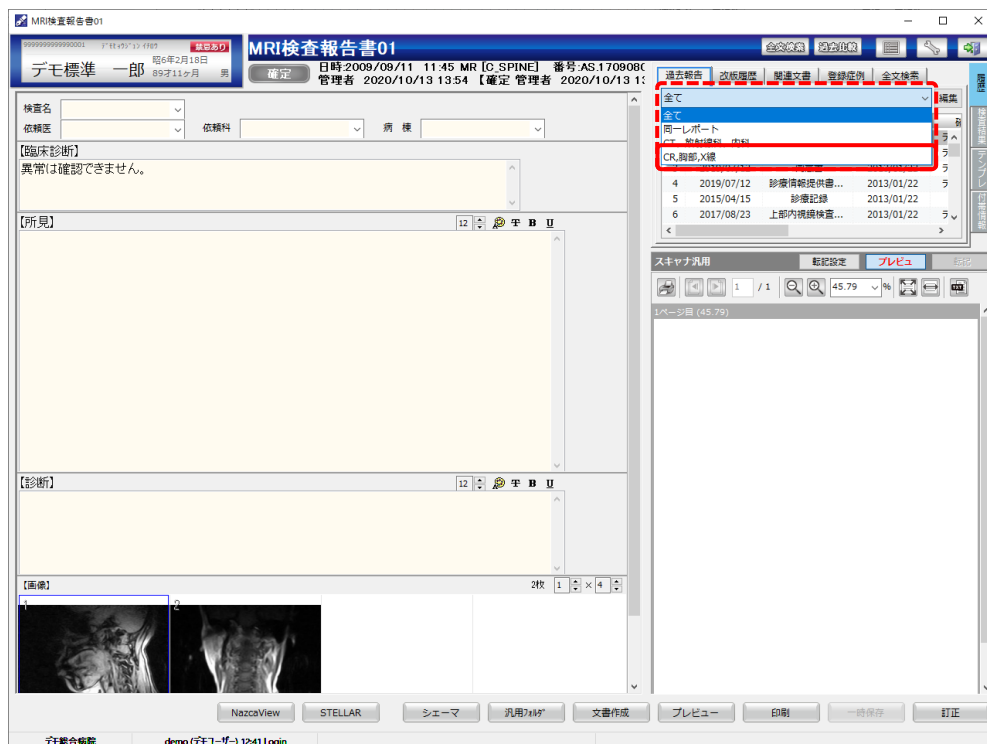


過去履歴から検索条件で抽出した結果が表示されます。

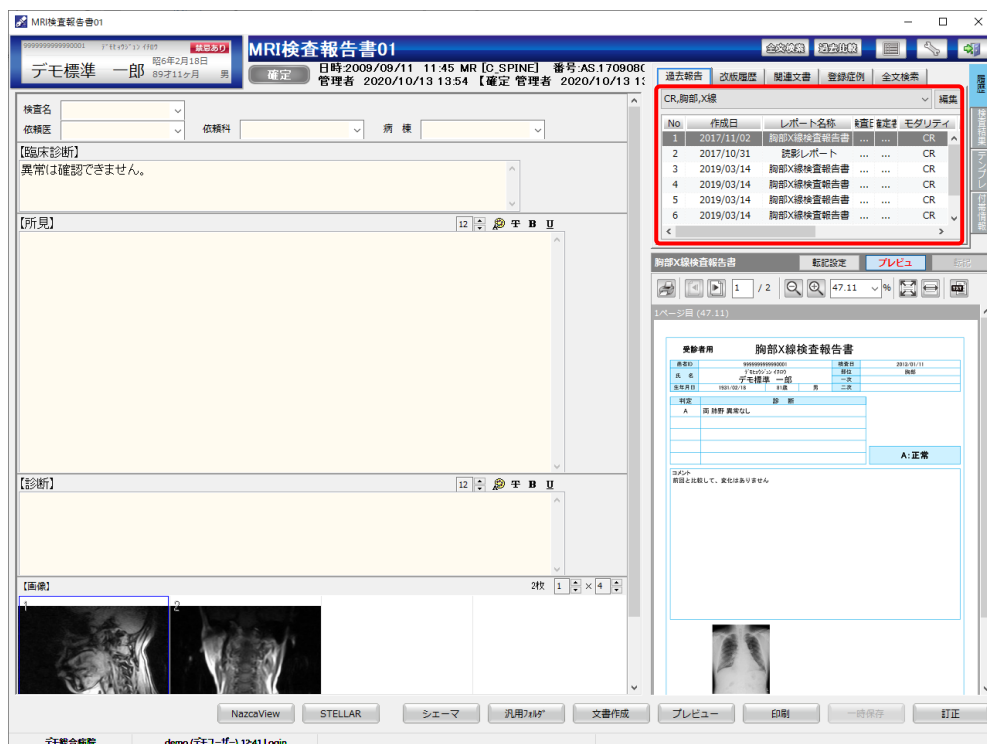

登録したプリセットの編集を行うには、編集するプリセットを選択し、[編集]ボタンをクリックします。

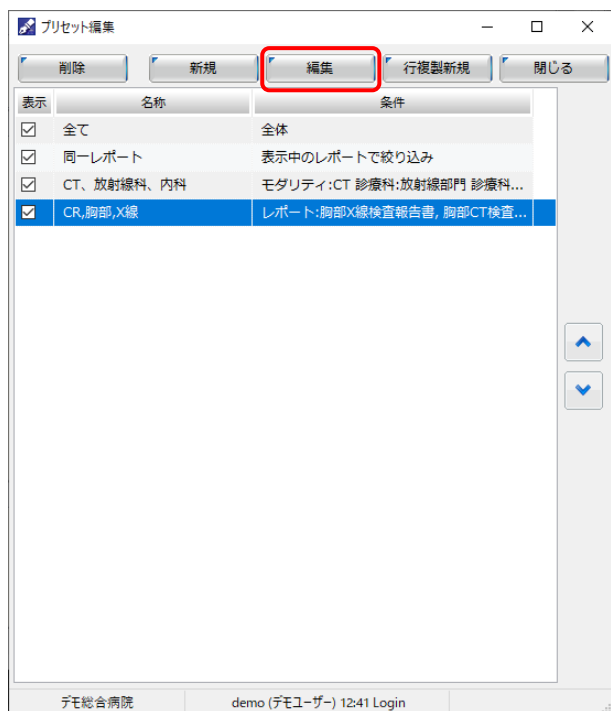


プリセットの内容が表示されるので、[編集]ボタンをクリックします。

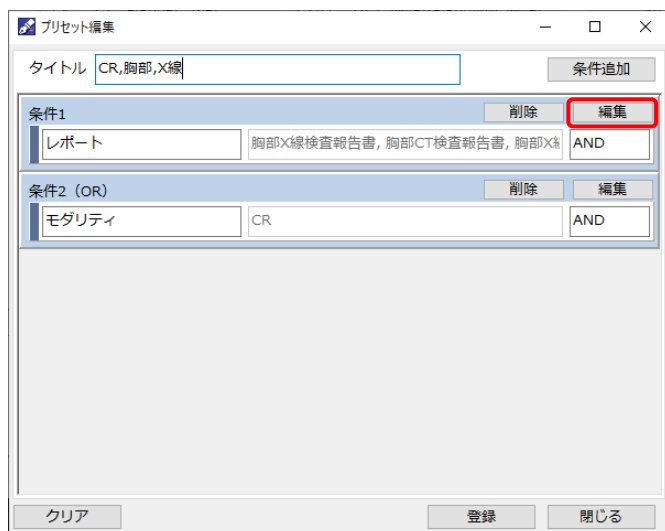


以降、前述と同じ検索画面での作業になります。


登録したプリセットを複製する場合は、複製するプリセットを選択し、[行複製新規]ボタンをクリックします。

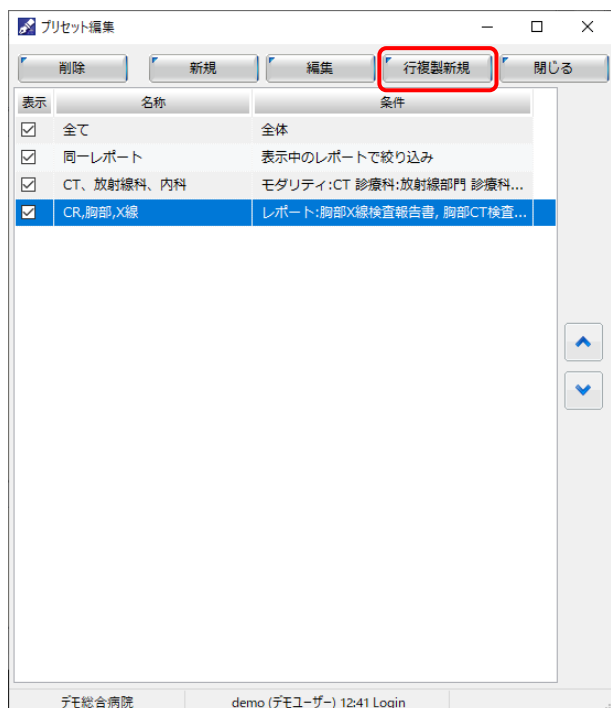

選択したプリセットからタイトルの名称を変更、条件の変更等を行った後で[登録]ボタンをクリックします。

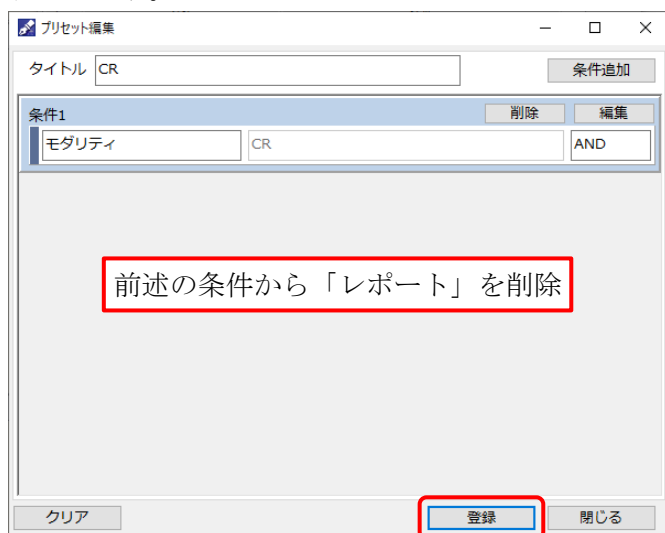


編集したプリセットが追加されたことを確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。

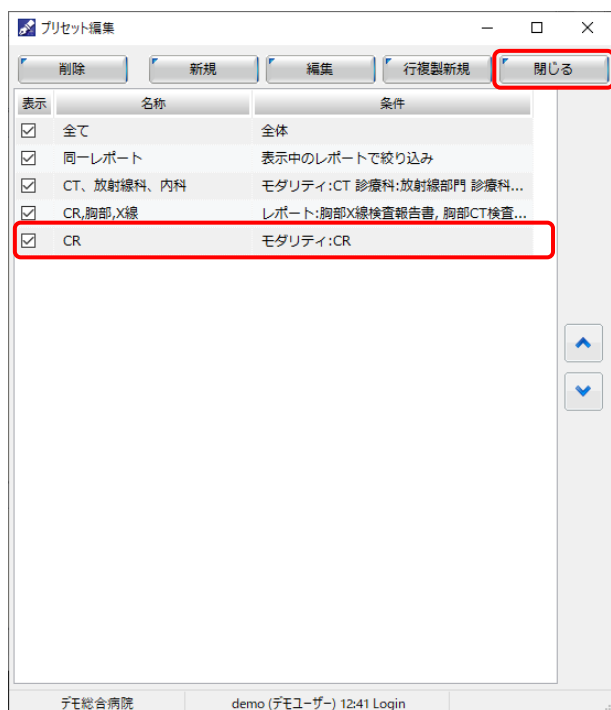

③過去履歴

表示患者の過去レポート作成履歴を表示します。リストを選択するとサブ画面にレポートを表示します。

過去履歴内のリスト上で右クリックするとメニューが表示されます。

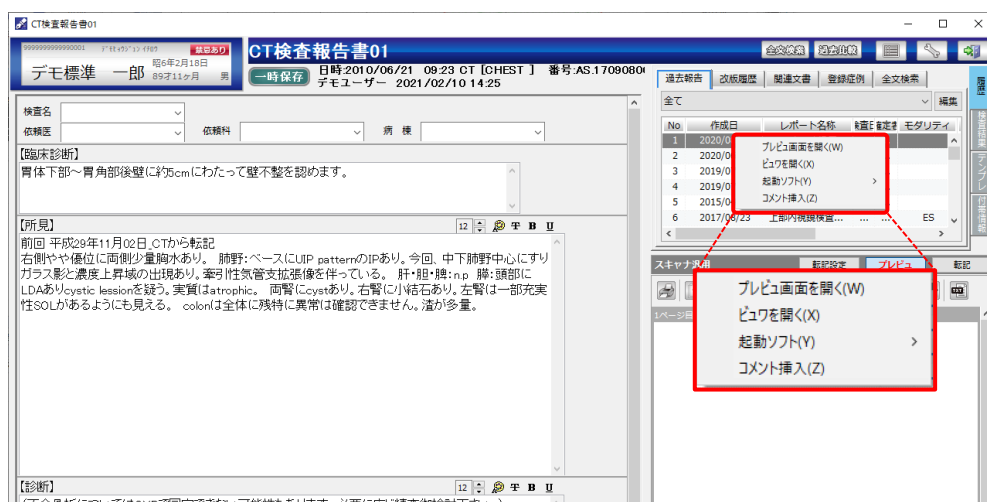

プレビュー画面を開く(W)：選択したレポートをプレビュー画面で表示します。

ビューを開く：選択したレポートの検査画像を開きます。


起動ソフト：選択したレポートをインストールされているソフトで起動します。

コメント挿入：選択したレポートから[転記設定]ボタンの内容を挿入します。


④プレビュー

サブ画面（入力画面）／プレビュー画面（出力画面）を切り替え、過去履歴の下に表示します。

サブ画面

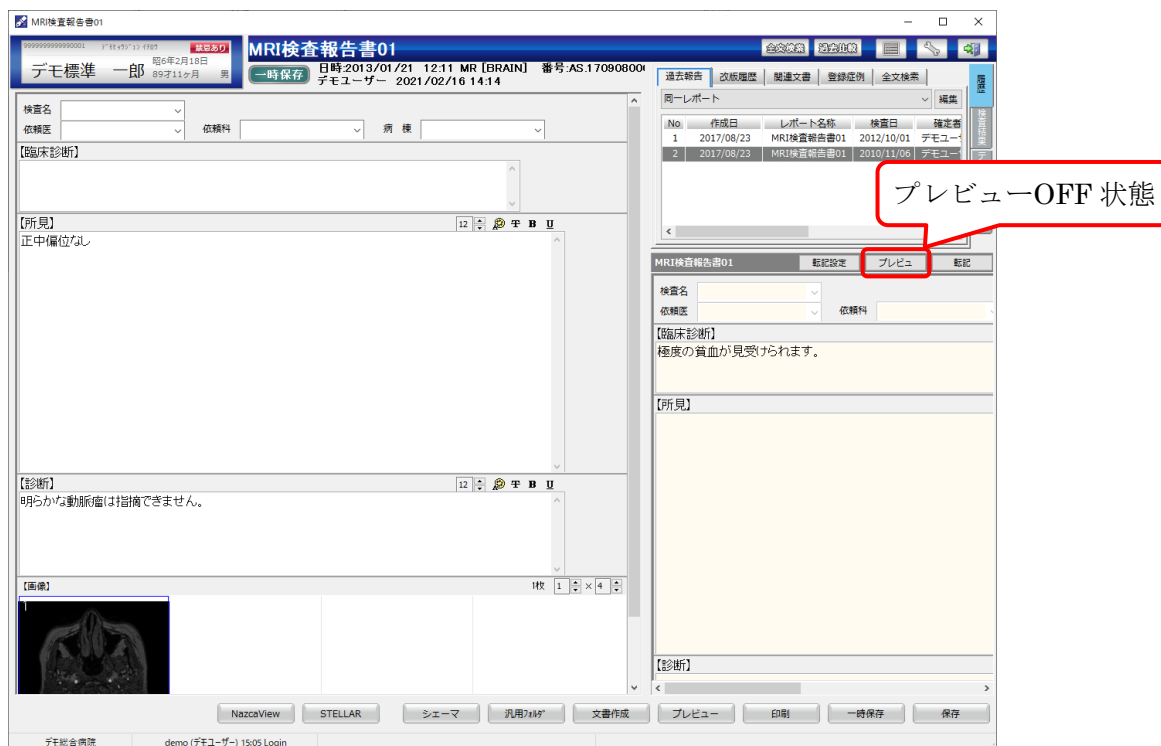


プレビュー画面

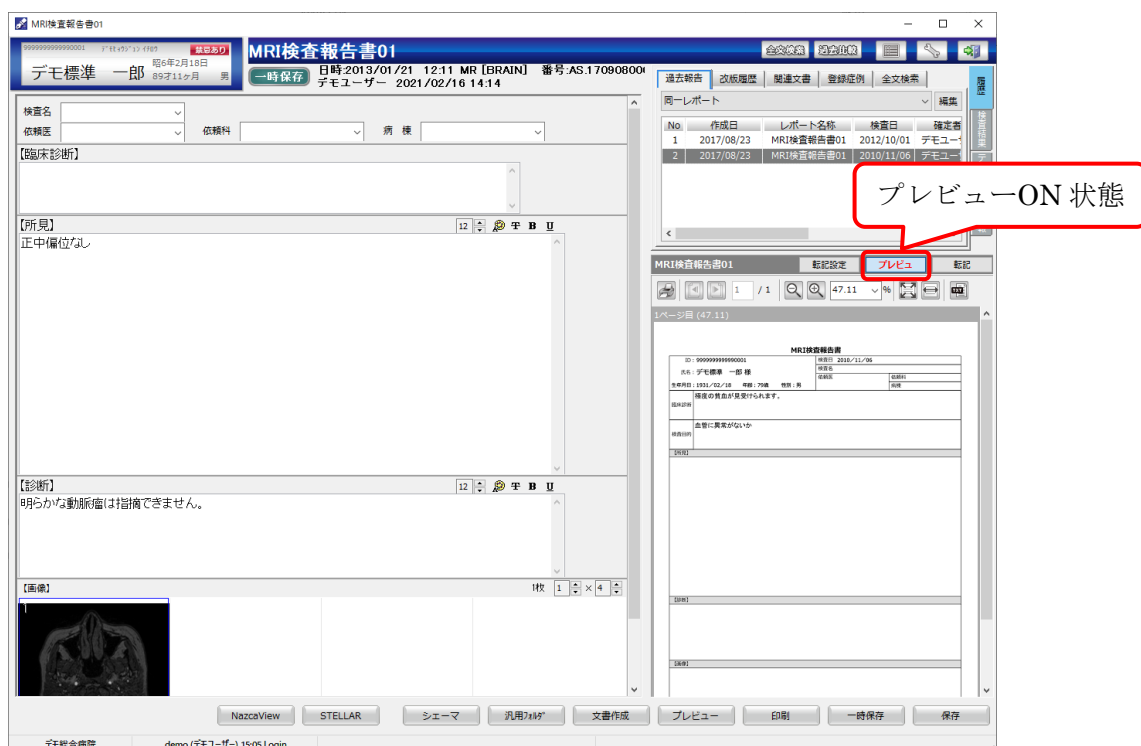

確定前のレポートは、サブ画面から転記することができます。

[転記設定]ボタンをクリックすると以下の項目を設定します。

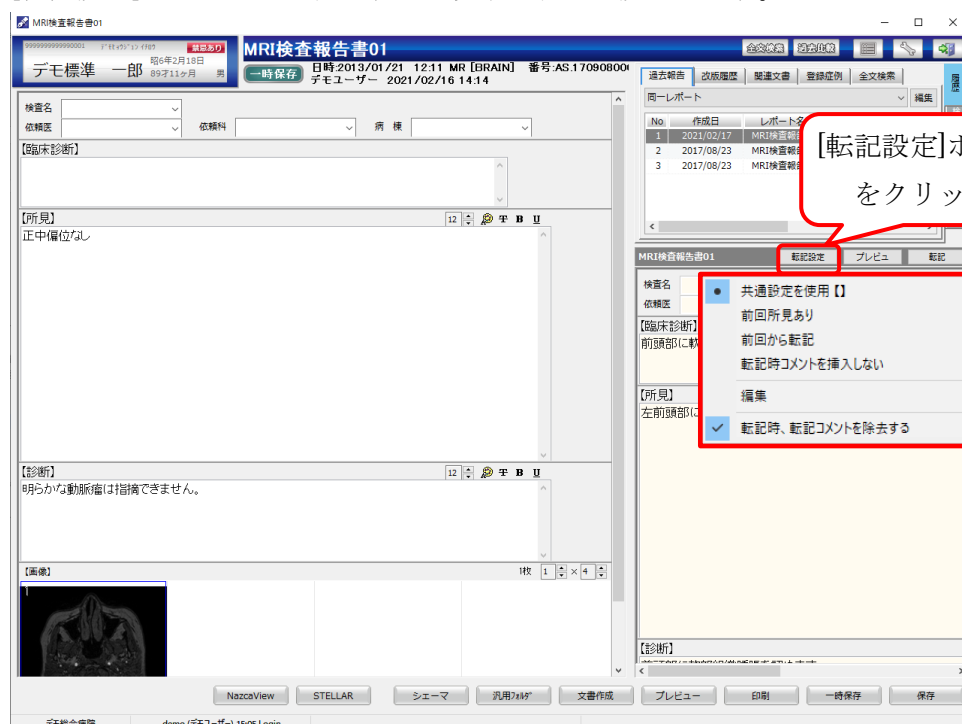

共通設定を使用【】：記載日の（西暦下2桁）年月日と内容で転記します


前回と比較：下記の編集で作成された項目で転記します。

転記時コメントを挿入しない：転記時に下記の編集で作成したコメントを挿入しません。

編集：転記時コメント一覧ダイアログが開き、転記コメントを登録します。

転記時、転記コメントを除去する：[転記]ボタンクリック時に過去報告の転記コメントを除去します。

「編集」を選択すると、転記時コメント一覧ダイアログを表示します。

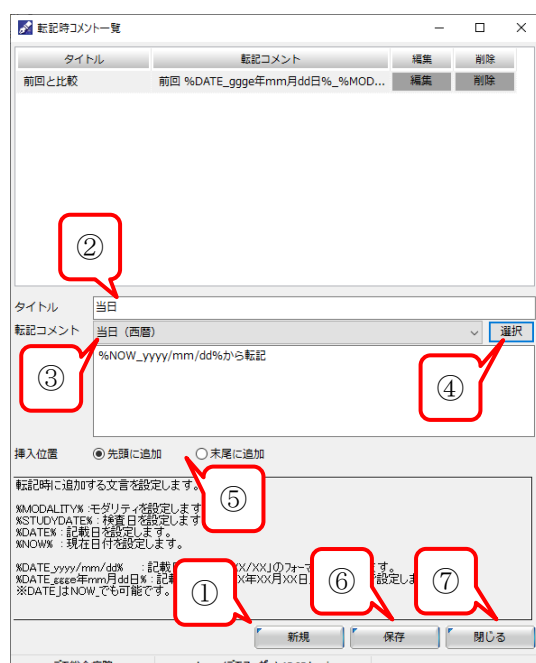

①[新規]ボタンをクリック

②タイトルを入力

③転記コメントをプルダウンより選択

記載日、当日、記載日_モダリティ（いずれも西暦・和暦の選択あり）

④[選択]ボタンをクリックする。

転記コメントに追記がある場合は追記文を入力する（省略可）

⑤挿入位置を先頭か末尾を選択

⑥[保存]ボタンをクリックし内容を保存する


保存されたものは上に追加される

⑦[閉じる]ボタンで画面を閉じる

⑤転記


転記する場合は、マウスカーソルで枠内をかざすか、枠内の右クリックメニューから選択します。

枠内をマウスカーソルで選択した場合

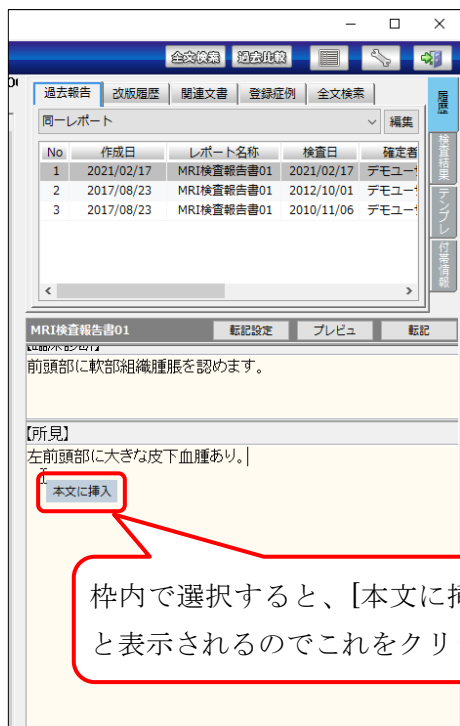

枠内で選択すると、[本文に挿入]と表示されるのでこれをクリック


枠内で右クリックメニューを表示した場合

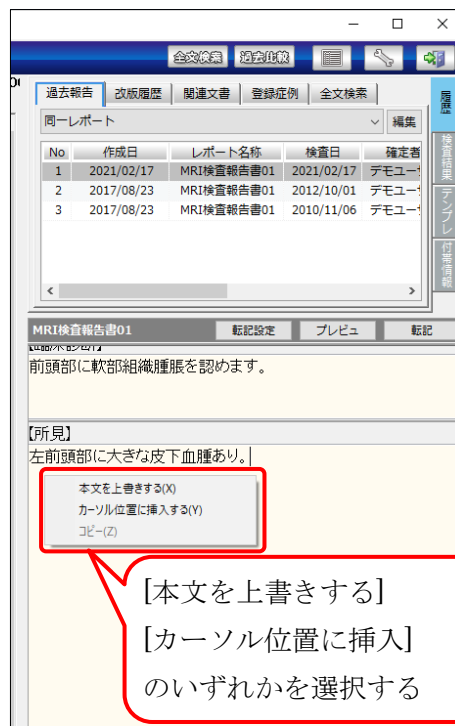

[本文を上書きする]
[カーソル位置に挿入]
のいずれかを選択する

[転記]ボタンは[転記設定]ボタンの設定に準じて、入力画面のデータを一括で上書きします。

※[プレビュー]でも同様の操作が可能です。

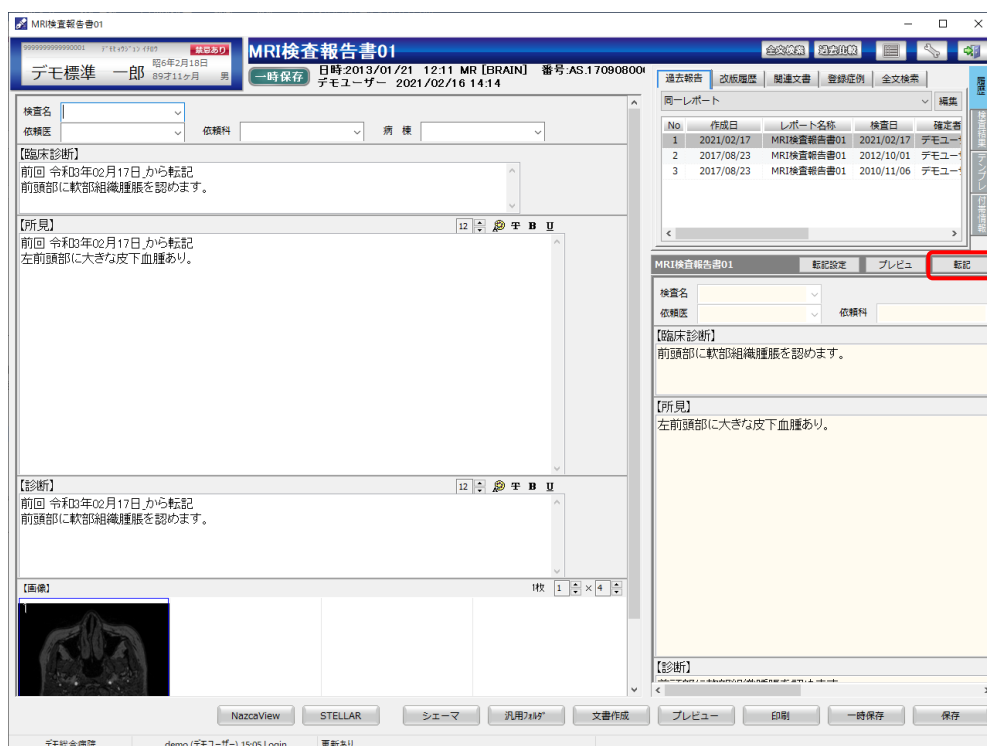

レポートの新規作成時に「転記時、転記コメントを除去する」にチェックを入れ、[転記]ボタンをクリックすると過去の転記コメントを除去した状態で転記します。


注：リッチエディット枠で作成されたものに限りです。

＜チェックなしの場合＞
転記コメントを全て転記します。

＜チェックありの場合＞
直近の転記コメントのみ表示します。

3.1.2 改版履歴

改版履歴では、選択した過去の編集履歴と、入力中のレポートを比較することができます。

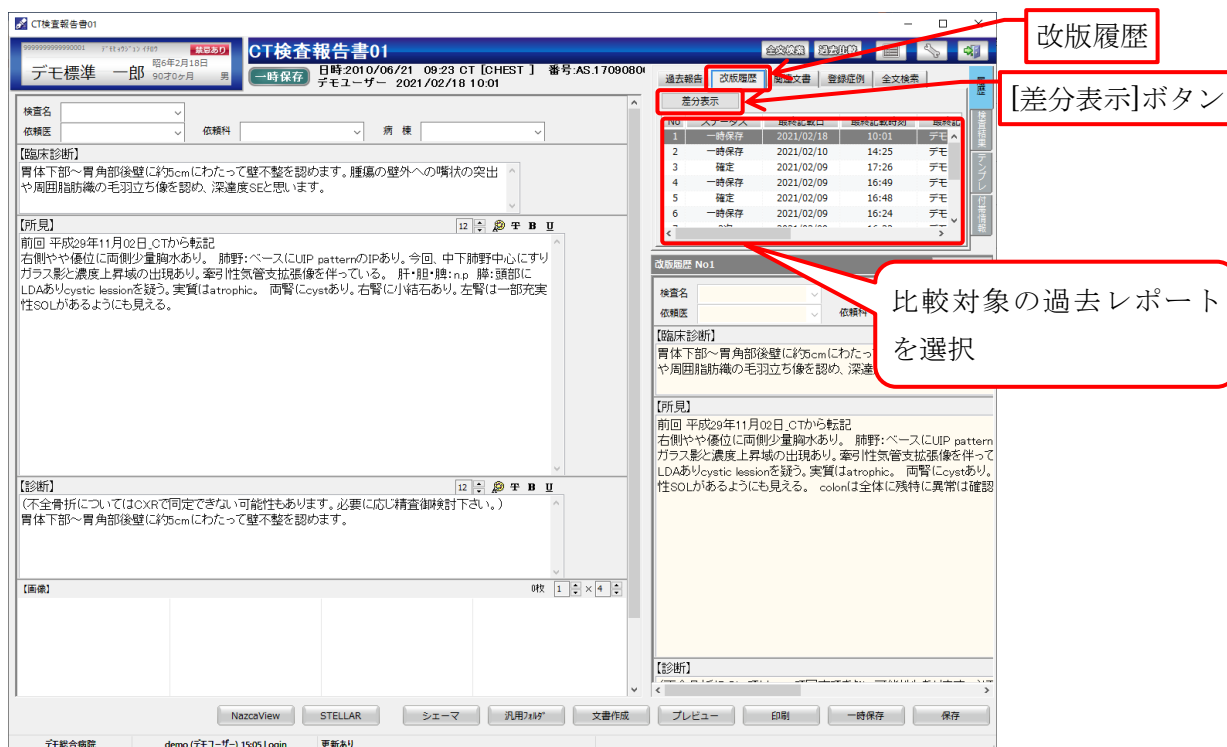

改版履歴

[差分表示]ボタン


比較対象の過去レポートを選択

比較対象の過去レポートを選択し、[差分表示]ボタンをクリックすると、過去レポートと入力中のレポートの内容が簡易表示されます。変更した内容が赤く表示されます。

前回との変更点		
項目名	前回	今回
【所見】	前回 平成29年11月02日 CTから転記 右側やや優位に両側少量胸水あり。 肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。肝・胆・脾・膵・n.p 膵:頭部にLDAありcystic lesionを疑う。実質はatrophic。両腎にcystあり。右腎に小結石あり。左腎は一部充実性SOLがあるように見える。colonは全体に著性に異常は確認できません。量が多量。	前回 平成29年11月02日 CTから転記 右側やや優位に両側少量胸水あり。 肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。肝・胆・脾・膵・n.p 膵:頭部にLDAありcystic lesionを疑う。実質はatrophic。両腎にcystあり。右腎に小結石あり。左腎は一部充実性SOLがあるように見える。
【臨床診断】	胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。腫瘍の壁外への陥凹の突出や周囲脂肪組織の毛羽立ち像を認め、深達度SEと見えます。	胃体下部～胃角部後壁に約5cmにわたって壁不整を認めます。腫瘍の壁外への陥凹の突出や周囲脂肪組織の毛羽立ち像を認め、深達度SEと見えます。

3.1.3 関連文書

レポートの関連文書をサブ画面に表示します。

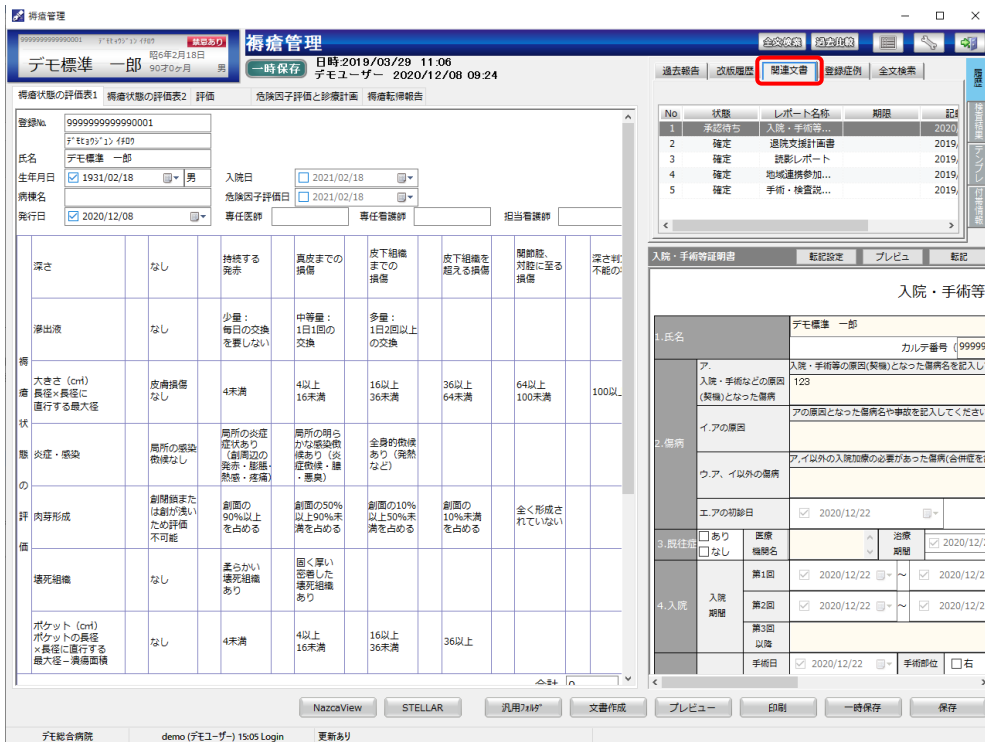

関連文書

No	状態	レポート名称	期限	記録
1	承認待ち	入院・手術...	2020	
2	確定	退院文書計画書	2019	
3	確定	読影レポート	2019	
4	確定	地域連携参加...	2019	
5	確定	手術・検査...	2019	

入院・手術等証明書


1. 氏名: デモ標準 一郎
カルテ番号: 9999995

2. 傷病
ア. 入院・手術等の原因(契機)となった傷病名を記入してください
イ. アの傷病名となった傷病名や事故を記入してください
ウ. ア以外の傷病
エ. アの初発日: 2020/12/22

3. 既往歴
あり: ☐ なし: ☐ 医療機関名: 治療期間: 2020/12/22

4. 入院
入院期間: 第1回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22, 第2回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22, 第3回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22
手術日: 2020/12/22, 手術部位:

[プレビュー]ボタンで印刷画面を表示します。

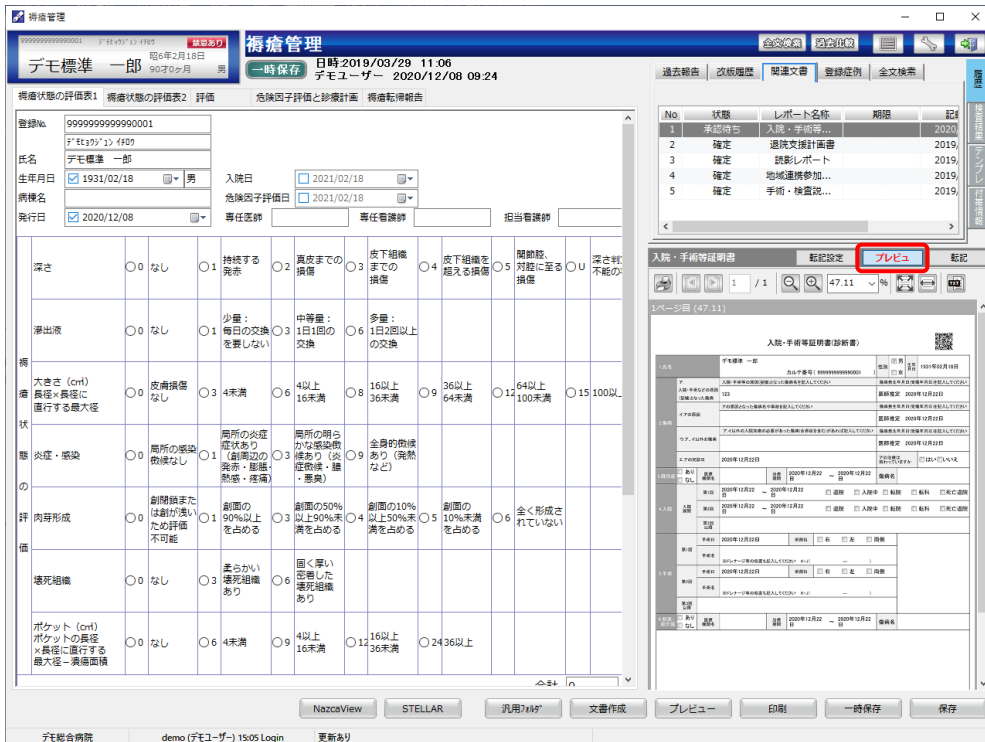

プレビュー

1 / 1 47.11

入院・手術等証明書(印刷用)

1. 氏名: デモ標準 一郎
カルテ番号: 99999950001
性別: 男
生年月日: 1931/02/18
病歴名: デモ標準 一郎
発行日: 2020/12/08
専任医師:
専任看護師:
担当看護師:

2. 傷病
ア. 入院・手術等の原因(契機)となった傷病名を記入してください
イ. アの傷病名となった傷病名や事故を記入してください
ウ. ア以外の傷病
エ. アの初発日: 2020/12/22

3. 既往歴
あり: ☐ なし: ☐ 医療機関名: 治療期間: 2020/12/22

4. 入院
入院期間: 第1回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22, 第2回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22, 第3回: 2020/12/22 ~ 2020/12/22
手術日: 2020/12/22, 手術部位:

3.1.4 登録症例

症例の登録や編集を行います。

① 症例の登録


[症例登録]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) window. The '症例登録' (Register Case) button is highlighted with a red box. A red callout points to the button with the text '[症例登録]ボタンをクリック' (Click the [Register Case] button). The interface includes fields for patient name, date, and time, as well as a list of cases on the right side.


症例タイトルを入力し、分類を選択後に[登録]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '症例登録' (Register Case) dialog box. The '症例タイトル' (Case Title) field is highlighted with a red box. The '登録' (Register) button is also highlighted. A red box highlights the '分類' (Classification) list, which includes options like '共通(科)' (Common (Department)), '個人' (Individual), and '肺' (Lung). A red callout points to the list with the text '分類' (Classification).


情報ダイアログが表示されるので、[はい]ボタン、[OK]ボタンをクリックします。

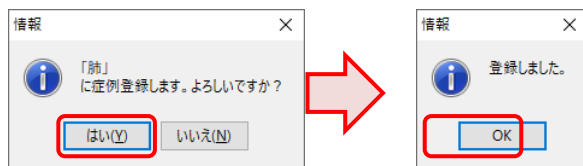

追加した症例タイトルが症例一覧に反映します。

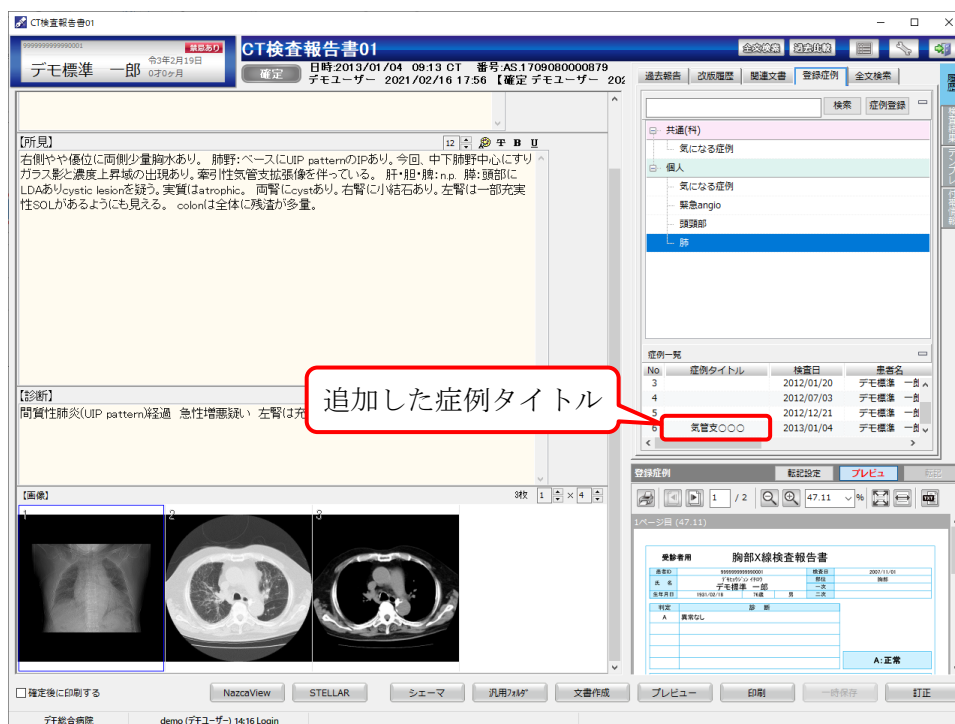


検索文字を入力することにより、症例タイトルとレポート内容で検索することができます。

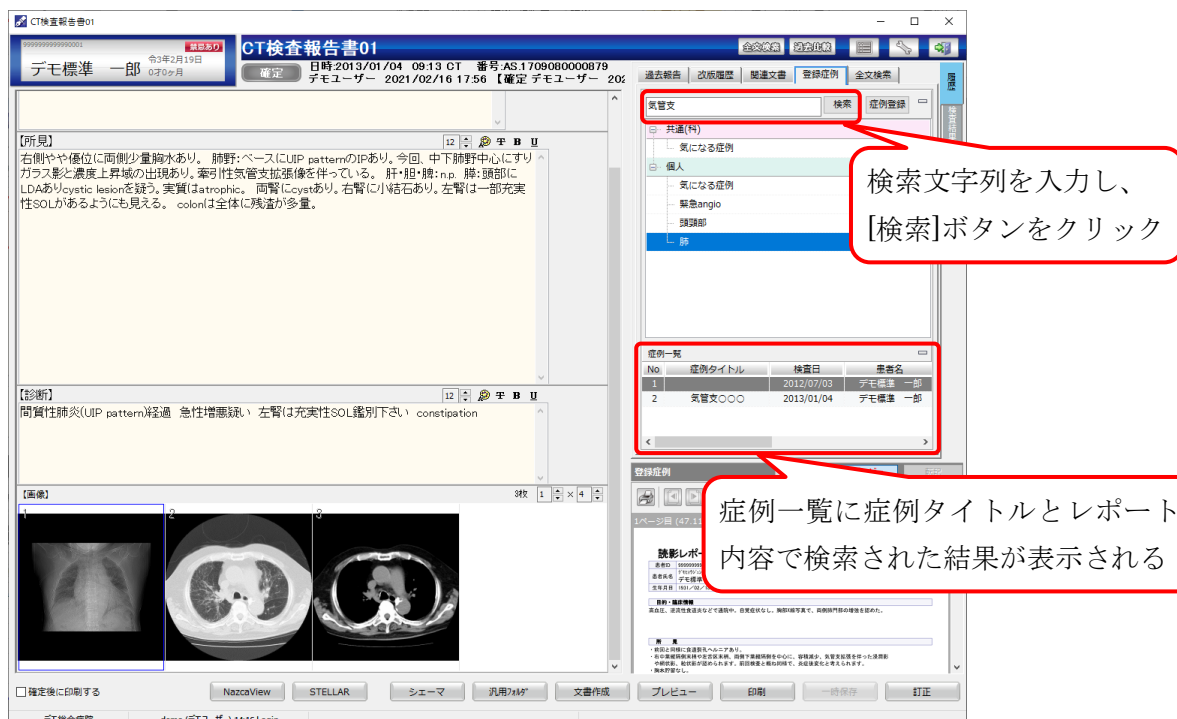


②症例の削除


症例を削除する場合も、[症例登録]ボタンをクリックします。

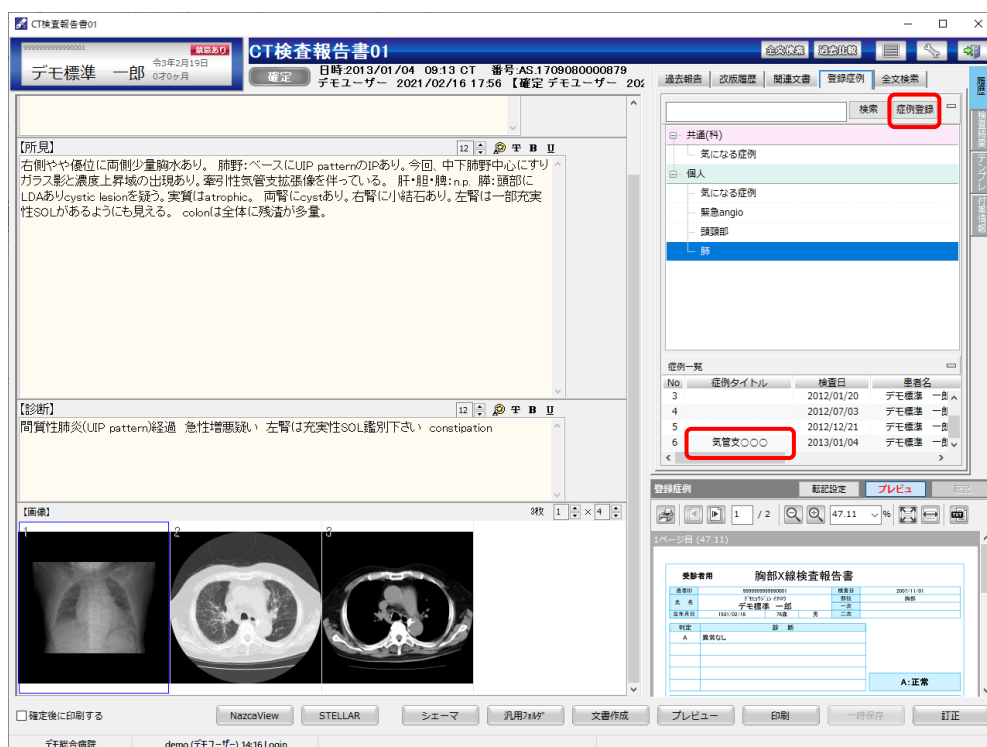


症例タイトルの名称を確認し、[削除]ボタンをクリックします。

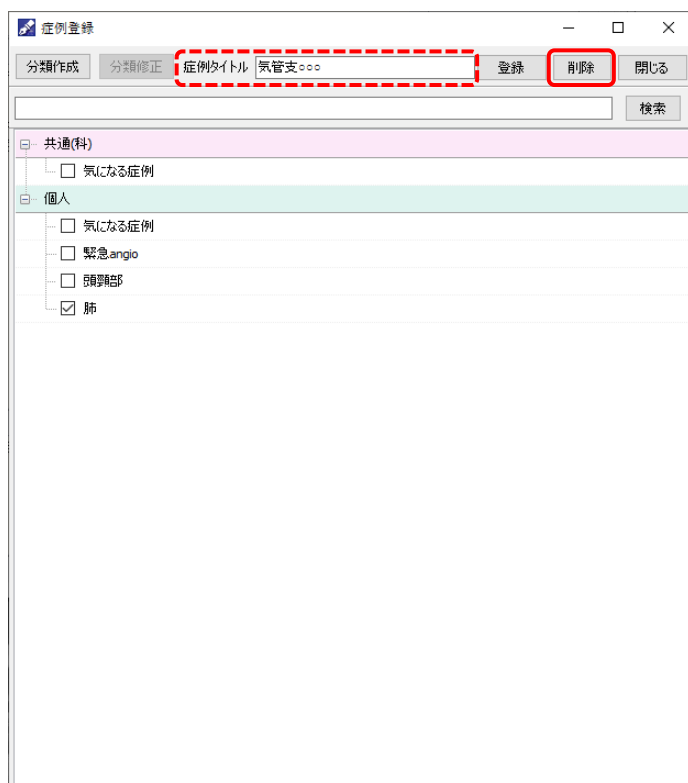

情報ダイアログが表示されるので、[はい]ボタン、[OK]ボタンをクリックします。

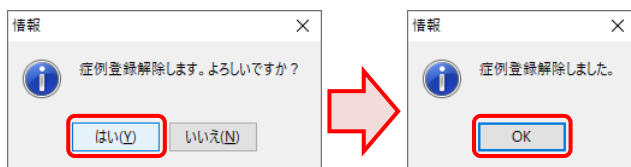

登録の画面に戻るので、[閉じる]ボタンをクリックし画面を閉じます。

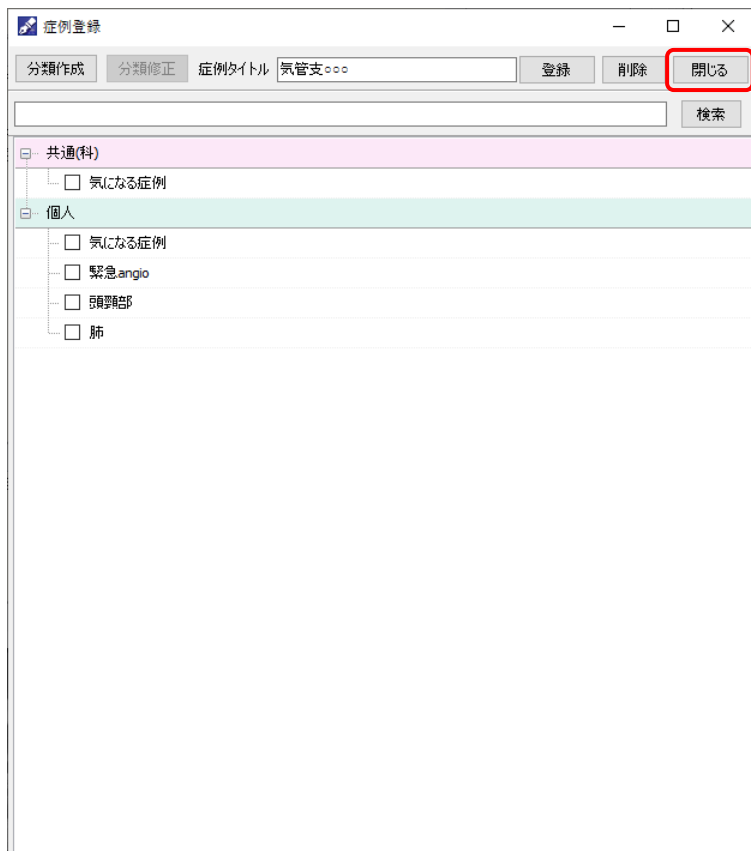

③症例の分類作成／修正


分類作成・分類修正について

分類を新しく作成する場合は、[分類作成]ボタンをクリックします。

分類を修正・削除する場合は、目的の分類を選択し[分類修正]ボタンをクリックします。

3.1.5 全文検索

表示患者の全てのレポートを対象とし、全文検索を行います。検索対象はレポート種や日付で絞り込みが可能です。

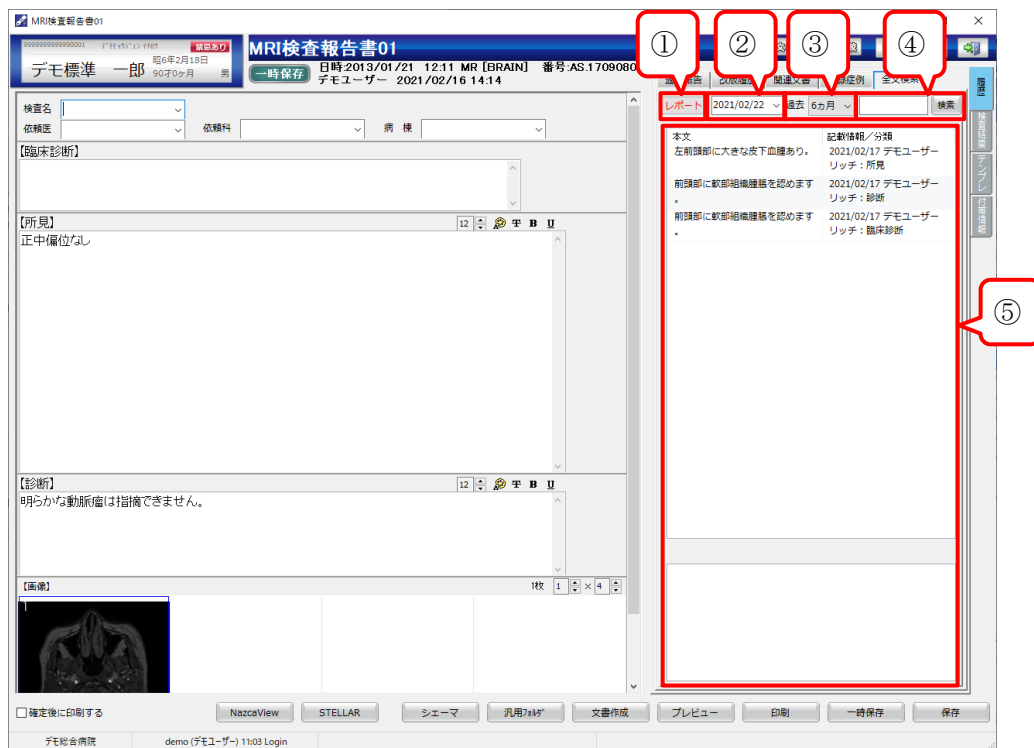


- ①[レポート]ボタン：レポート検索画面を起動し、レポート検索条件を追加・削除します。
- ②[指定日付]：日付を入力します（プルダウンでカレンダー指定ができます）。
- ③過去プリセット：[指定日付]の日付から1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年の単位で検索を行います。
- ④検索枠と[検索]ボタン：検索枠に入力した文字列を抽出します。抽出文字は赤色で表示します。
- ⑤抽出枠：①～④で検索したレポート内容を表示します。レポート内容をダブルクリックすると本文にコピーされます。また下に表示されているテキストは一部加工して貼り付けることも可能です。

※レポート検索ダイアログについて

[レポート]ボタンをクリックするとレポート検索ダイアログが表示されます。

この画面では検査レポートの追加・削除を行います。

検索対象レポートを青枠に移動することにより、検索を行うことができます。

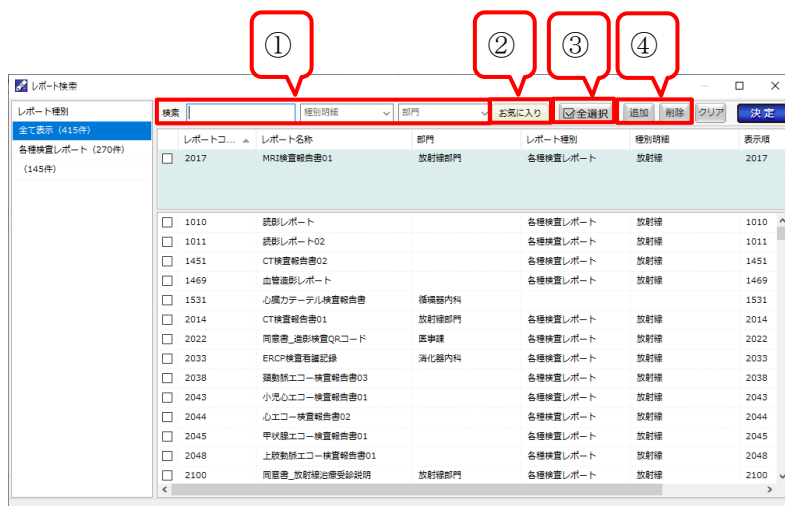

The screenshot shows the 'レポート検索' (Report Search) dialog box. It has a search bar at the top with a '検索' (Search) button. Below the search bar is a table of reports. The table has columns for 'レポートコード' (Report Code), 'レポート名称' (Report Name), '部門' (Department), 'レポート種別' (Report Type), '種別明細' (Type Details), and '表示順' (Display Order). The table lists various reports, including 'MRI検査報告書01', 'CT検査報告書02', '血管造影レポート', etc. The dialog box also has buttons for 'お気に入り' (Favorite), '全選択' (Select All), '追加' (Add), '削除' (Delete), 'クリア' (Clear), and '決定' (OK).

①検索枠：レポートコード・レポート名称・部門などを入力し、検索することができます。

②[お気に入り]ボタン：頻繁に使われるレポートを登録することができます。

③[☒全選択]（または[☐全解除]）ボタン：検索対象レポートを全選択（全解除）すると、追加[削除]ボタンで追加・削除を行うことができます。

④[追加]・[削除]ボタン：追加したレポート条件の変更ができます。

3.2 検査結果

検査結果をそれぞれの形式で表示します。

3.2.1 依頼情報

依頼情報を表示します。

①依頼リスト：依頼情報のリストを表示します。

②詳細情報：依頼リストで選択した内容詳細を表示します。

3.2.2 臨床検査

臨床検査を表示します

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) interface. The main window displays patient information, examination details, and a list of clinical tests. Five numbered callouts highlight specific features:

- ① [再読込] (Reload) button: Located at the top right of the clinical test list.
- ② [自科のみ] (Only Self-Department) button: Located at the top right of the clinical test list.
- ③ 臨床検査一覧 (Clinical Test List): The main table showing a list of tests performed.
- ④ グローバルセット (Global Set) section: Includes a dropdown menu and a checkbox labeled '貼付時ヘッダを含む' (Include header when pasting).
- ⑤ 検査結果表示画面 (Test Result Display Screen): The detailed view of test results, including a table with columns for No., Item Name, H/L, Result, Comment, Unit, and Status.

- ①[再読込]ボタン：レポートに変更があった場合にクリックすると再読み込みを行います。
- ②[自科のみ]ボタン：診療科を[自科のみ]に絞り込んで表示します。
- ③臨床検査一覧：臨床検査の一覧を表示します。
- ④グローバルセット：検査内容を絞り込み、検査結果へ反映します。「貼付時ヘッダを含む」にチェックを入れると、入力画面にヘッダを含めて出力します。
- ⑤検査結果表示画面：検査結果を表示します。[セット無し]を選択すると全てのセット内容を表示します。緑色のタイトル部をクリックするとタイトル部のみ表示します。

ワンポイント

This close-up shows the '臨床検査 No1' window. The 'セット' (Set) dropdown is set to 'セット無し' (No Set). The '貼付時ヘッダを含む' (Include header when pasting) checkbox is checked. The '選択解除' (Unselect), '全選択' (Select All), and 'コピー' (Copy) buttons are highlighted with a red box.

※[選択解除]・[全選択]・[コピー]ボタンは、以降の[投薬]・[注射]・[傷病／入退院]・[共有情報]・[手術]の各タブ内でも表示され、同じ動作をします。

[選択解除]ボタン：チェックボックスのチェックを全て解除します。

[全選択]ボタン：全てのチェックボックスにチェックを入れます。

[コピー]ボタン：チェックした内容が入力画面へ反映されます。

3.2.3 投薬

処方内容を表示します。

The screenshot displays the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) interface. The right-hand panel shows the '投薬' (Prescription) section. Red annotations highlight the following features:

- ① [再読込] (Reload) button: Located at the top of the prescription panel.
- ② [自科のみ] (Internal Medicine Only) button: Located next to the reload button.
- ③ 処方履歴 (Prescription History) table: A table listing dates, departments, and doctors.
- ④ 処方内容 (Prescription Content) table: A detailed list of medications, dosages, and frequencies for a selected date.

①[再読込]ボタン：レポートに変更があった場合にクリックすると再読み込みを行います。


②[自科のみ]ボタン：診療科を[自科のみ]に絞り込んで表示します。

③処方履歴：処方履歴を表示します。

④処方内容：処方履歴で選択した日の処方内容を表示します。

3.2.4 注射

注射履歴を表示します。

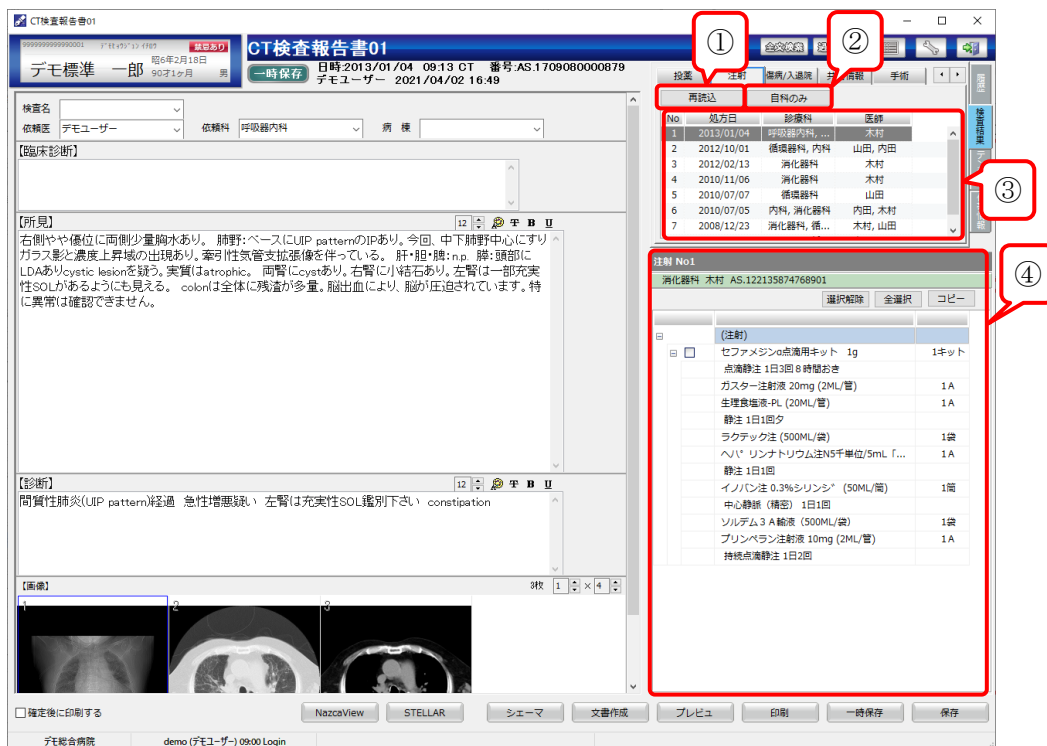

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) interface. The right-hand sidebar contains a table of injection history (注射履歴) and a detailed view of a specific injection (注射 No.1).

① [再読込] ボタン: レポートに変更があった場合にクリックすると再読み込みを行います。

② [自科のみ] ボタン: 診療科を[自科のみ]に絞り込んで表示します。

③ 注射履歴: 注射履歴を表示します。

④ 注射内容: 注射履歴で選択した日の内容を表示します。

①[再読込]ボタン：レポートに変更があった場合にクリックすると再読み込みを行います。

②[自科のみ]ボタン：診療科を[自科のみ]に絞り込んで表示します。

③注射履歴：注射履歴を表示します。

④注射内容：注射履歴で選択した日の内容を表示します。

3.2.5 傷病／入退院

傷病／入退院歴を表示します。

①[再読み込み]ボタン：レポートに変更があった場合にクリックすると再読み込みを行います。

②[自科のみ]ボタン：診療科を[自科のみ]に絞り込んで表示します。

③傷病歴／入退院歴：傷病歴と入退院歴を切り替えます。

④傷病歴／入退院歴の内容：傷病歴と入退院歴で選択した履歴を表示します。

傷病歴画面内で[DPC 病名表示]ボタンをクリックすると、DPC 病名に切り替わります。

傷病歴


入退院歴

3.2.6 共有情報

共有情報を表示します。

レポートに変更があった場合、[再読込]ボタンをクリックすると再読み込みを行います。

例では、共有情報 No1 で検査画像の計測値を表示しています。

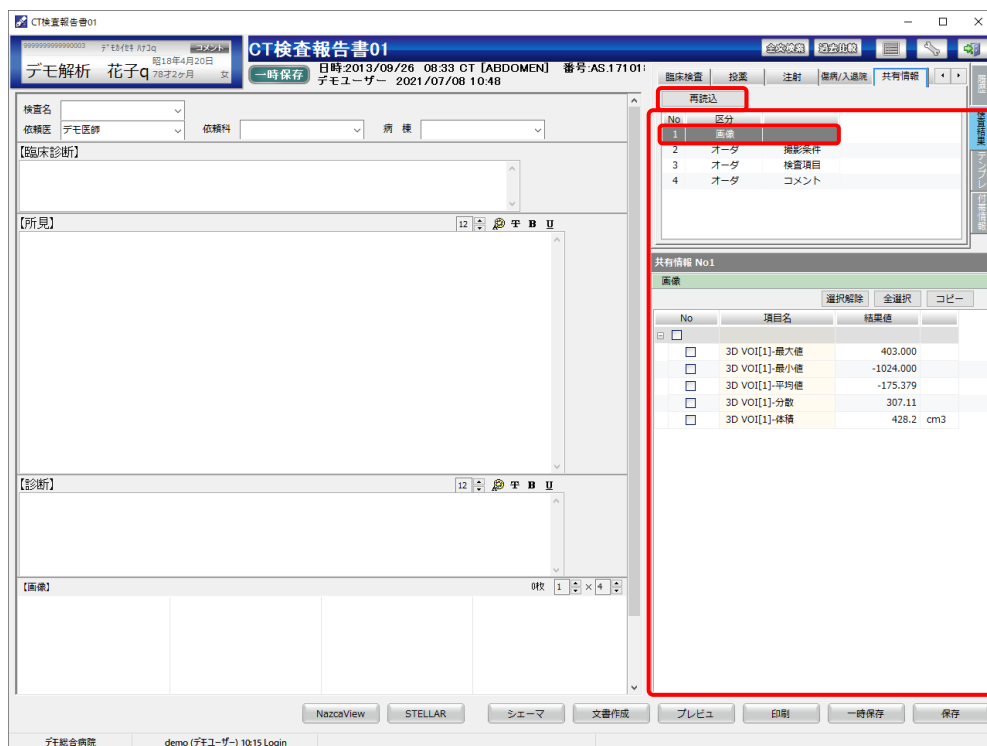

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時: 2013/08/26 08:33 CT [ABDOMEN] 番号: AS.17101

一時保存 デモユーザー 2021/07/08 10:48

検査名: デモ解析 花子Q

依頼医: デモ医師 依頼科: 病棟:

【臨床診断】

【所見】

【診断】

【画像】

再読込

No	区分	項目名	結果値
1	画像		
2	オーダー	撮影条件	
3	オーダー	検査項目	
4	オーダー	コメント	

共有情報 No1

画像


No	項目名	結果値
☐	3D VOI[1]-最大値	403.000
☐	3D VOI[1]-最小値	-1024.000
☐	3D VOI[1]-平均値	-175.379
☐	3D VOI[1]-分数	307.11
☐	3D VOI[1]-体積	428.2 cm3

NaZaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 10:15 Login

例)

共有情報 No2 では
オーダーの撮影条件を表示

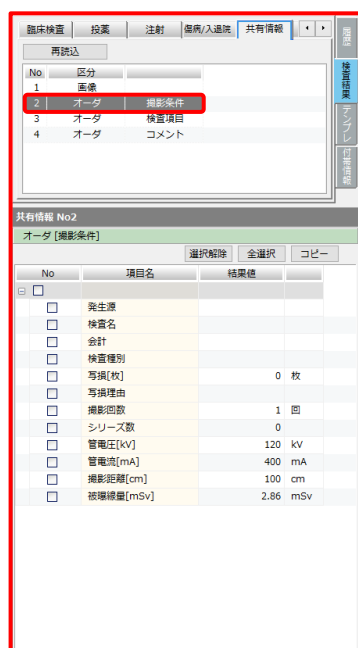

再読込


No	区分	項目名	結果値
1	画像		
2	オーダー	撮影条件	
3	オーダー	検査項目	
4	オーダー	コメント	

共有情報 No2

オーダー [撮影条件]

No	項目名	結果値
☐	発生源	
☐	検査名	
☐	会計	
☐	検査種別	
☐	写真[枚]	0 枚
☐	写真理由	
☐	撮影回数	1 回
☐	シリーズ数	0
☐	管電圧[kV]	120 kV
☐	管電流[mA]	400 mA
☐	撮影距離[cm]	100 cm
☐	被曝線量[mSv]	2.86 mSv

共有情報 No3 では
オーダーの検査項目を表示

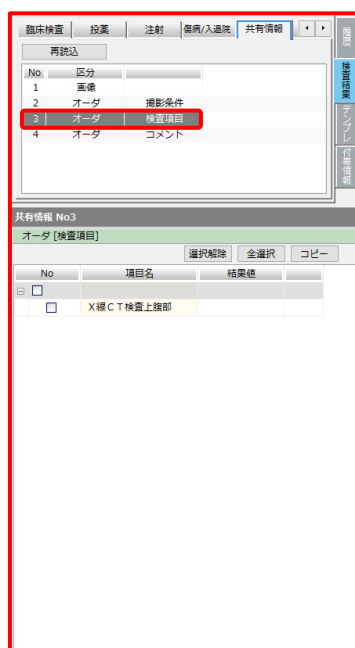

再読込


No	区分	項目名	結果値
1	画像		
2	オーダー	撮影条件	
3	オーダー	検査項目	
4	オーダー	コメント	

共有情報 No3

オーダー [検査項目]

No	項目名	結果値
☐	X線CT検査上腹部	

共有情報 No4 では
オーダーのコメントを表示

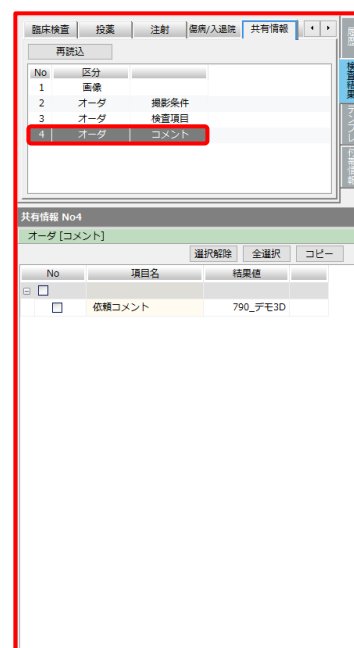

再読込

No	区分	項目名	結果値
1	画像		
2	オーダー	撮影条件	
3	オーダー	検査項目	
4	オーダー	コメント	

共有情報 No4

オーダー [コメント]

No	項目名	結果値
☐	依頼コメント	790_デモ3D


3.3 テンプレート

定型文などを [テンプレ] または [セット] に登録し、本文に貼り付けることができます。


3.3.1 テンプレ

①テンプレート登録


定型文などをテンプレート登録します。登録する文字を選択し、右クリックメニューから「テンプレート登録」を選択します。

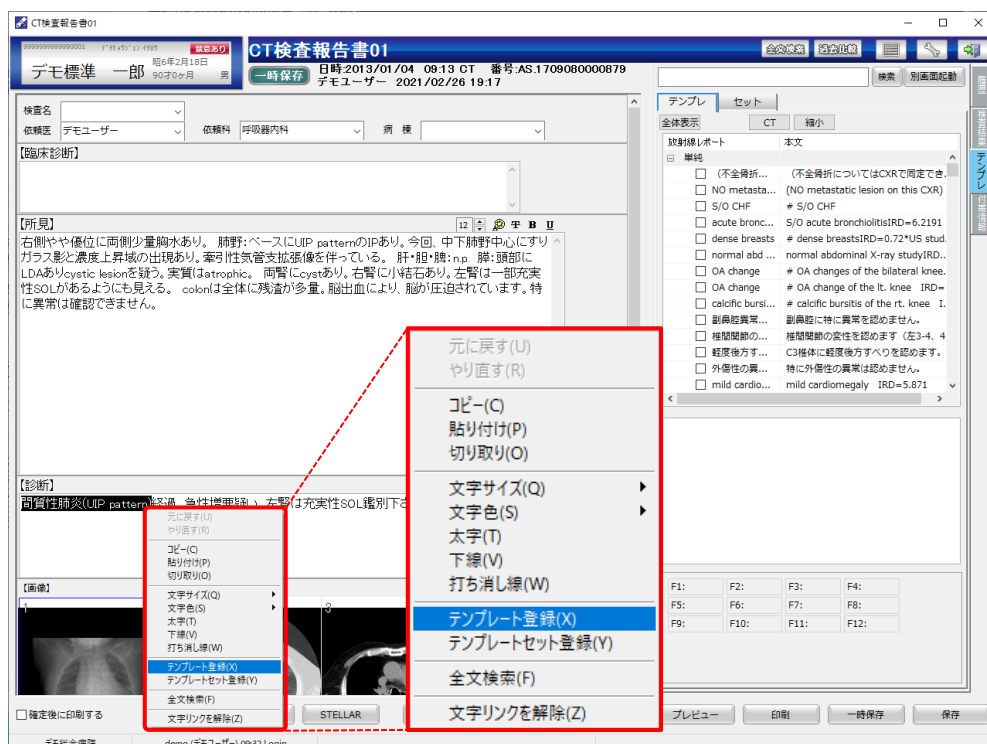

「テンプレート登録」をクリックすると、[テンプレ]タブ下部に新規作成が表示されます。

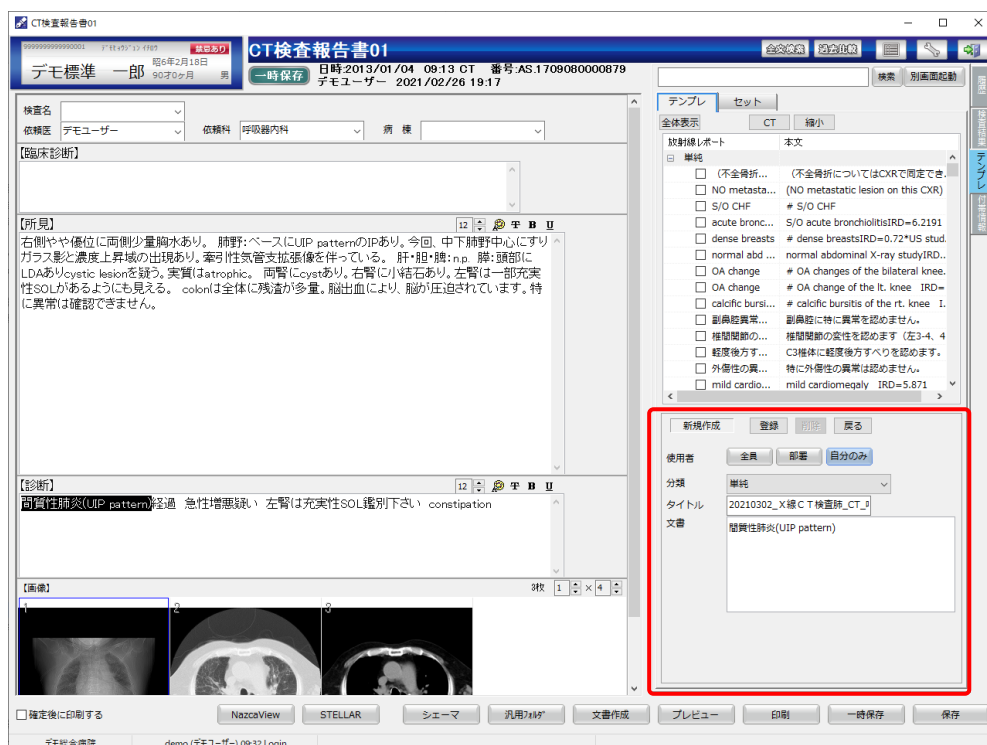

登録情報を入力します。

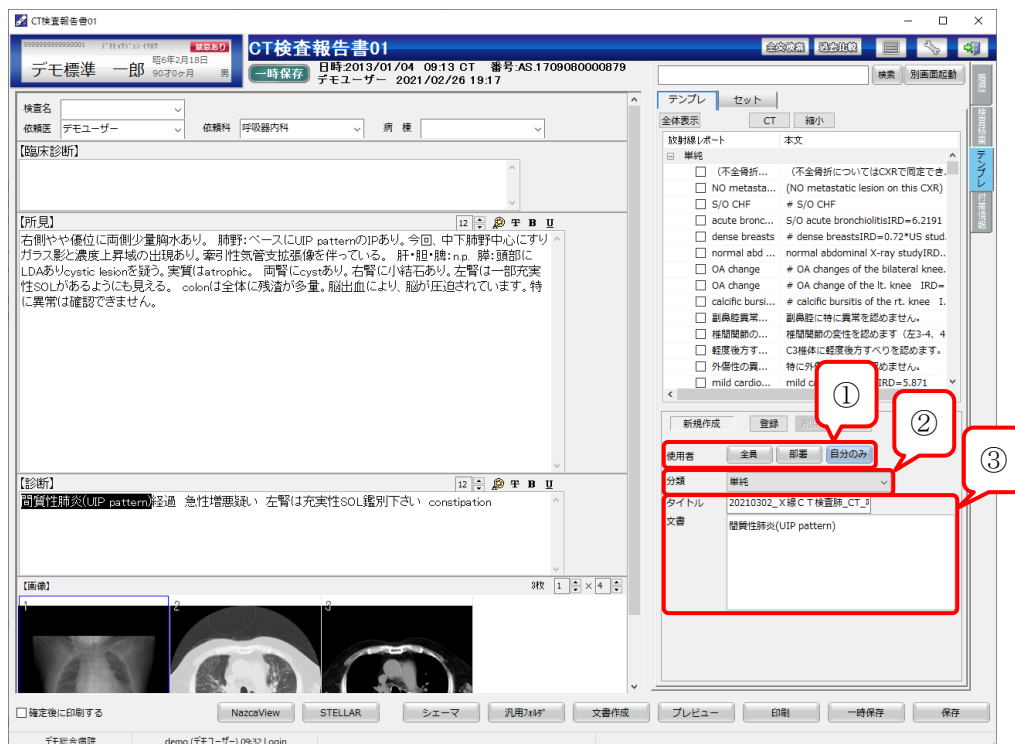


①使用者：[全員]・[部署]・[自分のみ]のボタンの中からいずれか1つを選択します。


②分類：プルダウンの中から登録されている項目を選択します。

③タイトル・文書：自動で挿入されます。どちらも変更可能です。

[登録]ボタンをクリックすると、ダイアログで「登録しました[OK]」と表示されるので[OK]ボタンをクリックします。

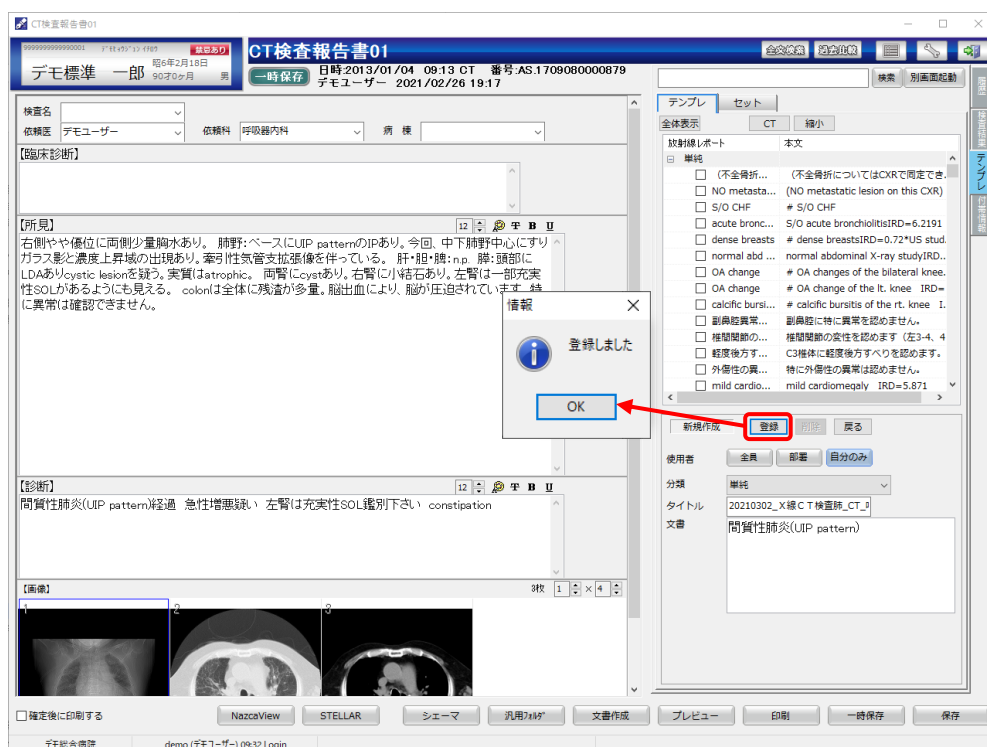


登録したテンプレートが分類の先頭に追加されます。

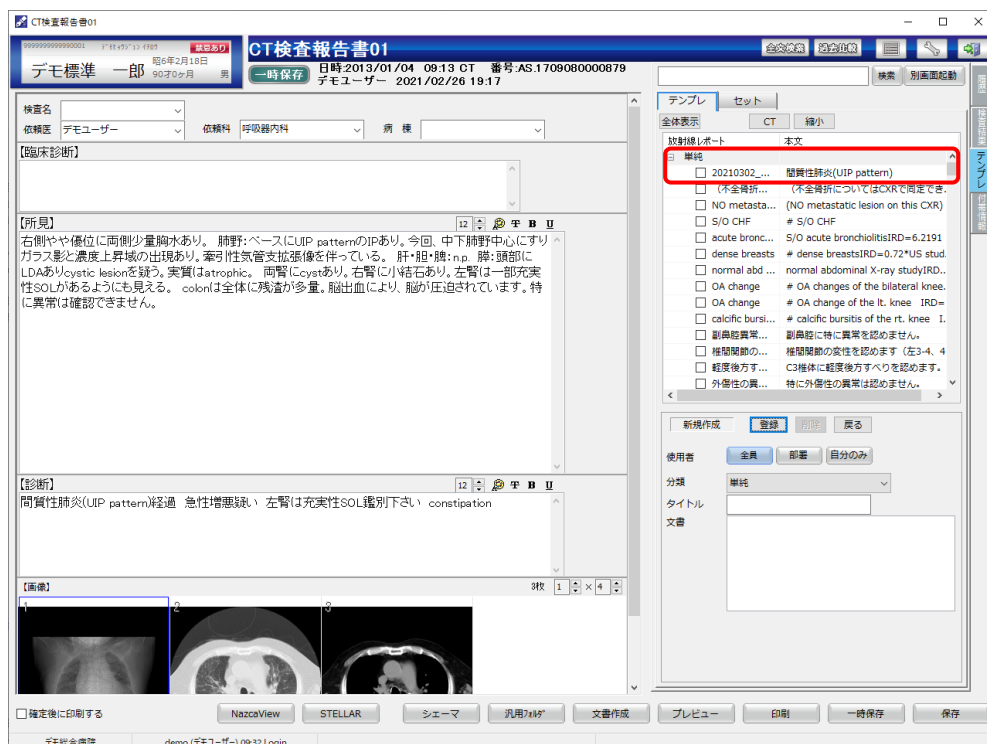


②テンプレート変更・削除



テンプレートを選択し、右クリックメニューから「文書の変更・削除」を選択します。

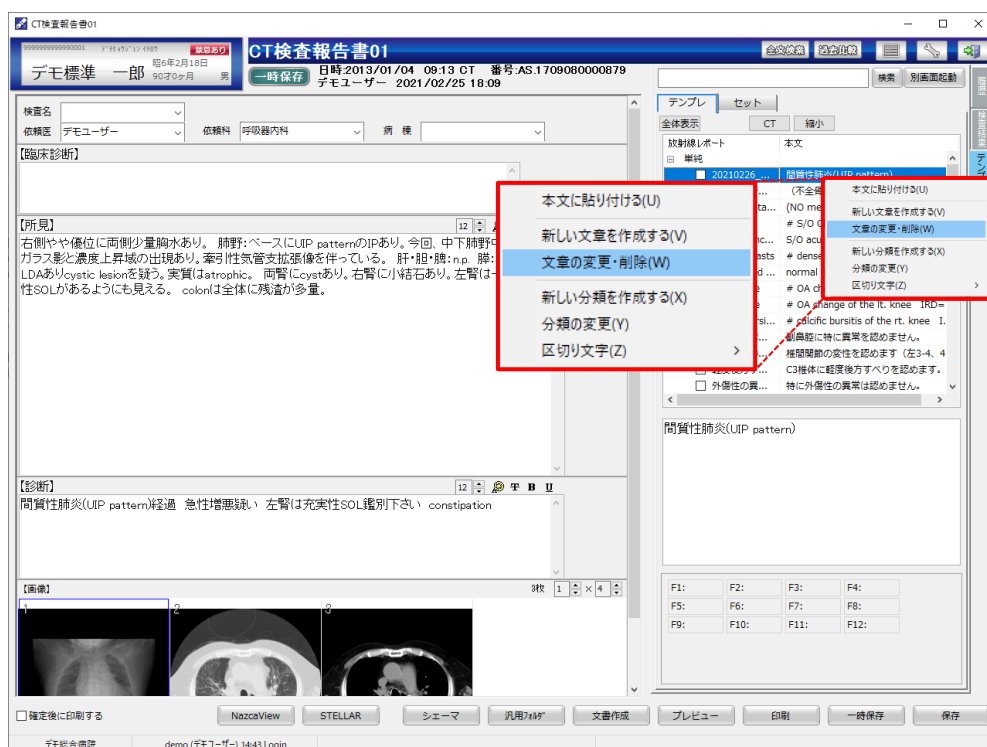


使用者・分類・タイトル・文書の変更ができます。

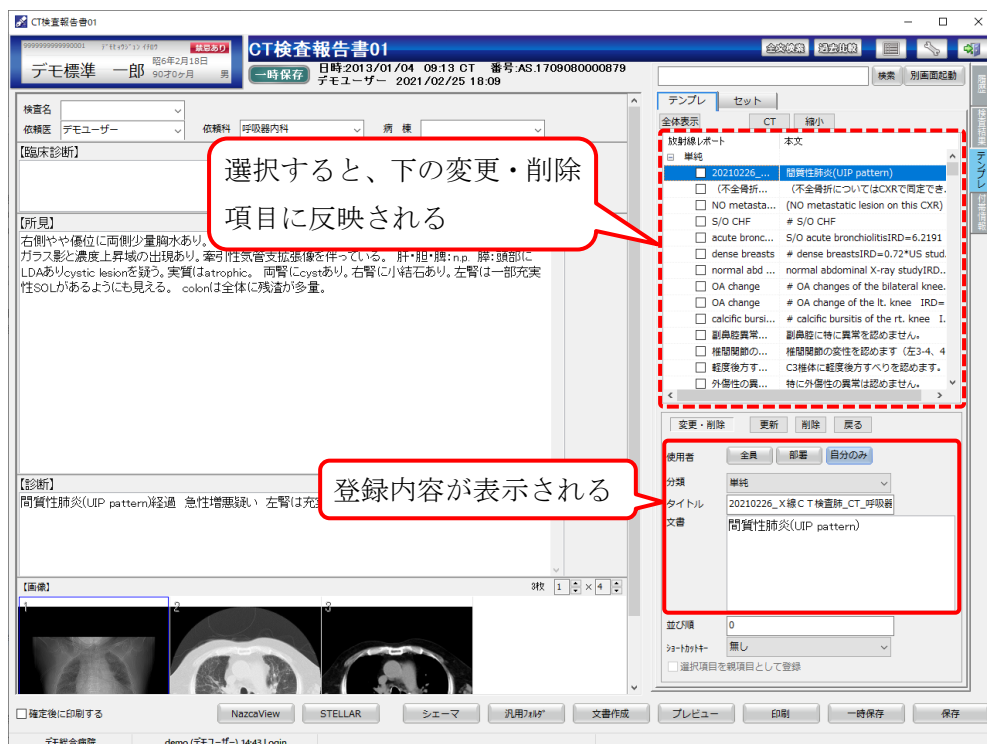


(ここではタイトルを変更します。) 変更を行った場合[更新]ボタンをクリックし、ダイアログで「登録しました[OK]」と表示されるので[OK]ボタンをクリックすると元の画面に戻ります。

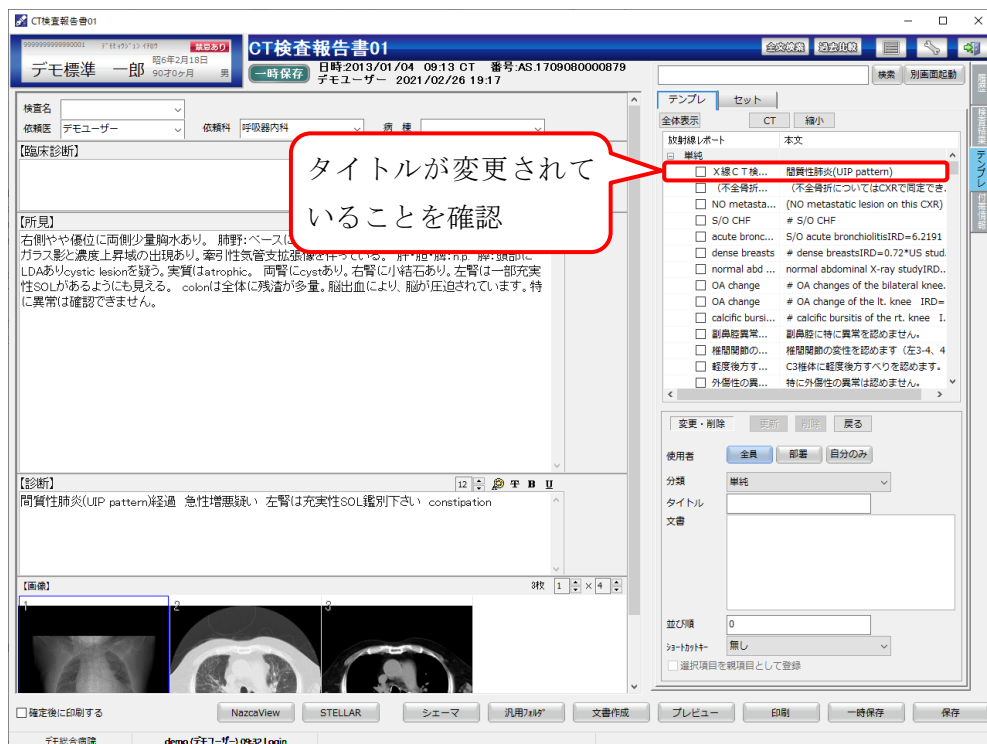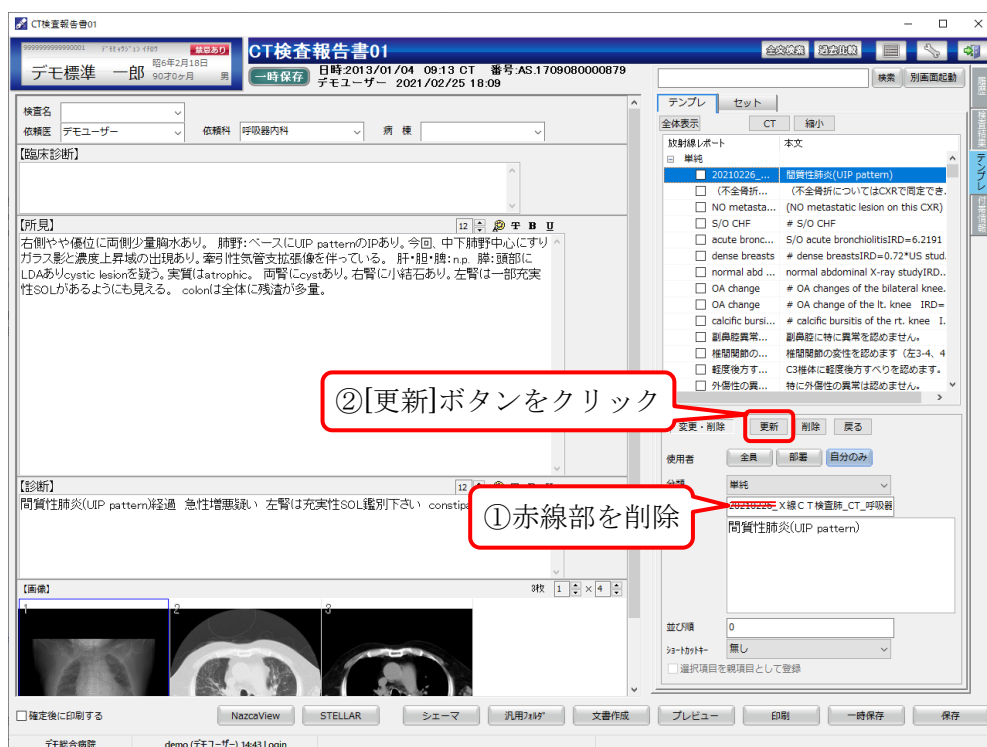

削除する場合は[削除]ボタンをクリックし、ダイアログで「削除します。よろしいですか？[OK][キャンセル]」が表示されるので[OK]ボタンで削除します。ダイアログで「削除しました。[OK]」が表示されるので、[OK]ボタンをクリックするとテンプレートから削除されます。

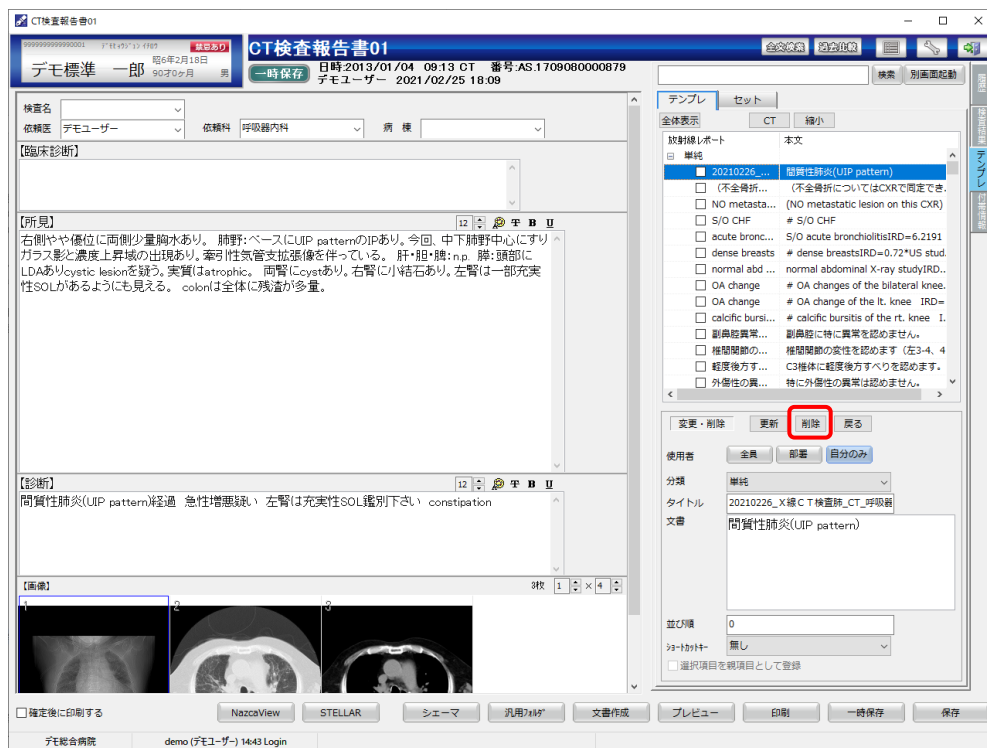

登録されていた場所から削除されています。

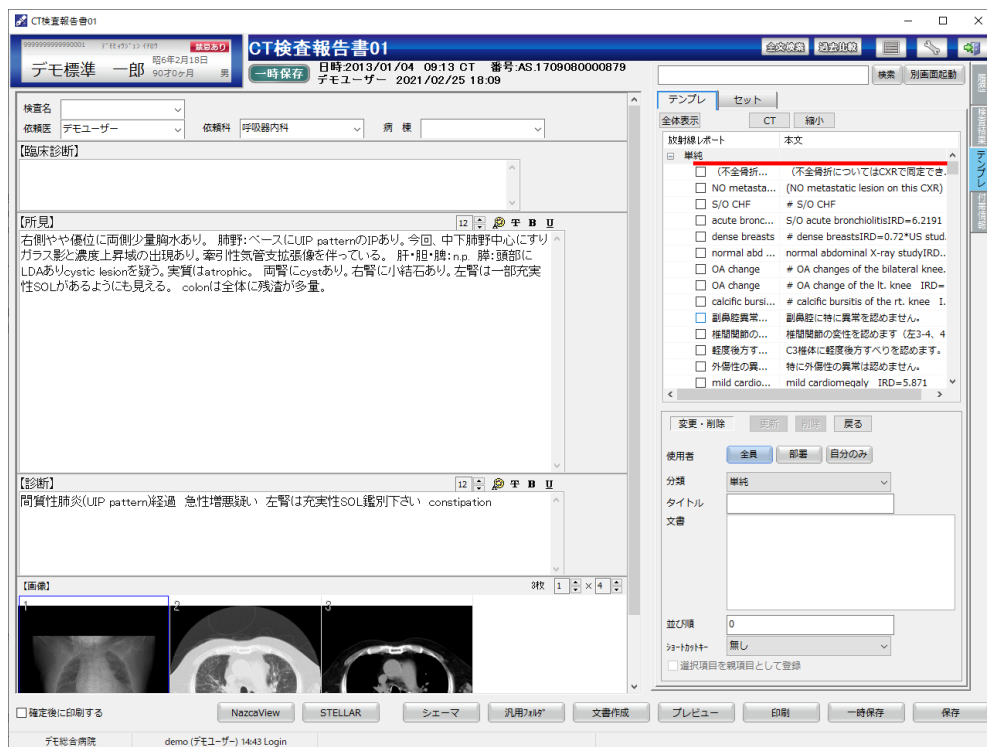

ワンポイント

文章の変更・削除の画面では、並び順変更とショートカットキー（ファンクションキー）への登録ができます。

<並び順の変更>

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) editing screen. The '並び順' (Order) field is highlighted with a red box and contains the value '140'. A callout box points to this field with the text: '# calcific bursitis of the rt. knee... の表記されている並び順は 140'.

Another callout box points to the '更新' (Update) button with the text: '副鼻腔に特に異常を認めません。 の表記されている並び順は 150'.

A third callout box points to the '並び順' field with the text: '例として、並び順に「145」を入力'.

並び順の数値を入力後[更新]ボタンをクリックすると、並び替えが行われます。

The screenshot shows the same 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) editing screen, but now the '並び順' (Order) field is highlighted with a red box and contains the value '145'. The '更新' (Update) button is also highlighted with a red box.

＜ショートカットキー割り当て＞

ショートカットキーを割り当てるには、プルダウンから F1～F12 を選択し、[更新]ボタンをクリックします。例ではショートカットキーに F3 を割り当てています。


The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) window. On the right side, there is a 'テンプレート' (Template) section with a '更新' (Update) button highlighted by a red box and a callout: '②[更新]ボタンをクリック' (Click the [Update] button). Below this, there is a 'ショートカットキー' (Shortcut Key) dropdown menu with 'F3' selected, highlighted by a red box and a callout: '①ショートカットキーに[F3]を割り当てる' (Assign [F3] to the shortcut key).

[戻る]ボタンで元の画面に戻ると、[F3]キーに割り当てられていることが確認できます。

The screenshot shows the same 'CT検査報告書01' window. At the bottom right, there is a grid of shortcut keys. The 'F3' key is highlighted by a red box and a callout: '[F3]キーに割り当てられる' (Assigned to the [F3] key).

③その他機能

[テンプレート]タブ中の右クリックメニューから、以下の操作が操作可能です。

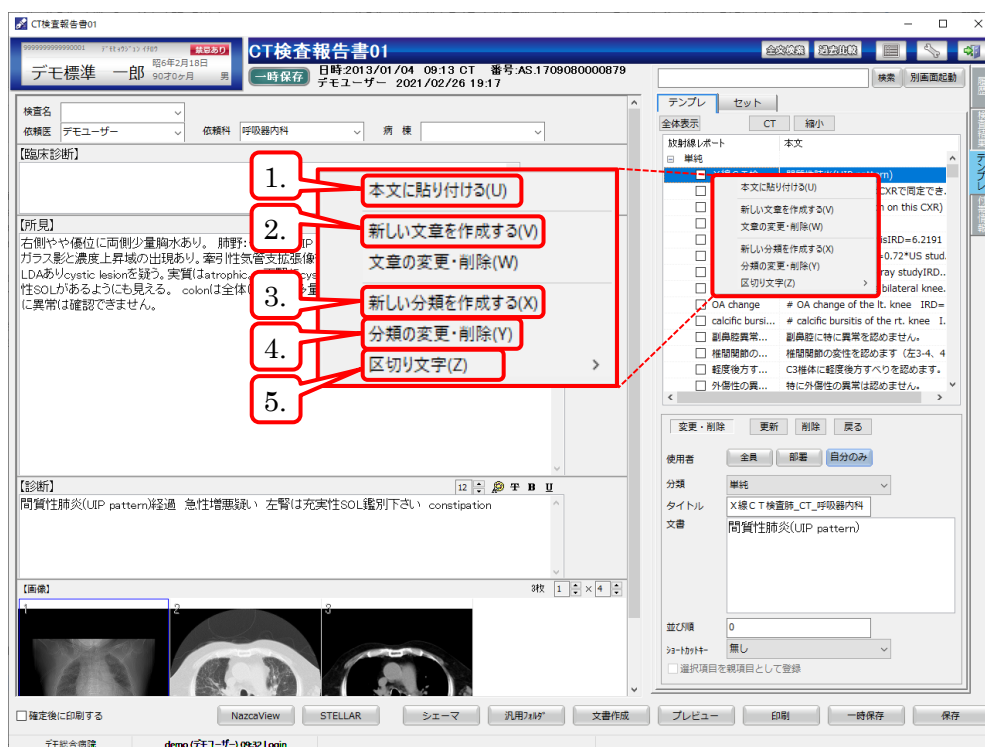

1.本文に貼り付ける：

選択したテンプレの内容をレポートに貼り付けます。チェックボックスに☑を入れると、チェックした順に貼り付けることができます。

2.新しい文章を作成する：

選択したテンプレの内容を複製し、新しい文章を登録することができます。

3.新しい分類を作成する：

新しい分類を作成します。

4.分類の変更・削除：


登録されている分類の変更・削除をします。

5.区切り文字


「1.本文に貼り付ける」で複数選択した際に挿入する区切り文字を選択します。

[、]全角カンマ・[]全角スペース・[,]半角カンマ・[]半角スペース・[]改行・何も設定しない

タイトル入力（任意）後、[登録]ボタンをクリックすると、ダイアログで「登録しました[OK]」と表示されるので[OK]ボタンをクリックします。

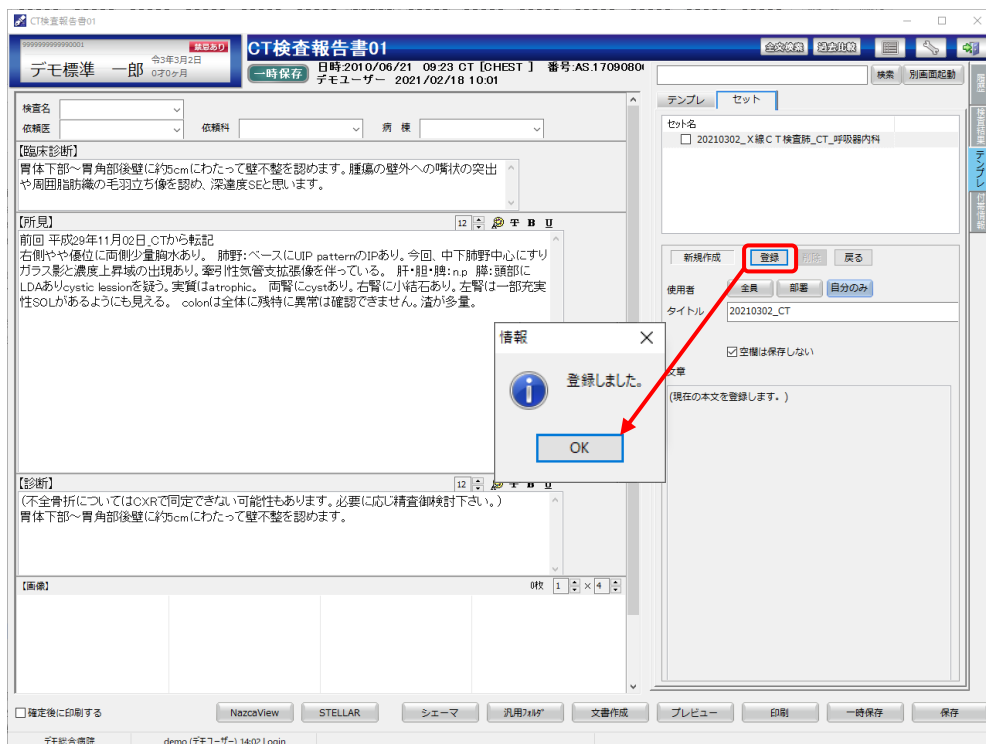


テンプレートセットとして登録されていることを確認します。

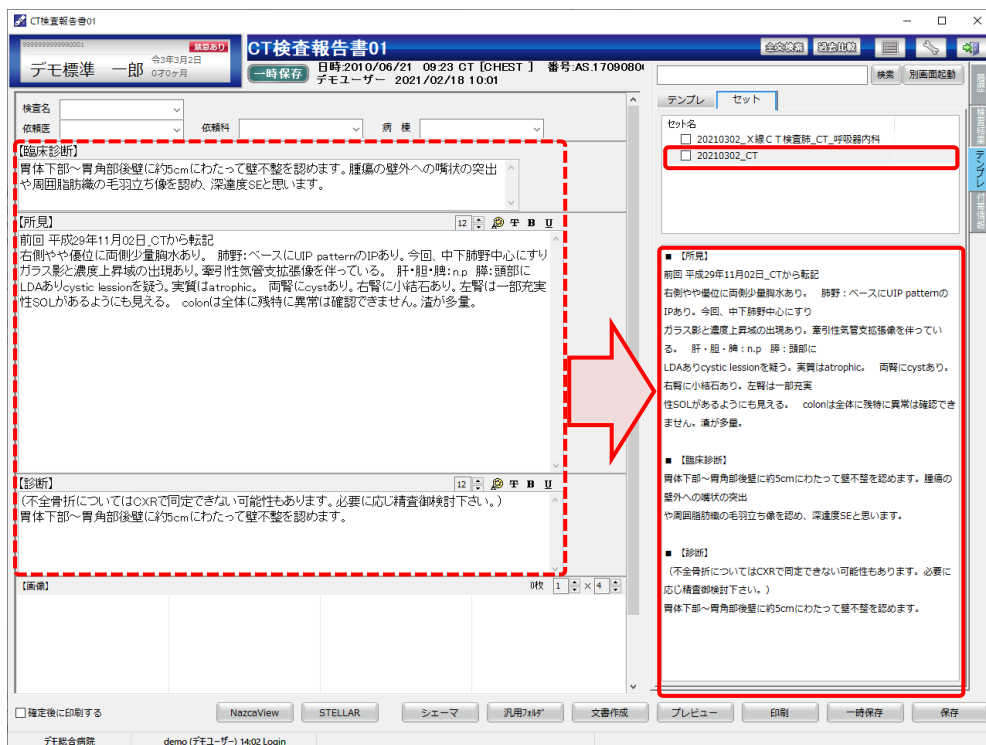


②テンプレートセット変更・削除


テンプレートセット変更・削除する場合は、[セット]タブ内で右クリックメニューの「セットの変更・削除」を選択します。

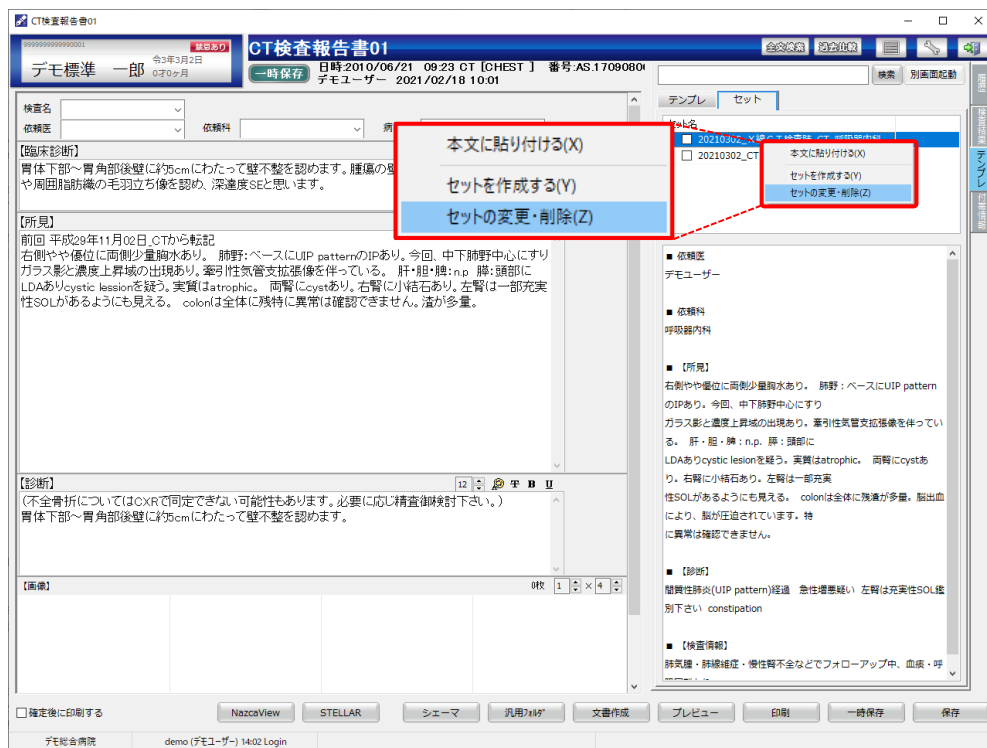

変更・削除の画面が表示されます。使用者・タイトル・並び順はこの画面上で変更できます。文章を変更する場合は[変更フォーム]ボタンをクリックします。

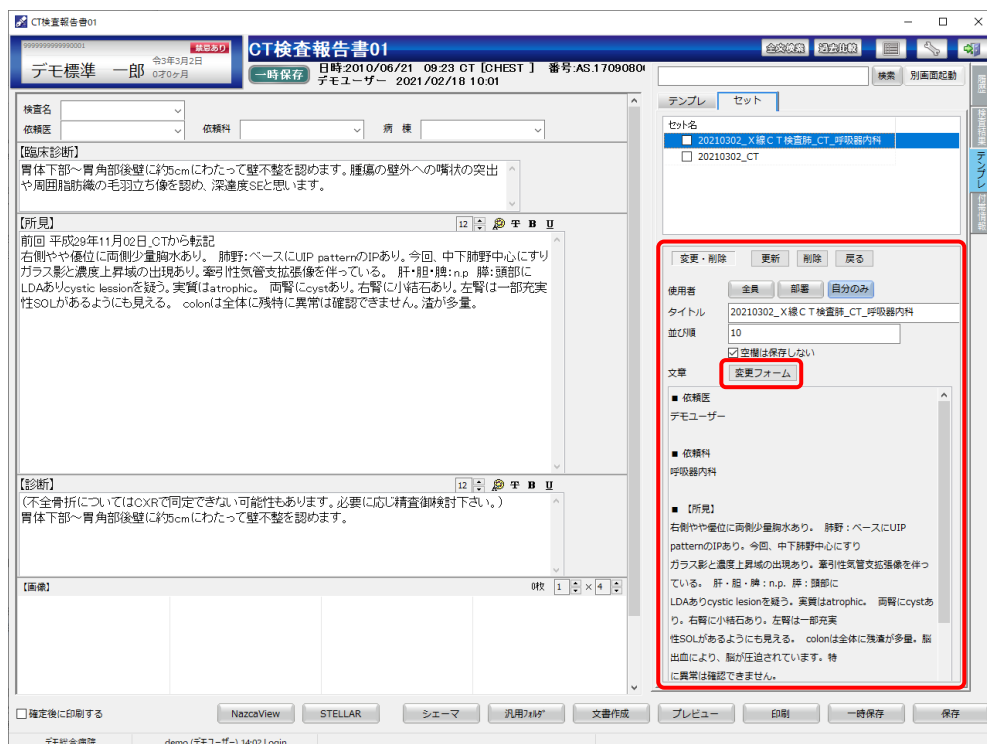


編集可能な領域の背景色が変わります。[クリア]ボタンをクリックすると入力内容を消去します。[閉じる]ボタンをクリックすると変更せずに元の画面へ戻ります。

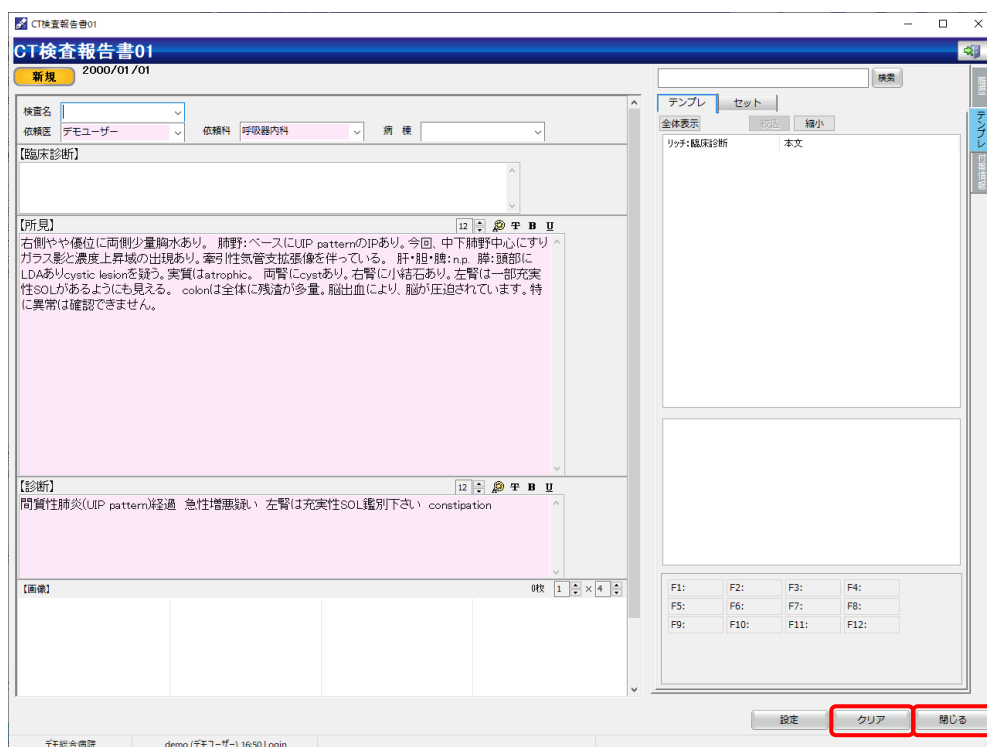


変更後は[設定]ボタンをクリックします。(この画面が自動で閉じます。)

※この時点ではまだ更新がされていません。ご注意ください。

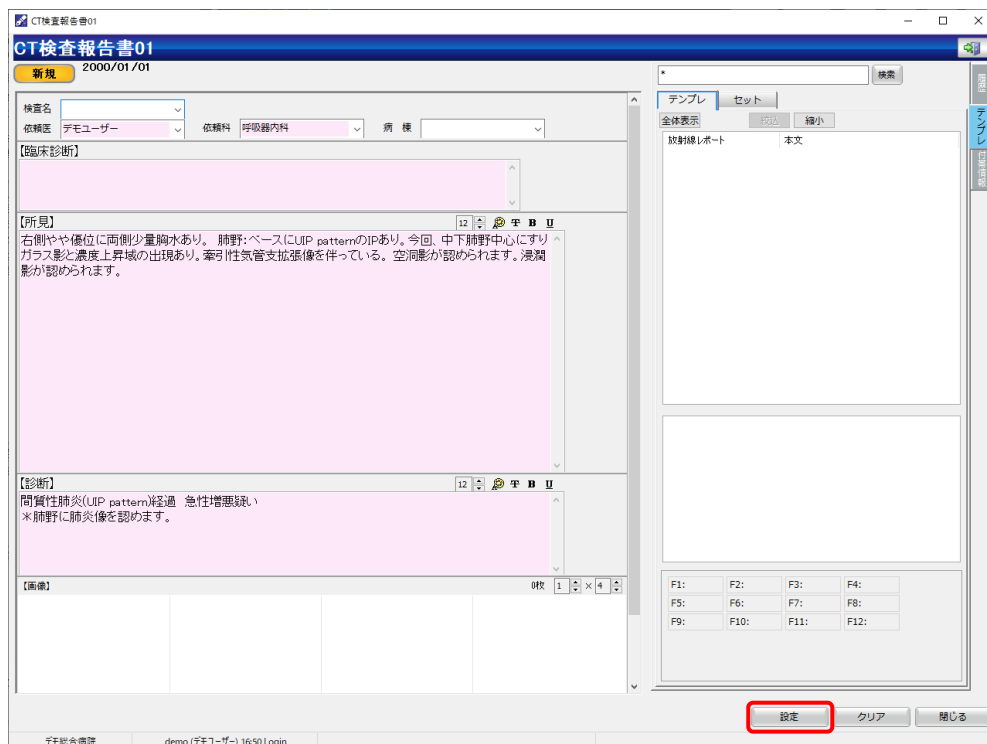


[更新]ボタンをクリックすることで変更が反映します。

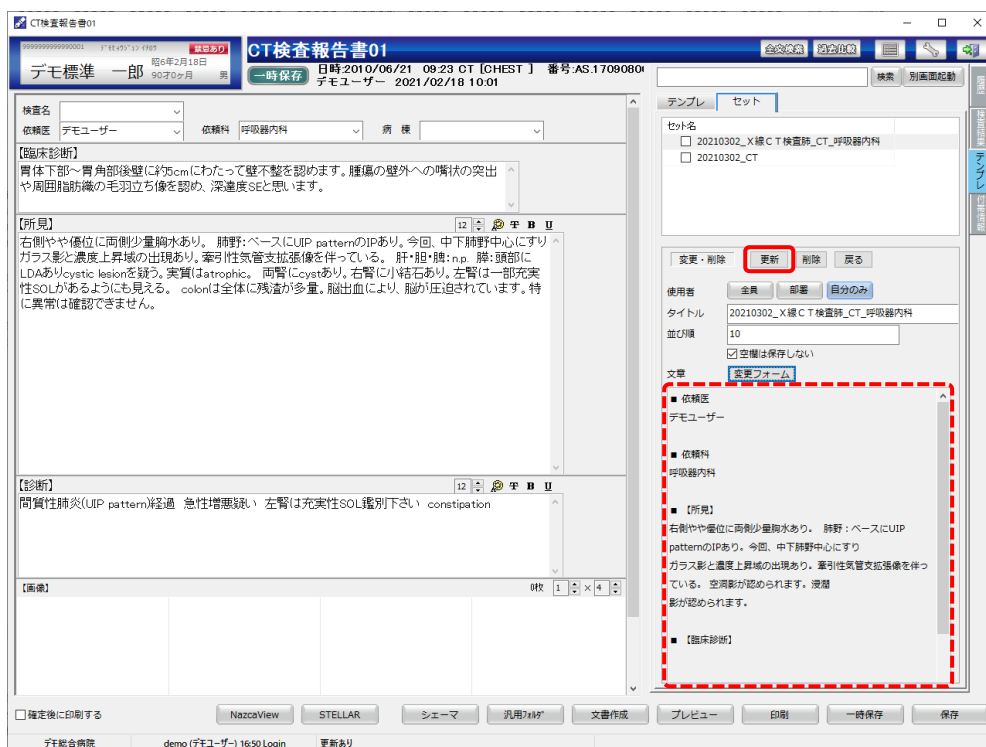

The screenshot shows a web-based form for a CT examination report. The form is titled "CT検査報告書01" and includes fields for patient name, date, and time. The "Update" button is highlighted with a red box. The form also contains sections for "Clinical Findings", "Observations", "Diagnosis", and "Images".



ダイアログで「更新しました[OK]」と表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

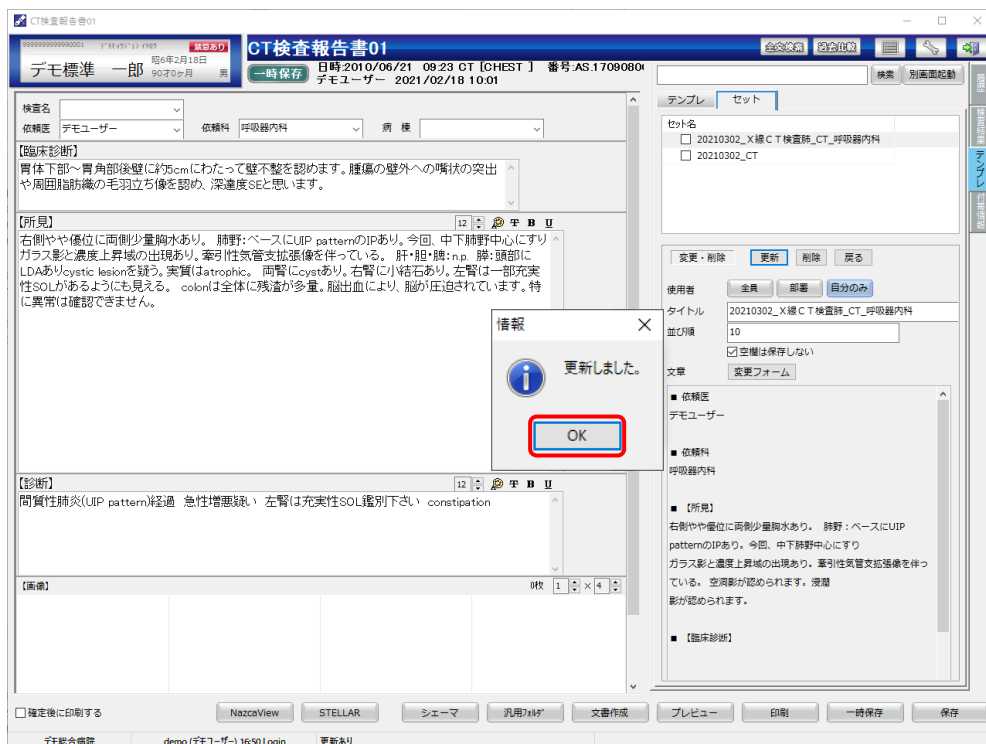

This screenshot shows the same form as the previous one, but with a confirmation dialog box open. The dialog box contains the text "更新しました。" (Updated) and an "OK" button, which is highlighted with a red box. The background form is dimmed.

③その他機能

[セット]内の右クリックメニューから、「本文に貼り付ける」をクリックすると、選択中のテンプレートセットの内容をレポートに上書きします。

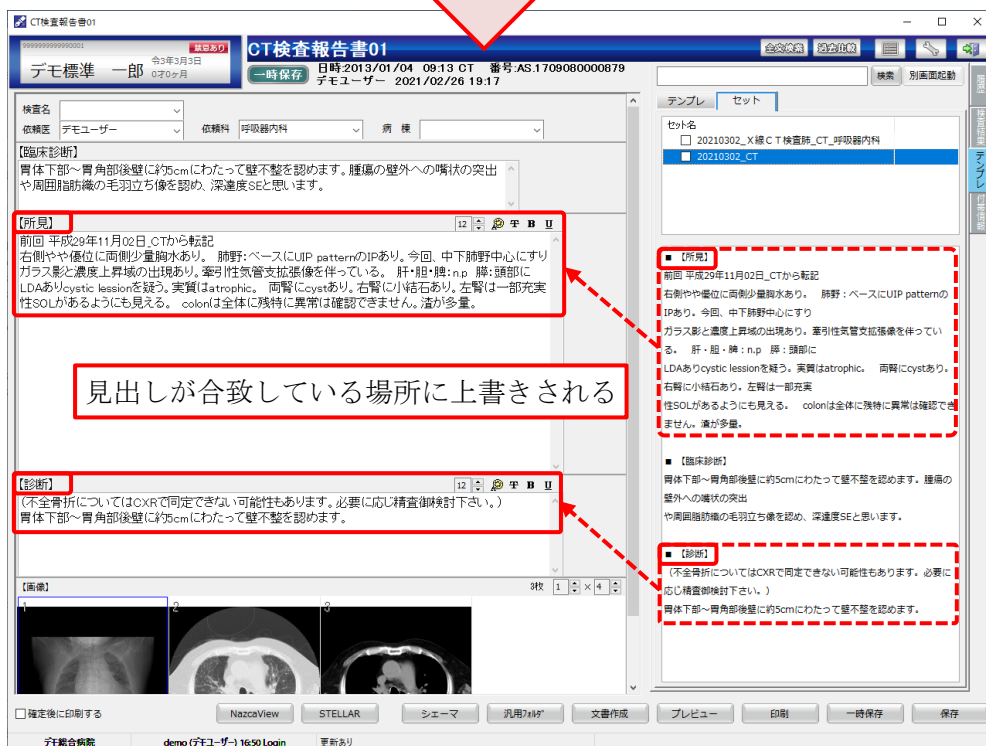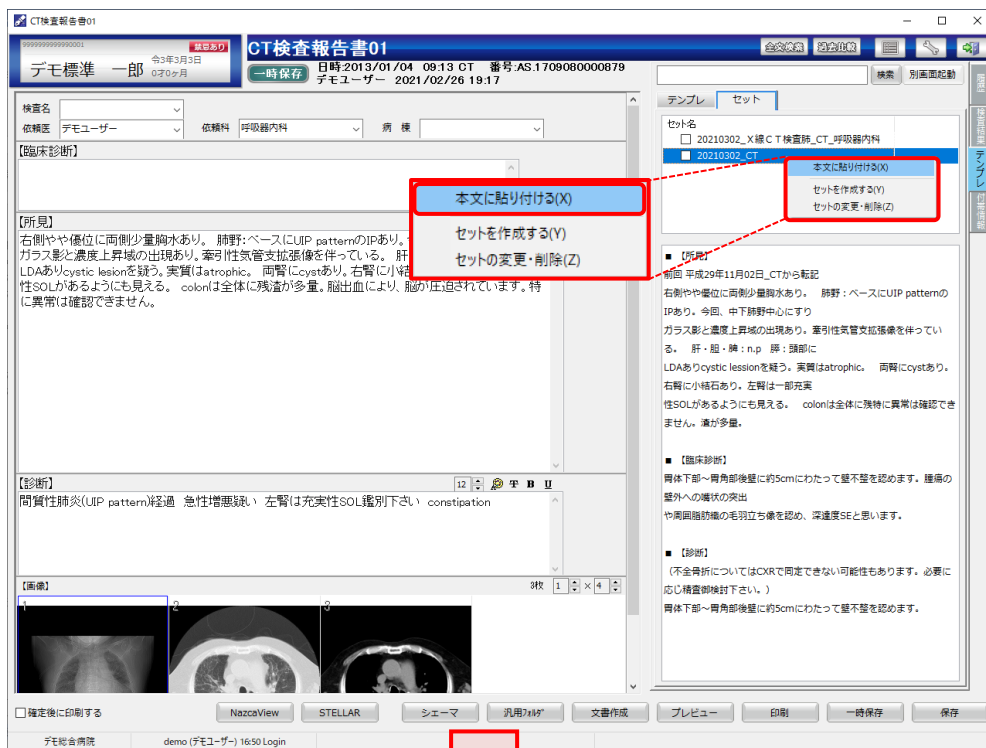

チェックボックスに☑を入れると、レポート新規起動時にセット内容が初期値として入ります。

CT検査報告書01

CT検査報告書01

デモ標準 一郎 2021/03/03 一時保存 日時2013/01/04 09:13 CT 番号:AS1709080000879

デモユーザー 2021/02/26 19:17

セット名

☑ 20210302_X線CT検査肺_CT_呼吸器内科

☑を入れる

次回以降のレポート新規作成時に自動入力される

CT検査報告書01

CT検査報告書01

デモ標準 一郎 2021/03/03 新規

デモユーザー 2021/03/03

セット名

☑ 20210302_X線CT検査肺_CT_呼吸器内科

☐ 20210302_CT

【所見】

右側やや低位に両側少量胸水あり。肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。空洞影が認められます。浸潤影が認められます。

【診断】


間質性肺炎(UIP pattern)経過 急性増悪疑い

*肺野に肺炎像を認めます。


3.3.3 [検索]ボタン・[別画面起動]ボタン

[テンプレート]および[セット]に登録済みの文字を検索します。

例として[テンプレート]内で「出血」の文字を検索します。

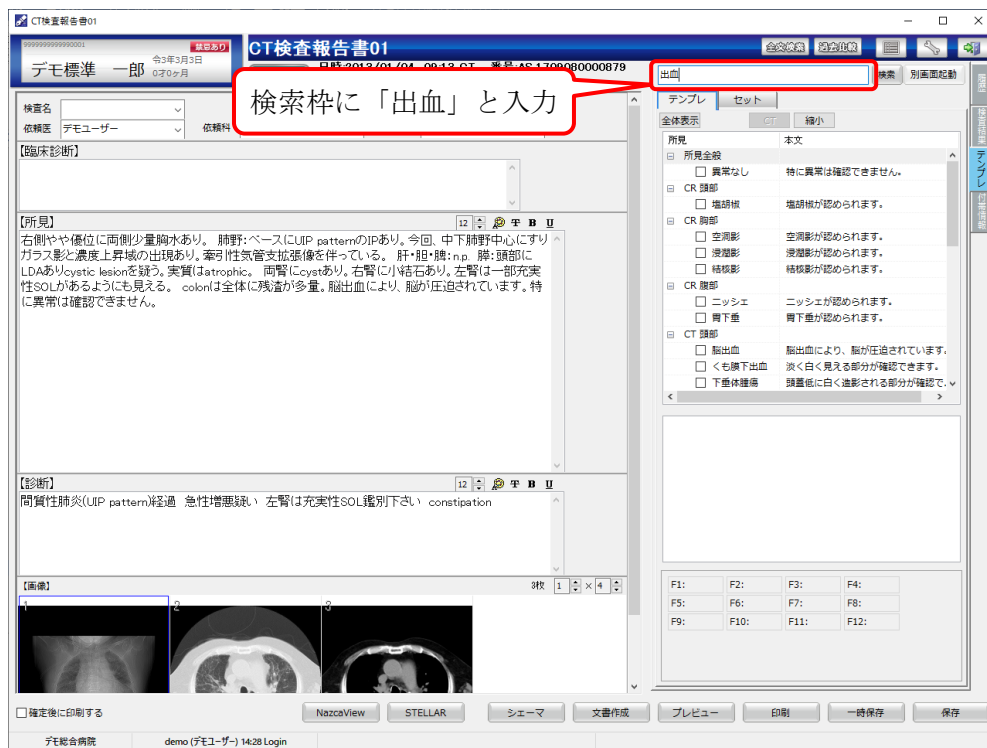


[検索]ボタンをクリックすると「出血」に該当したテンプレートの内容が表示されます。

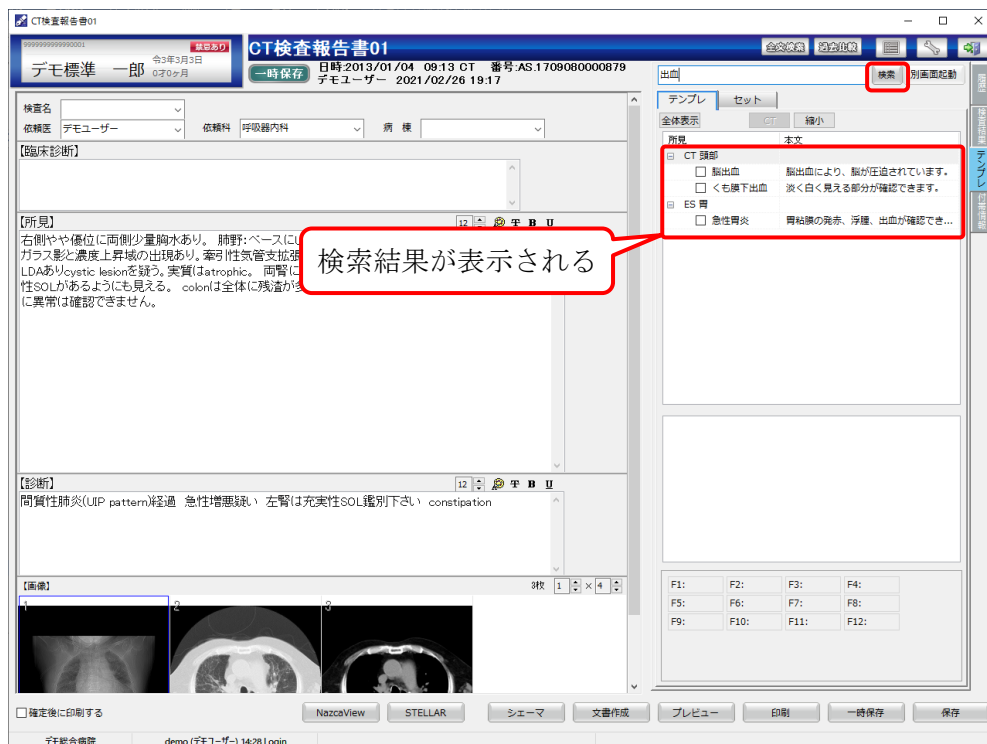


[セット]で行う場合も同様です。

例として、[セット]の中で「肺炎」の文字を検索します。


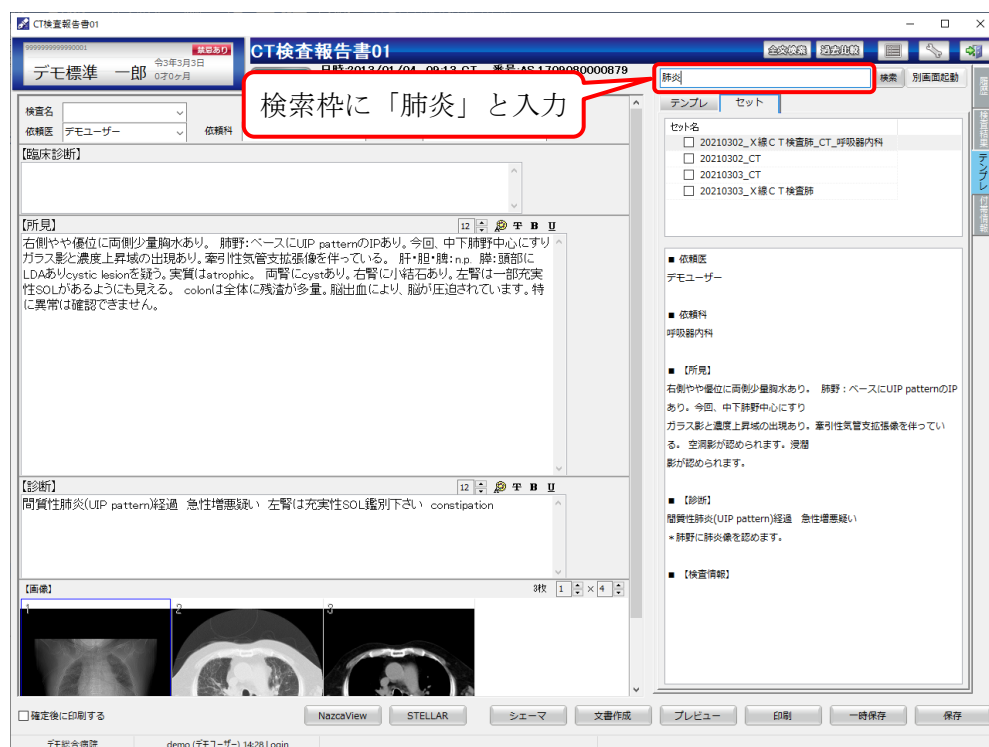


[検索]ボタンをクリックすると「肺炎」に該当したセットの内容が表示されます。

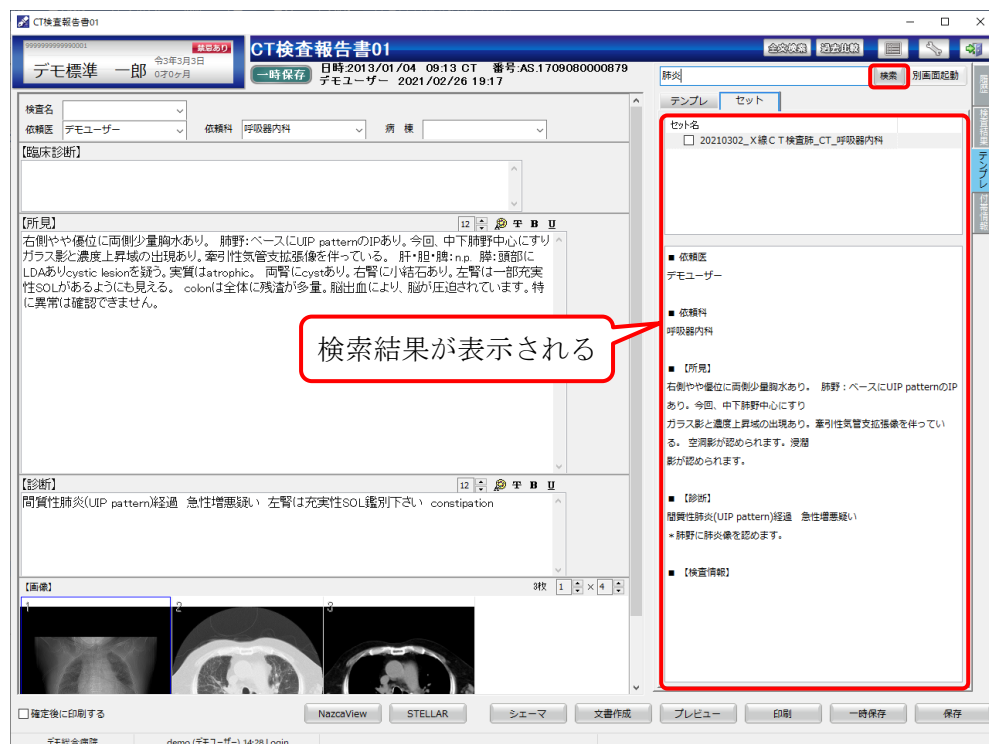

[別画面起動]ボタン

[別画面起動]ボタンをクリックすると、[テンプレート]タブを別の画面として起動します

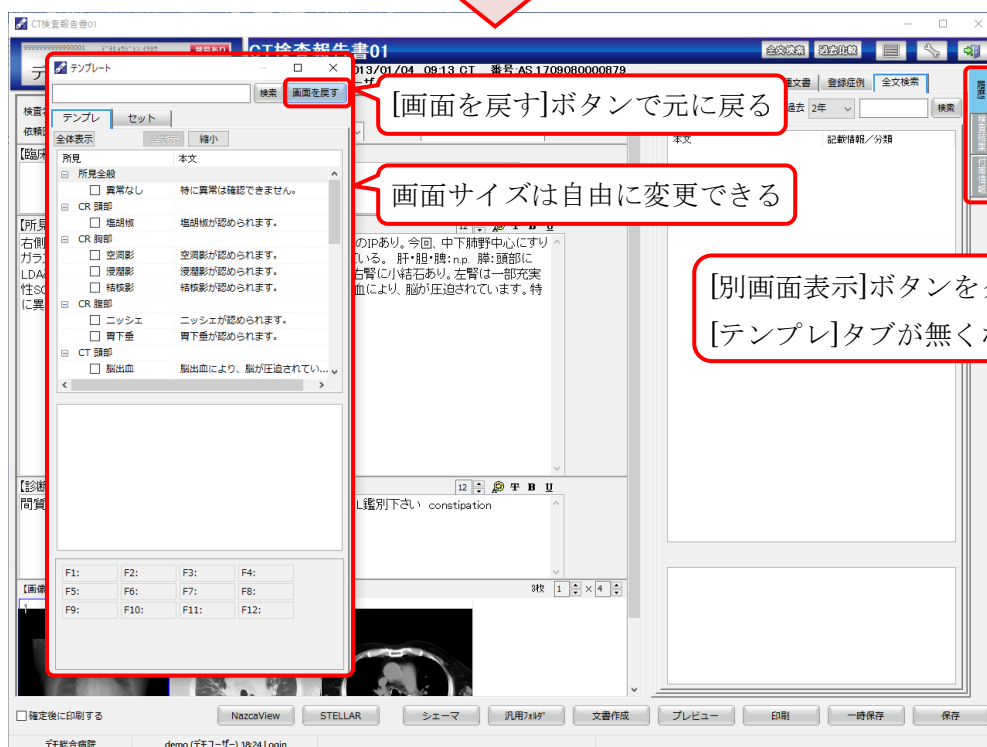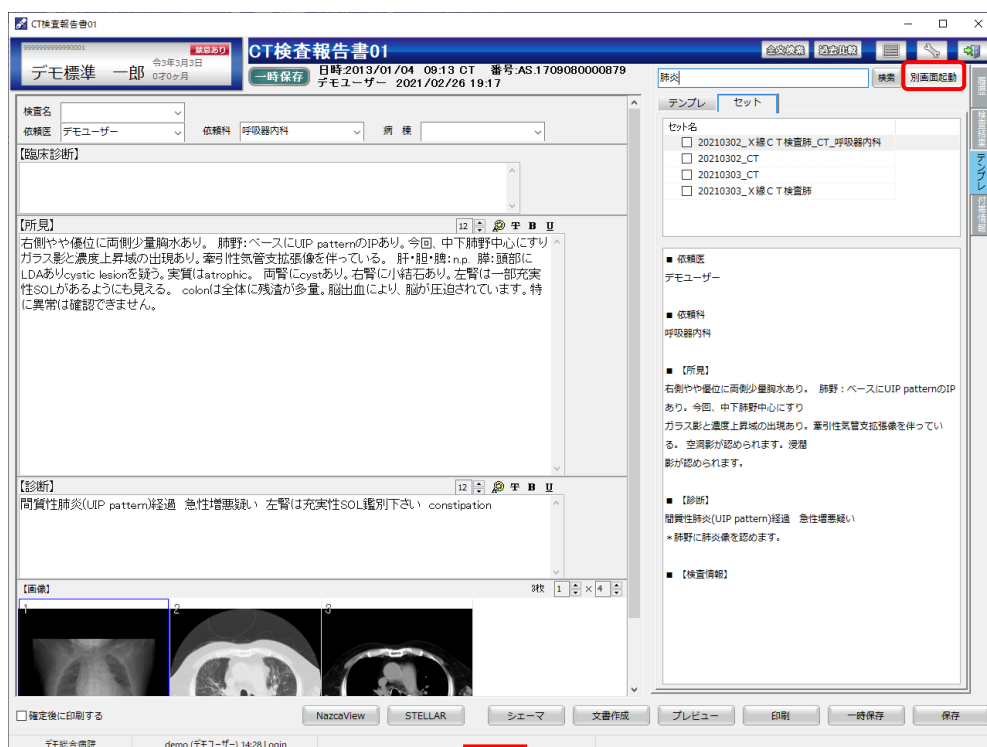

3.4 付帯情報

付帯情報では、開封確認・文章・キーワード等の登録を行います。

※レポート内容により表示されないものがあります。

3.4.1 開封確認

開封確認の指定を行います。

開封確認

確認先 ※医師選択 ※医師選択

※医師選択 ※医師選択

開封確認先を求める医師を指定
左：主治医 右：依頼医

文章
タイトル CT検査報告書
コメント

キーワード
重要度
学会発表 ｶﾌﾌﾙｽ使用

患者コメント

コメント

指定医 検索 更新

利用者検索ダイアログが表示されます。

利用者検索

検索: デモ総合病院

名前	ふりがな	部門	ユーザID	利用者権限	役割	業務区分	内
MSWユーザ		情報・経営	msw	施設管理者			
QRテスト			qr	Astro管理者			
test123456			123456	Astro管理者			
サーバー			Server	Astro管理者			
test1			test1	医師(管理者)			
デモユーザ		内科	demo	Astro管理者			
デモユーザ		内科	demotest	Astro管理者			
デモユーザ		内科	old	Astro管理者			
デモ医師		内科	demo1	医師		医師	
デモ放射線技師			eliya	放射線技師		放射線技師	
デモ看護士			demo2	Astro管理者		医師	
デモ技師			demo3	技師系		医師	
デモ内部検査技師			demonalbu	Astro管理者		医師	
デモ放射線技師			hogi	技師系		診療放射線技師	
デモ薬剤師			yak	薬剤師		薬剤師	
デモ理学療法士			rfg	技師系		理学療法士	
一次		内科	ichi	技師系		医師	
管理者			astro	Astro管理者			
管理者			astron	Astro管理者			
管理者 23		内科	astro23	Astro管理者			
規定ユーザ			DefUser	医師		医師	
代行		情報・経営	dai	事務			
二次		内科	niji	医師		医師	

適用 閉じる

検索枠に文字を入力すると、検索結果を赤文字にして抽出します。




例として、検索枠に「内科」と入力

検索枠に入力された文字を抽出

名前	ふりがな	性別	ユーザID	利用者権限	役職	業務区分	内
デモユーザ		内科	demo	Astro管理者			
デモユーザ		内科	demotest	Astro管理者			
デモユーザ		内科	old	Astro管理者			
デモ医師		内科	demo1	医師		医師	
一次		内科	ichi	技師系		医師	
増援者 2 3		内科	astro23	Astro管理者			
二次		内科	niji				
佐藤 医師	さとう いし	内科	sato	医師		医師	
循環器 医師	じはんかんき いし	循環器内科	jun				
消化器 医師	しょうかき いし	消化器内科	syo	医師		医師	
内科 医師 1	ないか いし 1	内科	nai1	医師		医師	
内科 医師 2	ないか いし 2	内科	nai2	医師		医師	
内科 医師 3	ないか いし 3	内科	nai3	医師		医師	


確認先を部門で絞り込む場合は、部門側のチェックボックスに☑を入れます。

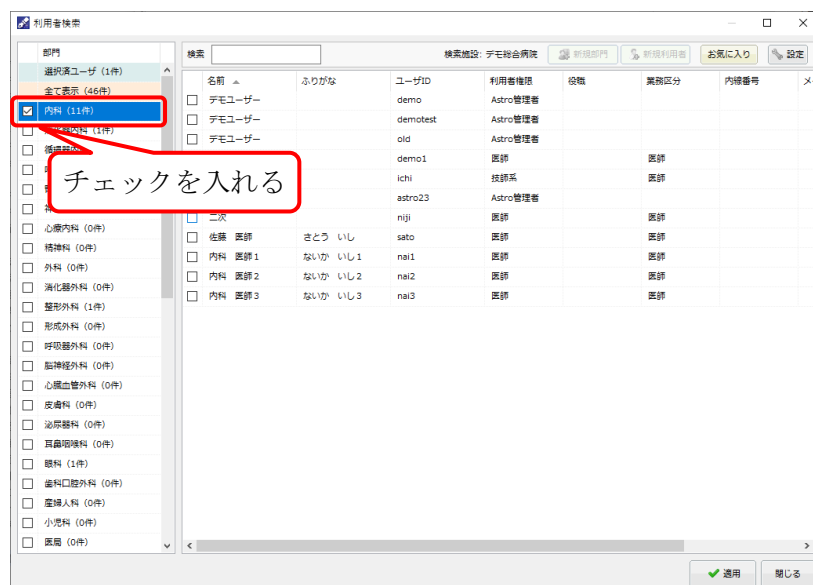

チェックを入れる


名前	ふりがな	ユーザID	利用者権限	役職	業務区分	内
デモユーザ		demo	Astro管理者			
デモユーザ		demotest	Astro管理者			
デモユーザ		old	Astro管理者			
デモ医師		demo1	医師		医師	
一次		ichi	技師系		医師	
増援者 2 3		astro23	Astro管理者			
二次		niji	医師		医師	
佐藤 医師	さとう いし	sato	医師		医師	
内科 医師 1	ないか いし 1	nai1	医師		医師	
内科 医師 2	ないか いし 2	nai2	医師		医師	
内科 医師 3	ないか いし 3	nai3	医師		医師	

ユーザ名のチェックボックスに☑を入れます。

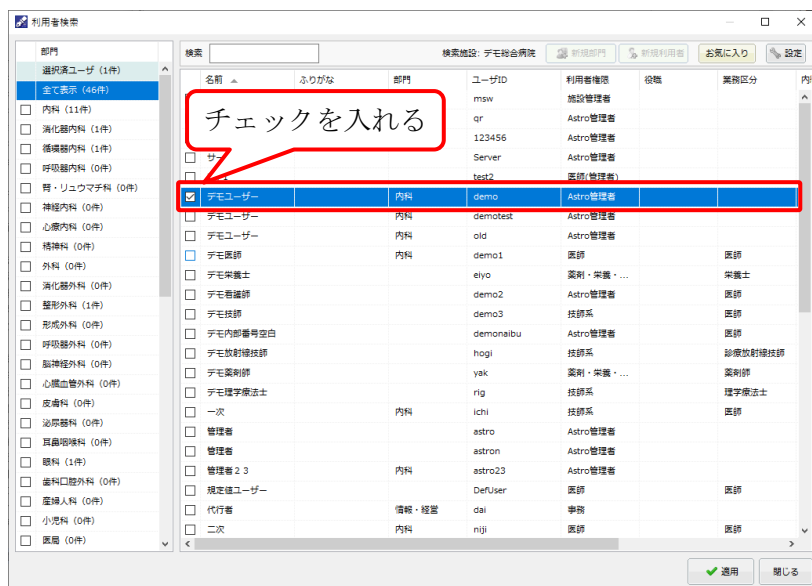

名前	ふりがな	部門	ユーザID	利用者権限	役割	業務区分	内
☐ MSWユーザー		情報・経営	msw	施設管理者			
☐ QRテスト			qr	Astro管理者			
☐ test123456			123456	Astro管理者			
☐ サーバー			Server	Astro管理者			
☐ test1			test2	医師(管理者)			
☒ デモユーザー		内科	demo	Astro管理者			
☐ デモユーザー		内科	demotest	Astro管理者			
☐ デモユーザー		内科	old	Astro管理者			
☐ デモ医師		内科	demo1	医師			医師
☐ デモ栄養士			elyo	薬剤・栄養・...			栄養士
☐ デモ看護婦			demo2	Astro管理者			医師
☐ デモ技師			demo3	技師系			医師
☐ デモ内部看護空白			demonalbu	Astro管理者			医師
☐ デモ放射線技師			hagi	技師系			診療放射線技師
☐ デモ薬剤師			yak	薬剤・栄養・...			薬剤師
☐ デモ理学療法士			rig	技師系			理学療法士
☐ 一次		内科	ichi	技師系			医師
☐ 管理者			astro	Astro管理者			
☐ 管理者			astron	Astro管理者			
☐ 管理者 2 3		内科	astro23	Astro管理者			
☐ 規定値ユーザー			DefUser	医師			医師
☐ 代行者		情報・経営	dai	事務			
☐ 二次		内科	niji	医師			医師


複数ユーザにチェックを入れることもできます。

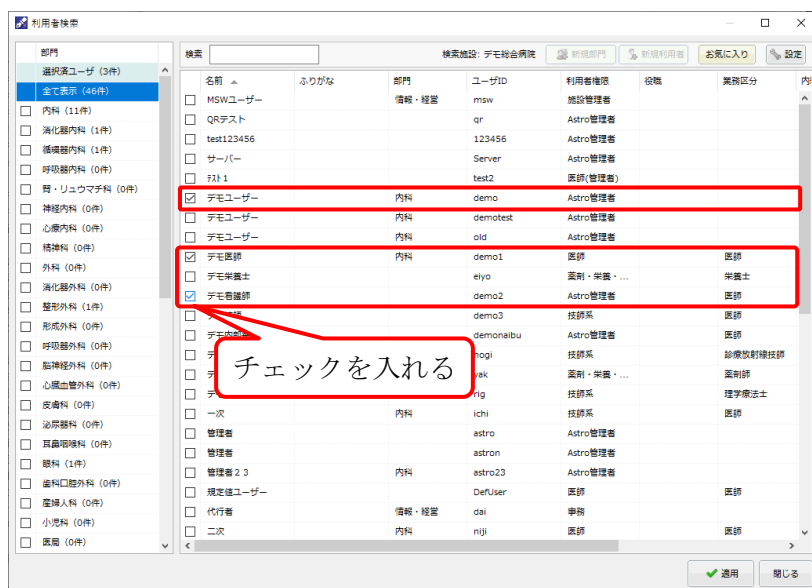


名前	ふりがな	部門	ユーザID	利用者権限	役割	業務区分	内
☐ MSWユーザー		情報・経営	msw	施設管理者			
☐ QRテスト			qr	Astro管理者			
☐ test123456			123456	Astro管理者			
☐ サーバー			Server	Astro管理者			
☐ test1			test2	医師(管理者)			
☒ デモユーザー		内科	demo	Astro管理者			
☐ デモユーザー		内科	demotest	Astro管理者			
☐ デモユーザー		内科	old	Astro管理者			
☒ デモ医師		内科	demo1	医師			医師
☐ デモ栄養士			elyo	薬剤・栄養・...			栄養士
☒ デモ看護婦			demo2	Astro管理者			医師
☐ デモ技師			demo3	技師系			医師
☐ デモ内部看護空白			demonalbu	Astro管理者			医師
☐ デモ放射線技師			hagi	技師系			診療放射線技師
☐ デモ薬剤師			yak	薬剤・栄養・...			薬剤師
☐ デモ理学療法士			rig	技師系			理学療法士
☐ 一次		内科	ichi	技師系			医師
☐ 管理者			astro	Astro管理者			
☐ 管理者			astron	Astro管理者			
☐ 管理者 2 3		内科	astro23	Astro管理者			
☐ 規定値ユーザー			DefUser	医師			医師
☐ 代行者		情報・経営	dai	事務			
☐ 二次		内科	niji	医師			医師

[適用]ボタンをクリックすると、チェックを有効にして画面を閉じます。

[閉じる]ボタンをクリックすると、何も反映せずに画面を閉じます。

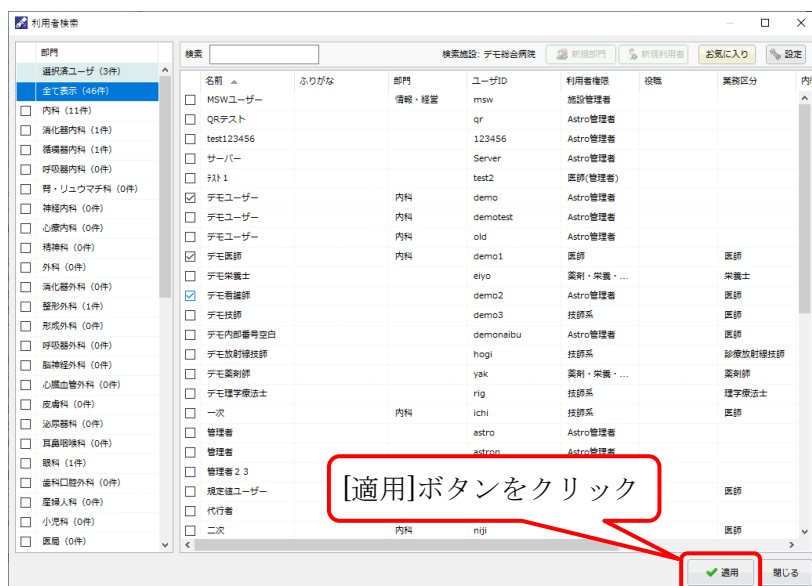


利用者検索でチェックを入れたユーザを表示します。

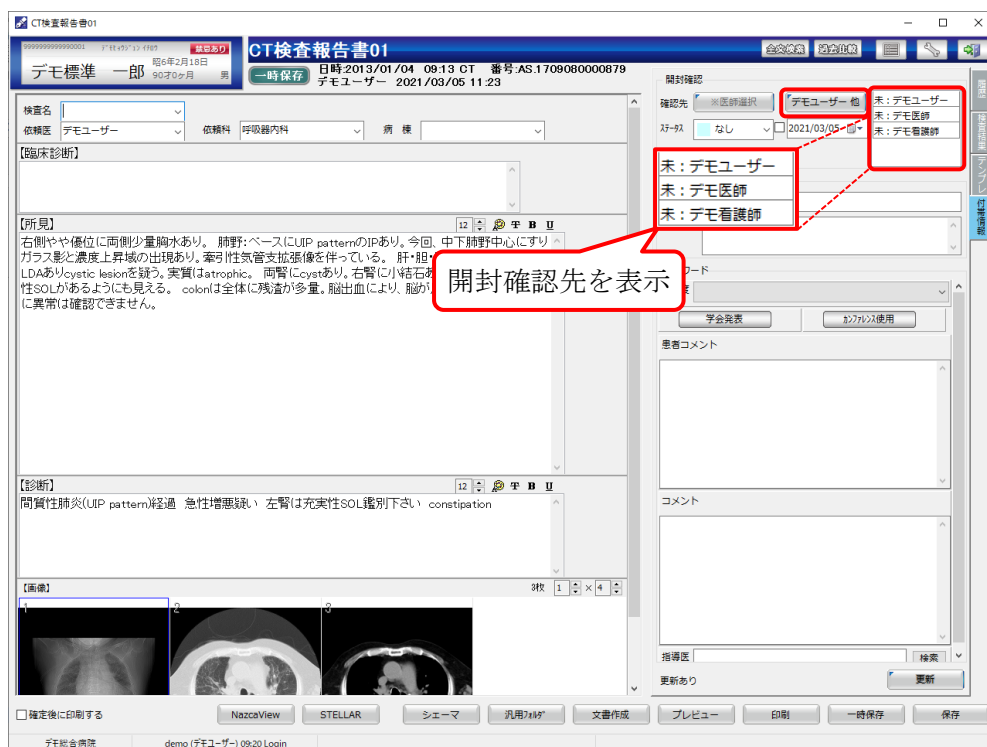


ステータスを設定します。

確認先に相手が設定されていると表示できます。

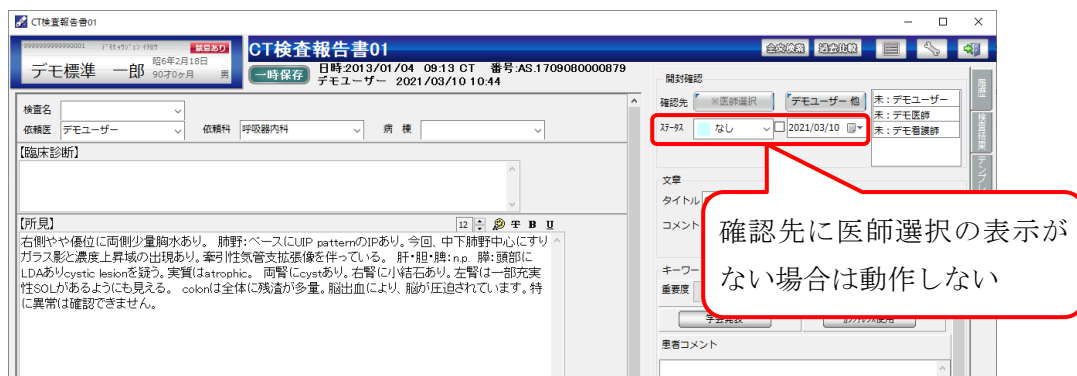


ステータス設定後、プレビュー参照画面で確認すると下図のように色分けされます。

色分けされたレポートの上にマウスマウスカーソルを当てるとバブル表示で「開封依頼・ステータス・期限」が表示されます。レポートを開くと開封済みとされ、色分けが解除されます。

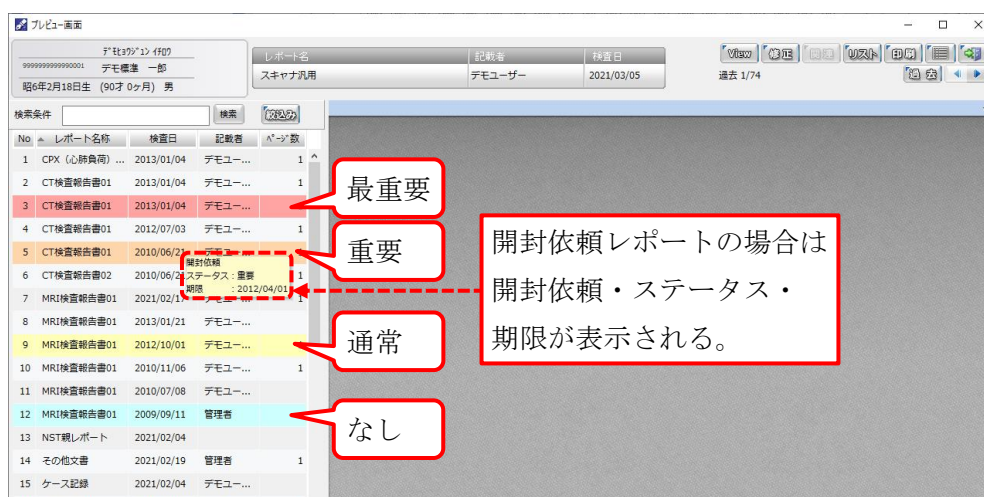

[更新]ボタンをクリックすると開封確認を登録することができます。

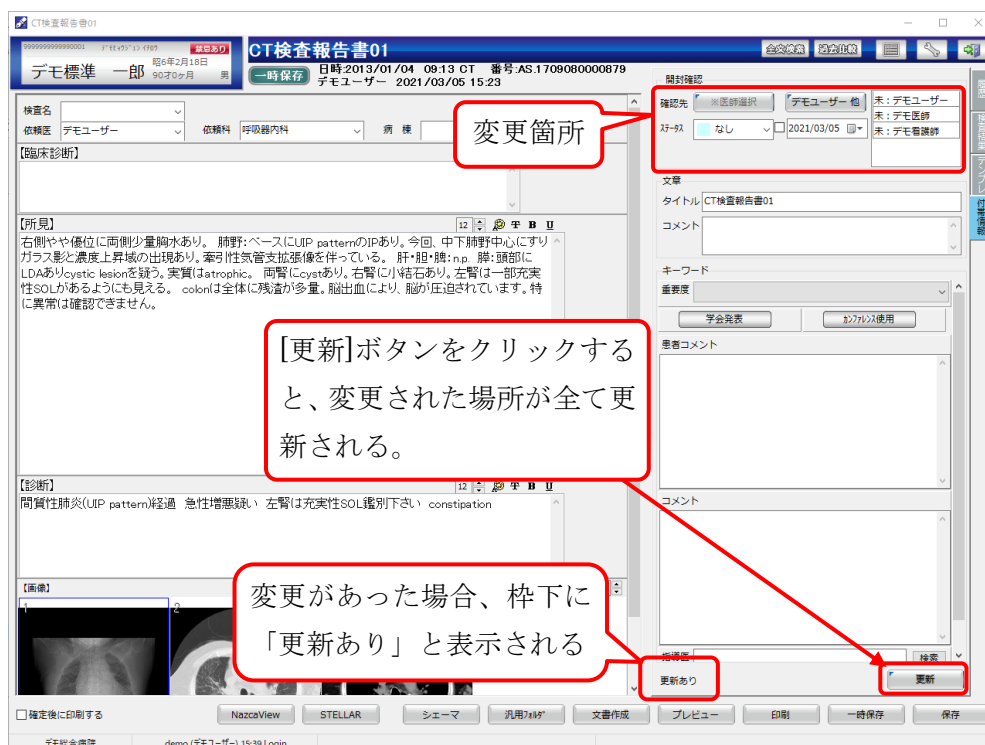

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) interface. It includes fields for patient information, examination details, and a list of findings. Red callout boxes highlight the following features:

- 変更箇所 (Change Location):** A red box points to the '変更箇所' (Change Location) field, indicating where changes can be made.
- [更新]ボタン (Update Button):** A red box points to the '[更新]' (Update) button, stating: '[更新]ボタンをクリックすると、変更された場所が全て更新される。' (Clicking the [Update] button updates all changed locations).
- 更新あり (Update Available):** A red box points to the '更新あり' (Update Available) status, stating: '変更があった場合、枠下に「更新あり」と表示される' (When there is a change, 'Update Available' is displayed below the frame).

※開封確認を行うレポートのステータスは設定で変更が可能です。

(詳細は弊社担当にお問い合わせ下さい)

対象レポートを起動すると開封依頼ダイアログが表示されます。

レポート開封確認が「未」から「済」に変更されます。


STELLAROrder の[開封確認一覧]タブの開封ステータスから確認することができます。

開封	依頼日	開封期限	レポート	患者ID	検査日	文書名称	診療部門	開封依頼医師
未開封	2017/10/30		確定	9999999	2017/02/15	MRI検査報告書01	内科	デモユーザー
未開封	2017/10/30		確定	9999999	2013/11/28	乳腺エコー検査報告書11	産婦人科	デモユーザー
未開封	2017/10/30		確定	99999999999990011	2014/07/07	乳腺エコー検査報告書11	産婦人科	デモユーザー
未開封	2020/05/14	2020/05/17	比較 花子v	99999999999990027	2018/04/02	MRI検査報告書01	消化器内科	デモユーザー
未開封	2021/04/06		確定	99999999999990001	2010/06/21	CT検査報告書02		デモユーザー
未開封	2021/04/06		確定	99999999999990001	2010/07/08	MRI検査報告書01	呼吸器内科	デモユーザー
開封済			確定	99999990012	2017/06/18		腎臓・内...	
開封済			確定	99999990001	2008/12/23		内科	
開封済			確定	99999990001	2009/09/11		脳神経外科	
開封済			確定	99999999999990001	2010/01/23		内科	
開封済			確定	99999999999990001	2010/06/21		内科	
開封済			確定	99999999999990001	2010/07/05		内科	
開封済			一時保存	99999999999990001	2010/11/06		脳神経外科	
開封済			確定	99999999999990001	2012/04/21		内科	
開封済			確定	99999999999990001	2012/07/03		内科	

3.4.2 文章

レポートのタイトル（自動挿入）とコメント（任意）を入力します。

※レポートによっては表示されない場合があります。

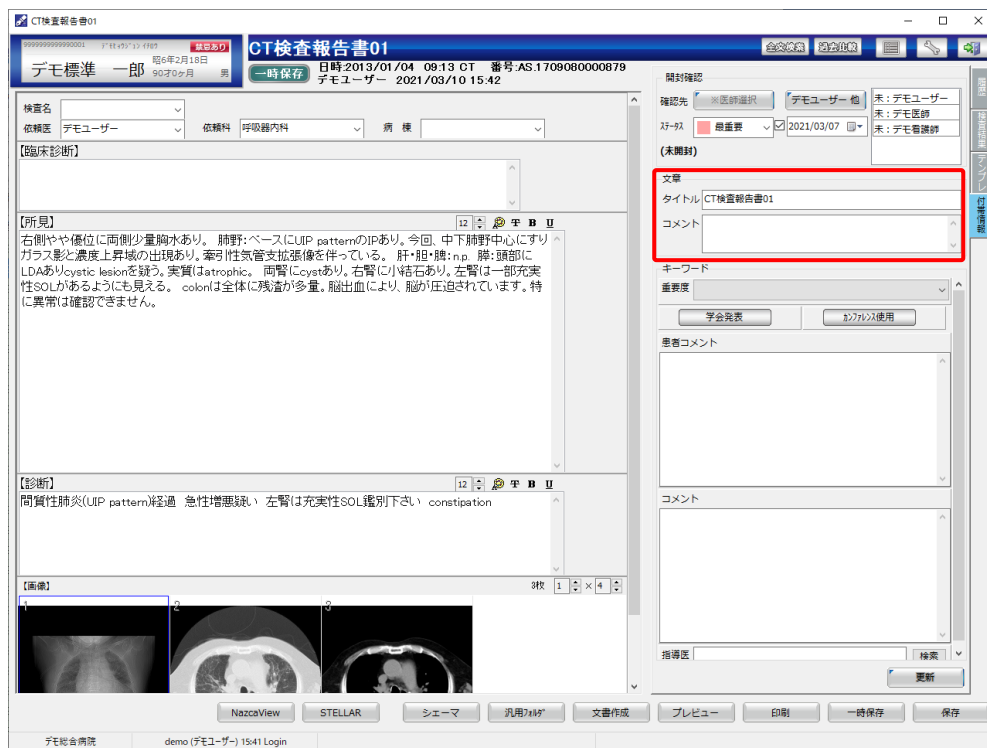

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時: 2013/01/04 09:13 CT 番号: AS.1709080000879

デモユーザー 2021/03/10 15:42

検査名: デモユーザー 依頼科: 呼吸器内科 病棟:

【臨床診断】

【所見】

右側やや低位に両側少量胸水あり。肺野: ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴っている。肝・胆・脾: n.p. 肺: 頭部にLDAありcystic lesionを認む。実質はatrophic。両腎にcystあり。右腎に小結石あり。左腎は一部充実性SOLがあるようにも見える。colonは全体に残留が多量。脳出血により、脳が圧迫されています。特に異常は確認できません。

【診断】

間質性肺炎(UIP pattern)経過 急性増悪疑い 左腎は充実性SOL鑑別下さい constipation

【画像】

1 2 3

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:41 Login

キーワード

重要度

学会発表

カンファレンス使用

患者コメント

コメント

指導医


検索

更新

3.4.3 キーワード

重要度、学会発表、カンファレンス使用などの項目を入力します。

※レポートによって表示内容が異なります。

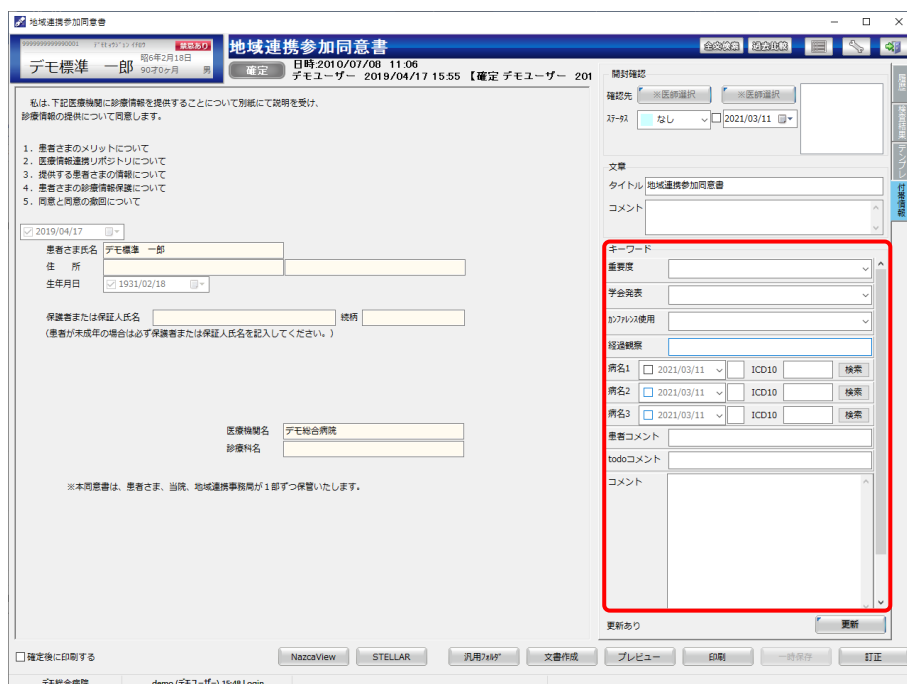

地域連携参加同意書

地域連携参加同意書

日時: 2010/07/08 11:06

デモユーザー 2019/04/17 15:55 【確定 デモユーザー 201

私は、下記医療機関に診療情報を提供することについて別紙にて説明を受け、診療情報の提供について同意します。

1. 患者さまのメリットについて
2. 医療情報連携リポソトリについて
3. 提供する患者さまの情報について
4. 患者さまの診療情報保護について
5. 同意と同意の撤回について

2019/04/17

患者さま氏名: デモ標準 一部

住 所:

生年月日: 1931/02/18

保護者または保証人氏名: 続柄:

(患者が未成年の場合は必ず保護者または保証人氏名を記入してください。)

医療機関名: デモ総合病院

診療科名:

※本同意書は、患者さま、当院、地域連携事務局が1部ずつ保管いたします。

キーワード

重要度

学会発表

カンファレンス使用

経歴観察

病名1: 2021/03/11 ICD10 検索

病名2: 2021/03/11 ICD10 検索

病名3: 2021/03/11 ICD10 検索

患者コメント

todoコメント

コメント

更新あり

更新


確定後に印刷する

NozzaView STELLAR 汎用7449 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 訂正

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:48 Login

3.5 入力画面

レポート入力画面で入力した文字を選択し右クリックすると、以下のメニューが表示されます。

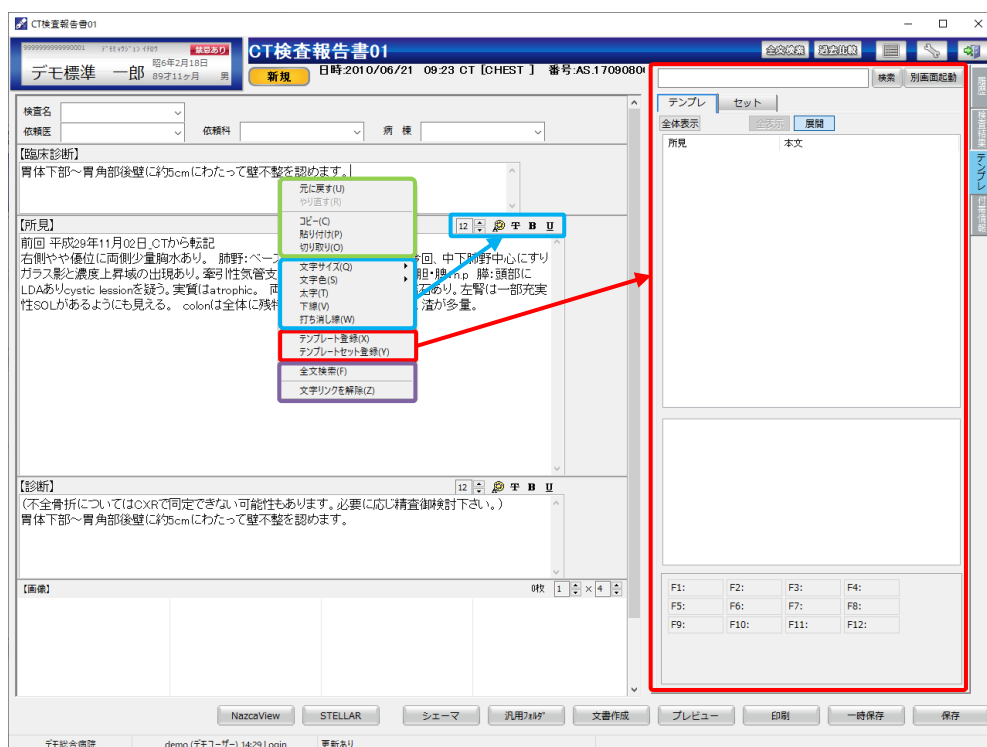

緑枠：文字操作（全てのテキスト入力可能枠で使用できます）

青枠：文字修飾（リッチエディット枠のみ使用できます）

赤枠：[テンプレート]タブを表示します。（定型文の登録）

（「3.3 項 テンプレート」を参照）

紫枠：全文検索（全てのテキスト入力可能枠で操作できます）

（「3.5.1 項 全文検索」を参照）

文字リンクを解除（リッチエディット枠のみ操作できます）


（「3.5.2 項 文字リンクを解除」を参照）

3.5.1 全文検索


全文検索は同患者・同名称のレポートから文字検索を行います。起動方法は3通りあります。

①検索アイコンから起動

検索アイコンが表示されている場合は、アイコンをクリックします。

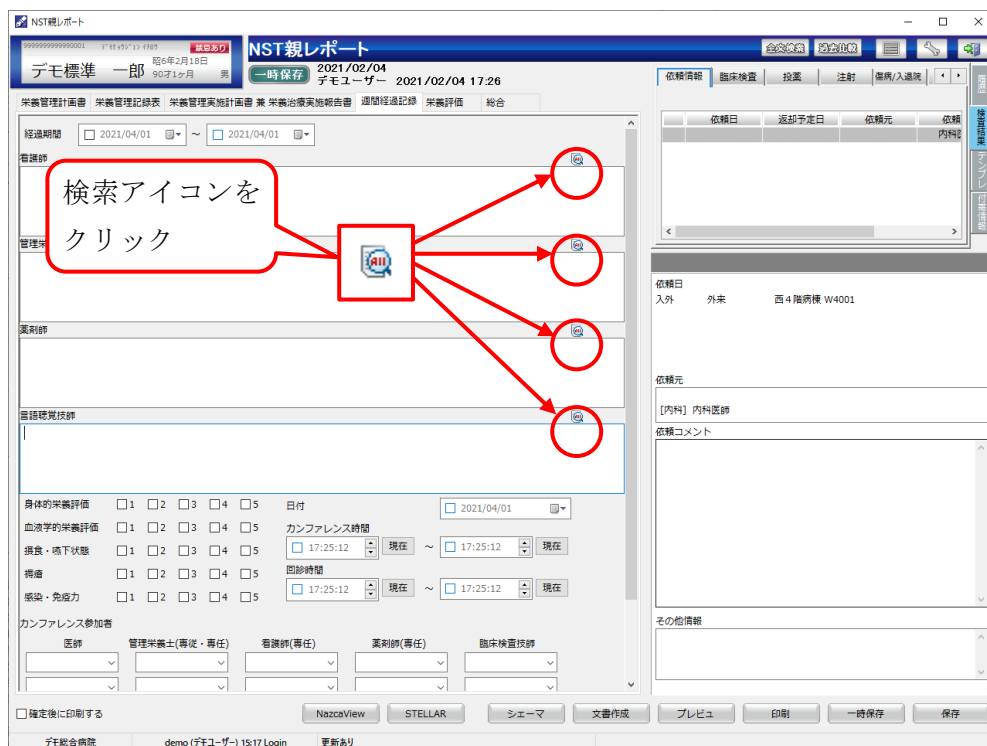


検査結果タブ中の依頼情報内に表示されている場合も同様です。

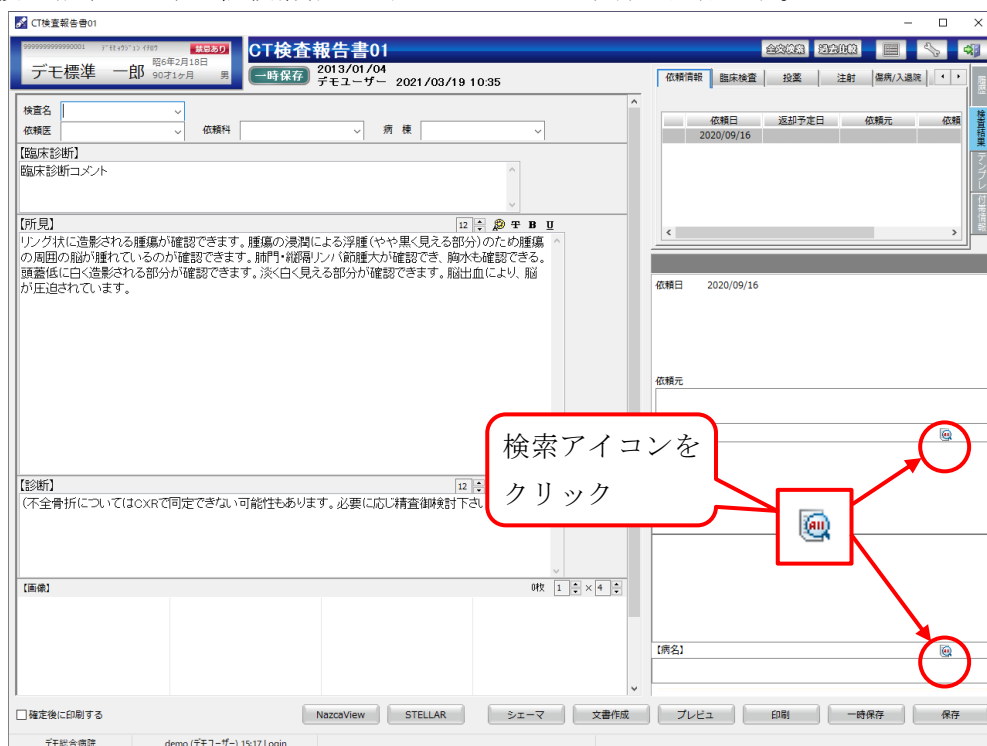

②右クリックメニューから起動

入力画面にて右クリックメニューから「全文検索」を選択します。

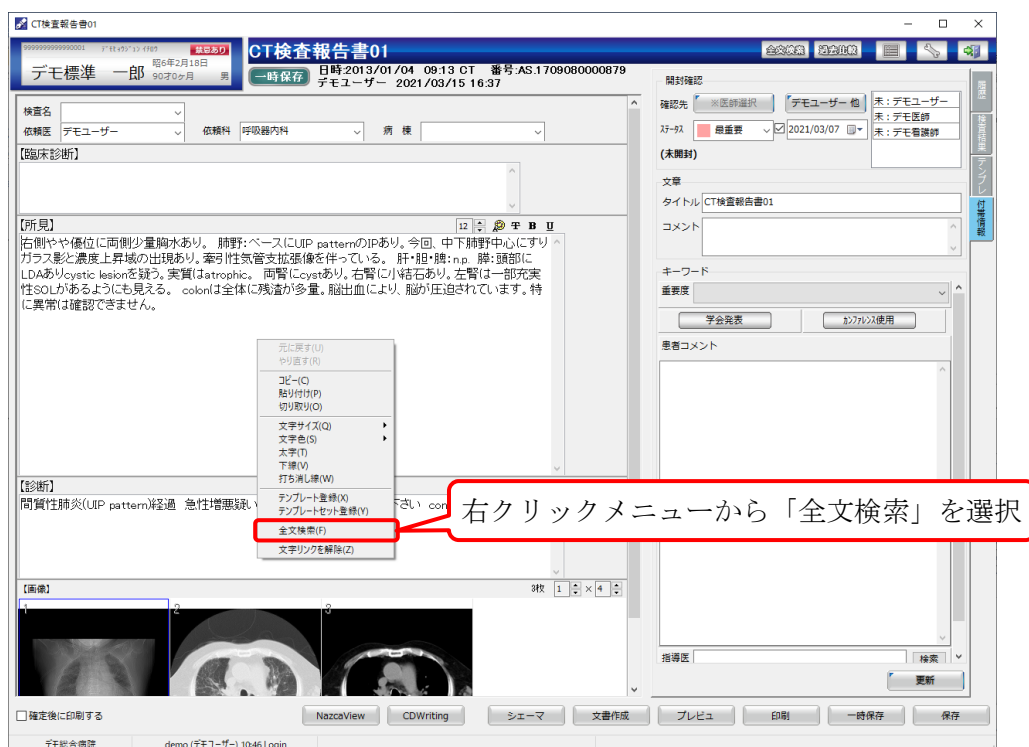


③レポート作成画面から全文検索

[全文検索]ボタンをクリックすると、同患者・同名称のレポートから文字検索を行います。



全文検索画面が表示されます。

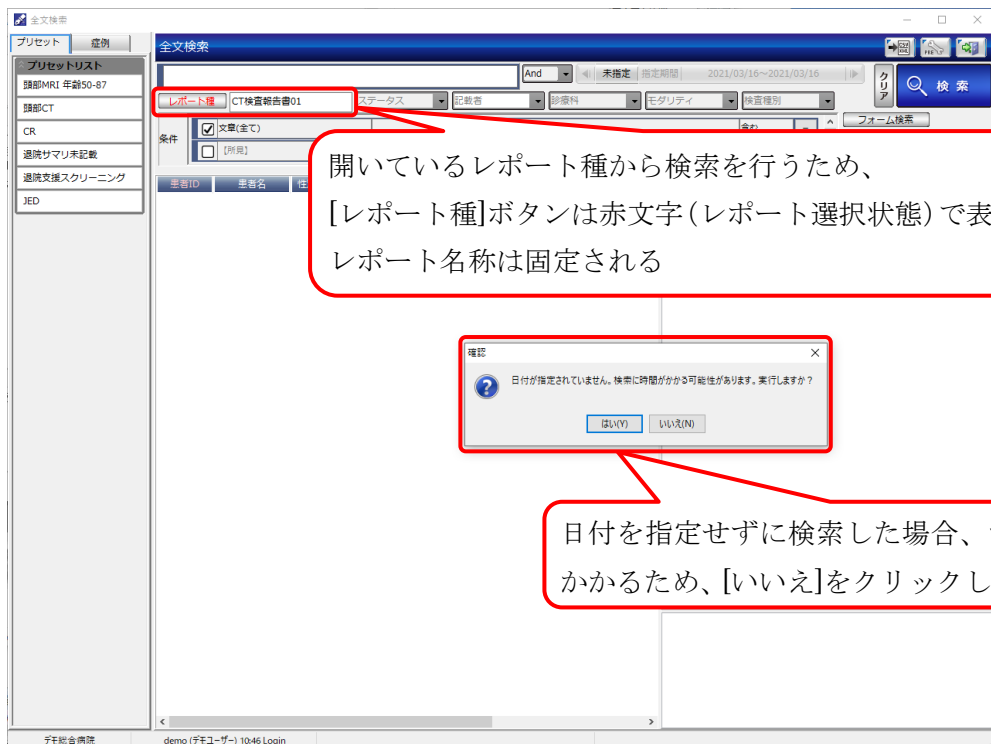


開いているレポート種から検索を行うため、
[レポート種]ボタンは赤字(レポート選択状態)で表示され、
レポート名称は固定される

確認
日付が指定されていません。検索に時間がかかる可能性があります。実行しますか？
はい(Y) いいえ(N)

日付を指定せずに検索した場合、サーバーに負荷がかかるため、[いいえ]をクリックし日付の指定を行う

日付を指定します。

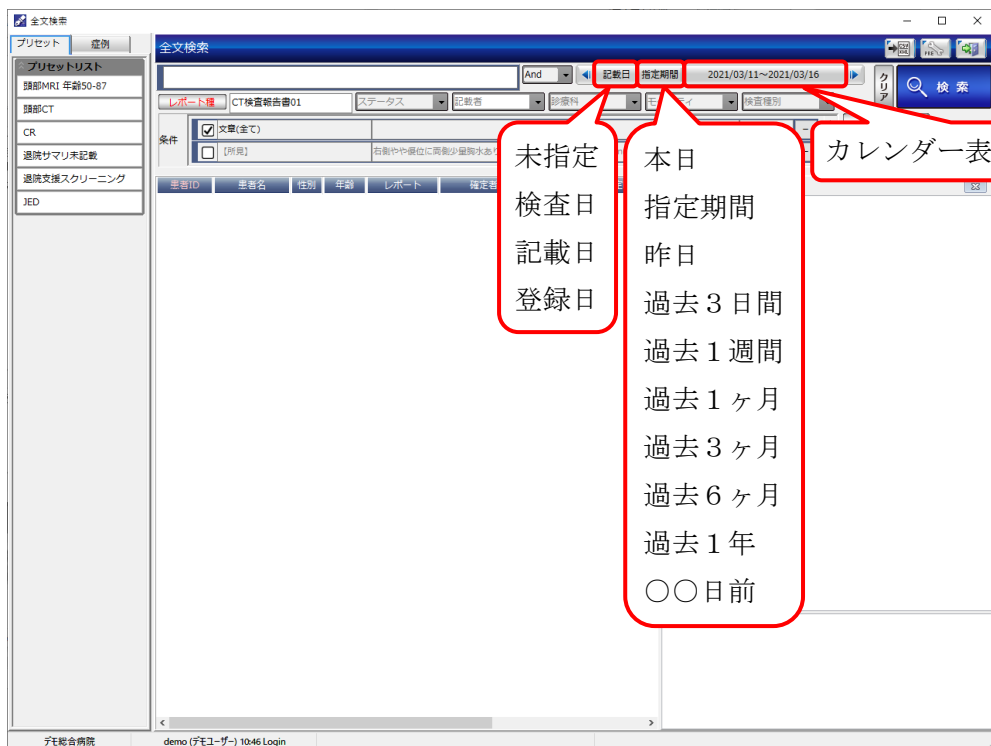


未指定
検査日
記載日
登録日

本日
指定期間
昨日
過去3日間
過去1週間
過去1ヶ月
過去3ヶ月
過去6ヶ月
過去1年
〇〇日前


カレンダー表示から選択

全文検索でレポートを検索した結果から、更に文字検索を行います。

例として「気管支」の文字を検索する場合、検索枠に文字を入力し[検索]ボタンをクリックします。

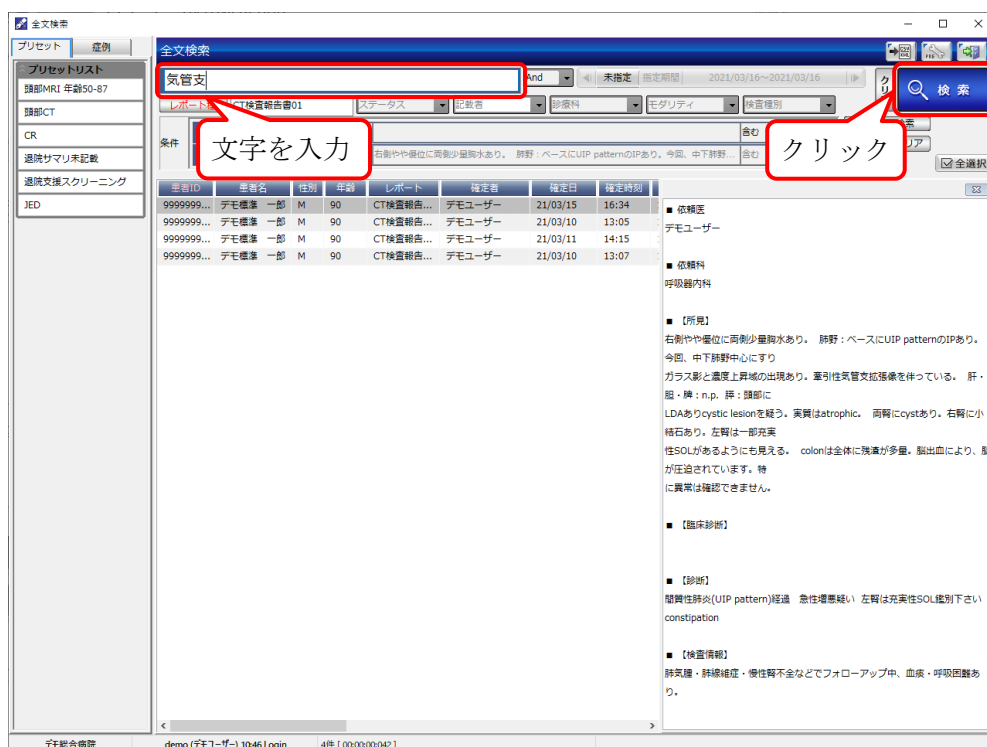

検索枠に入力した文字を抽出し、赤文字で表示します。

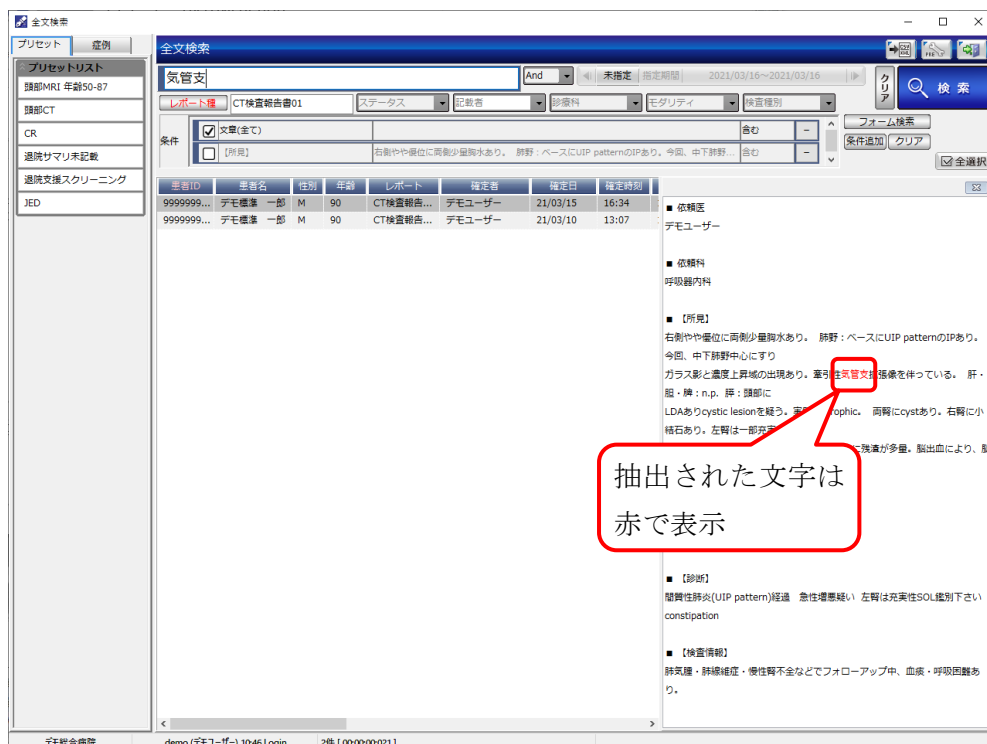



※操作方法詳細につきましては、後述「5. 全文検索」をご確認ください。

3.5.2 文字リンクの設定と解除

・文字リンクを設定

キー画像にハイパーリンクを貼り付けます。

画像に貼り付ける文字を選択し、ドラッグアンドドロップします。

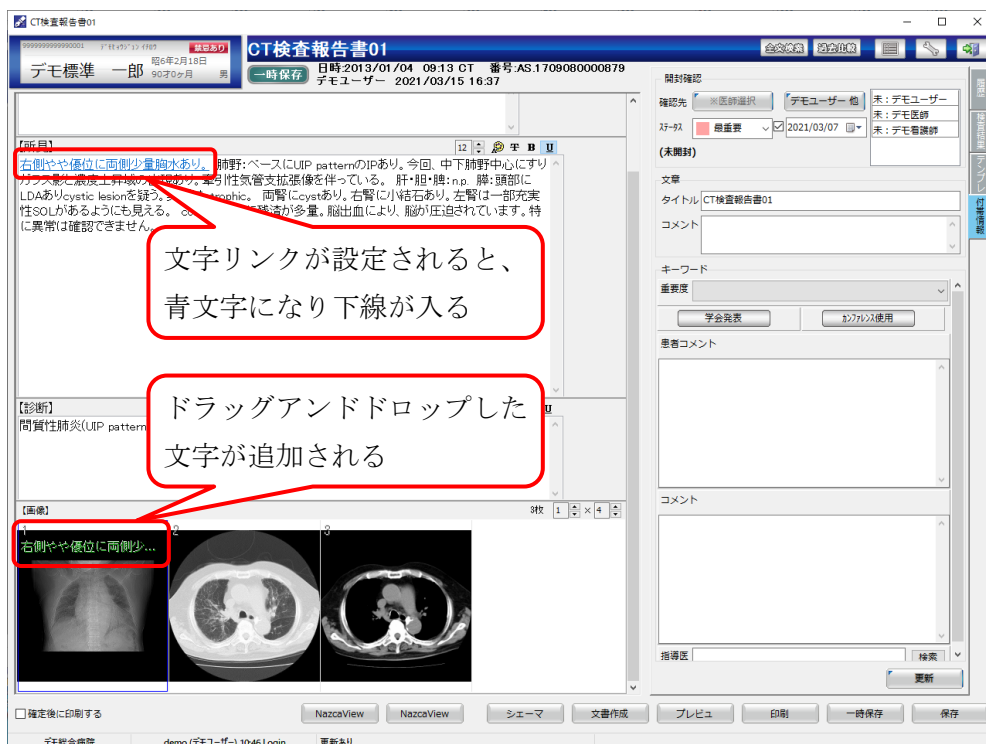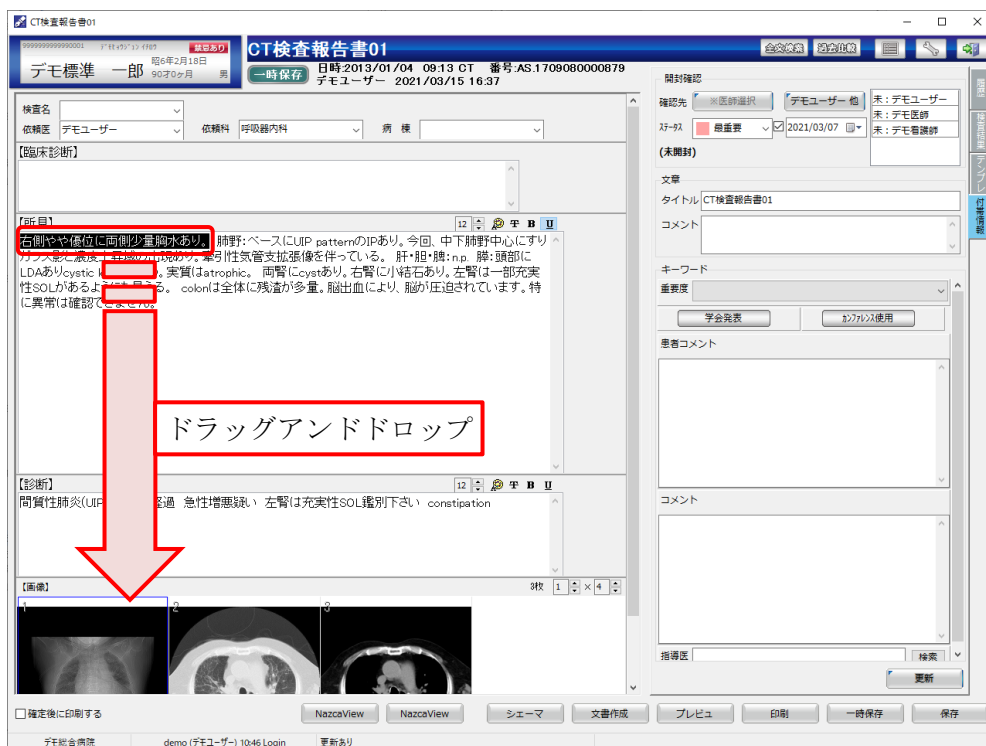


⇒設定した文字リンクをクリックすると対象画像をビューワ画面で表示します。


・文字リンクを解除

キー画像からハイパーリンクを解除します。

文字リンクを選択し、右クリックメニューから「文字リンクを解除」をクリックします。

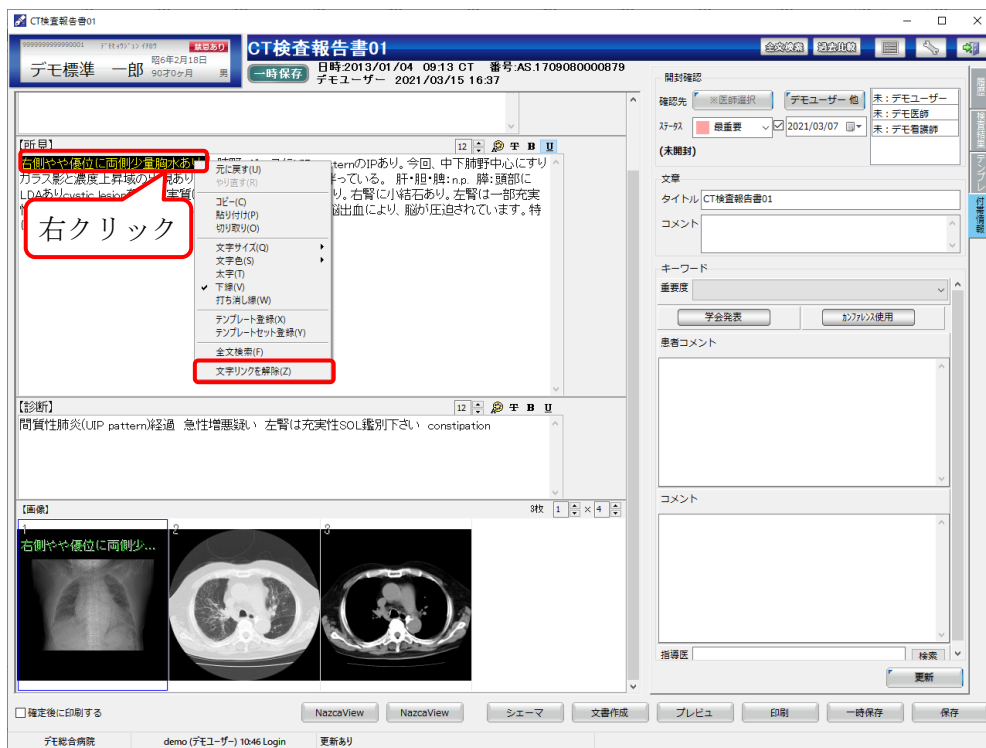


設定が解除されると元に戻ります。

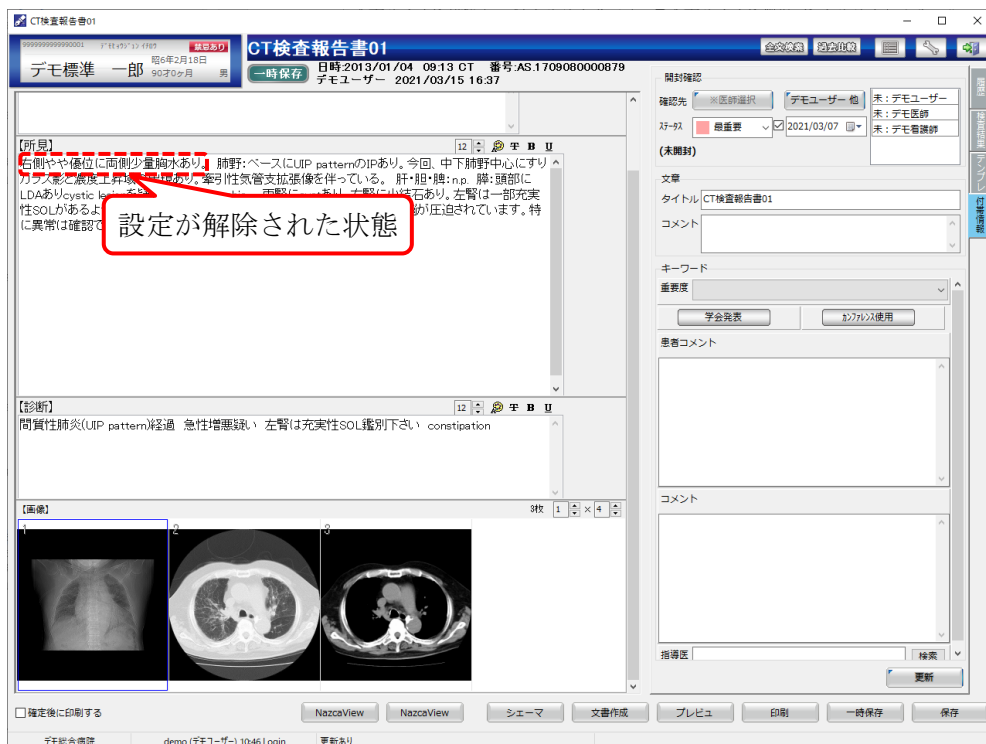

3.5.3 画像枠操作

画像枠から右クリックメニューを表示させると、以下の項目を表示します。

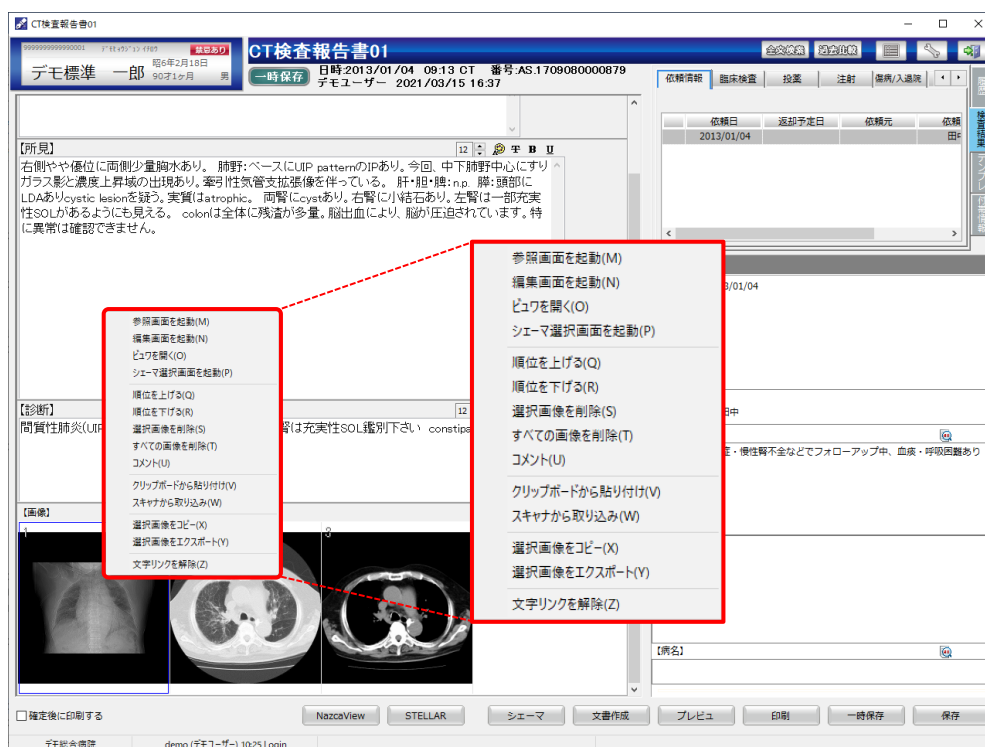

参照画面を起動：STELLARSchema（ビューフ）を起動します。

編集画面を起動：STELLARSchema（編集画面）を起動します。

ビューウを開く：NazcaView を起動します。

シェーマ選択画面を起動：シェーマ選択画面を起動します。

順位を上げる：登録した画像の順位を1つ上げます。

順位を下げる：登録した画像の順位を1つ下げます。

選択画像を削除：選択画像を削除します。

すべての画像を削除：登録した画像を全て削除します。

コメント：選択画像にコメントを追加します。

クリップボードから貼り付け：クリップボード上の画像を貼り付けます。


スキャナから取り込み：Capella を起動します。

選択画像をコピー：選択画像をクリップボードにコピーします。


選択画像をエクスポート：選択画像を指定した画像形式に書き出します。

文字リンクを解除：前述「文字リンクを解除」を参照


参照画面を起動：STELLARSchema（ビューワ）を起動します。

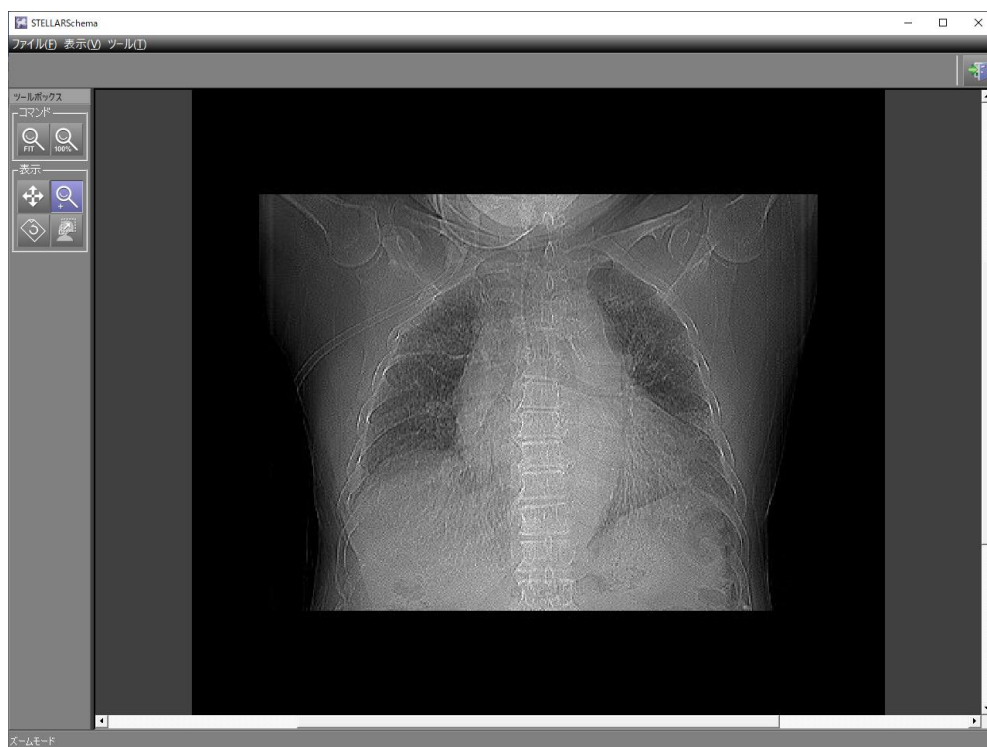


編集画面を起動：STELLARSchema（編集画面）を起動します。

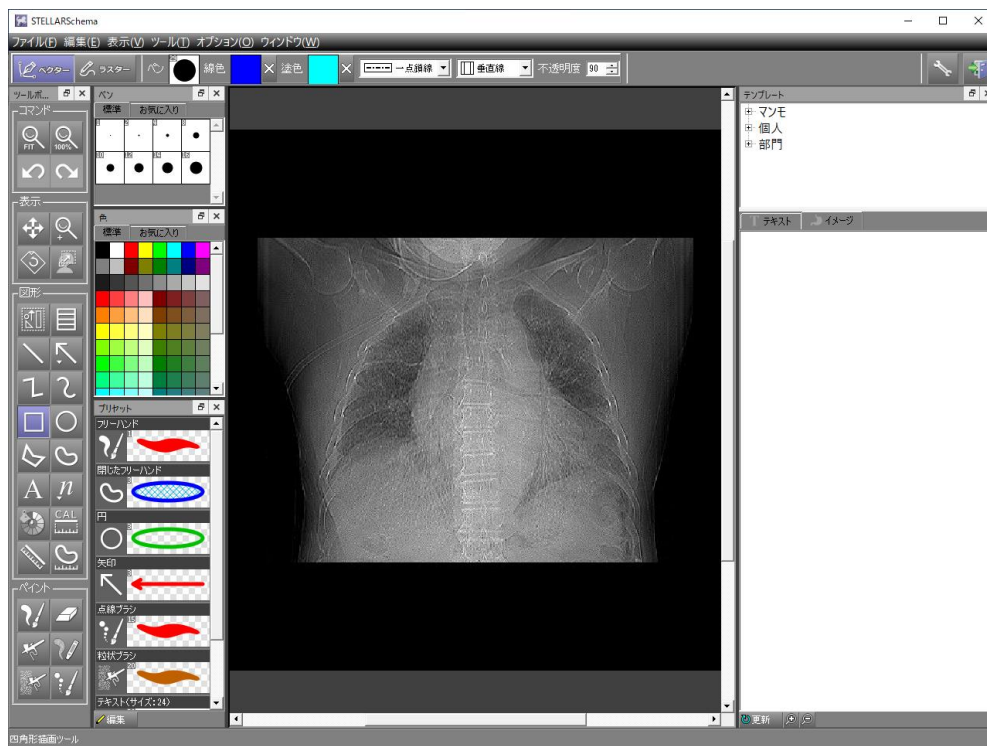


順位を上げる（下げる）：登録した画像の順位を1つ上げます（または下げます）。

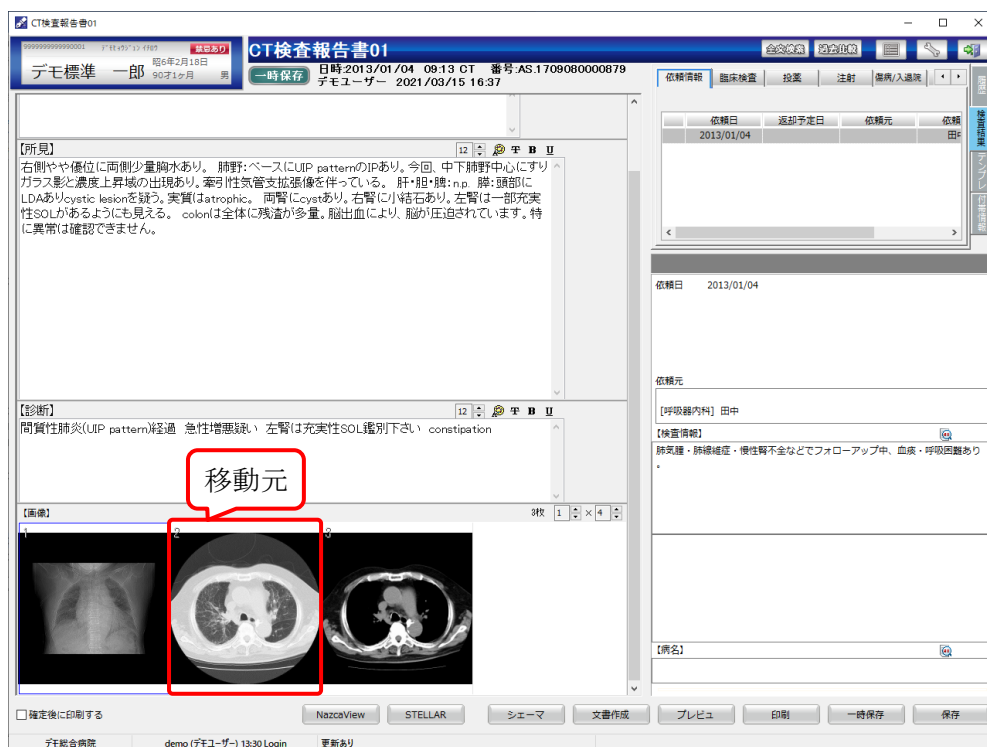


順位を1つ上げる

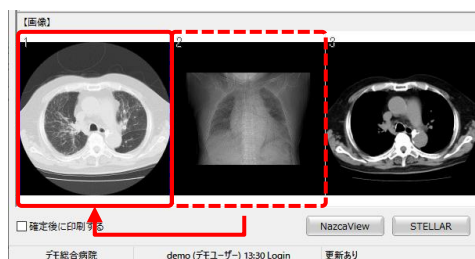


順位を1つ下げる

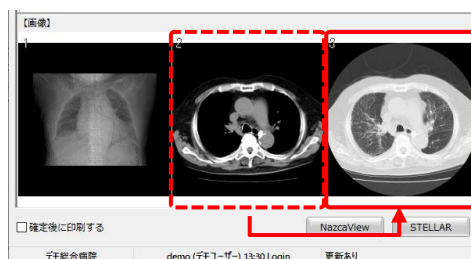



選択画像を削除：登録した画像を削除します。

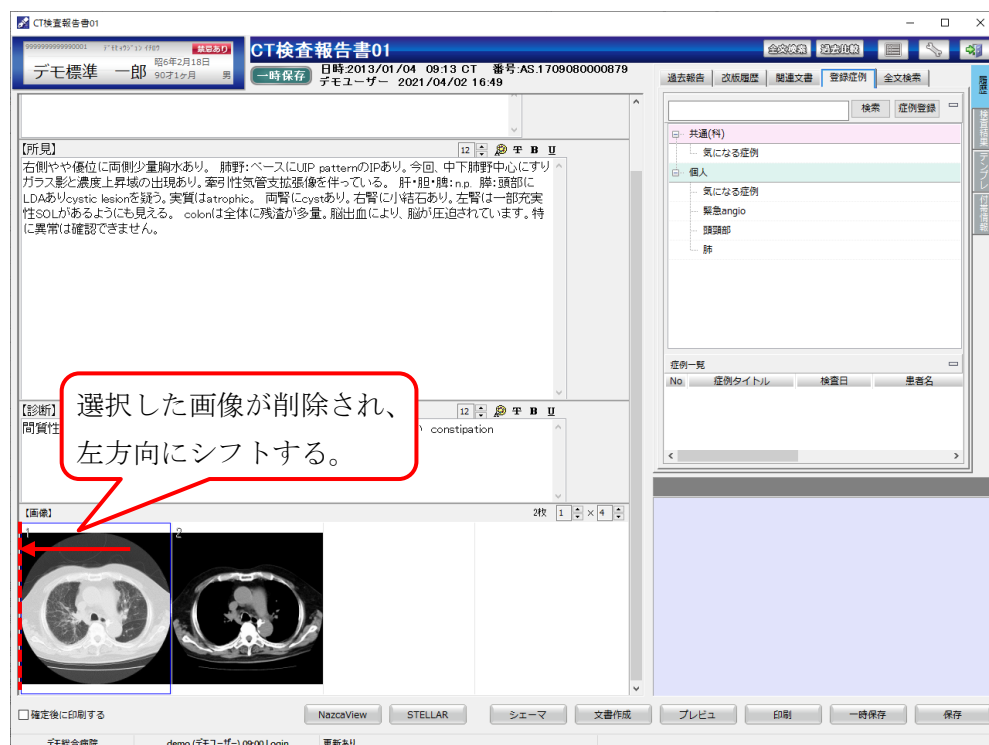



全ての画像を削除：登録した画像を全て削除します。

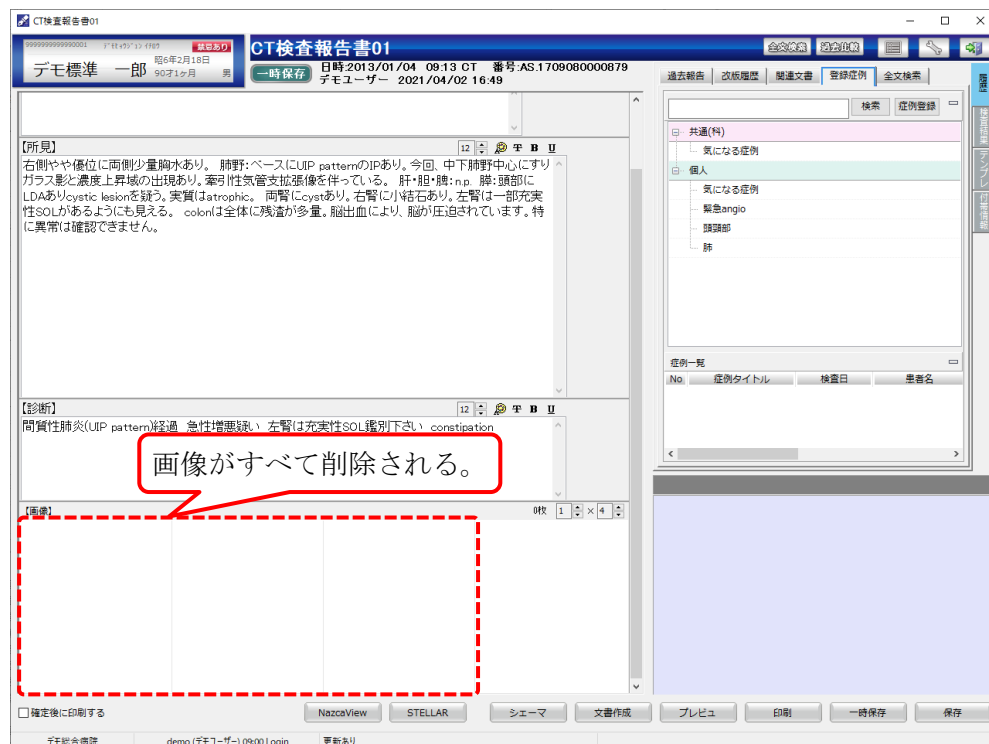


コメント：選択画像にコメントを挿入します。

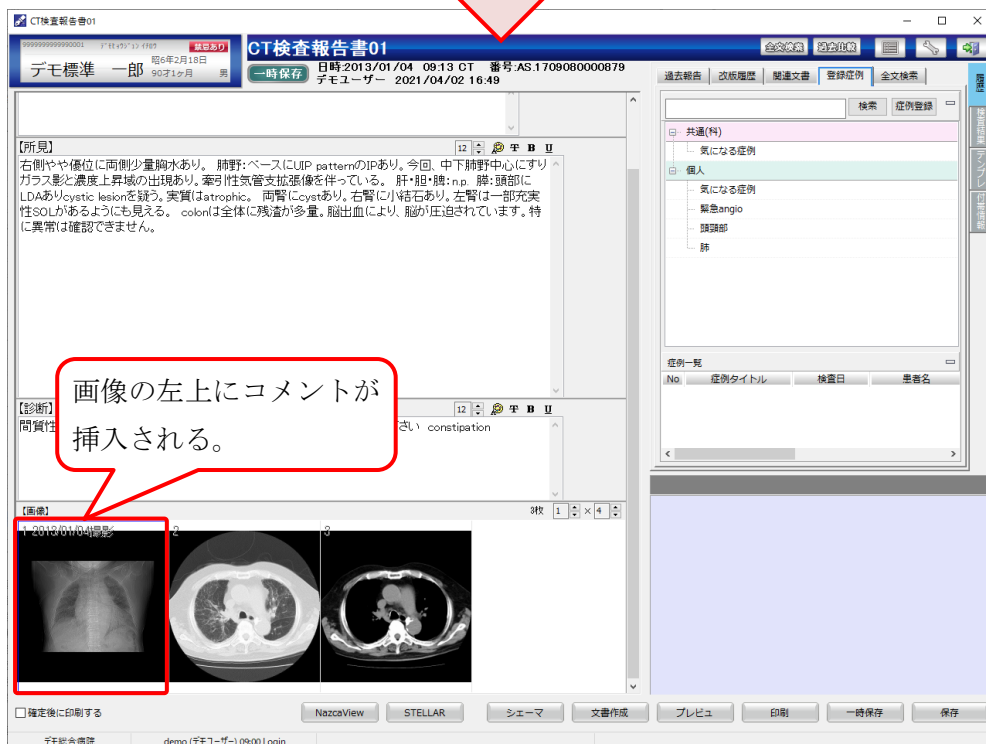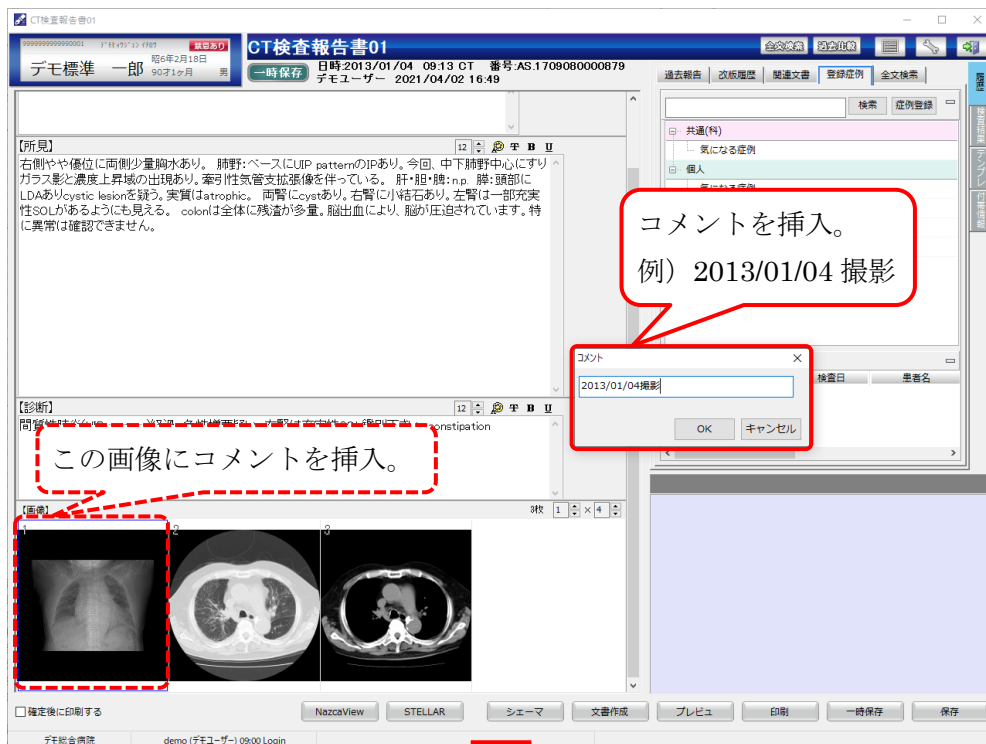

クリップボードから貼り付け：クリップボード上の画像を貼り付けます。

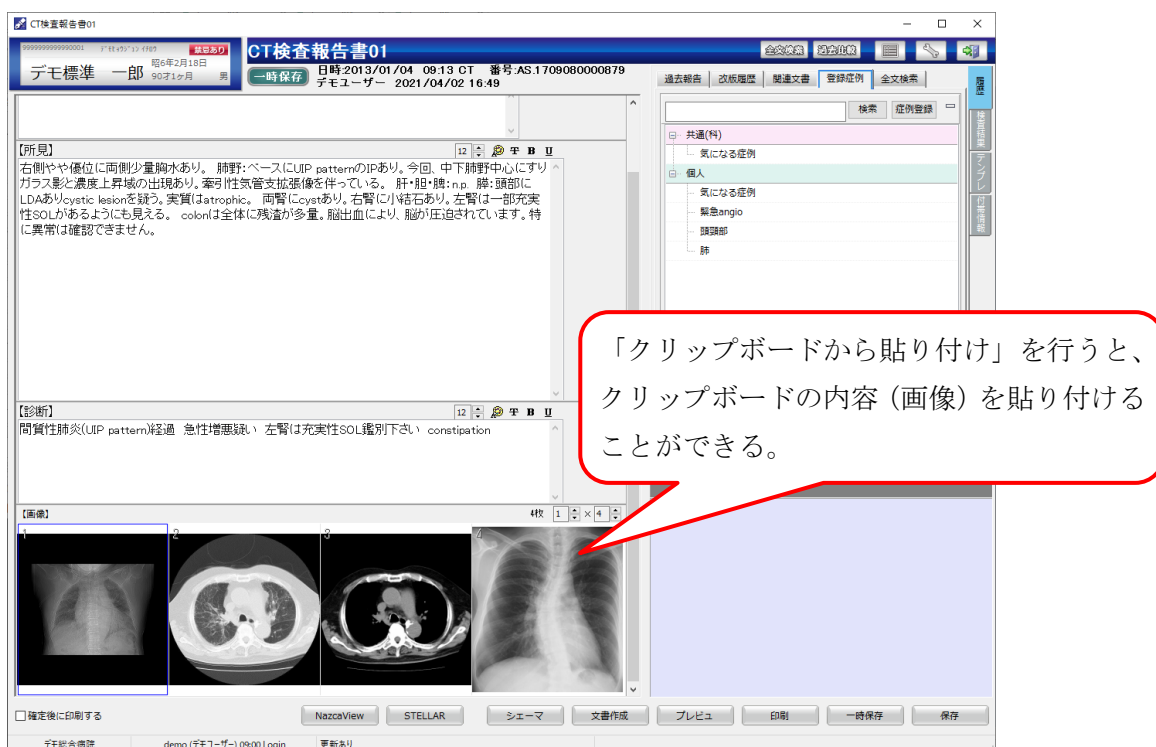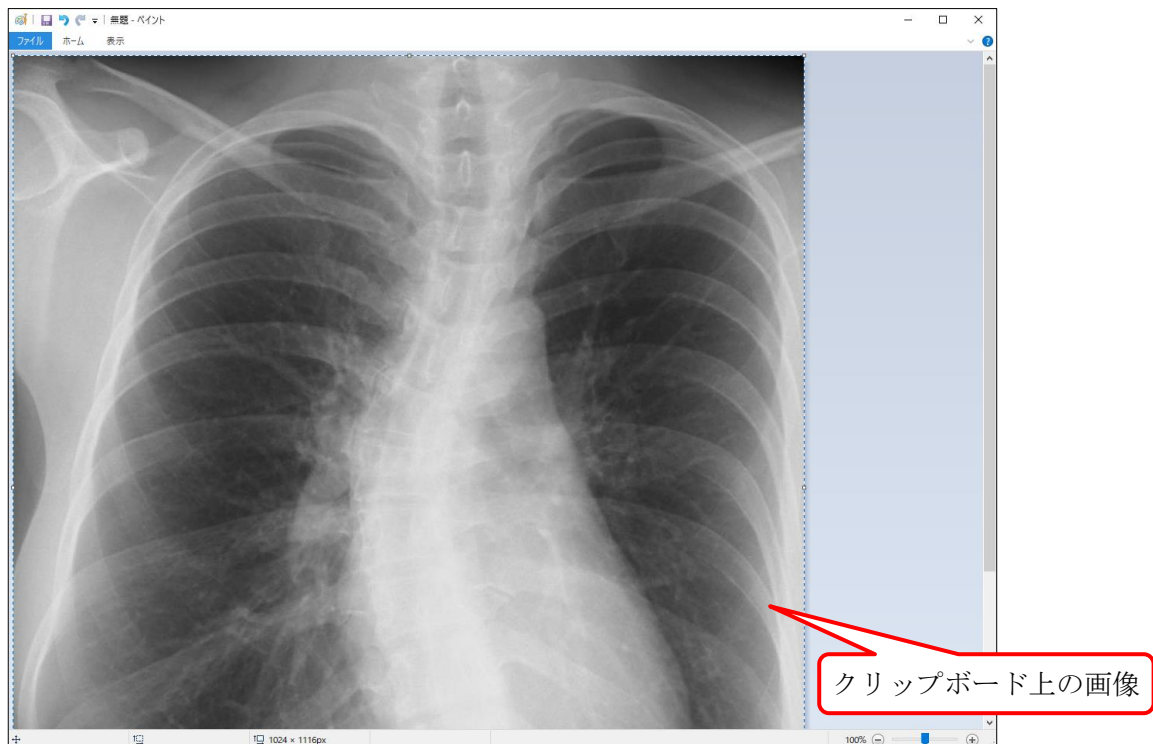



スキャナから取り込み：Capella を起動します。

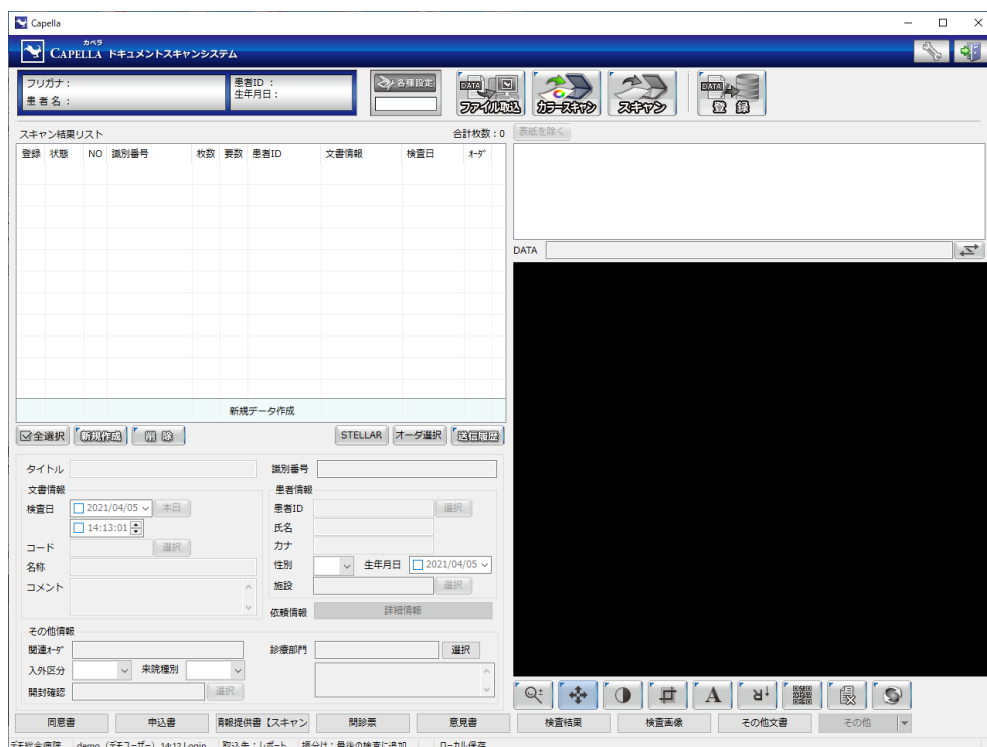

3.6 カスタムボタン

カスタムボタンをクリックすることで、ボタンに表示されているソフトを起動します。

左側2つのボタン（赤枠部）は右クリックすることで起動ソフトを切り替えることができます。

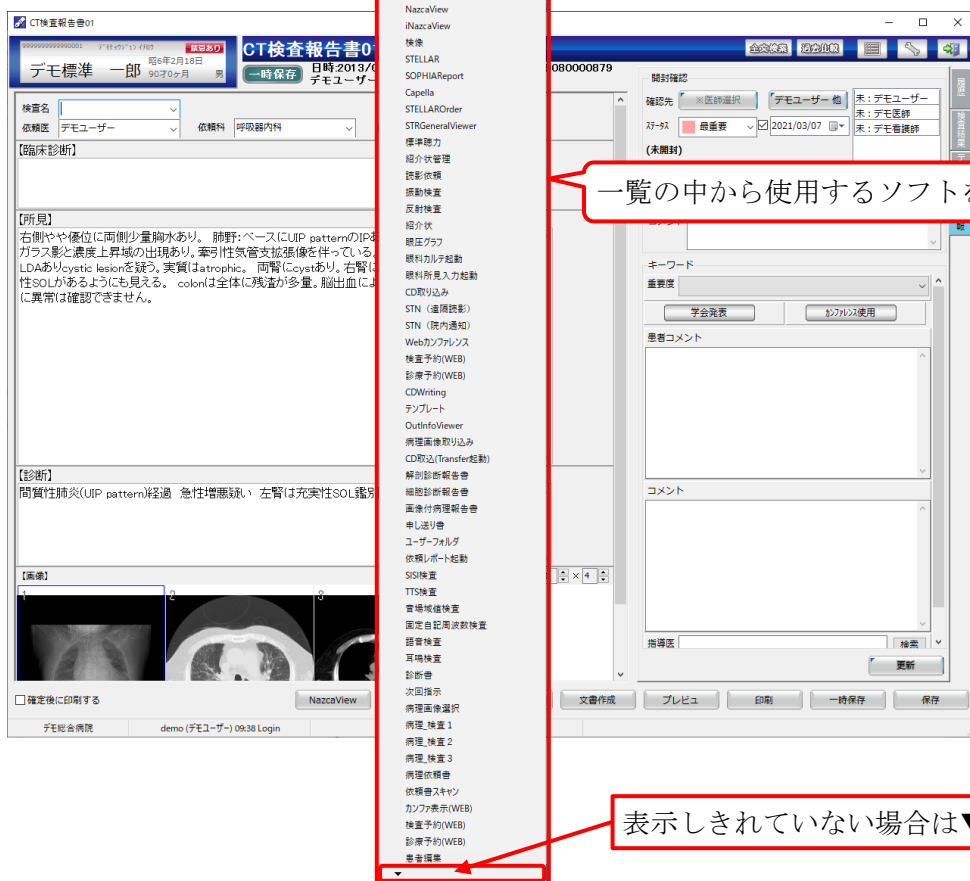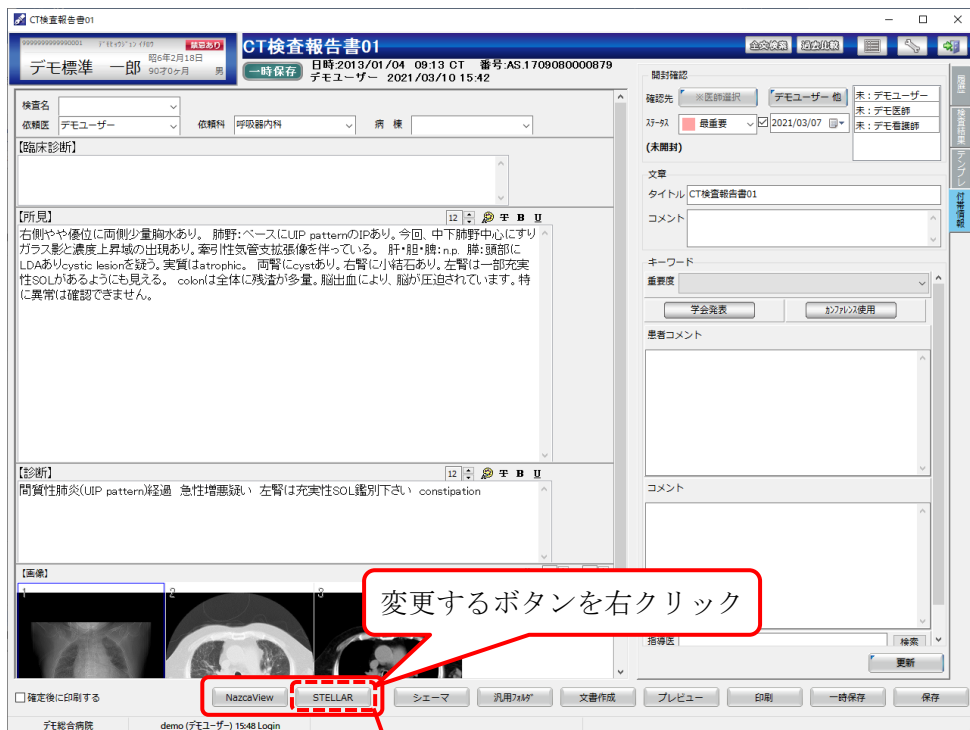


選択することで起動ソフトが切り替わります。

The screenshot shows the 'CT検査報告書01' (CT Examination Report 01) window. The interface includes a header with patient information (デモ標準 一郎, 昭和6年2月18日, 90才0ヶ月), a title bar, and a main content area with sections for '臨床診断' (Clinical Diagnosis), '所見' (Findings), '診断' (Diagnosis), and '画像' (Images). The 'CDWriting' button is highlighted with a red box in the bottom toolbar, which also contains buttons for 'NazcaView', 'シエマ', '文書作成', 'プレビュー', '印刷', '一時保存', and '保存'.

青枠部のボタンはレポートにより異なります。

This screenshot shows the same 'CT検査報告書01' window, but the bottom toolbar is highlighted with a blue box. The buttons in this toolbar are 'NazcaView', 'STELLAR', 'シエマ', '汎用7x7x', '文書作成', 'プレビュー', '印刷', '一時保存', and '保存'. The 'CDWriting' button is no longer present, indicating that the buttons in this section change based on the report type.


赤枠エリア（ボタンを除く）で右クリックメニューを表示すると、以下の項目が表示されます。

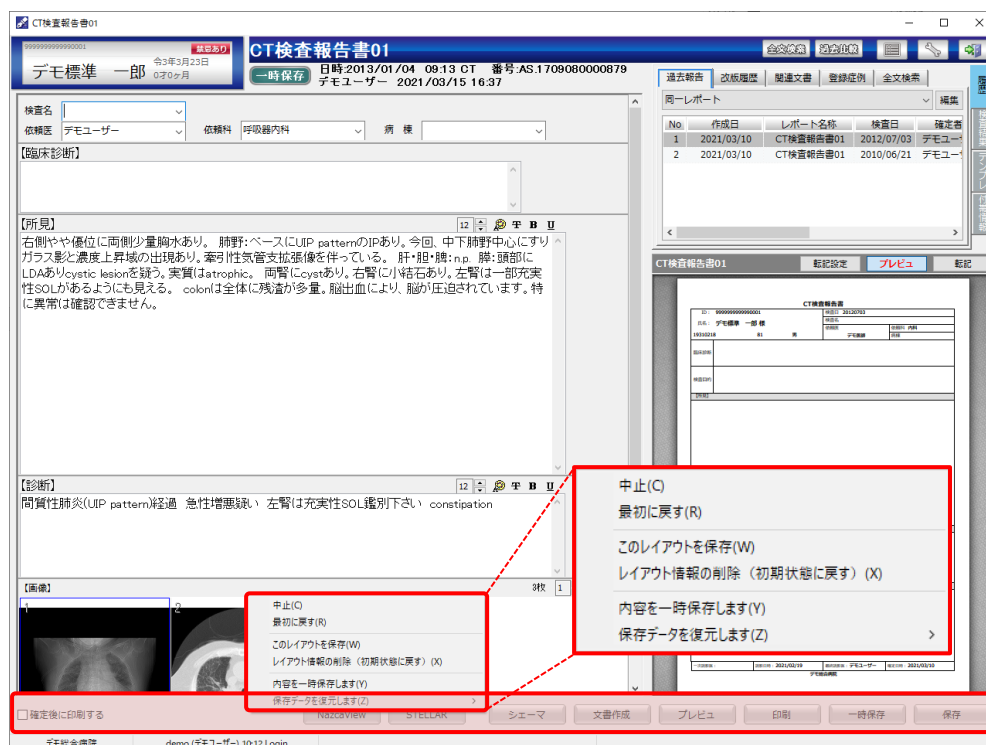


- ①中止：編集集中のレポートを中止扱いにします。（後述「中止」参照）
 - ②最初に戻す：レポート入力を最初（または最終保存の状態）に戻します。
 - ③このレイアウトを保存：画面右の表示レイアウトを保存します。
 - ④レイアウト情報の削除（初期状態に戻す）：レイアウト情報を削除し、初期状態に戻します。
 - ⑤内容を一時保存します：内容を一時保存します。
- ※レポートが確定もしくは中止の場合は表示されません。
- ⑥保存データを復元します：一時保存したデータを、時間をさかのぼって復元します。
- ※レポートが確定もしくは中止の場合は表示されません。

①中止


編集中のレポートを中止扱いにします。

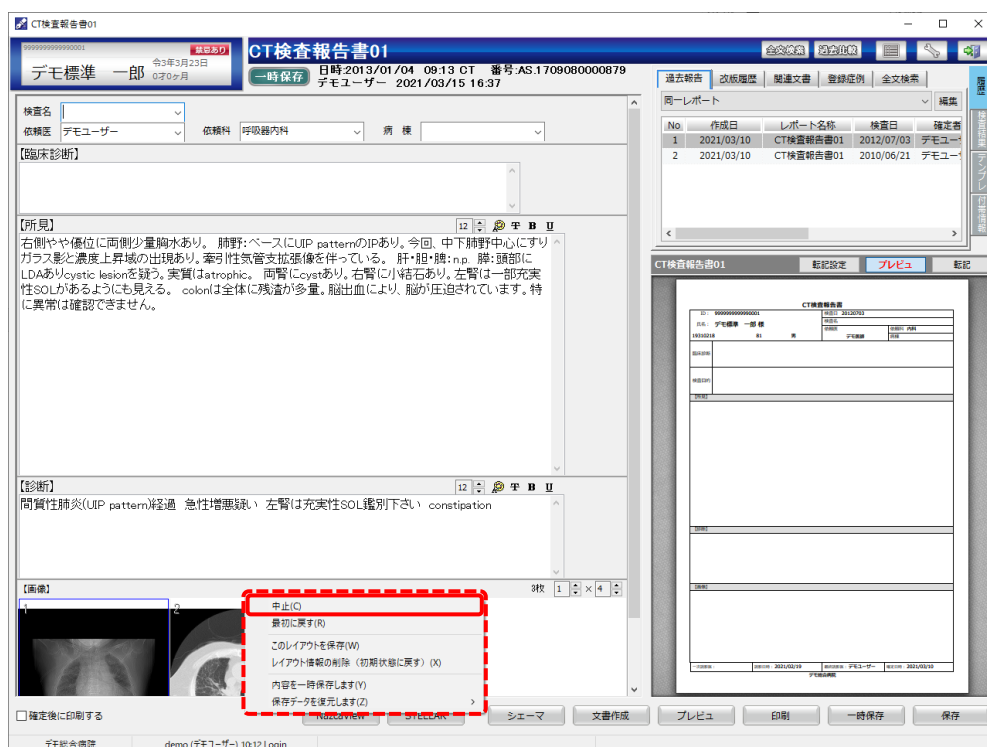


ダイアログから中止扱いの理由を入力（任意）し、[はい]ボタンをクリックするとレポート編集画面が閉じます。

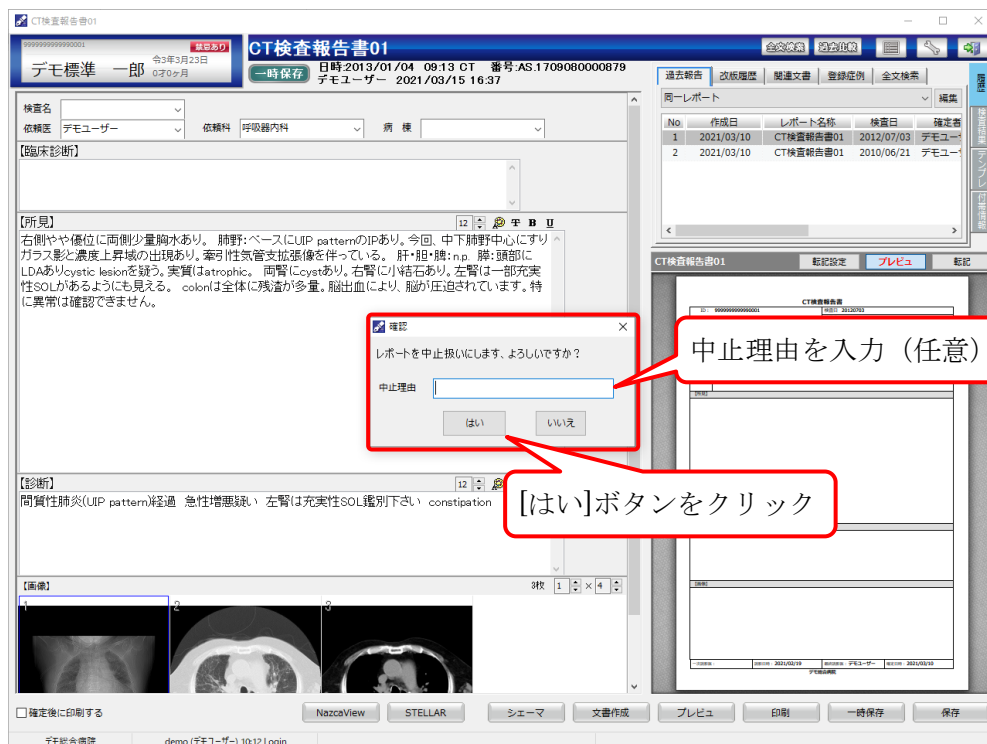

再編集を行う場合、[中止を戻す]ボタンをクリックすると、ダイアログで中止から戻す理由（任意）を入力し、[はい]ボタンをクリックします。

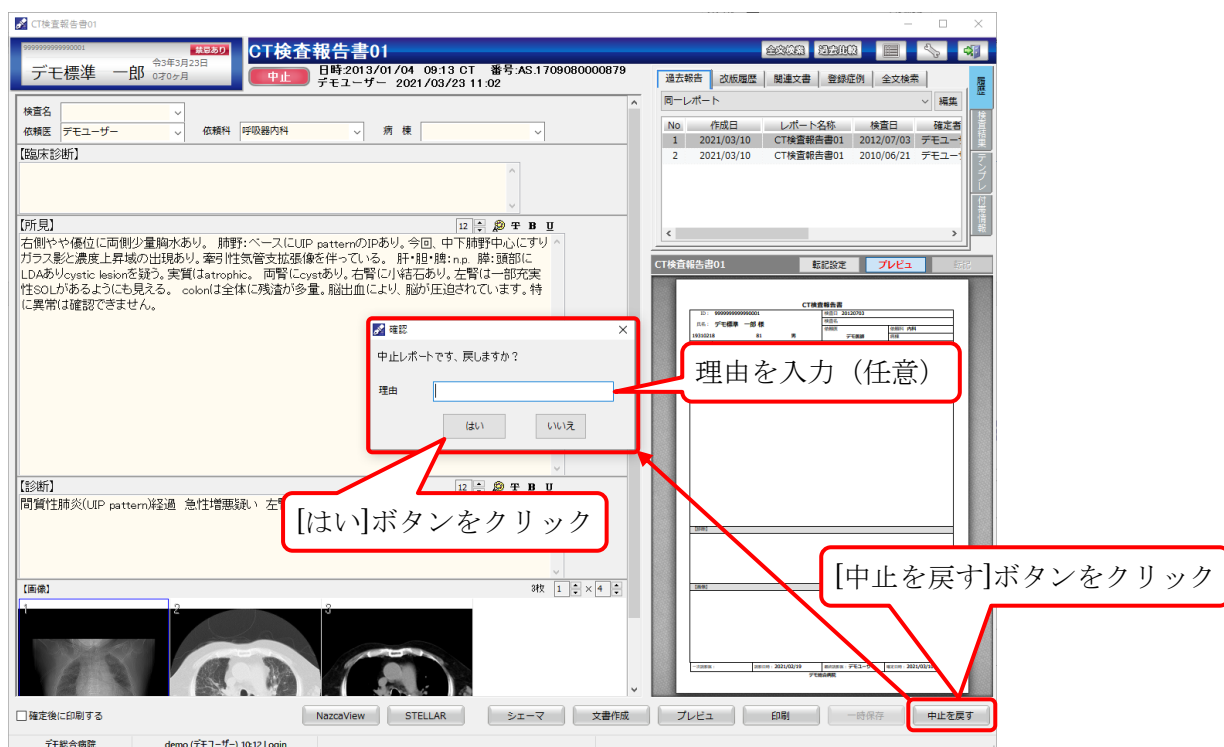


中止レポートが編集画面に戻り、再編集が可能になります。

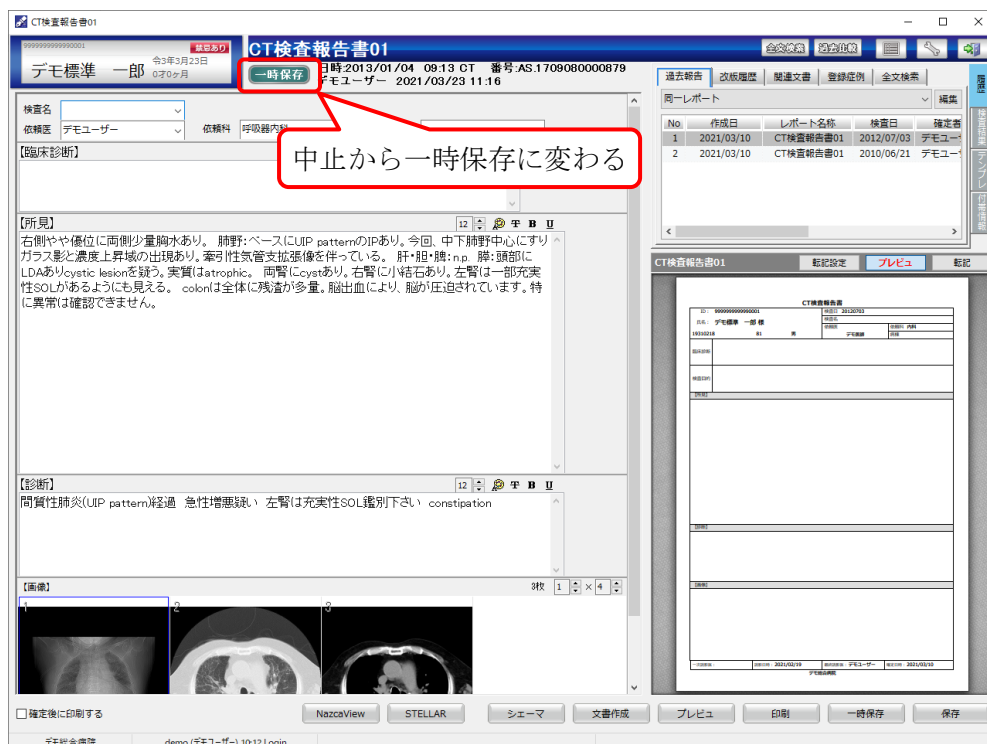

②最初に戻る

レポート入力を最初（または最終保存の状態）に戻します。

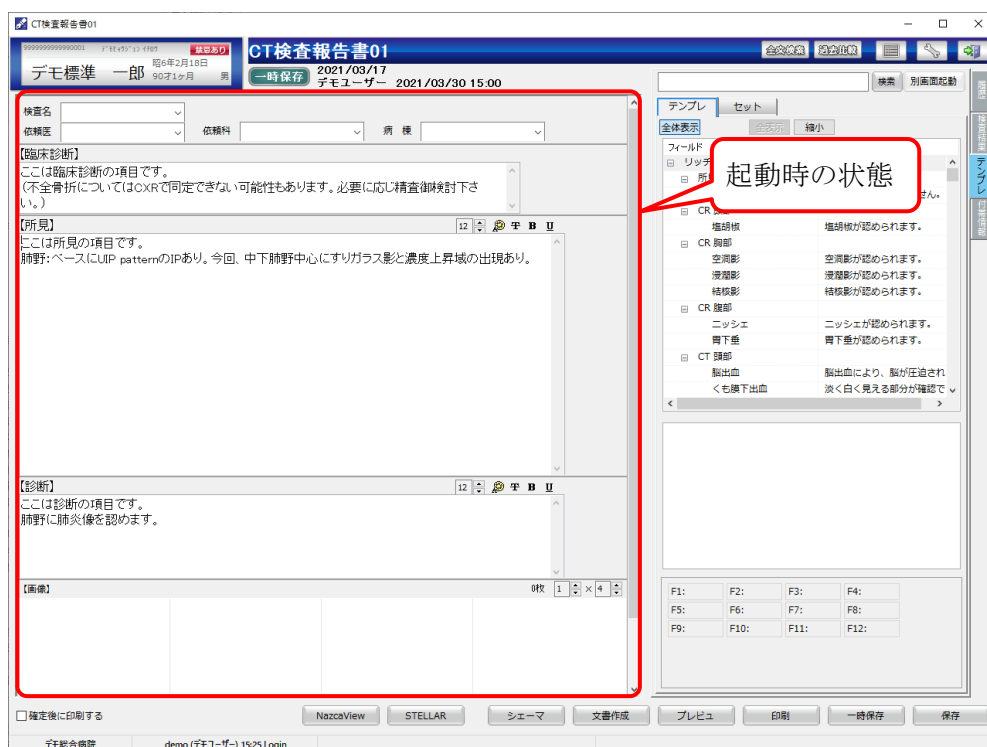

CT検査報告書01

デモ標準 一郎 2021/03/17 一時保存 2021/03/30 15:00

検査名: [] 依頼者: [] 依頼科: [] 病棟: []

【臨床診断】
ここは臨床診断の項目です。
(不全骨折についてはOKRで同定できない可能性もあります。必要に応じ精査御検討下さい。)


【所見】
ここは所見の項目です。
肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。

【診断】
ここは診断の項目です。
肺野に肺炎像を認めます。

【画像】
枚数: 1 x 4

確定後に印刷する ☐ NazcaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:25 Login

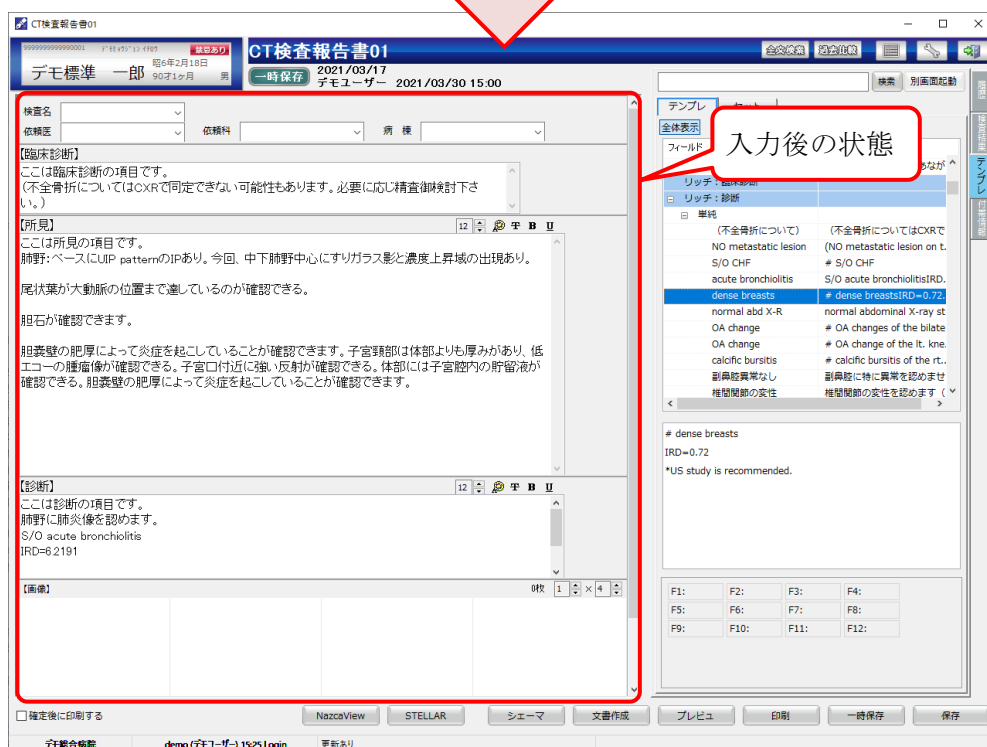

CT検査報告書01

デモ標準 一郎 2021/03/17 一時保存 2021/03/30 15:00

検査名: [] 依頼者: [] 依頼科: [] 病棟: []

【臨床診断】
ここは臨床診断の項目です。
(不全骨折についてはOKRで同定できない可能性もあります。必要に応じ精査御検討下さい。)

【所見】
ここは所見の項目です。
肺野:ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。
尾状葉が「大動脈」の位置まで達しているのが確認できる。
胆石が確認できます。
胆嚢壁の肥厚によって炎症を起こしていることが確認できます。子宮頸部は体部よりも厚みがあり、低エコーの腫瘍像が確認できる。子宮口付近に強い反射が確認できる。体部には子宮腔内の貯留液が確認できる。胆嚢壁の肥厚によって炎症を起こしていることが確認できます。


【診断】
ここは診断の項目です。
肺野に肺炎像を認めます。
S/O acute bronchiolitis
IRD=6.2191

【画像】
枚数: 1 x 4


確定後に印刷する ☐ NazcaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:25 Login 更新あり


右クリックメニューから「最初に戻す」を選択します。

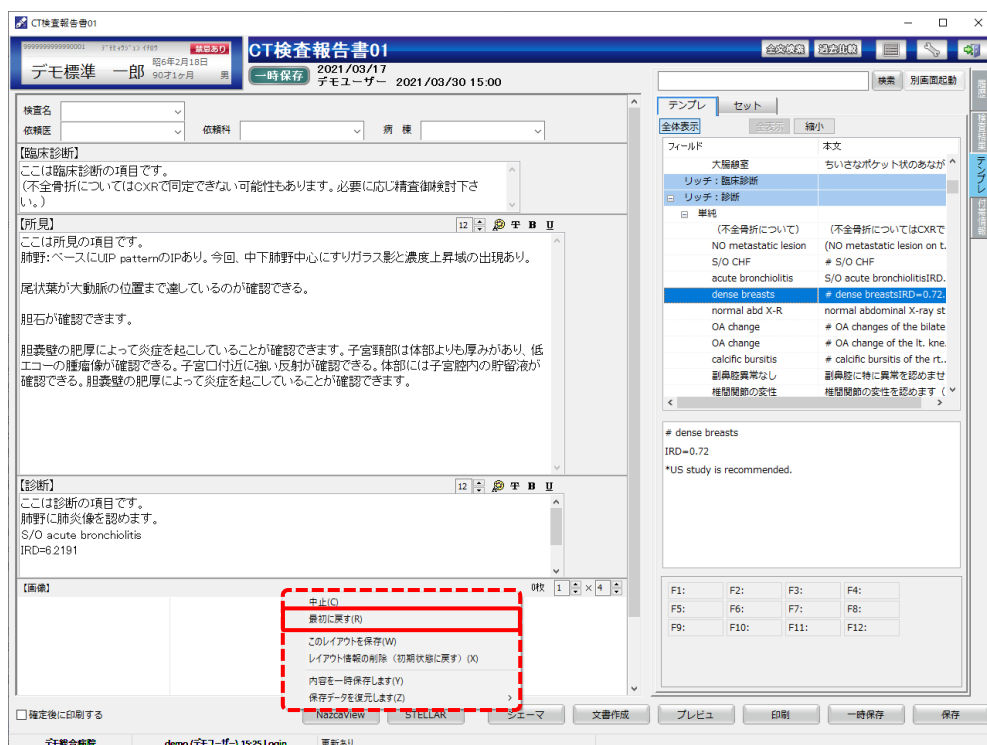

「最初に戻す」を選択すると「最初の状態に戻します。よろしいですか？」のダイアログが表示されるので[OK]ボタンをクリックします。

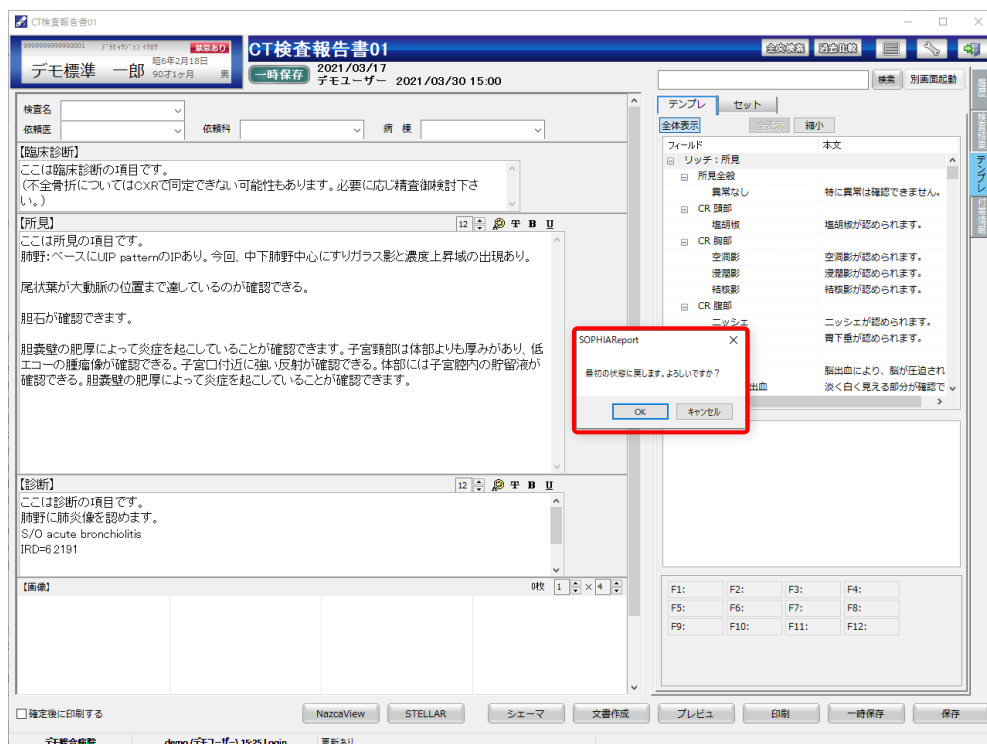

画面が入力前の状態に戻ります。

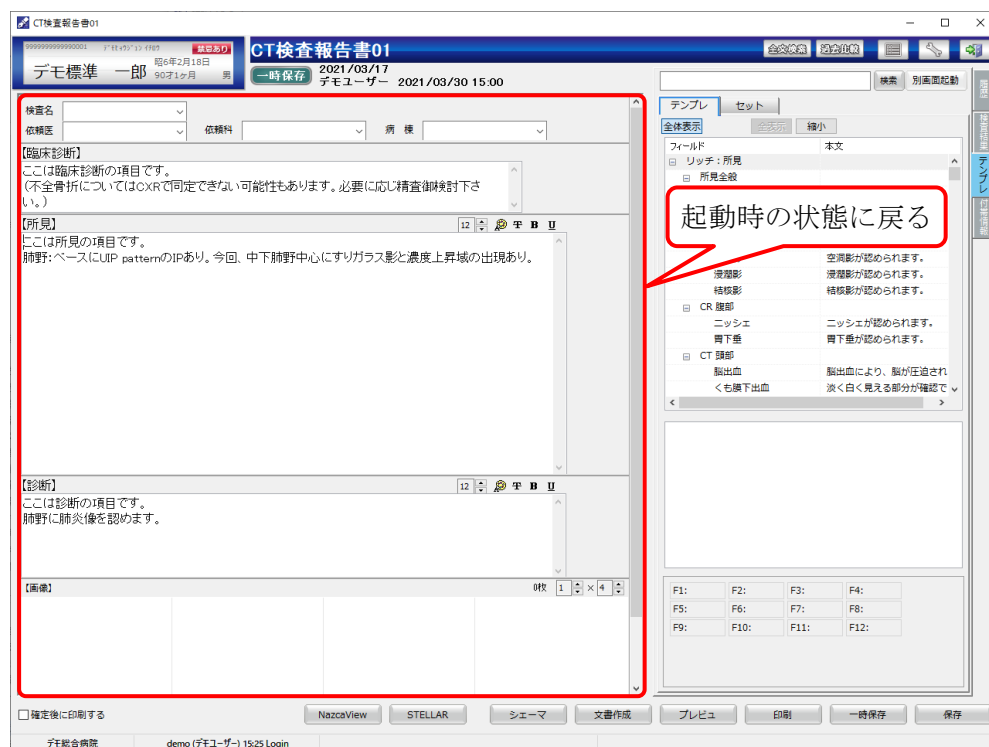

CT検査報告書01

デモ標準 一郎 2021/03/17 一時保存 2021/03/30 15:00

検査名: [] 依頼先: [] 病 歴: []

【臨床診断】
ここは臨床診断の項目です。
(不全骨折についてはOXRで同定できない可能性もあります。必要に応じ精査御検討下さい。)

【所見】
ここは所見の項目です。
肺野: ベースにUIP patternのIPあり。今回、中下肺野中心にすりガラス影と濃度上昇域の出現あり。

【診断】
ここは診断の項目です。
肺野に肺炎像を認めます。

【画像】
0枚 1 2 3 4

テンプレ セット

全体表示

フィールド: 本文

リッチ: 所見

所見全般

起動時の状態に戻る

空周影が認められます。
濃度影が認められます。
結核影が認められます。

CR 腫部
ニッシェ
胃下垂
CT 腫部
脳出血
くも膜下出血

ニッシェが認められます。
胃下垂が認められます。

脳出血により、脳が圧迫され
淡く白く見える部分が確認で

F1: F2: F3: F4:
F5: F6: F7: F8:
F9: F10: F11: F12:

確定後に印刷する


NazcaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:25 Login


③このレイアウトを保存

タブのレイアウト情報を保存します。

例としてタブを改版履歴、テンプレートタブを独立させた状態で右クリックメニューから「このレイアウトを保存」を選択します。

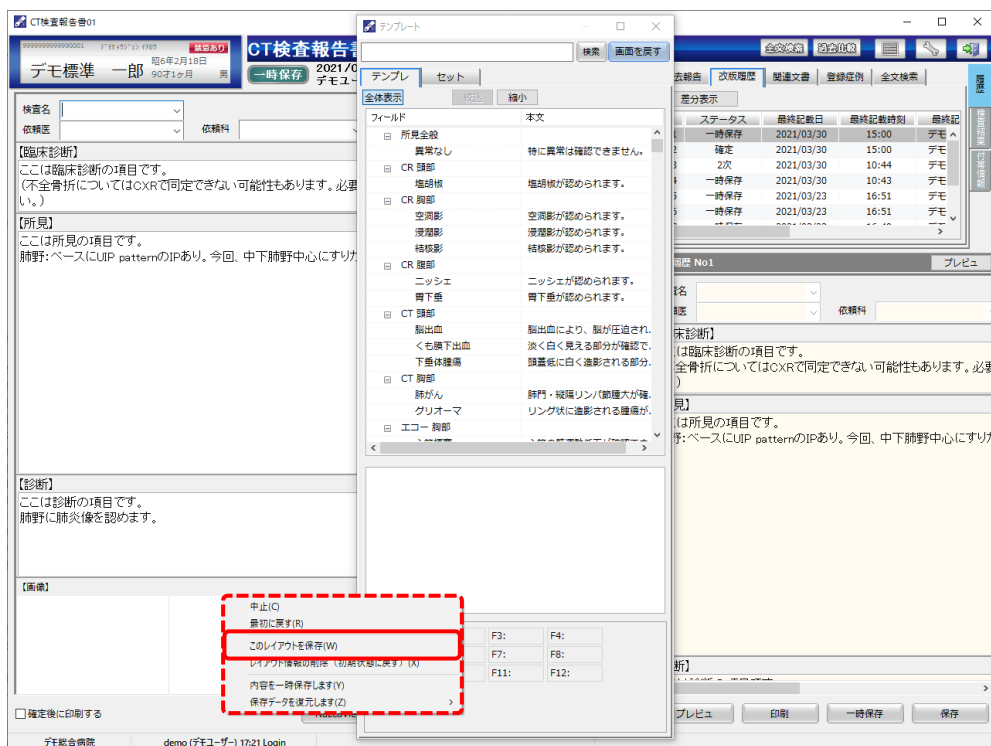


次回以降、どのレポートでも保存された状態で開きます。

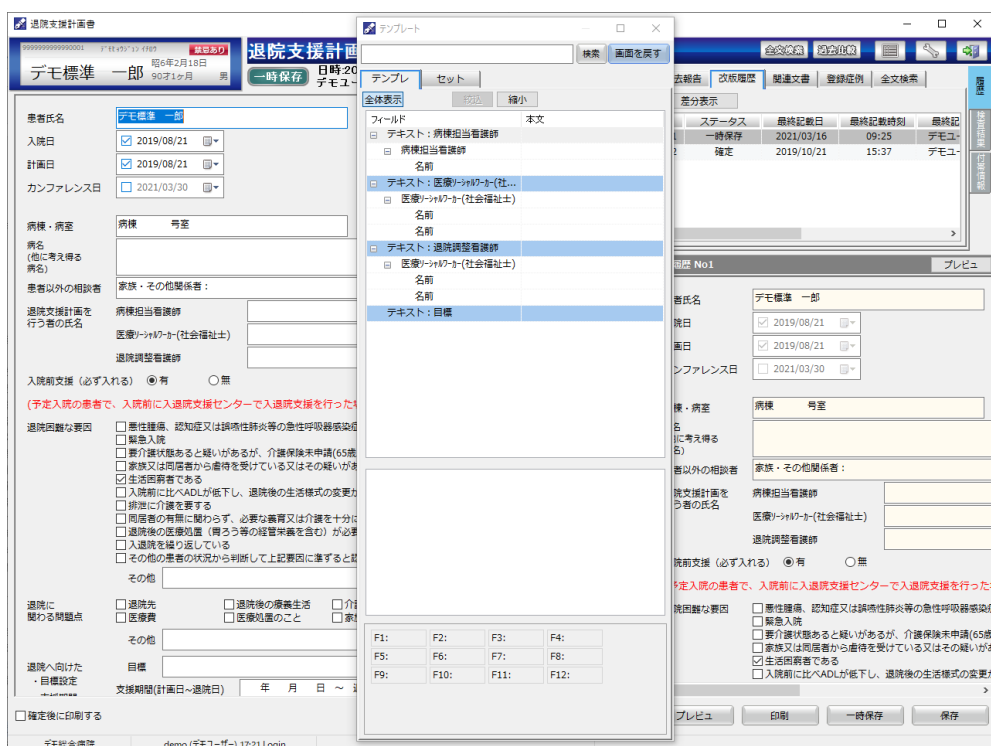


④レイアウト情報の削除（初期状態に戻す）

タブのレイアウト情報を削除し、初期状態に戻します。

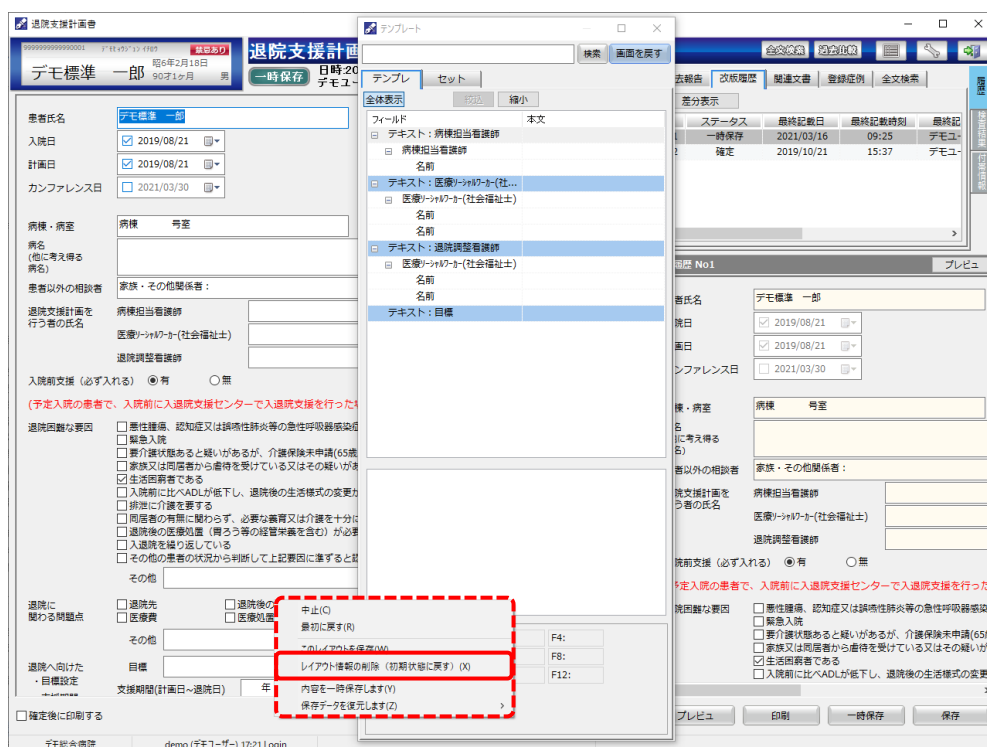


次回以降、どのレポートでも初期状態で起動します。

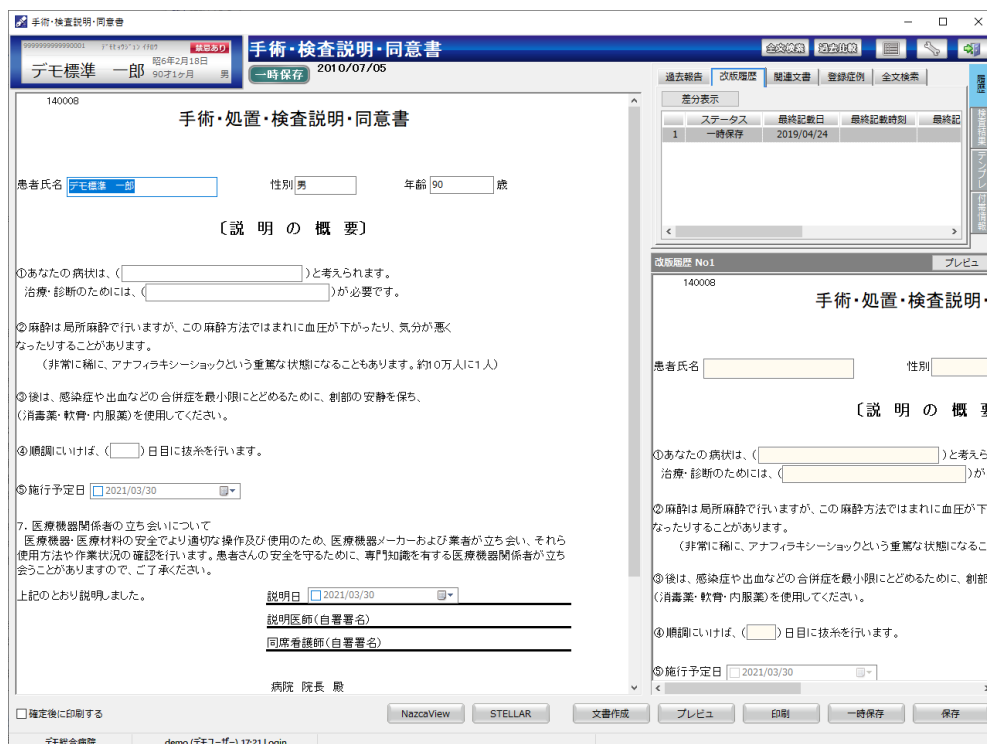

⑤内容を一時保存します

入力内容を一時保存します。


※レポートが確定もしくは中止の場合は表示されません。

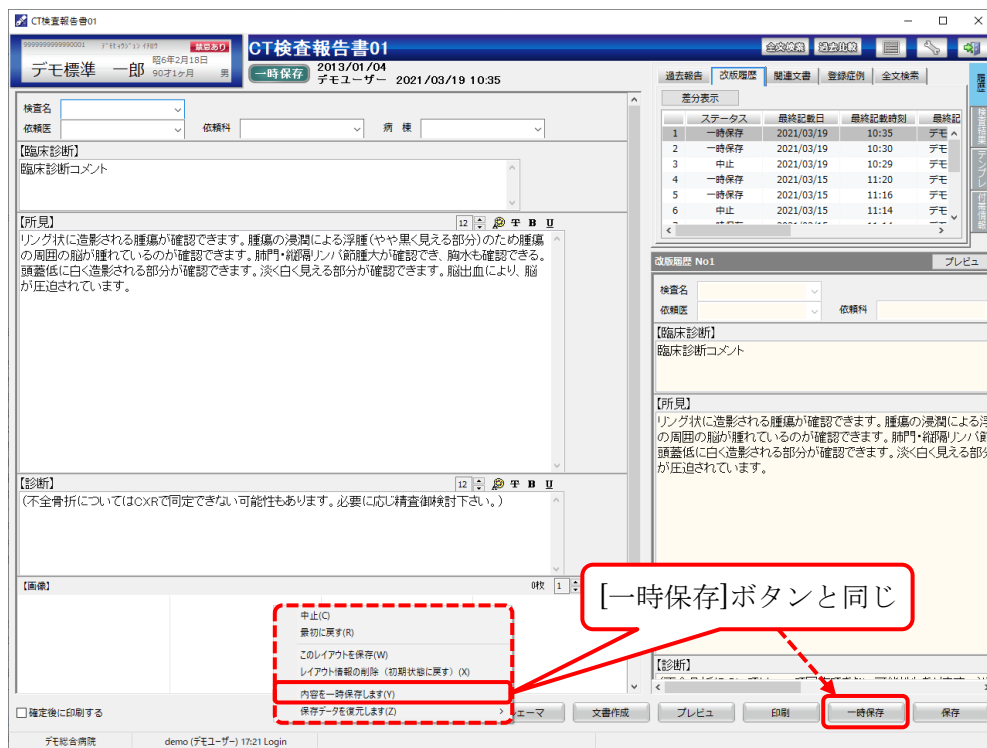

⑥保存データを復元します

一時保存したデータを、時間をさかのぼって復元します。「自動保存から」を選択すると自動保存された場所で復元します。

※レポートが確定もしくは中止の場合は表示されません。

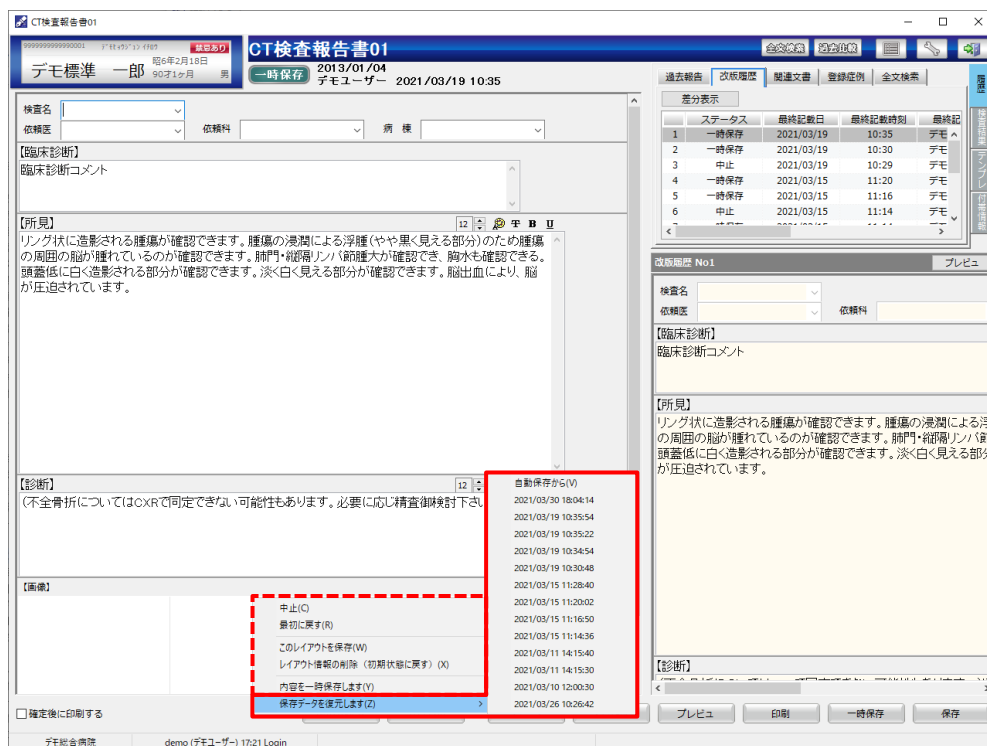

The screenshot displays the ASTROSTAGE CT examination report software interface. The main window shows a report for 'CT検査報告書01' dated 2021/03/19 10:35. A red box highlights the '保存データも復元します(Z)' option in the '保存' (Save) menu. The right sidebar shows a list of saved reports with columns for status, date, time, and user.

ステータス	最終記載日	最終記載時刻	最終記
一時保存	2021/03/19	10:35	デモ
一時保存	2021/03/19	10:30	デモ
中止	2021/03/19	10:29	デモ
一時保存	2021/03/15	11:20	デモ
一時保存	2021/03/15	11:16	デモ
中止	2021/03/15	11:14	デモ

4. レポート指示画面

レポート指示画面の操作を説明します。

4.1 [レポート]タブ画面

レポートの画面は以下のようになります。

①検索条件（入力枠・部署枠）[検索]ボタン：検索条件を入力します。

②[全展開]・[全縮小]ボタン：レポート種別を全展開、もしくは全縮小します。

③[入院リスト]・[文書種リスト]ボタン：入院リスト・文書種リストを表示／非表示にします。

④[プレビュー]ボタン：選択されているレポートのプレビューを表示／非表示にします。

⑤お気に入り：使用頻度の高いレポートを登録します。

⑥[印刷]ボタン：選択中のレポートを印刷します。

⑦[レポート作成]ボタン：選択中のレポートで新規作成します。


⑧[終了]ボタン：レポート指示画面を閉じます。

①検索条件（入力枠・部署枠）[検索]ボタン

検索条件の入力枠に任意の文字を入力します。部署枠には登録済みの科目をプルダウンから選択、もしくは入力します。

例1：入力枠に「マンモ」と入力


検索文字を赤く表示します。

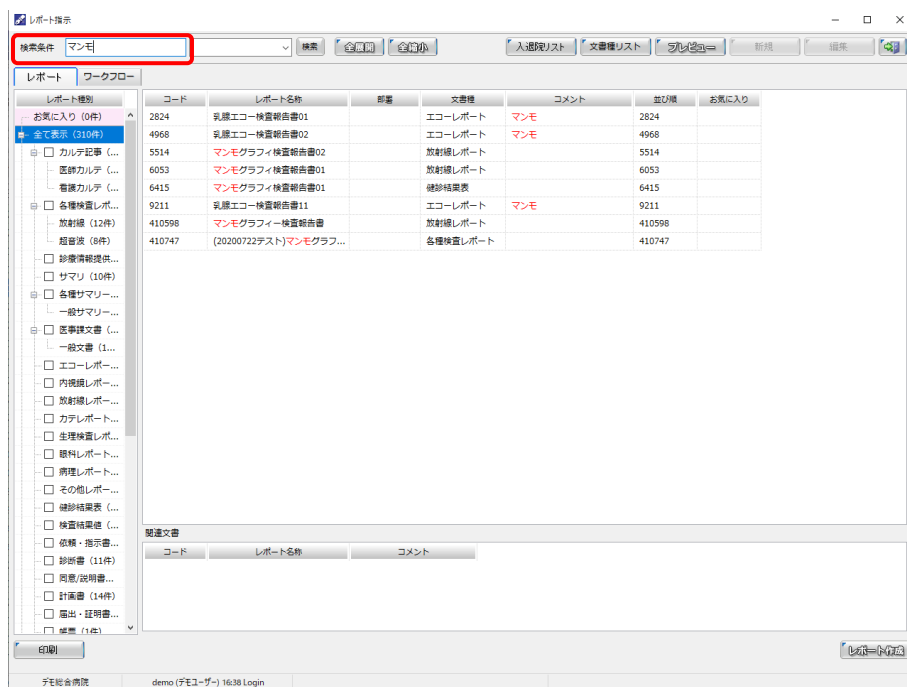

コード	レポート名称	部署	文書種	コメント	並び順	お気に入り
2824	乳腺エコー検査報告書01		エコーレポート	マンモ	2824	
4968	乳腺エコー検査報告書02		エコーレポート	マンモ	4968	
5514	マンモグラフィ検査報告書02		放射線レポート		5514	
6053	マンモグラフィ検査報告書01		放射線レポート		6053	
6415	マンモグラフィ検査報告書01		健診結果表		6415	
9211	乳腺エコー検査報告書11		エコーレポート	マンモ	9211	
410598	マンモグラフィ検査報告書		放射線レポート		410598	
410747	(20200722テスト)マンモグラフィ...		各種検査レポート		410747	


例2：部署枠に「病理検査部門」をプルダウンで選択

部署が「病理検査部門」のものを表示します。

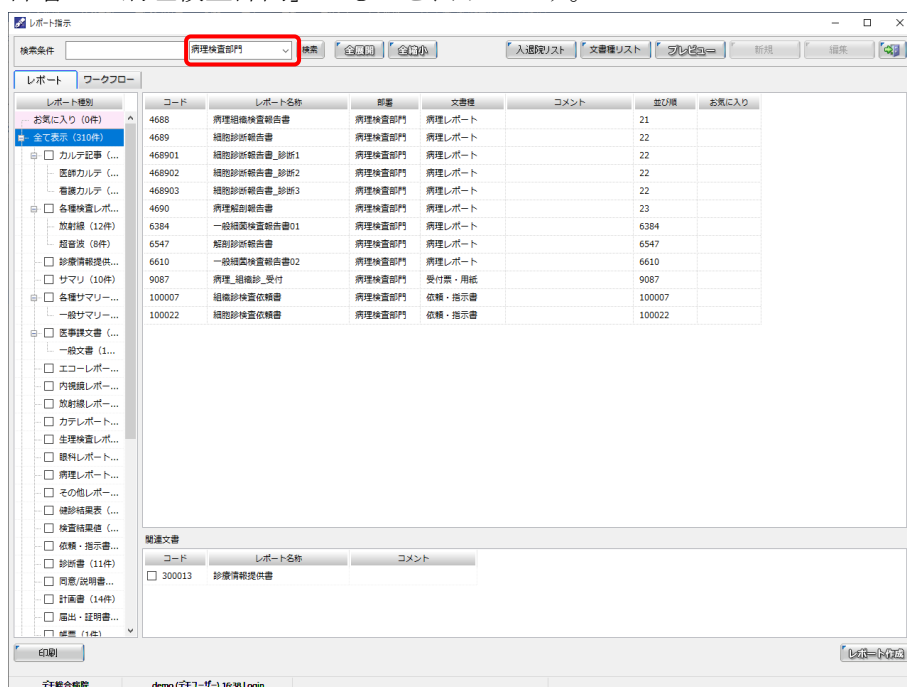


コード	レポート名称	部署	文書種	コメント	並び順	お気に入り
4688	病理組織検査報告書	病理検査部門	病理レポート		21	
4689	細胞診報告書	病理検査部門	病理レポート		22	
468901	細胞診報告書_診断1	病理検査部門	病理レポート		22	
468902	細胞診報告書_診断2	病理検査部門	病理レポート		22	
468903	細胞診報告書_診断3	病理検査部門	病理レポート		22	
4690	病理診断報告書	病理検査部門	病理レポート		23	
6394	一般細胞検査報告書01	病理検査部門	病理レポート		6394	
6547	細胞診報告書	病理検査部門	病理レポート		6547	
6610	一般細胞検査報告書02	病理検査部門	病理レポート		6610	
9087	病理_組織診_受付	病理検査部門	受付票・用紙		9087	
100007	組織診検査依頼書	病理検査部門	依頼・指示書		100007	
100022	細胞診検査依頼書	病理検査部門	依頼・指示書		100022	

例3：入力枠に「読影」と入力し、部署枠に「放射線部門」をプルダウンで選択
検索文字と部署枠に入力されたものを表示します。

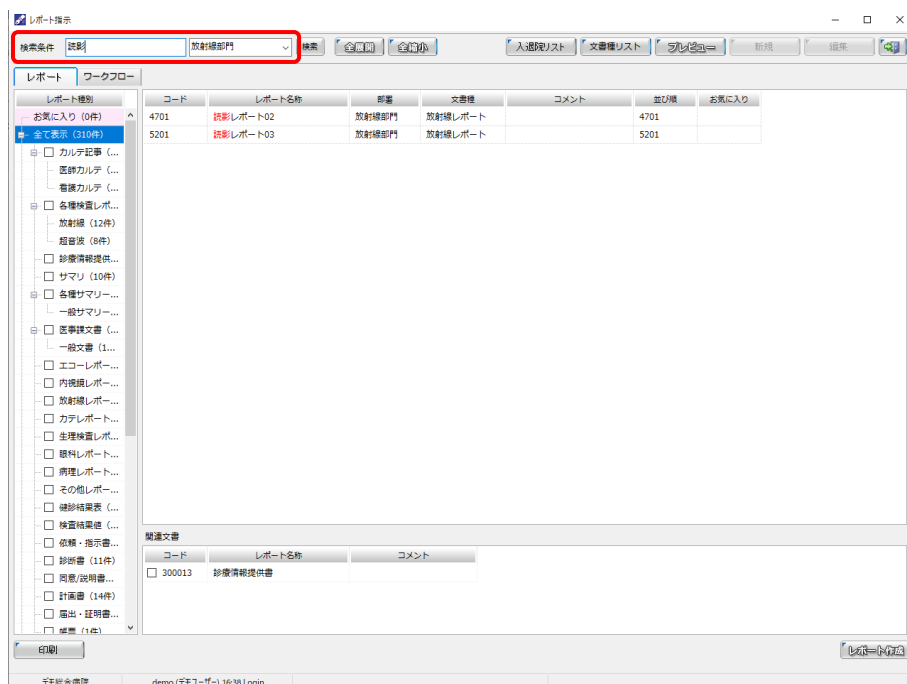

コード	レポート名称	部署	文書種	コメント	並び順	お気に入り
4701	読影レポート02	放射線部門	放射線レポート		4701	
5201	読影レポート03	放射線部門	放射線レポート		5201	

例4：部署枠に「内科」と入力
部署名に「内科」を含むものを全て表示します。

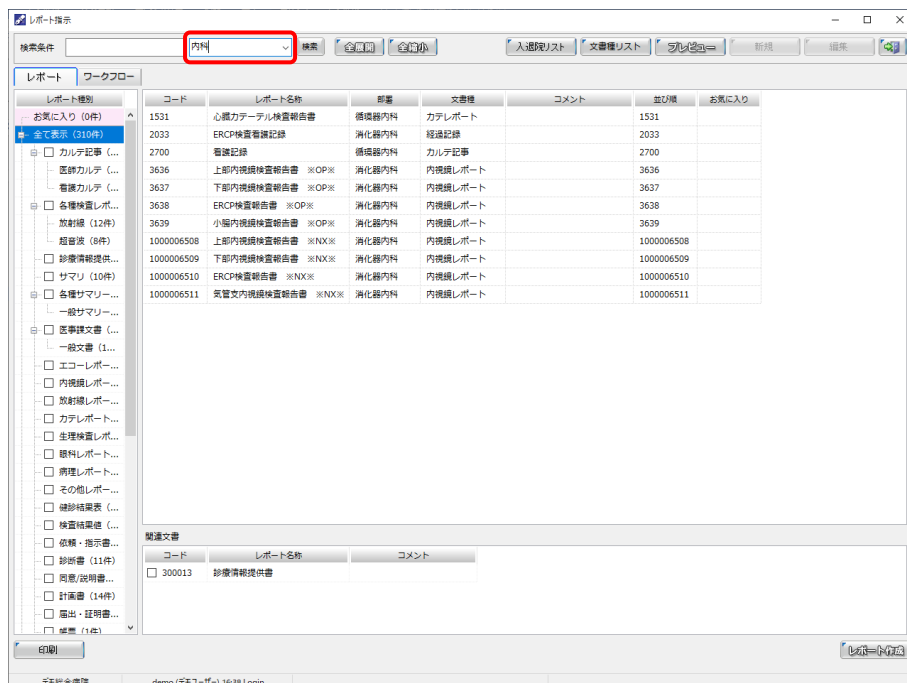


コード	レポート名称	部署	文書種	コメント	並び順	お気に入り
1531	心臓カテーテル検査報告書	循環器内科	カテーテルレポート		1531	
2033	ERCP検査看護記録	消化器内科	看護記録		2033	
2700	看護記録	循環器内科	カルテ記事		2700	
3636	上部内視鏡検査報告書 ※OP※	消化器内科	内視鏡レポート		3636	
3637	下部内視鏡検査報告書 ※OP※	消化器内科	内視鏡レポート		3637	
3638	ERCP検査報告書 ※OP※	消化器内科	内視鏡レポート		3638	
3639	小腸内視鏡検査報告書 ※OP※	消化器内科	内視鏡レポート		3639	
1000006508	上部内視鏡検査報告書 ※NDC※	消化器内科	内視鏡レポート		1000006508	
1000006509	下部内視鏡検査報告書 ※NDC※	消化器内科	内視鏡レポート		1000006509	
1000006510	ERCP検査報告書 ※NDC※	消化器内科	内視鏡レポート		1000006510	
1000006511	気管支内視鏡検査報告書 ※NDC※	消化器内科	内視鏡レポート		1000006511	


②[全展開]・[全縮小]ボタン

レポート種別を全展開・全縮小表示します。

[全展開]ボタンをクリックすると、レポート種別を全て展開します。

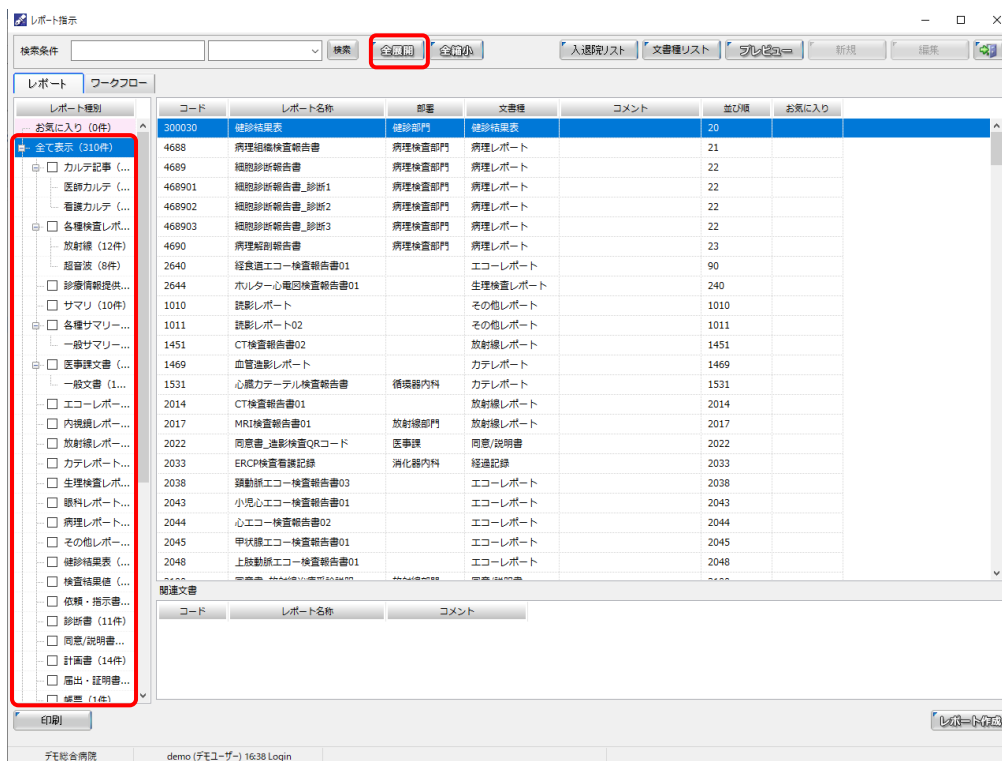


展開不要の箇所は[田]をクリックすると縮小することができます。

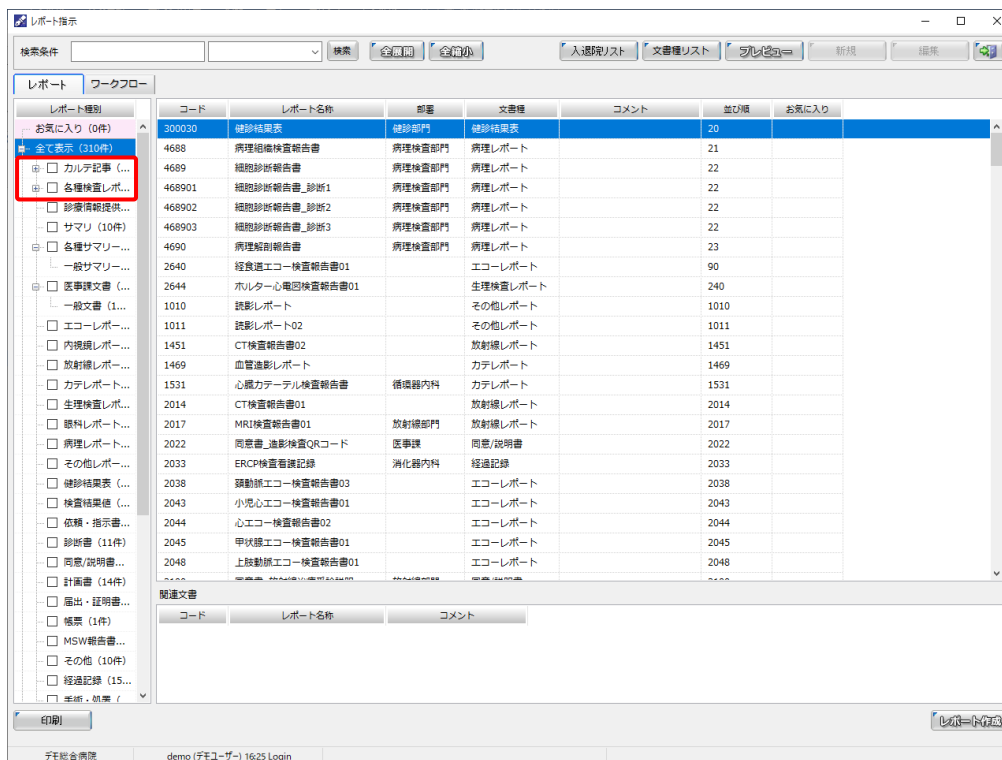


③[入退院リスト]・[文書種リスト]ボタン

[入退院リスト]ボタンをクリックすると、患者の入退院リストが表示されます。

1. [全展開]・[全縮小]ボタン：入退院リストを展開・縮小表示します。
2. ステータスボタン：選択したステータスで集約することができます（複数選択可）。

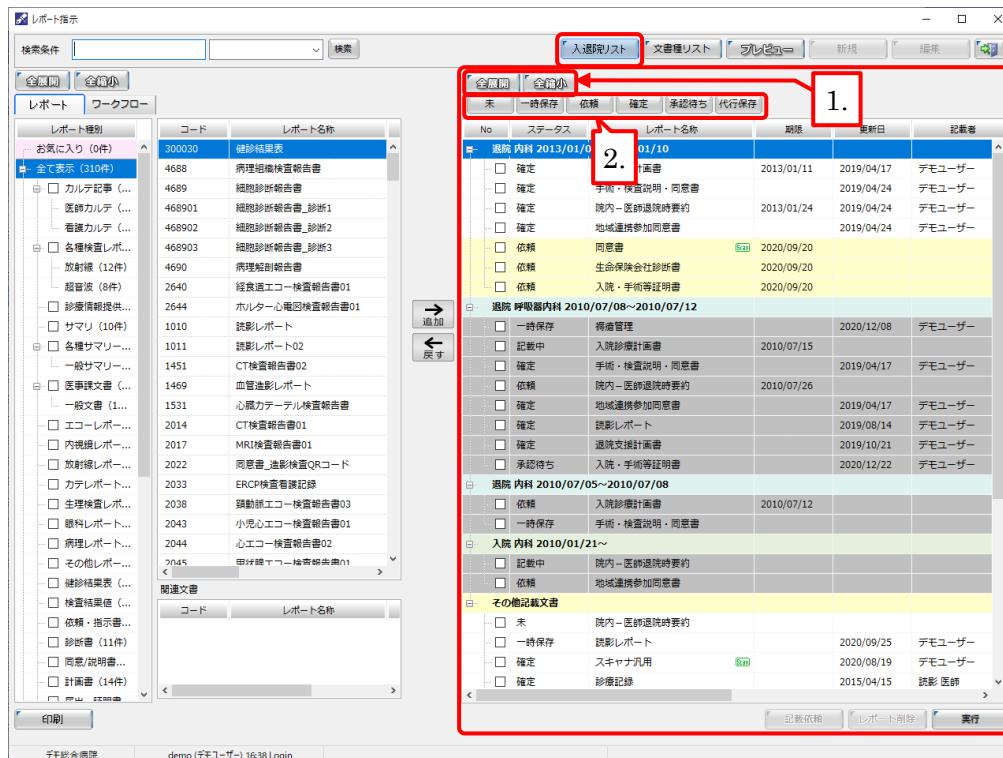


例：[一時保存]と[依頼]ボタンを ON にした場合

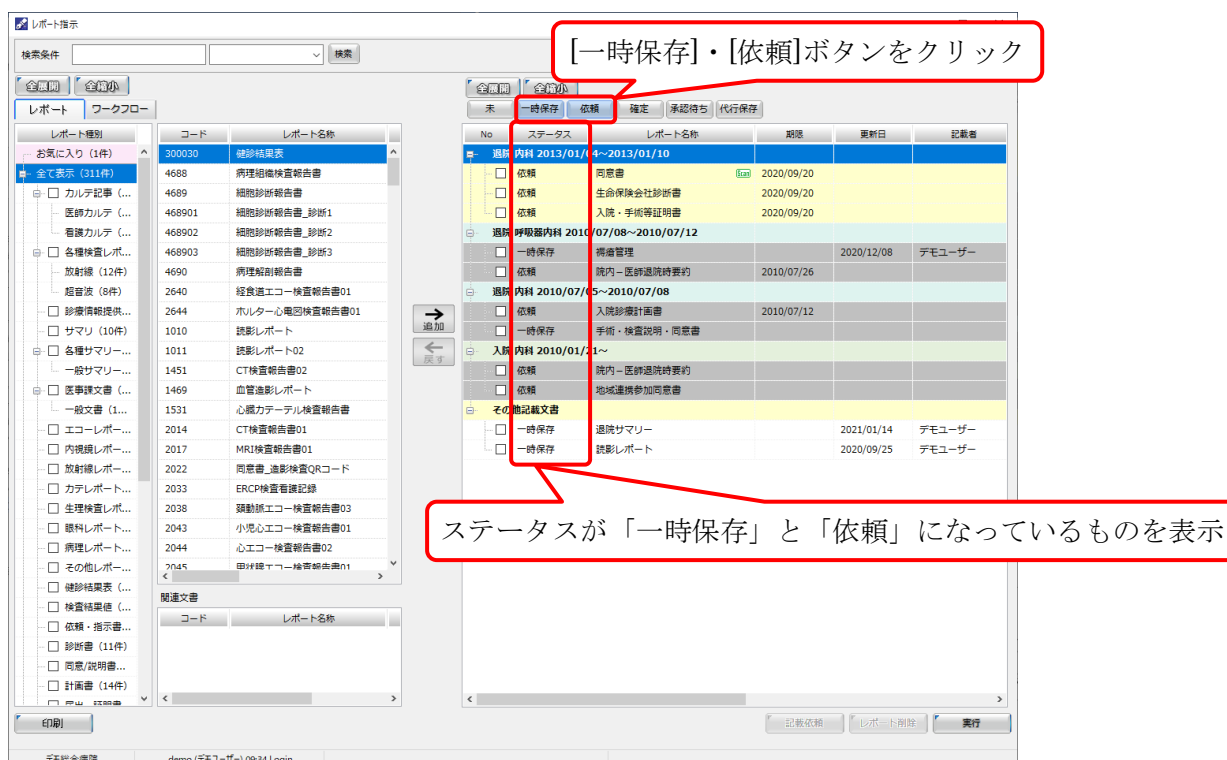


3. [追加]・[戻す]ボタン

入退院リスト画面のレポートを追加・削除します。

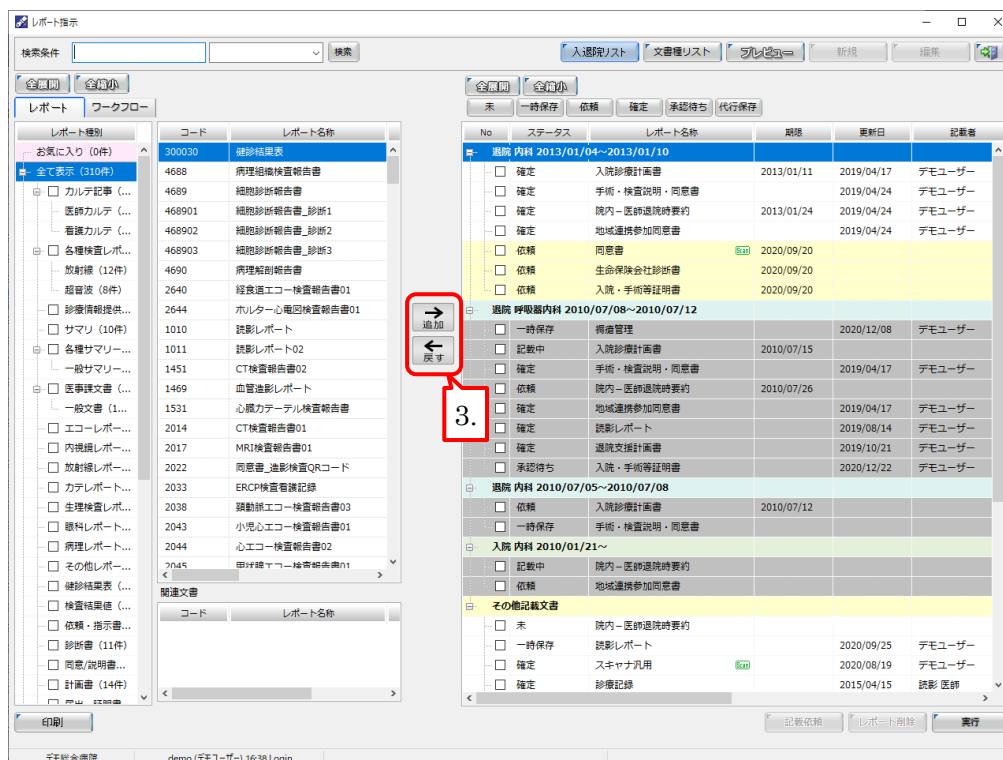


[追加]ボタン

新規レポートを追加する際に、レポートを選択し[追加]ボタンをクリックします。

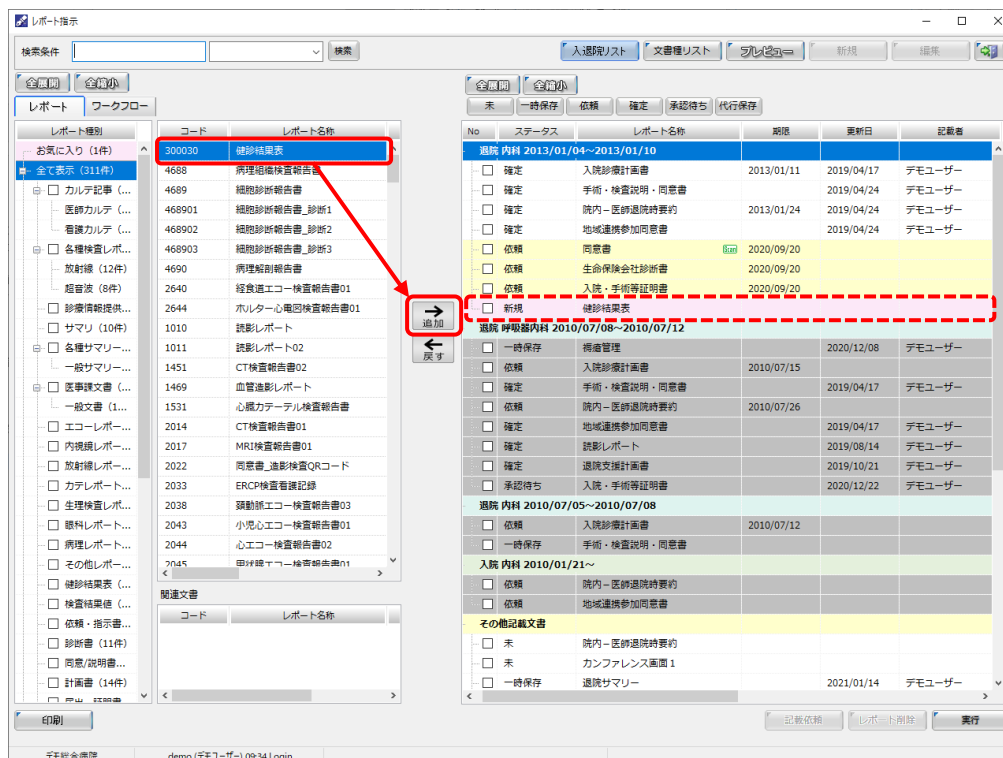


[戻す]ボタン

[戻す]をクリックするとリストから削除します。(複数選択可)。ここではステータスが「新規」のレポートを選択します。

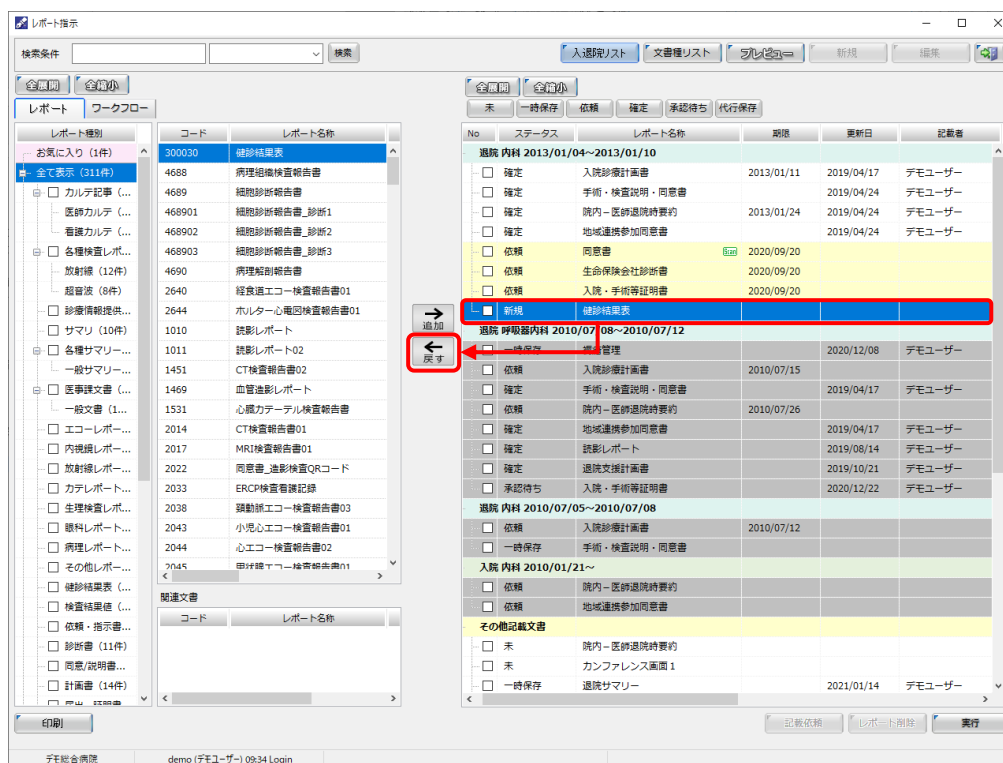

The screenshot shows the 'レポート指示' (Report Instruction) window. On the left, there's a sidebar with 'レポート' (Report) and 'ワークフロー' (Workflow) tabs. Under 'レポート', there's a list of report types. A red box highlights the '戻す' (Return) button. The main area shows a list of reports. A red box highlights a report with status '新規' (New). A red arrow points to the '戻す' (Return) button in the left sidebar.


[戻す]ボタンをクリックすることで、選択したレポートをリストから削除します。

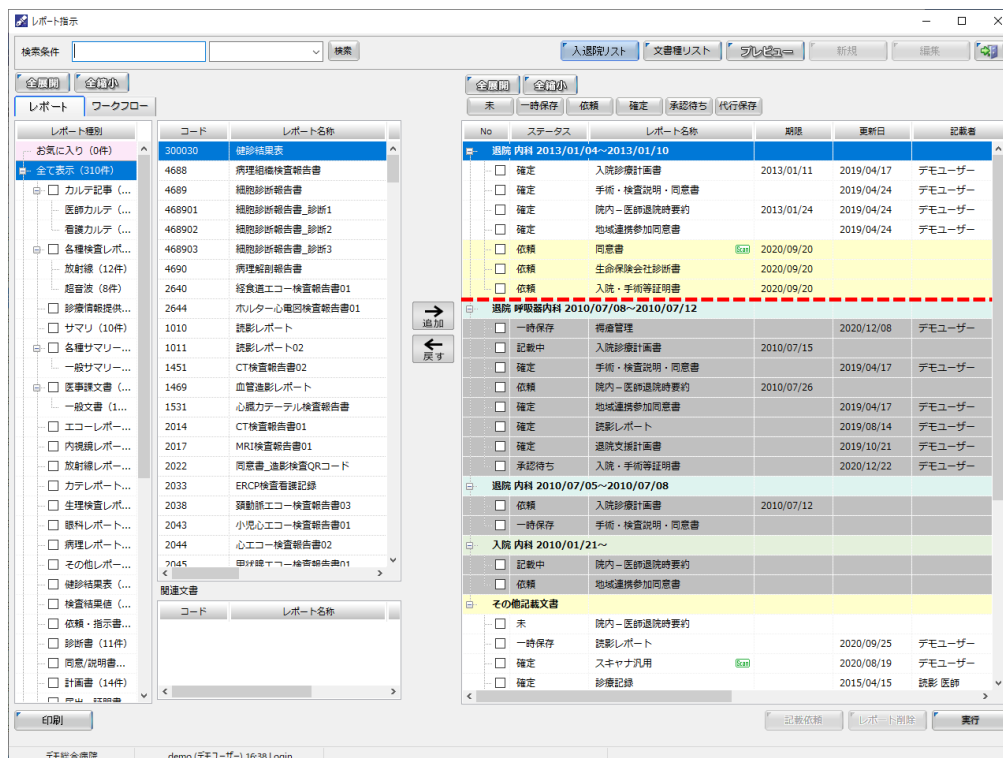


The screenshot shows the 'レポート指示' (Report Instruction) window after clicking the '戻す' (Return) button. The report that was previously highlighted is now removed from the list. The '戻す' (Return) button is still visible in the left sidebar.

4. [記載依頼]・[レポート削除]（ステータスが「未」もしくは「依頼」のレポートを選択時に表示） [記載依頼]


依頼するレポートをクリックし、[記載依頼]ボタンをクリックします。

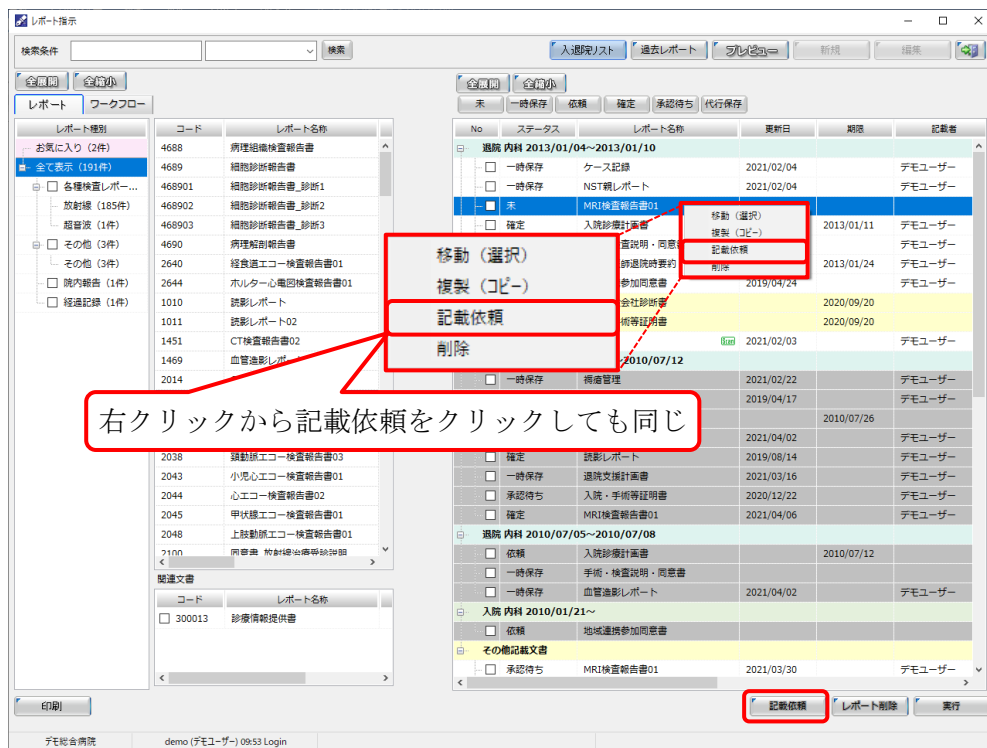


医師・期限・コメントを入力して[決定]ボタンをクリックし、記載依頼をします。

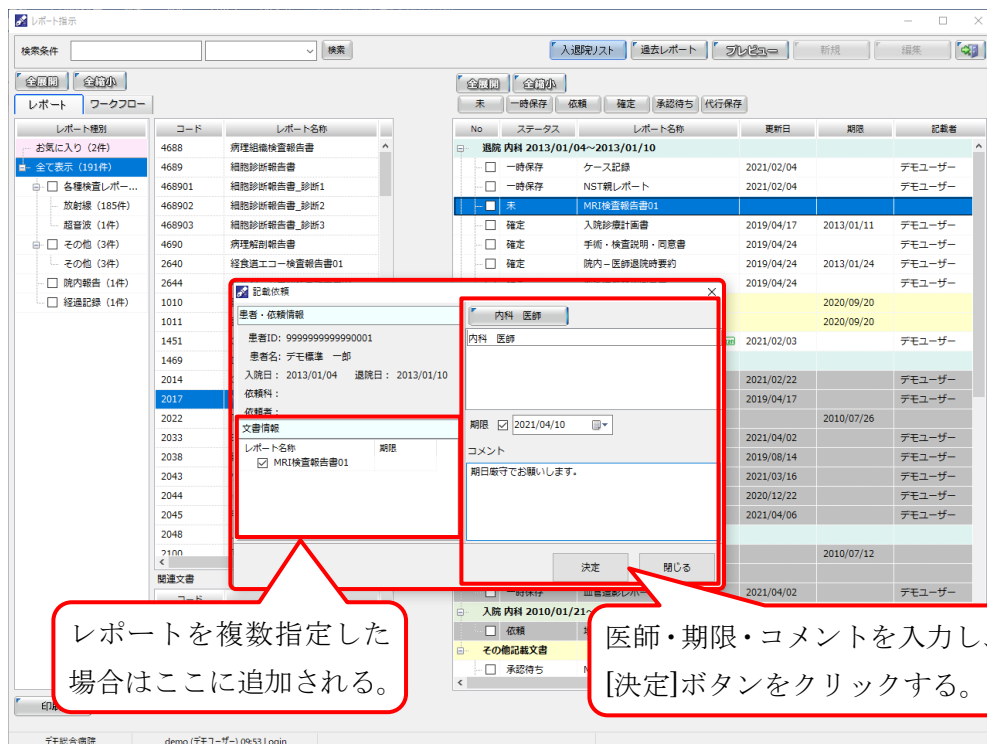

ダイアログで「記載依頼します。よろしいですか？[はい] [いいえ]」と表示されるので[はい]ボタンをクリックすると、記載依頼が完了します。

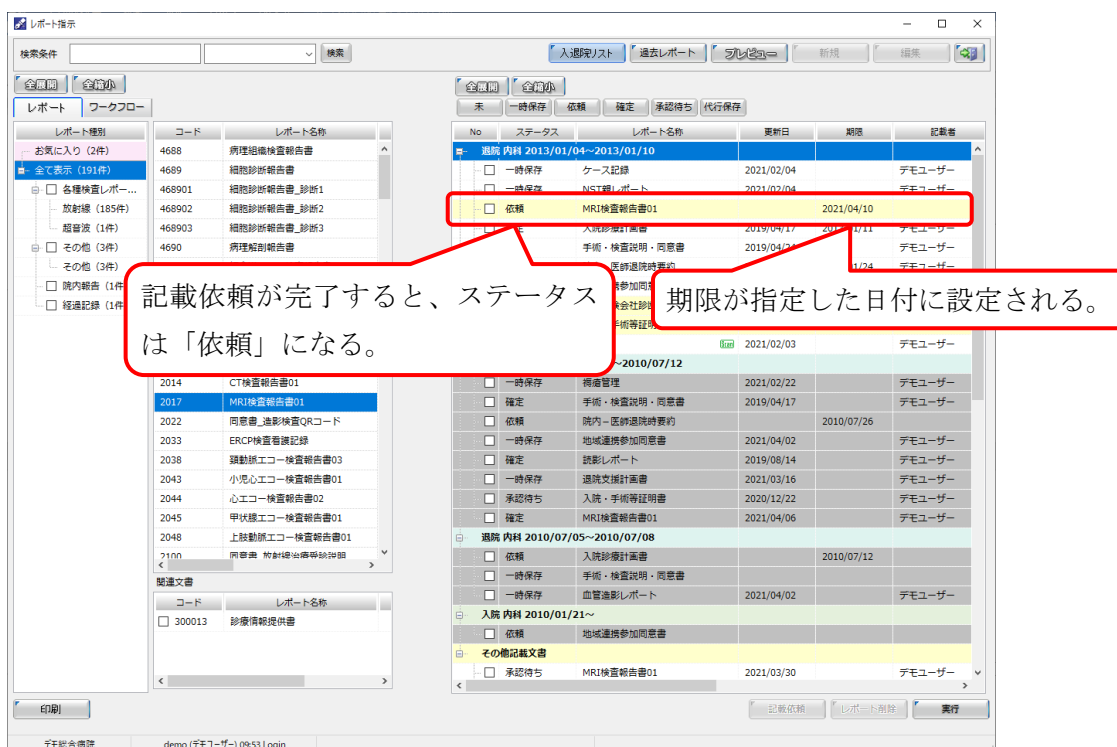


表示範囲をスライドバーで移動すると記載依頼日・記載依頼先を確認できます

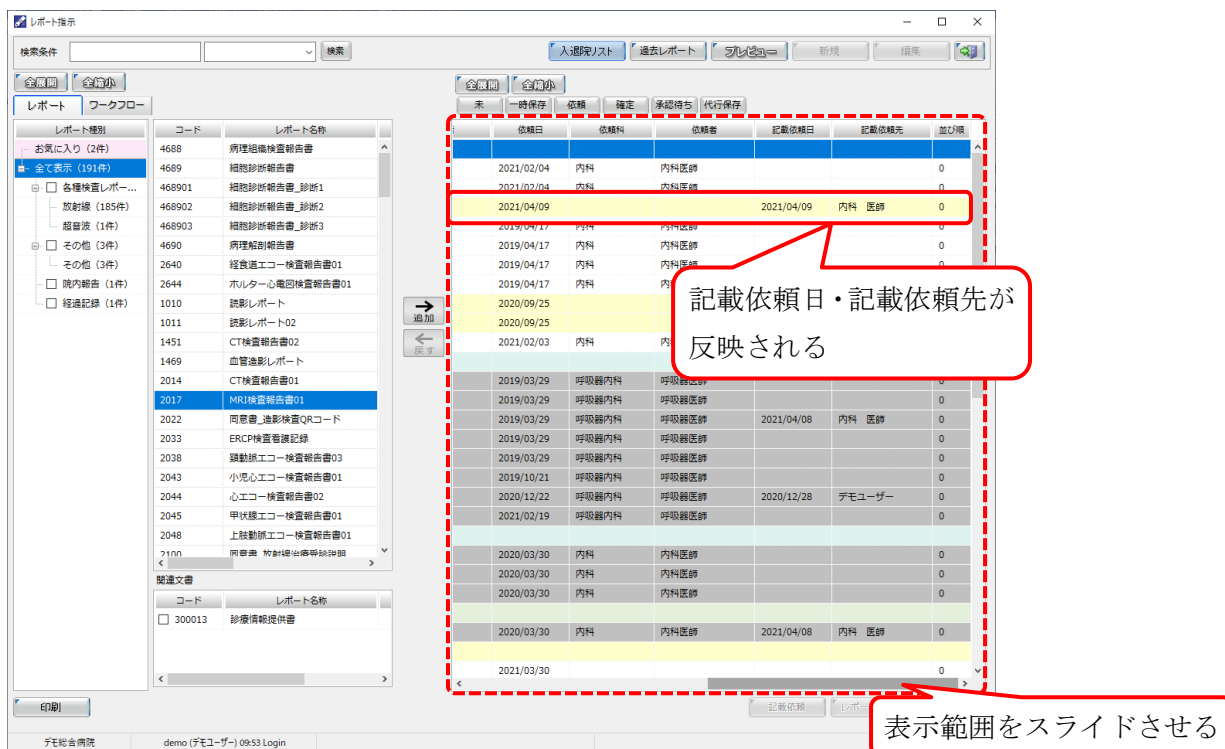


[レポート削除]

削除するレポートをクリックし、[削除]ボタンをクリックするとリストから削除します。

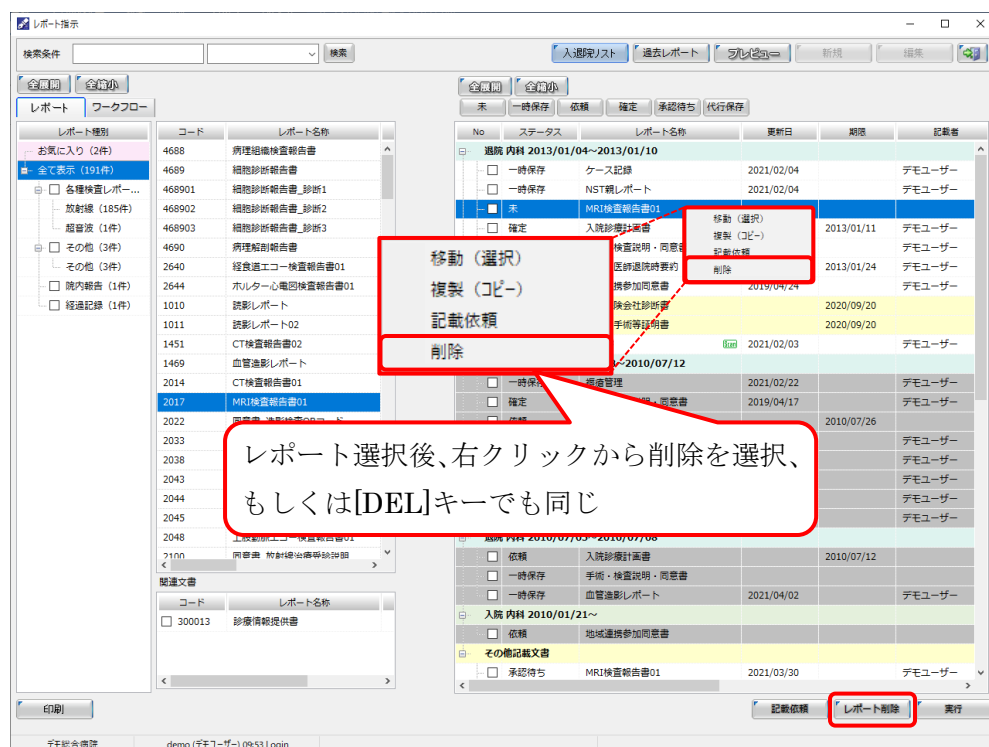


[文書種別リスト]ボタンをクリックすると、レポート別にリスト表示します。

ボタン操作は入退院リストと同様です。

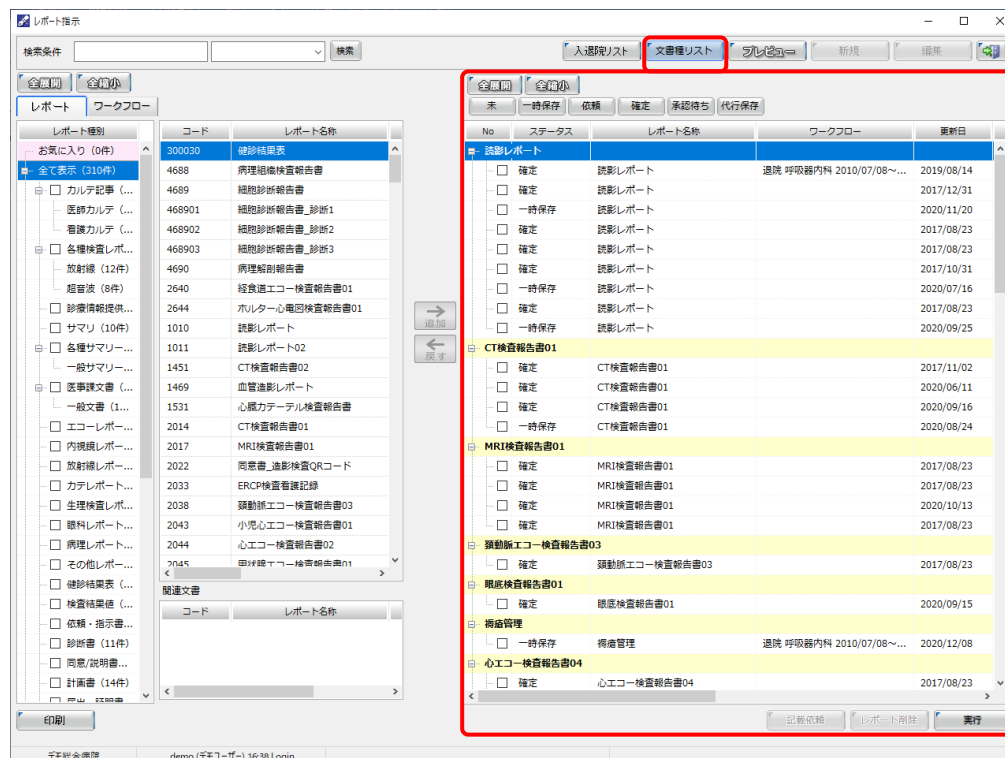

④[プレビュー]ボタン



プレビューの表示／非表示を切り替えます。

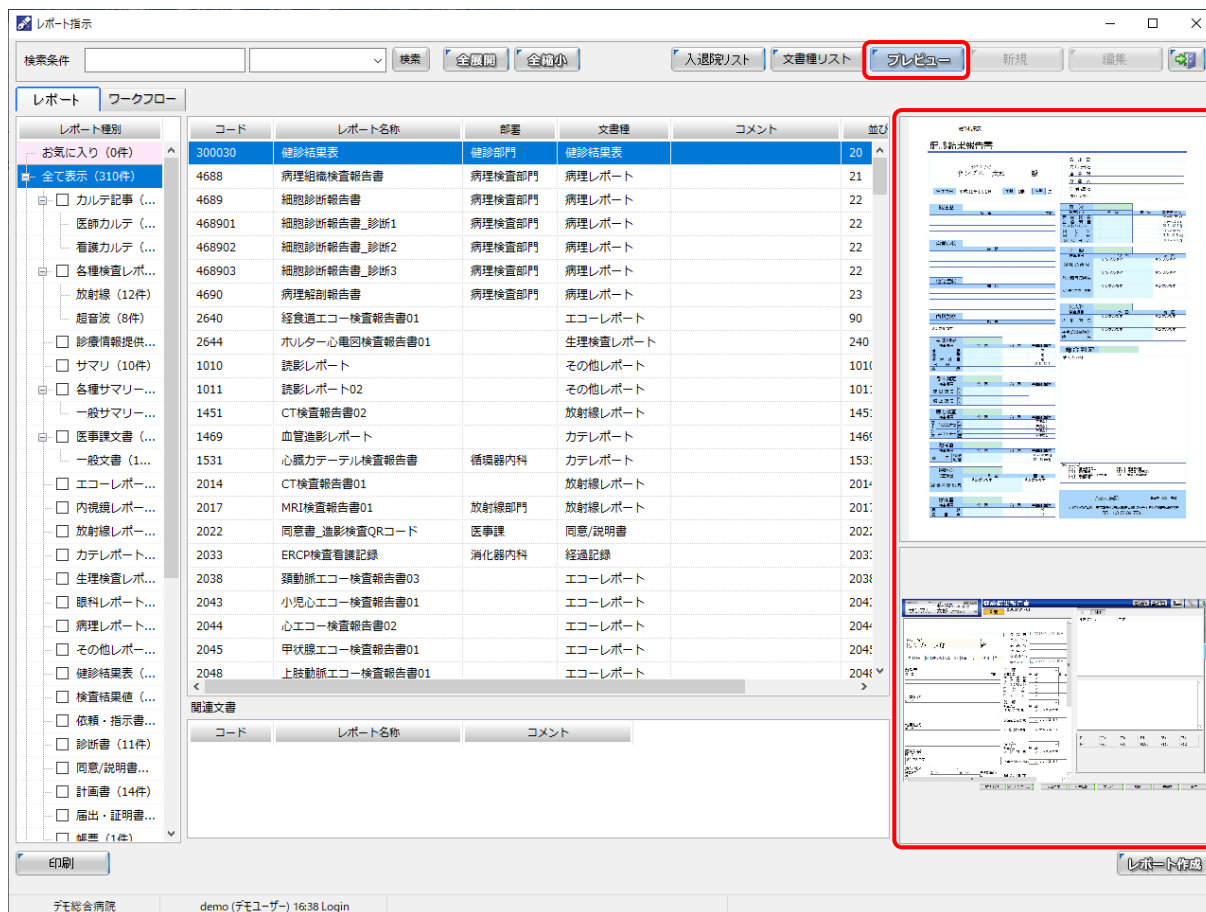

プレビュー画像をそれぞれダブルクリックすると、サムネイルを拡大表示することができます。

プレビュー上図（出力画面）

プレビュー下図（入力画面）

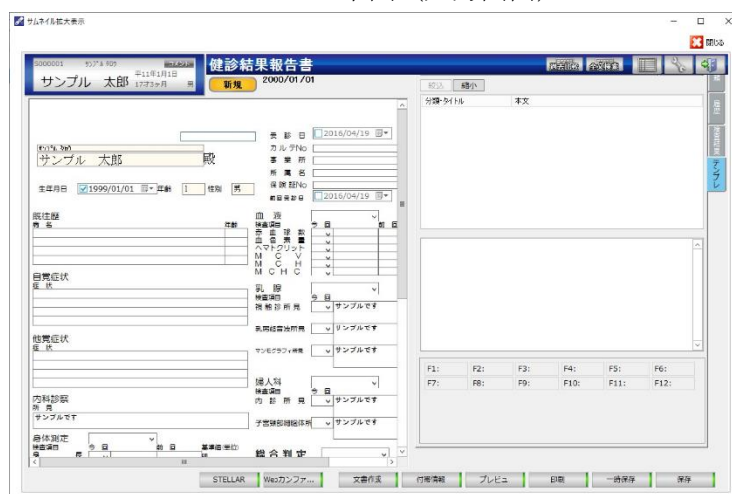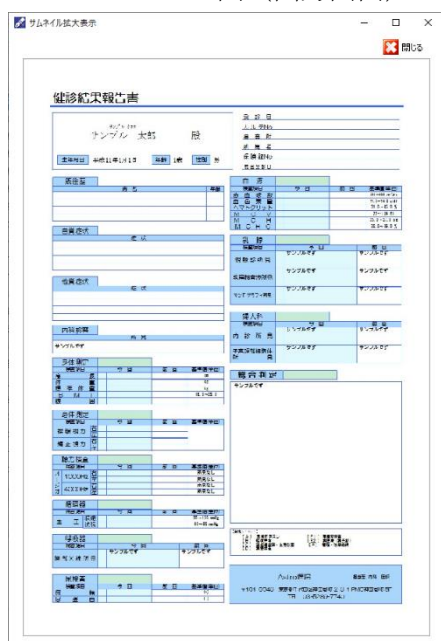

[プレビュー]ボタンを OFF にすると、プレビューを非表示にします

レポート指示

検索条件

検索

全展開

全縮小

入院リスト

文書種リスト

プレビュー

新規

編集

レポート

ワークフロー

レポート種別

お気に入り (0件)

全て表示 (310件)

カルテ記事 (...)

医師カルテ (...)

看護カルテ (...)

各種検査レポ...

放射線 (12件)

超音波 (8件)

診療情報提供...

サマリ (10件)

各種サマリ...

一般サマリ...

医事課文書 (...)

一般文書 (1...

エコーレポ...

内視鏡レポ...

放射線レポ...

カテレポート...

生体検査レポ...

眼科レポート...

病理レポート...

その他レポ...

健診結果表 (...)

検査結果表 (...)

依頼・指示書...

診断書 (11件)

同意/説明書...

計画書 (14件)

届出・証明書...

検査 (1件)

コード

レポート名称

部署

文書種

コメント

並び順

お気に入り

300030	健診結果表	健診部門	健診結果表		20	
4688	病理組織検査報告書	病理検査部門	病理レポート		21	
4689	細胞診断報告書	病理検査部門	病理レポート		22	
468901	細胞診断報告書_診断1	病理検査部門	病理レポート		22	
468902	細胞診断報告書_診断2	病理検査部門	病理レポート		22	
468903	細胞診断報告書_診断3	病理検査部門	病理レポート		22	
4690	病理解剖報告書	病理検査部門	病理レポート		23	
2640	経食道エコー検査報告書01		エコーレポート		90	
2644	ホルター心電図検査報告書01		生体検査レポート		240	
1010	読影レポート		その他レポート		1010	
1011	読影レポート02		その他レポート		1011	
1451	CT検査報告書02		放射線レポート		1451	
1469	血管造影レポート		カテレポート		1469	
1531	心臓カテーテル検査報告書	循環器内科	カテレポート		1531	
2014	CT検査報告書01		放射線レポート		2014	
2017	MRI検査報告書01	放射線部門	放射線レポート		2017	
2022	同意書_造影検査QRコード	医事課	同意/説明書		2022	
2033	ERCP検査看護記録	消化器内科	経過記録		2033	
2038	頸動脈エコー検査報告書03		エコーレポート		2038	
2043	小児心エコー検査報告書01		エコーレポート		2043	
2044	心エコー検査報告書02		エコーレポート		2044	
2045	甲状腺エコー検査報告書01		エコーレポート		2045	
2048	上肢動脈エコー検査報告書01		エコーレポート		2048	

関連文書

コード	レポート名称	コメント

印刷


レポート作成

デモ総合病院


demo (デモユーザ) 16:38 Login

⑤お気に入り

よく使うレポートを右クリックし、「お気に入りに登録」を選択すると[お気に入り]へ追加されます。

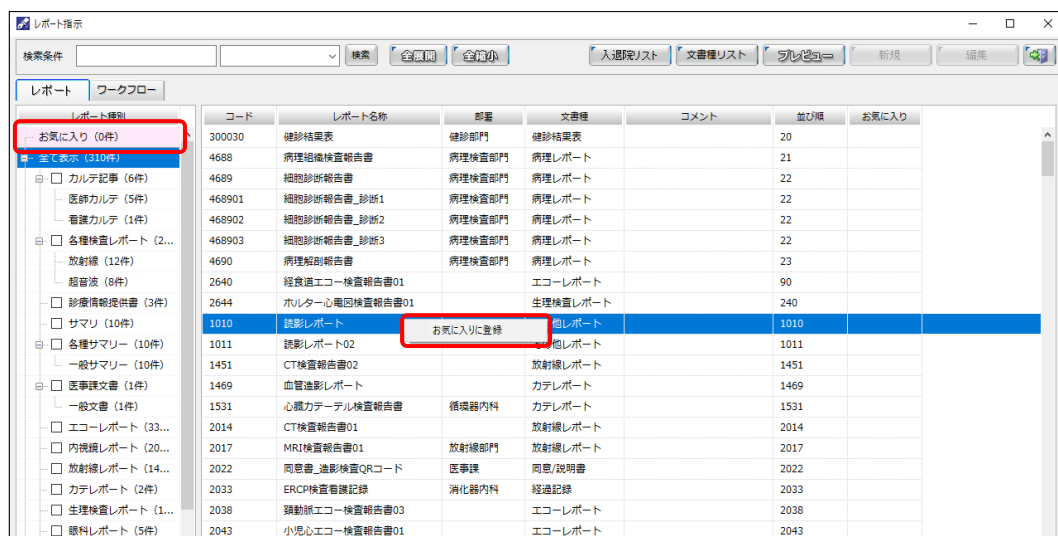


レポート種別	コード	レポート名称	部署	文書種	コメント	並び順	お気に入り
お気に入り (0件)	300030	健診結果表	健診部門	健診結果表		20	
すべて表示 (210件)	4688	病理組織検査報告書	病理検査部門	病理レポート		21	
カルテ記事 (6件)	4689	細胞診断報告書	病理検査部門	病理レポート		22	
医師カルテ (5件)	468901	細胞診断報告書_診断1	病理検査部門	病理レポート		22	
看護カルテ (1件)	468902	細胞診断報告書_診断2	病理検査部門	病理レポート		22	
各種検査レポート (2...)	468903	細胞診断報告書_診断3	病理検査部門	病理レポート		22	
放射線 (12件)	4690	病理診断報告書	病理検査部門	病理レポート		23	
超音波 (8件)	2640	経食道エコー検査報告書01		エコーレポート		90	
診療情報提供書 (3件)	2644	ホルター心電図検査報告書01		生体検査レポート		240	
サマリ (10件)	1010	読影レポート		他レポート		1010	
各種サマリ (10件)	1011	読影レポート02		他レポート		1011	
一般サマリ (10件)	1451	CT検査報告書02		放射線レポート		1451	
医事課文書 (1件)	1469	血管造影レポート		カテレポート		1469	
一般文書 (1件)	1531	心臓カテーテル検査報告書	循環器内科	カテレポート		1531	
エコーレポート (33...)	2014	CT検査報告書01		放射線レポート		2014	
内視鏡レポート (20...)	2017	MRI検査報告書01	放射線部門	放射線レポート		2017	
放射線レポート (14...)	2022	同意書_造影検査QRコード	医事課	同意/説明書		2022	
カテレポート (2件)	2033	ERCP検査看護記録	消化器内科	経過記録		2033	
生体検査レポート (1...)	2038	頸動脈エコー検査報告書03		エコーレポート		2038	
眼科レポート (5件)	2043	小児心エコー検査報告書01		エコーレポート		2043	

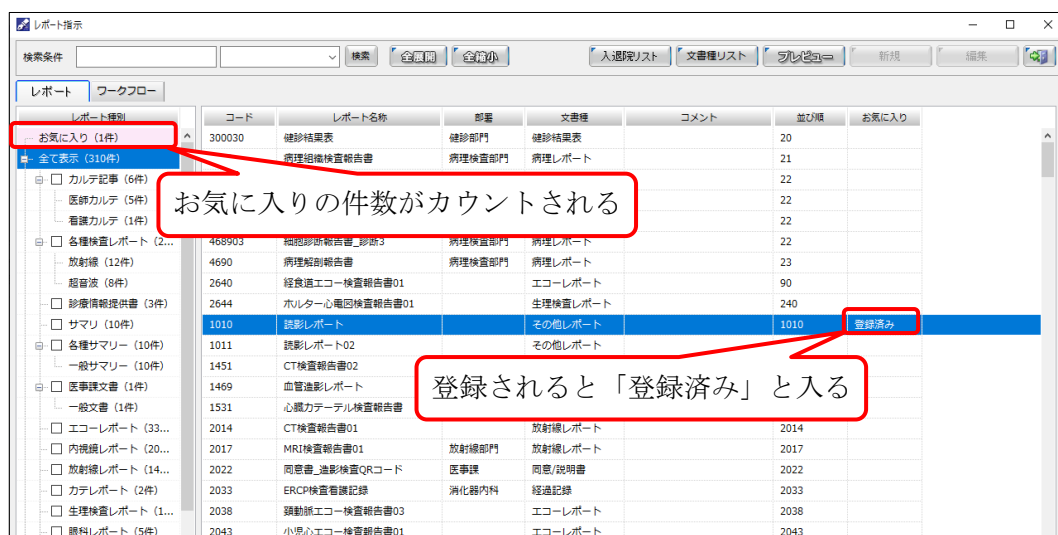

お気に入りの件数がカウントされる

登録されると「登録済み」と入る

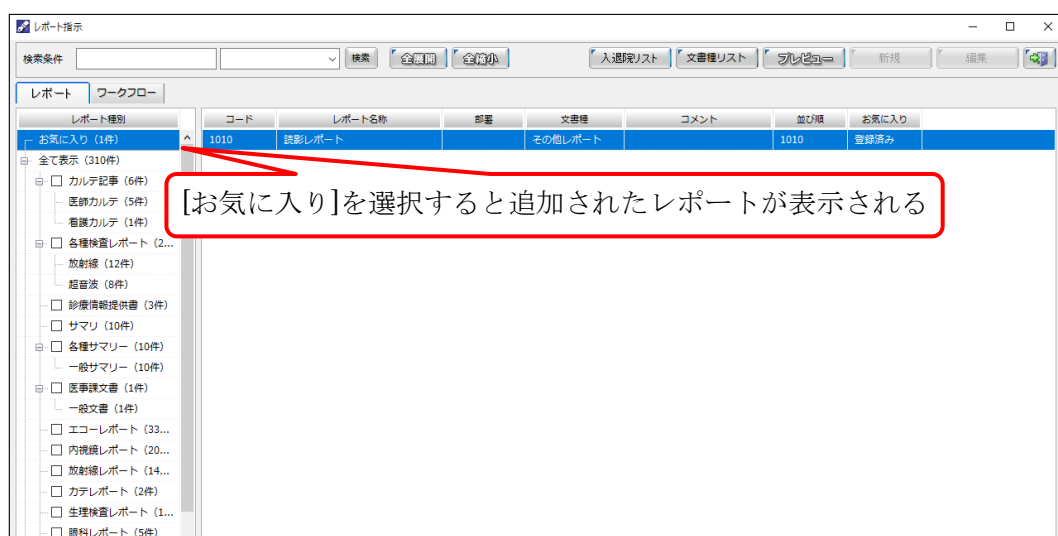

[お気に入り]を選択すると追加されたレポートが表示される

⑥[印刷]ボタン

[印刷] ボタンをクリックすると、選択されているレポートを印刷します。

レポート作成

検索条件

検索 全展開 全縮小

入退院リスト 文書種リスト プレビュー 新規 編集

レポート ワークフロー

レポート種別

お気に入り (0件)

全て表示 (310件)

カルテ記事 (...)

医師カルテ (...)

看護カルテ (...)

各種検査レポート (...)

放射線 (8件)

超音波 (8件)

診療情報提供書 (...)

サマリ (10件)

各種サマリ (...)

一般サマリ (...)

医事課文書 (...)

一般文書 (1...)

エコーレポート (...)

内視鏡レポート (...)

放射線レポート (...)

カテレポート (...)

生理検査レポート (...)

眼科レポート (...)

病理レポート (...)

その他レポート (...)

健診結果表 (...)

検査結果通知 (...)

依頼・指示書 (...)

診断書 (11件)

同意/説明書 (...)

計画書 (14件)

届出・証明書 (...)

検査票 (1件)

印刷

コード レポート名称 部署 文書種 コメント 並び

300030 健診結果表 健診部門 健診結果表 20

4688 病理組織検査報告書 病理検査部門 病理レポート 21

4689 細胞診断報告書 22

468901 細胞診断報告書_診断1 22

468902 細胞診断報告書_診断2 22

468903 細胞診断報告書_診断3 病理検査部門 病理レポート 22

4690 病理解剖報告書 病理検査部門 病理レポート 23

2640 経食道エコー検査報告書01 エコーレポート 90

2644 ホルター心電図検査報告書01 生理検査レポート 240

1010 誤影レポート その他レポート 1010

1011 誤影レポート02 その他レポート 1010

1451 CT検査報告書02 放射線レポート 1450

1469 血管造影レポート カテレポート 1460

1531 心臓カテーテル検査報告書 循環器内科 カテレポート 1530

2014 CT検査報告書01 放射線レポート 2010

2017 MRI検査報告書01 放射線部門 放射線レポート 2010

2022 同意書_造影検査QRコード 医事課 同意/説明書 2020

2033 ERCP検査看護記録 消化器内科 経過記録 2030

2038 頸動脈エコー検査報告書03 エコーレポート 2030

2043 小児心エコー検査報告書01 エコーレポート 2040

2044 心エコー検査報告書02 エコーレポート 2040

2045 甲状腺エコー検査報告書01 エコーレポート 2040

2048 上肢動脈エコー検査報告書01 エコーレポート 2040

関連文書

コード レポート名称 コメント

① レポートを選択

② [印刷]ボタンをクリック

レポート作成

健診結果報告書

〒147-0001 東京都目黒区

デモ標準 一部

殿

生年月日 昭和62年2月18日

年齢 89歳

性別 男

受診日

力加増

健康

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

悪化

既往歴

病名

経過

自覚症状

症状

他覚症状

症状

内科診察

病名

身体測定

項目

単位

今日

前回

基準値(単位)

身長

cm

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165


165

165

出力結果

⑦[レポート作成]ボタン

選択したレポートを新規作成します。

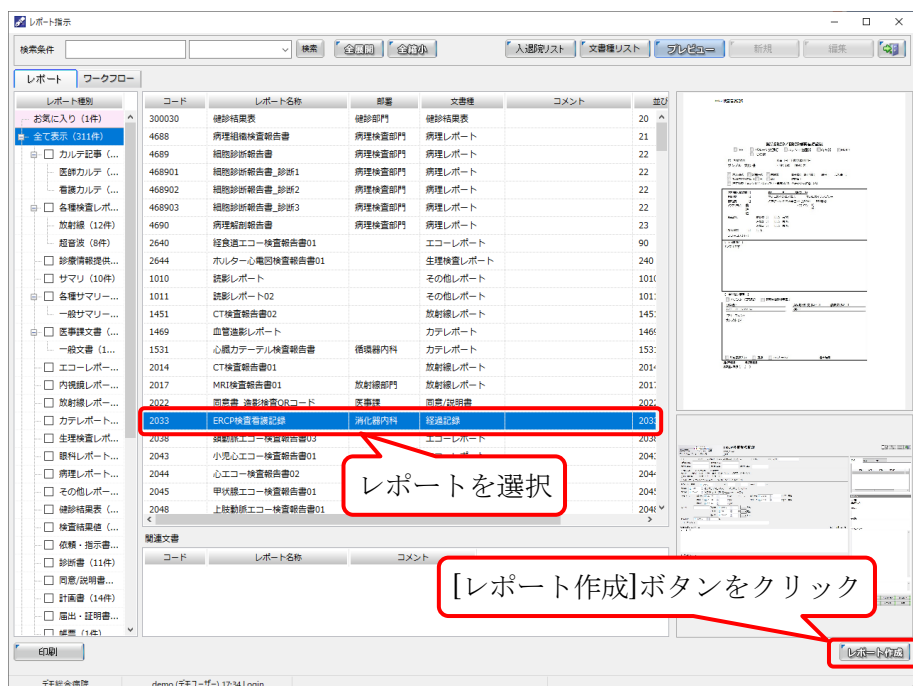

ワンポイント

レポートをダブルクリックしても同じ動作をします。


[レポート作成]ボタンをクリックするとレポート指示画面は終了します。

⑧[終了]ボタン

レポート指示画面を閉じます。

4.2 [ワークフロー]タブ画面

ワークフローの画面は以下ようになります。

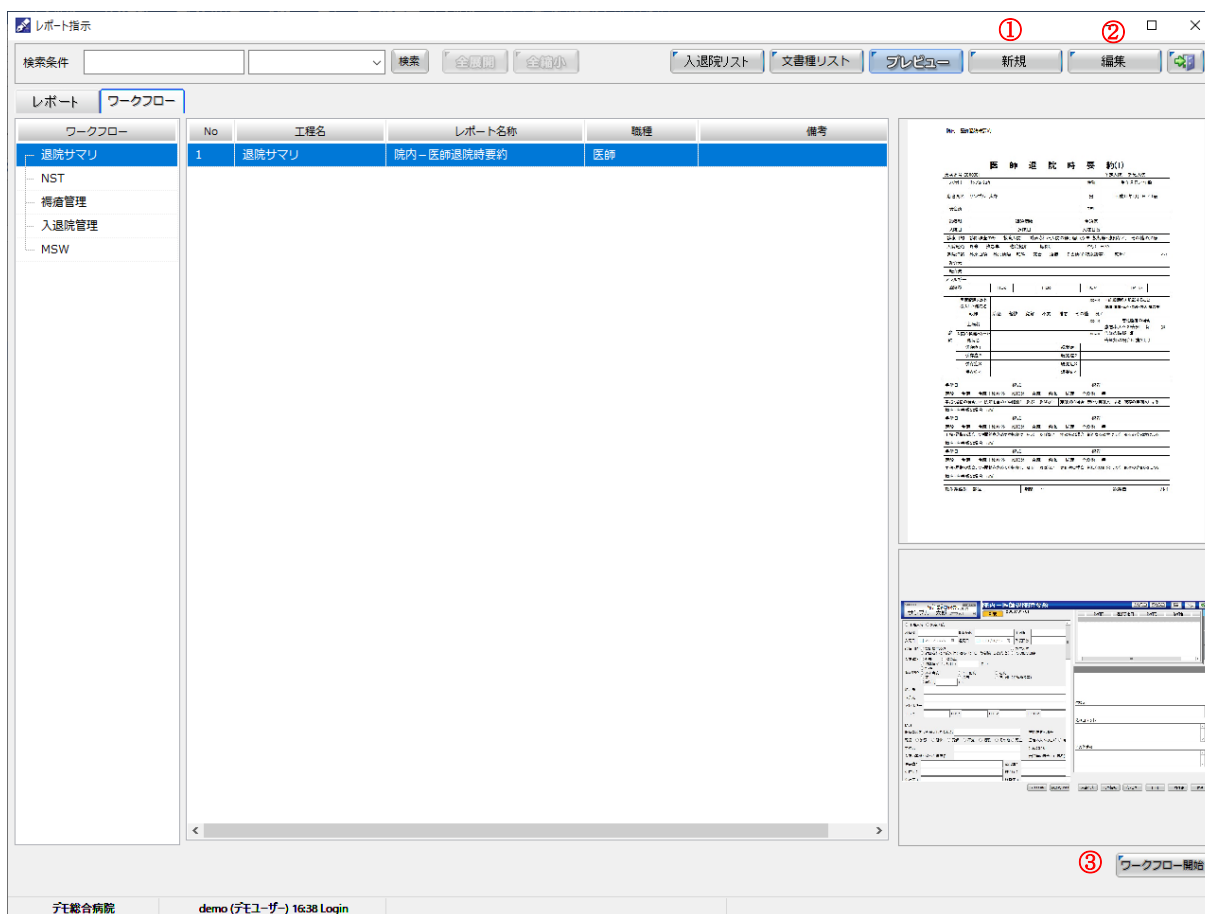

① [新規]ボタン：ワークフローを作成します。


② [編集]ボタン：登録済みのワークフローを編集します。

③ [ワークフロー開始]ボタン：登録済みのワークフローを開始します。


4.2.1 [新規]ボタン

新規ワークフローを作成します。作成方法は2つあります。

[新規]ボタンをクリックします。

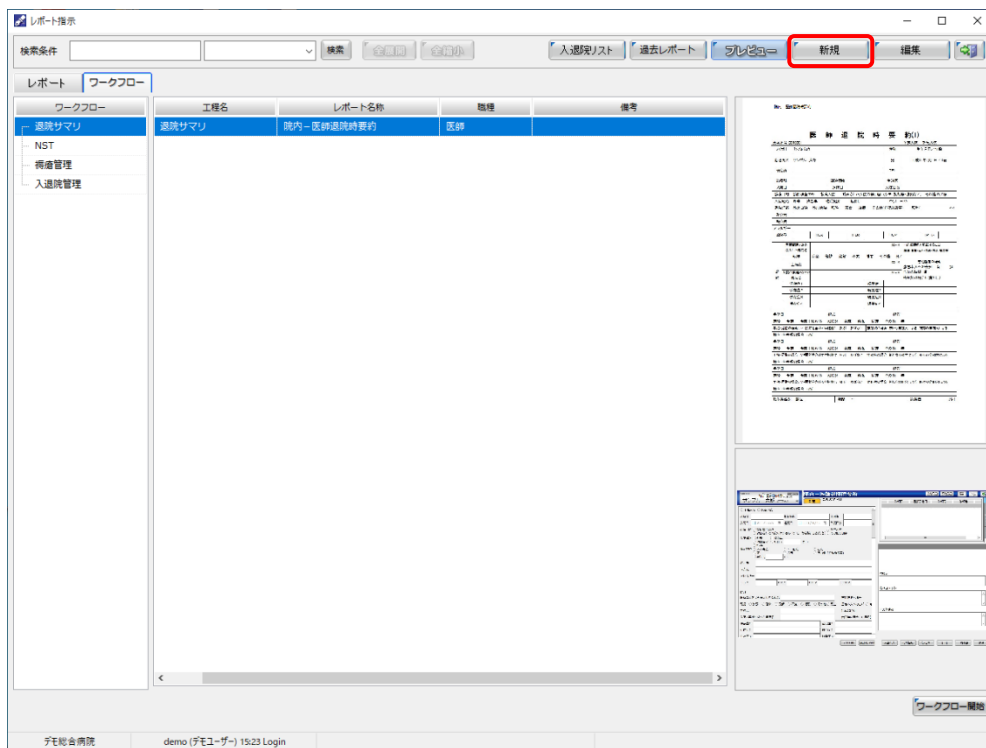



ワークフロー作成ダイアログを表示します。

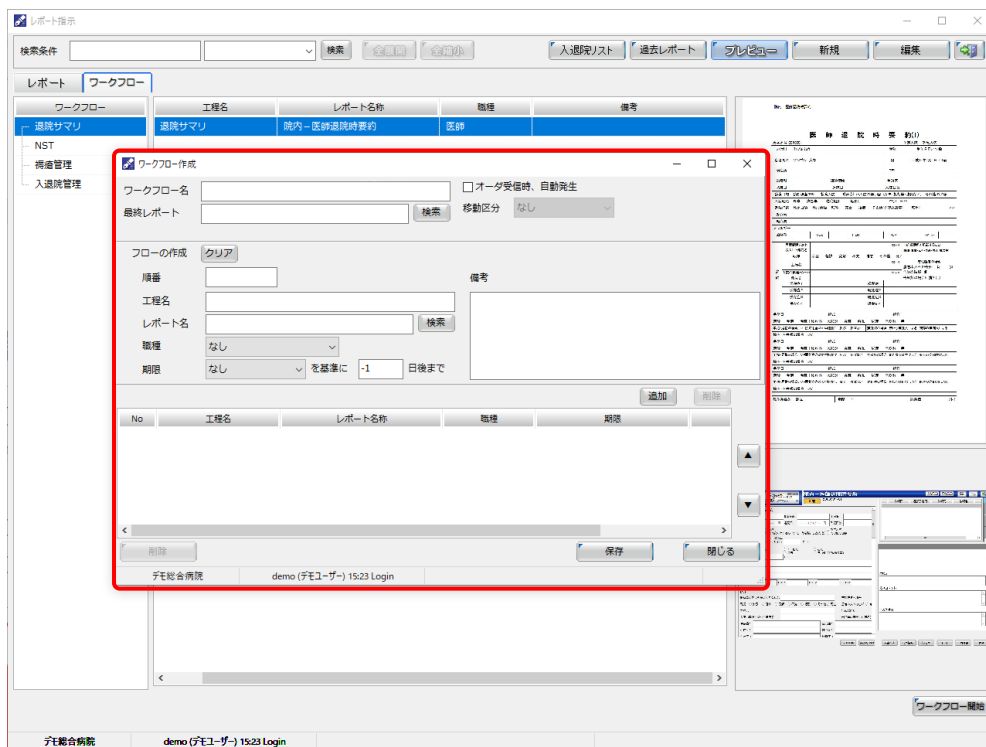


・方法1 最終レポートを設定する

ワークフロー名の枠に名前を入力します。

[検索]ボタンをクリックし、レポート検索から（型となる）最終レポートを選択し、[決定]ボタンをクリックします。

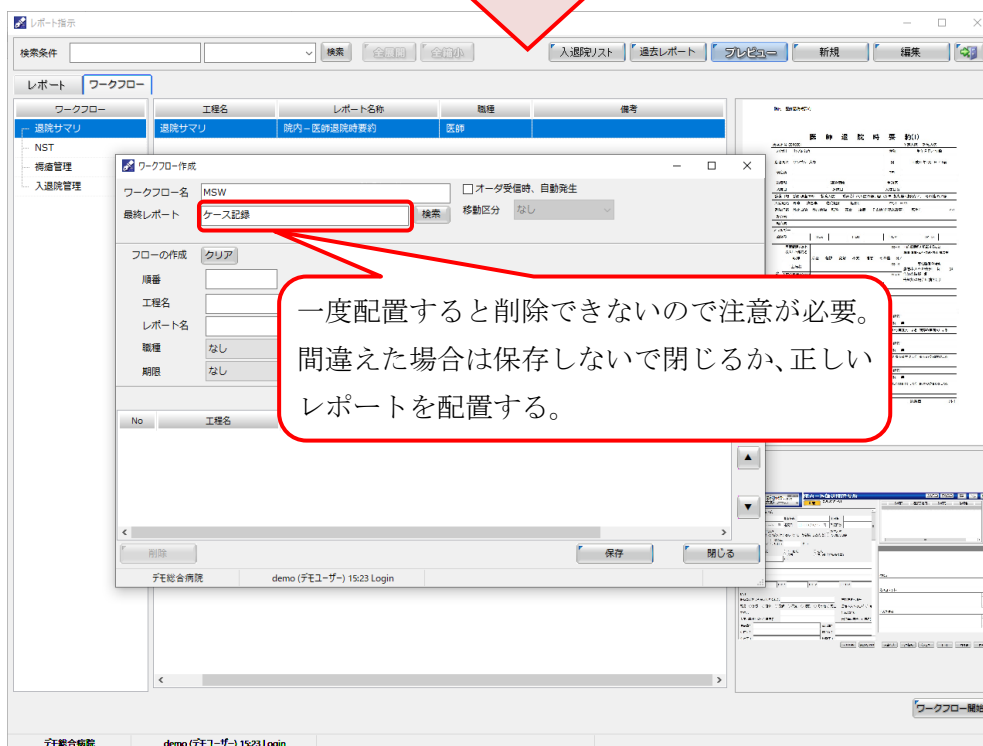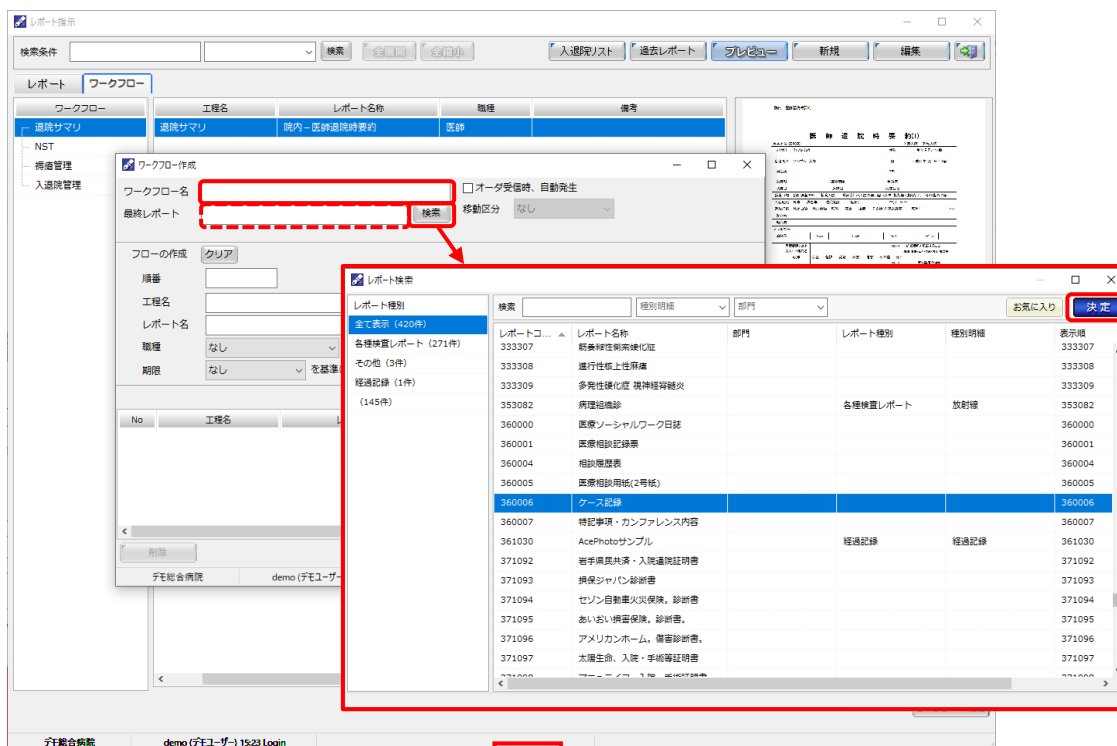

フローの作成枠にレポートを追加します。

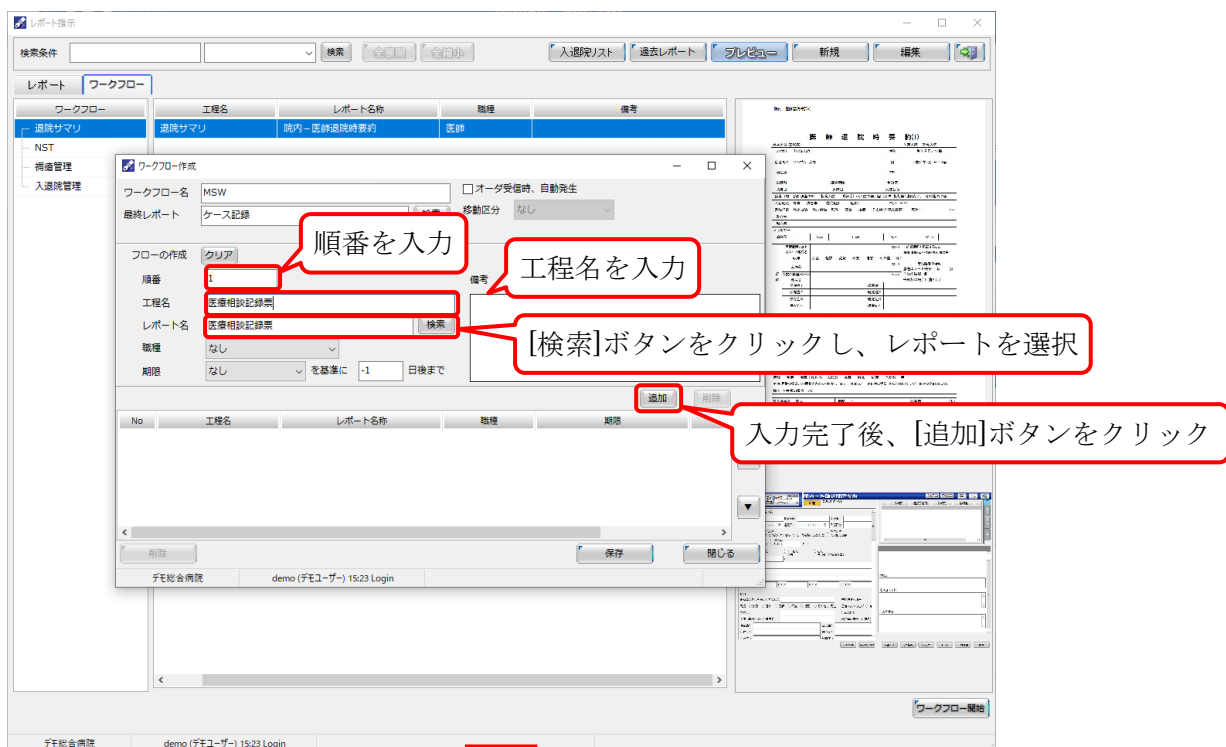

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW

最終レポート: ケース記録

レポート名: 医療相談記録票

検索


追加

順序: 1

工程名: 医療相談記録票

[検索]ボタンをクリックし、レポートを選択

入力完了後、[追加]ボタンをクリック

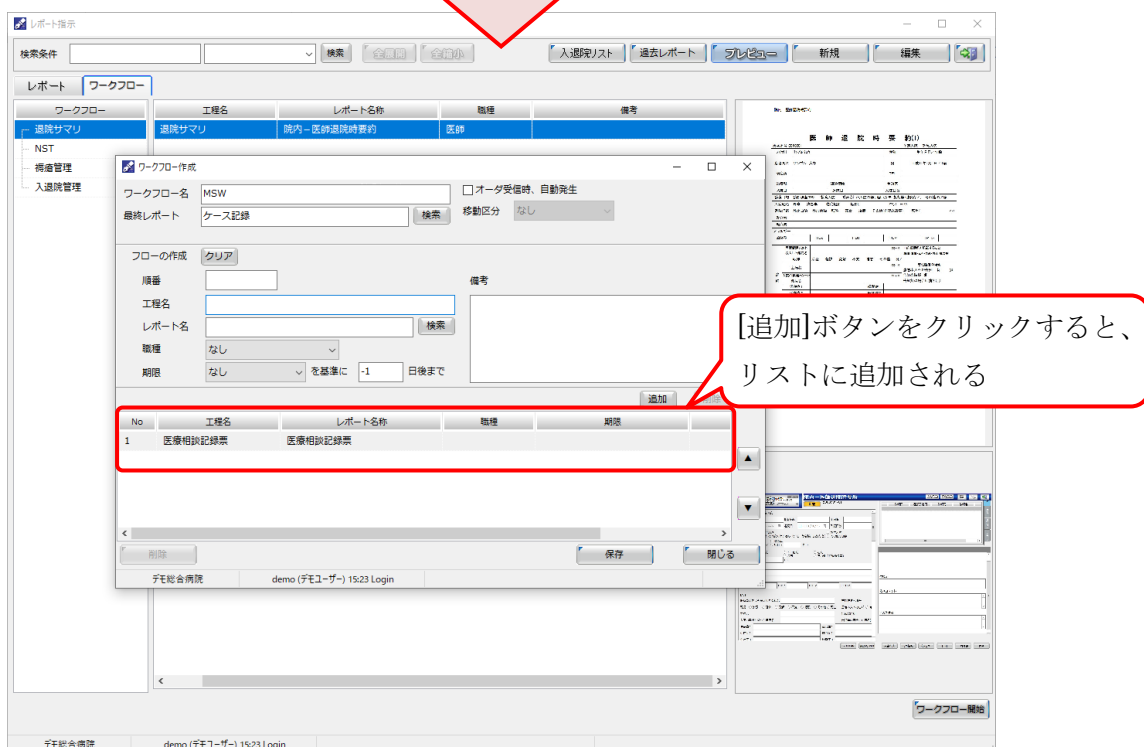

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW

最終レポート: ケース記録

レポート名: 医療相談記録票

検索

追加

順序: 1

工程名: 医療相談記録票

[追加]ボタンをクリックすると、リストに追加される

フローを追加します。手順は前ページと同じです。

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW ☐ オータム受信時、自動発生

最終レポート: ケース記録 移動区分: なし

フローの作成

順番: 備考:

工程名:

レポート名:

職種: なし

期限: なし を基準に -1 日後まで

No	工程名	レポート名称	職種	期限
1	医療相談記録票	医療相談記録票		
2	医療相談用紙(2号紙)	医療相談用紙(2号紙)		
3	医療ソーシャルワーク日誌	医療ソーシャルワーク日誌		

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:23 Login

作業終了後、[保存]ボタンをクリック

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW ☐ オータム受信時、自動発生

最終レポート: ケース記録 移動区分: なし

フローの作成

順番: 備考:

工程名:

レポート名:

職種: なし

期限: なし を基準に -1 日後まで

No	工程名	レポート名称	職種	期限
1	医療相談記録票	医療相談記録票		
2	医療相談用紙(2号紙)	医療相談用紙(2号紙)		
3	医療ソーシャルワーク日誌	医療ソーシャルワーク日誌		


デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:23 Login

SOPHIAReport


保存しました。

「保存しました。[OK]」のダイアログが表示されるので[OK]ボタンをクリック

ワークフロー作成画面を閉じ、元の画面に戻ります。

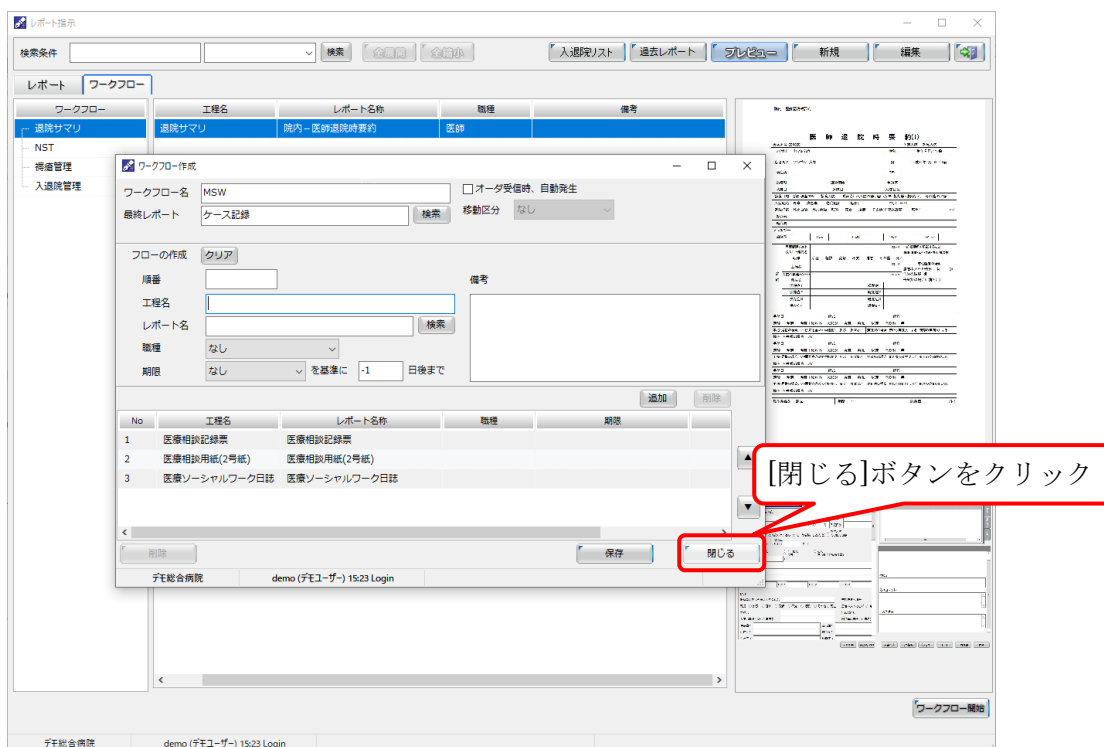

作成したワークフローを選択すると、内容を確認できます。

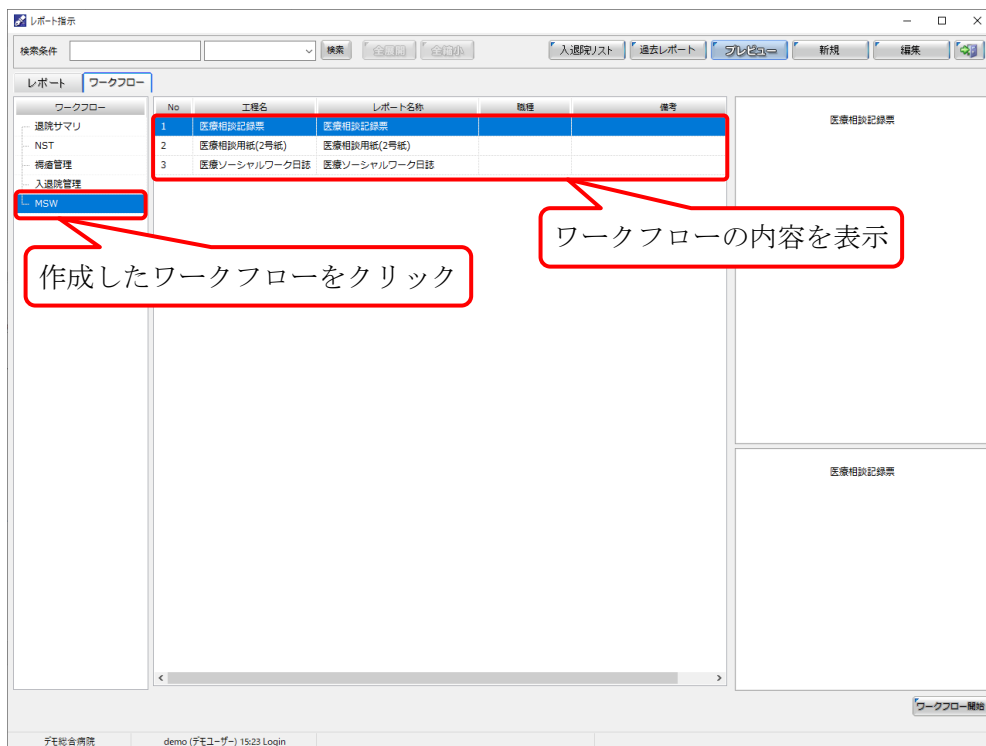

・方法2 最終レポートを設定しない

この方法は入退院時に必要な文書をオーダとして発生させておき、進捗を管理したい場合などに使います。

ワークフロー名の枠に名前を入力し、フローの作成にレポート名入力・追加します。

ワークフロー作成

ワークフロー名:


最終レポート:

レポート名:

職種:

期限: を基準に -1 日後まで

No	工程名	レポート名称	職種	期限

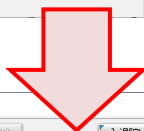

ワークフロー作成

ワークフロー名: NSW (2)

最終レポート:

レポート名:

職種:

期限: を基準に -1 日後まで

No	工程名	レポート名称	職種	期限
1	医療相談記録票	医療相談記録票		
2	医療相談用紙(2号紙)	医療相談用紙(2号紙)		
3	医療ソーシャルワーク記録	医療ソーシャルワーク記録		

ページ 129

4.2.2 [編集]ボタン

[編集]ボタンは、登録したワークフローの変更・削除をします。

- ①編集するワークフローを選択
- ②[編集]ボタンをクリックし、ワークフロー作成画面を開く

①

②

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW

最終レポート: ケース記録

フローの作成: クリア

順番: 1, 2, 3

工程名: 医療相談記録票, 医療相談用紙(2号紙), 医療ソーシャルワーク記録

レポート名: 医療相談記録票, 医療相談用紙(2号紙), 医療ソーシャルワーク記録

職種: なし

期限: なし

移動区分: なし

自動発生: ☐ オータ受領時、自動発生

削除

保存

閉じる

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:23 Login

ワークフロー一覧

順番の入れ替えは [▲]・[▼]ボタンで操作可能

内容を変更する場合は、登録されているフローをダブルクリックします。

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW

最終レポート: ケース記録

フローの作成: クリア

順番: 2

工程名: 医療相談用紙(2号紙)

レポート名: 医療相談用紙(2号紙)

職種: なし

期限: なし

移動区分: なし

自動発生: ☐ オータ受領時、自動発生

更新

削除

保存

閉じる


デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:23 Login

ワークフロー一覧


ダブルクリックされたフローが表示される

変更するフローをダブルクリック


変更を行った場合、[更新]ボタンをクリックします。

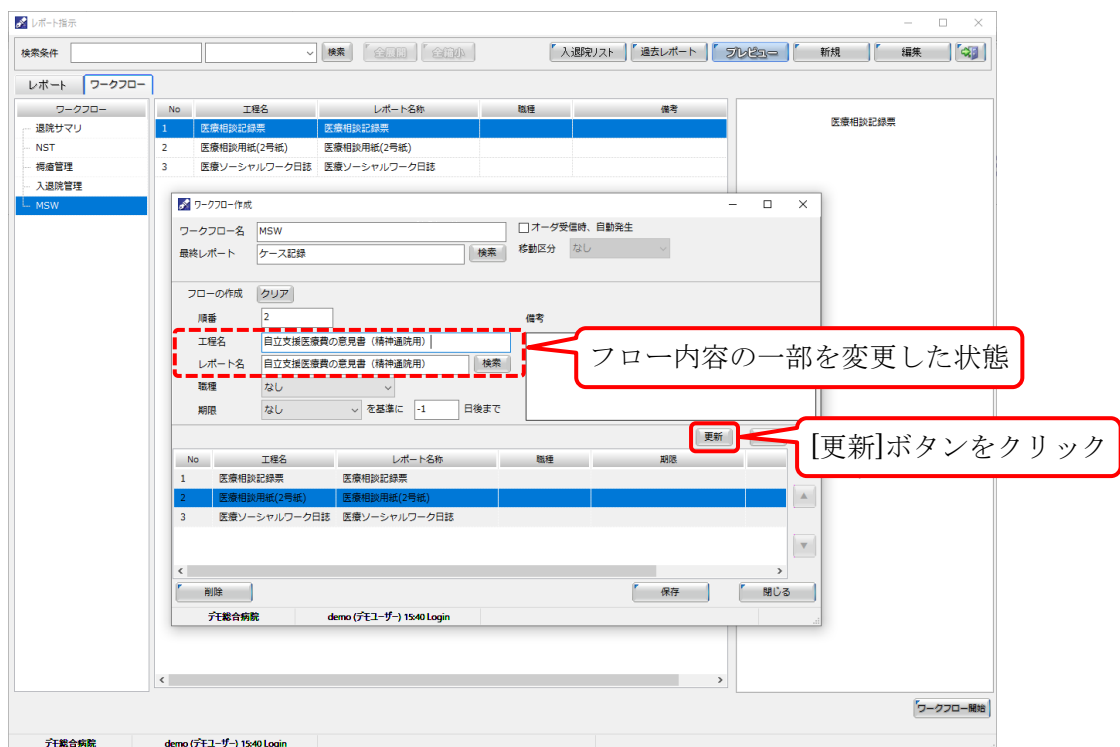


[更新]ボタンをクリックするとフローが更新されます。

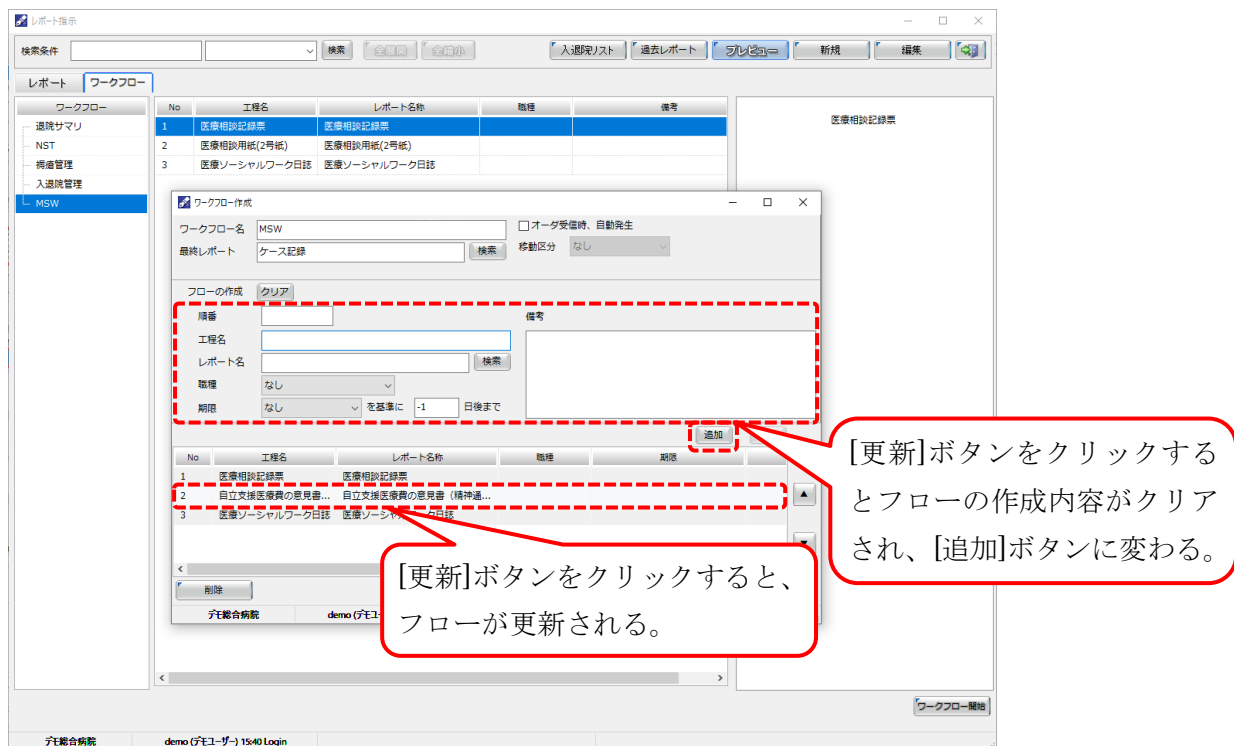

[クリア]ボタンでフロー内容を消去します。

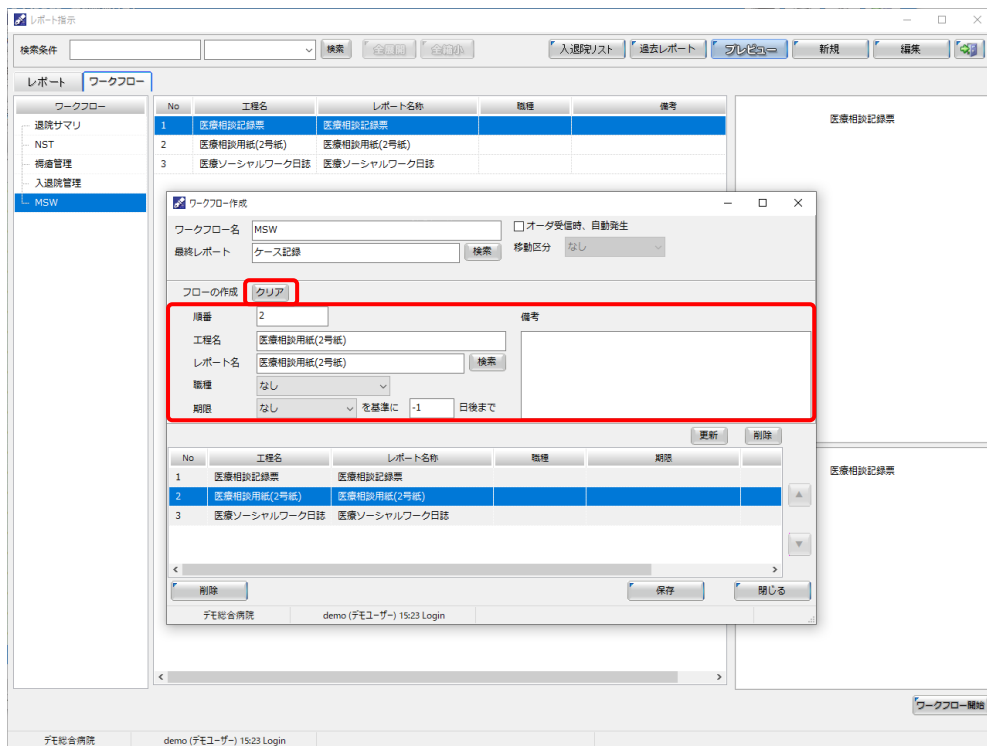


内容は消去されますが、フローは削除されません。

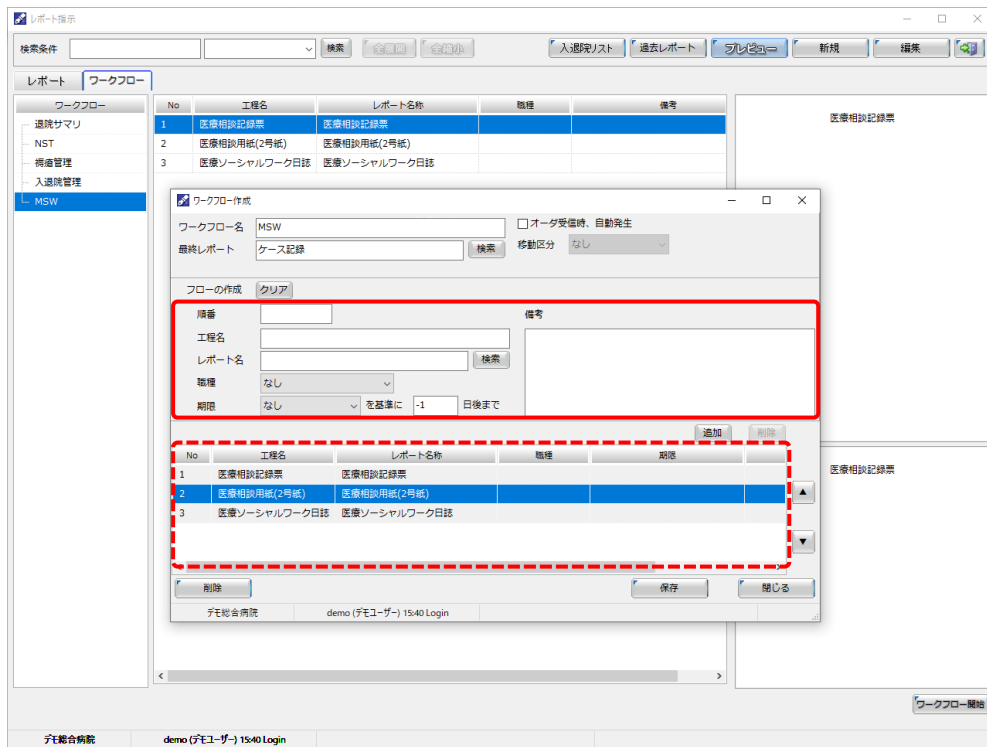


削除すると元に戻せません。ご注意ください。

[削除]ボタンでフローを削除します。

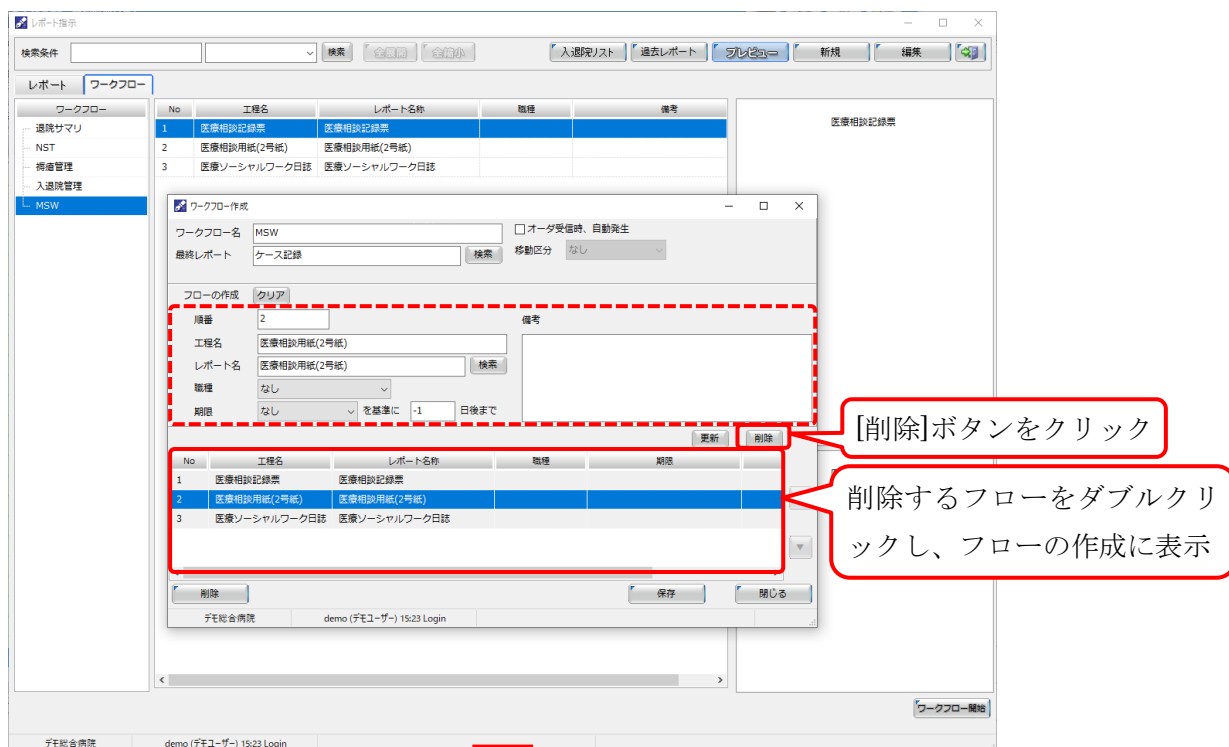

ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW ☐ オータ受発時、自動発生

最終レポート: ケース記録 移動区分: なし

フローの作成

順番: 2 備考:

工程名: 医療相談用紙(2号紙)


レポート名: 医療相談用紙(2号紙)

職種: なし

期限: なし を基準に -1 日後まで

No	工程名	レポート名	職種	期限
1	医療相談記録票	医療相談記録票		
2	医療相談用紙(2号紙)	医療相談用紙(2号紙)		
3	医療ソーシャルワーク記録	医療ソーシャルワーク記録		

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:23 Login

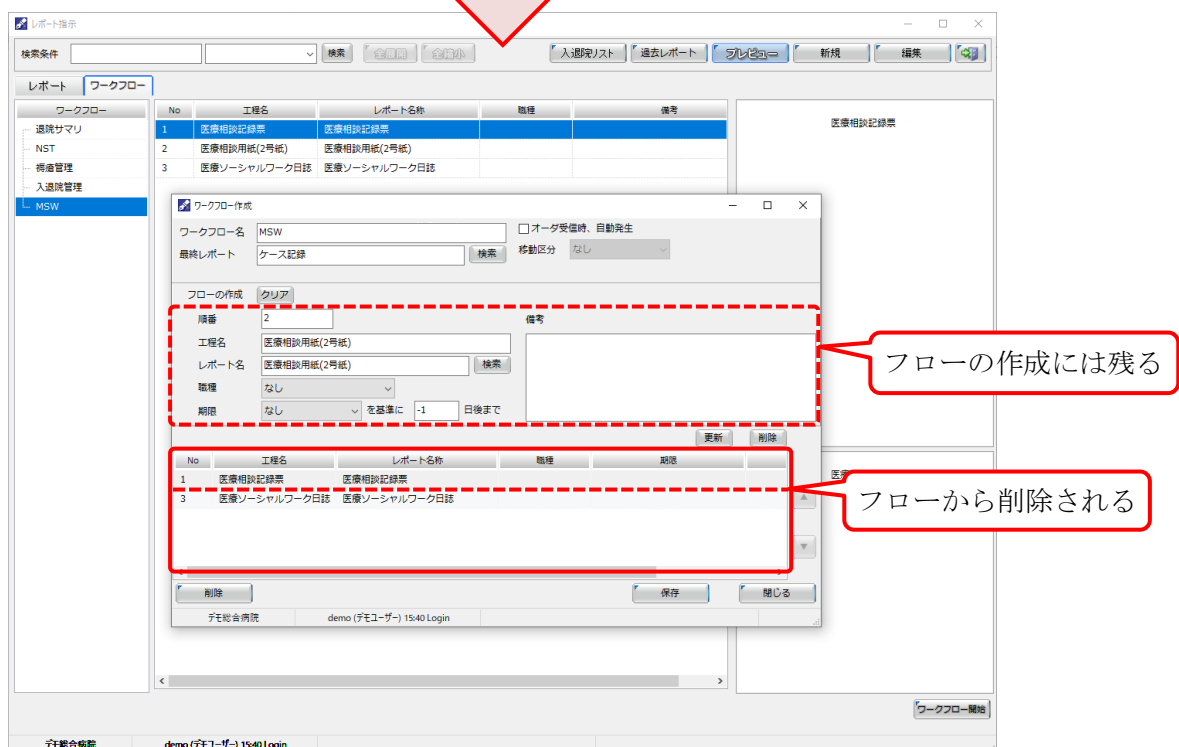ワークフロー作成

ワークフロー名: MSW ☐ オータ受発時、自動発生

最終レポート: ケース記録 移動区分: なし

フローの作成

順番: 2 備考:

工程名: 医療相談用紙(2号紙)

レポート名: 医療相談用紙(2号紙)


職種: なし

期限: なし を基準に -1 日後まで


No	工程名	レポート名	職種	期限
1	医療相談記録票	医療相談記録票		
3	医療ソーシャルワーク記録	医療ソーシャルワーク記録		

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 15:40 Login

下部の[削除]ボタンはワークフローを削除します。

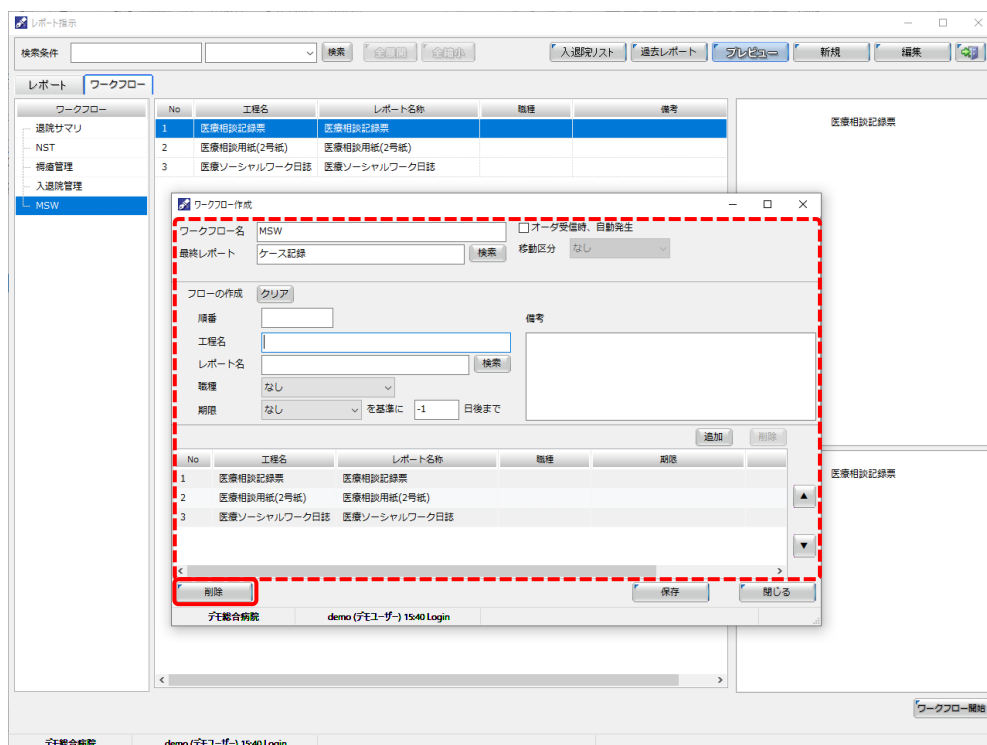

[削除]ボタンをクリックすると「削除します。よろしいですか?」のダイアログが表示されるので[はい]ボタンをクリックすると、ワークフロー作成ウィンドウが閉じ、ワークフローから削除されます。

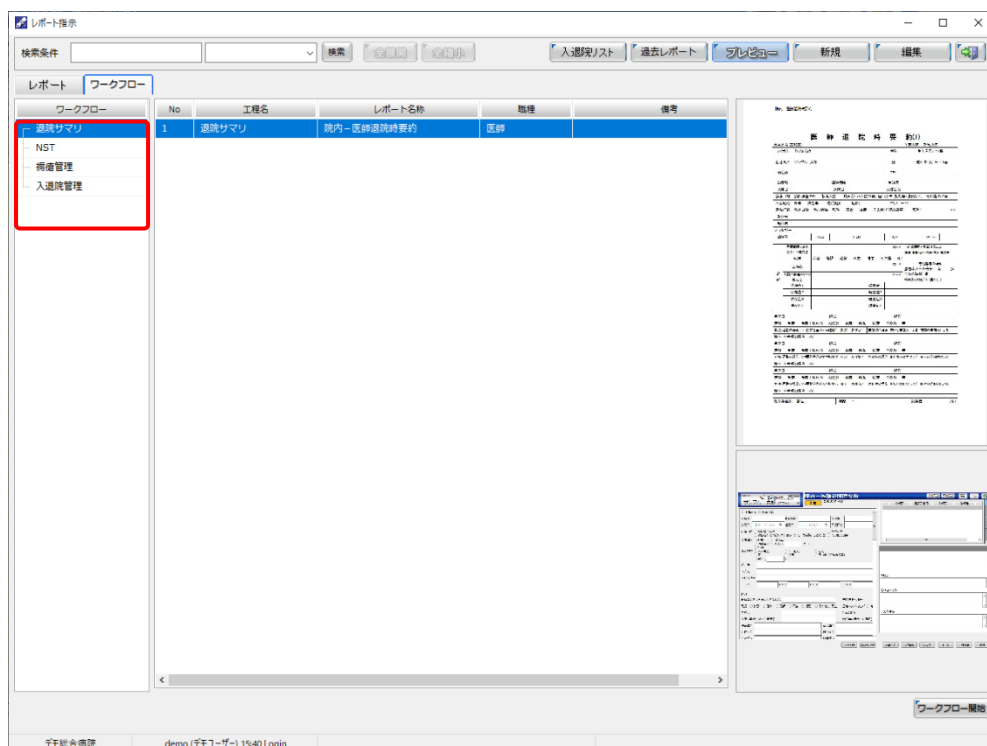


5. 全文検索

全文検索の操作を説明します。


5.1 STELLAROrder から起動

アクションボタンまたは右クリックメニューから「全文検索」を選択すると全文検索が起動します。

[文書一覧]タブから全文検索を行うと、選択したレポート種で絞り込みされます。

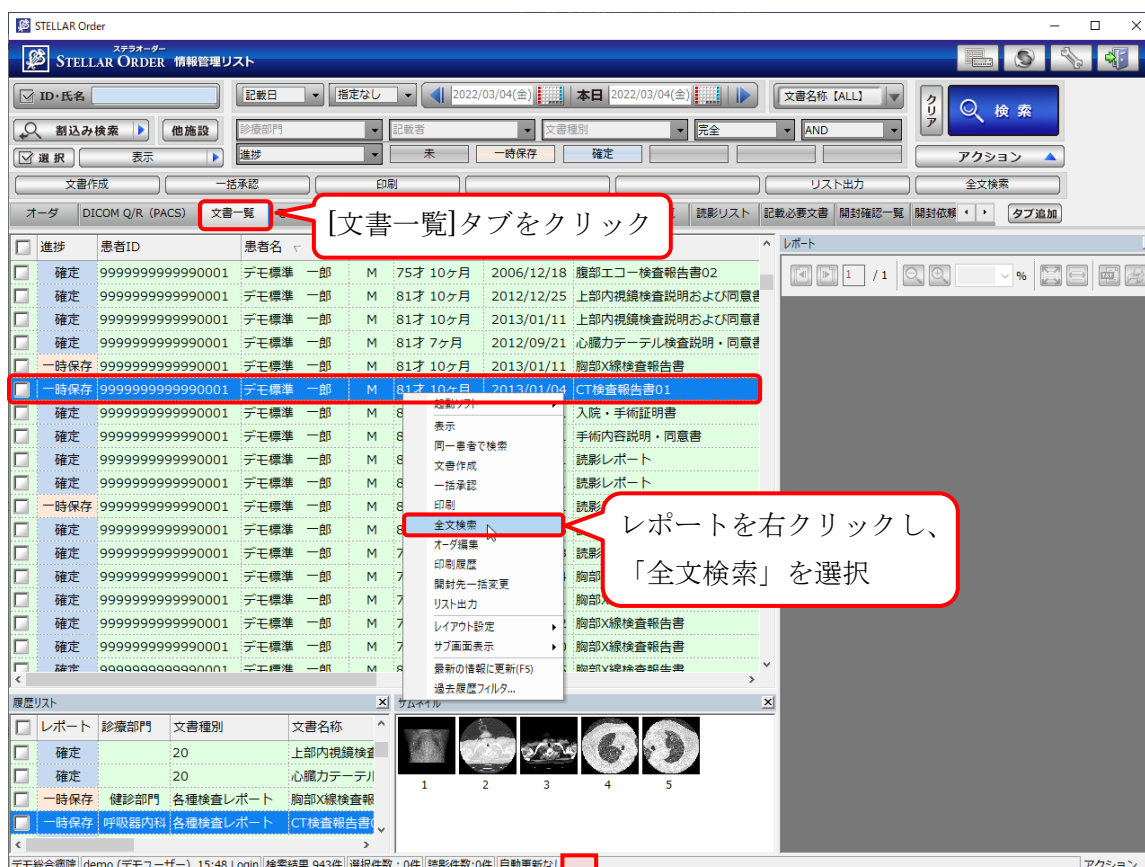

The screenshot shows the STELLAR Order application interface. The '文書一覧' (Document List) tab is selected. A red box highlights the '文書一覧' tab, with a callout saying '[文書一覧]タブをクリック' (Click the [Document List] tab). Another red box highlights the right-click context menu, with a callout saying 'レポートを右クリックし、「全文検索」を選択' (Right-click the report and select 'Full Text Search'). The menu options include '表示' (Display), '同一患者で検索' (Search for the same patient), '文書作成' (Create document), '一括承認' (Batch approval), '印刷' (Print), '全文検索' (Full Text Search), 'オーグ編集' (Augment editing), '印刷履歴' (Print history), '開封先一括変更' (Batch change of opening destination), 'リスト出力' (List output), 'レイアウト設定' (Layout setting), 'サブ画面表示' (Sub-screen display), and '最新の情報に更新(F5)' (Update to the latest information (F5)).

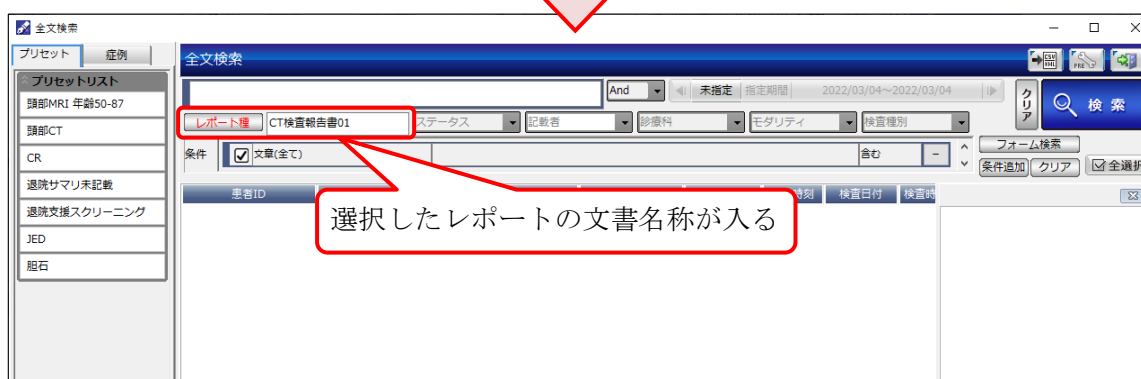


The screenshot shows the '全文検索' (Full Text Search) application interface. The 'レポート種' (Report type) dropdown is set to 'CT検査報告書01' (CT examination report 01). A red box highlights this dropdown, with a callout saying '選択したレポートの文書名称が入る' (The document name of the selected report is entered). The search results table shows the following data:

患者ID	報告書ID	報告書名称	検査種別	検査日時
99999999999999999999	CT検査報告書01	CT検査報告書01	CT検査	2013/01/11

5.2 全文検索画面


全文検索の画面は以下のようになります。

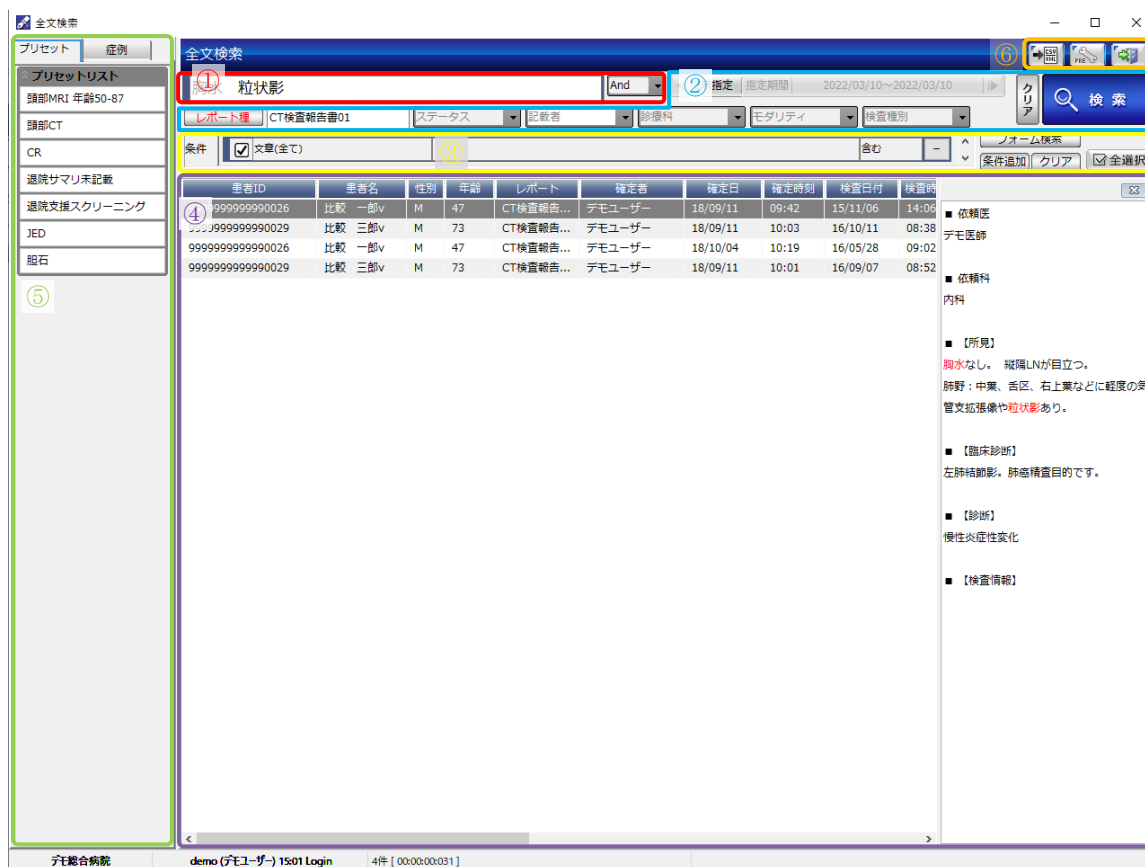

①	検索枠	レポート全体の検索を行います。
②	レポート詳細枠	レポート種・ステータス・診療科等別に検索を行います。
③	条件枠	レポートに条件を付けて検索を行います。
④	検索結果枠	検索結果を表示します。
⑤	プリセット・症例	検索条件の登録と、登録症例で登録されたレポートを抽出します。
⑥	ボタン各種	左から[外部出力]、[プリセット登録]、[終了]ボタンとなります。

5.2.1 検索枠からの検索

検索枠に文字を入力し、[検索]ボタンをクリックします。スペースを入れることで And / Or 検索ができます。例として「胸水」と「粒状影」をスペースで区切り、[検索]ボタンをクリックします。

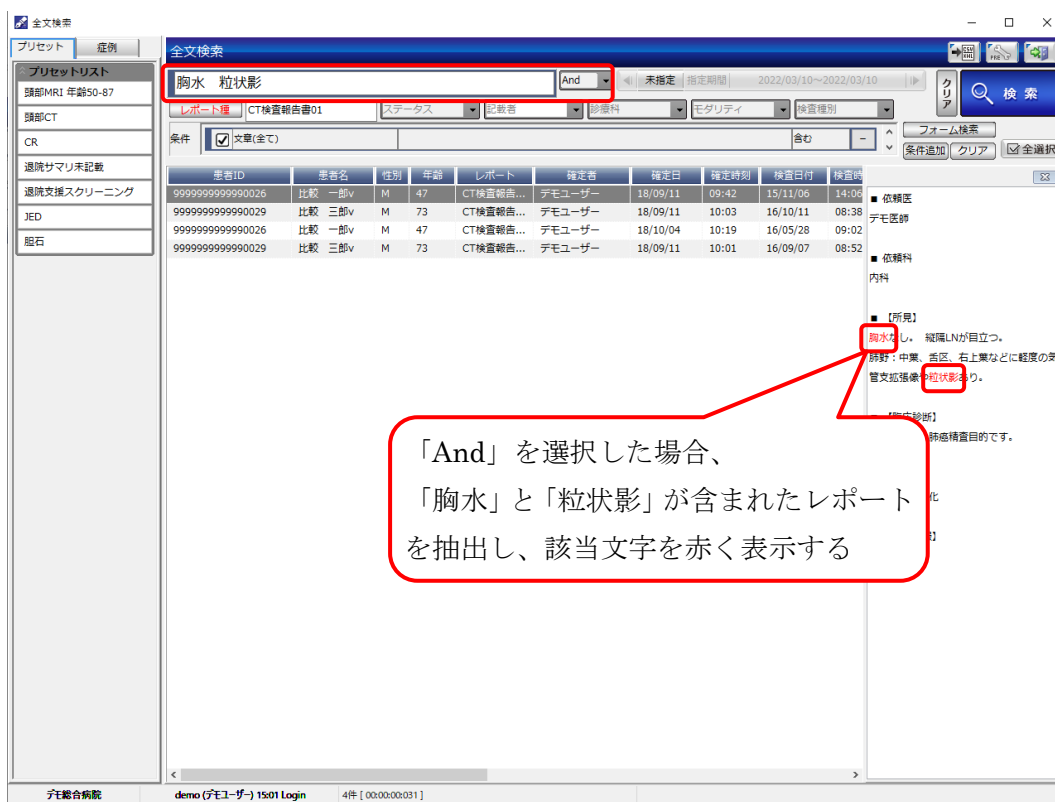


The screenshot shows the search results for the query 「胸水 粒状影」 with the operator 「And」 selected. The results table lists patient records where both terms are present. A red box highlights the search criteria, and another red box highlights the search results. A callout box explains the result:

「And」を選択した場合、
「胸水」と「粒状影」が含まれたレポート
を抽出し、該当文字を赤く表示する

The search results table shows the following data:

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	確定者	確定日	確定時刻	検査日付	検査時刻
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:06
9999999999990029	比較 一部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:03	16/10/11	08:38
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/10/04	10:19	16/05/28	09:02
9999999999990029	比較 一部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:01	16/09/07	08:52

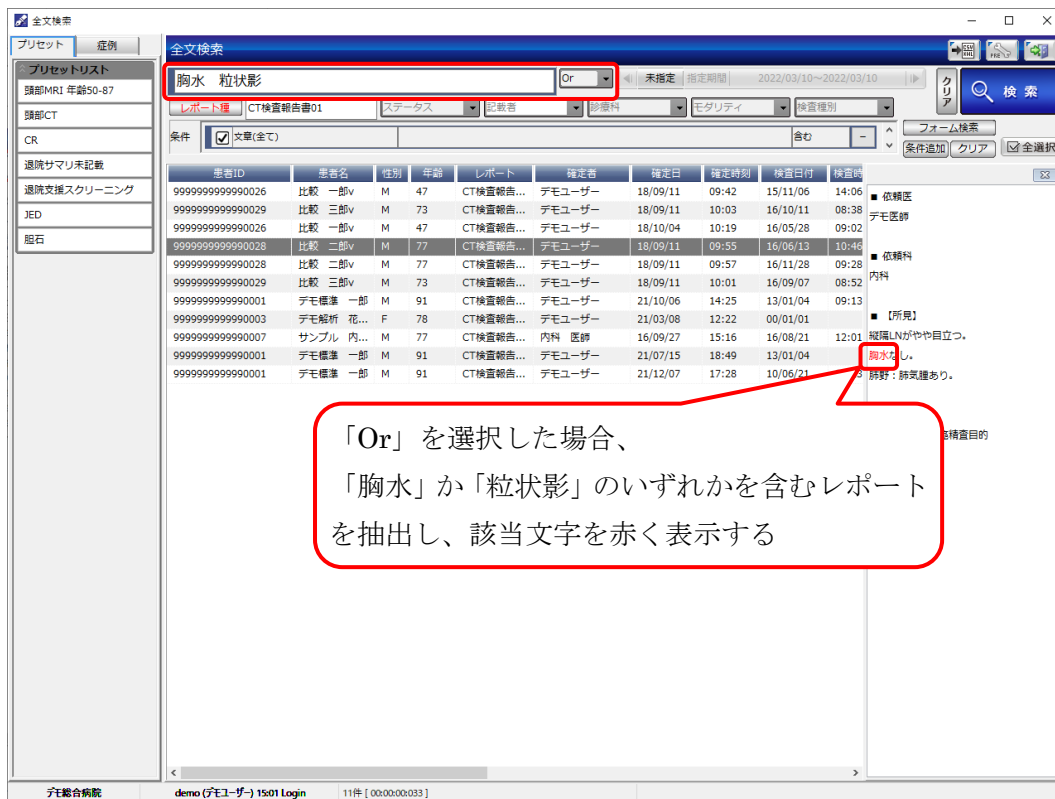

The screenshot shows the search results for the query 「胸水 粒状影」 with the operator 「Or」 selected. The results table lists patient records where either term is present. A red box highlights the search criteria, and another red box highlights the search results. A callout box explains the result:

「Or」を選択した場合、
「胸水」か「粒状影」のいずれかを含むレポート
を抽出し、該当文字を赤く表示する

The search results table shows the following data:


患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	確定者	確定日	確定時刻	検査日付	検査時刻
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:06
9999999999990029	比較 一部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:03	16/10/11	08:38
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/10/04	10:19	16/05/28	09:02
9999999999990028	比較 一部v	M	77	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:55	16/06/13	10:46
9999999999990028	比較 一部v	M	77	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:57	16/11/28	09:28
9999999999990029	比較 一部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:01	16/09/07	08:52
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/10/06	14:25	13/01/04	09:13
9999999999990003	デモ標準 花...	F	78	CT検査報告書...	デモユーザー	21/03/08	12:22	00/01/01	
9999999999990007	サンプル 内...	M	77	CT検査報告書...	内科 医師	16/09/27	15:16	16/08/21	12:01
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/07/15	18:49	13/01/04	
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/12/07	17:28	10/06/21	

5.2.2 レポート詳細枠

日付、レポート種、ステータス、記載者、診療科、モダリティ、検査種別で絞り込みができます。

・日付枠


[未指定]・[検査日]・[記載日]・[登録日]から、いずれかを選択します。

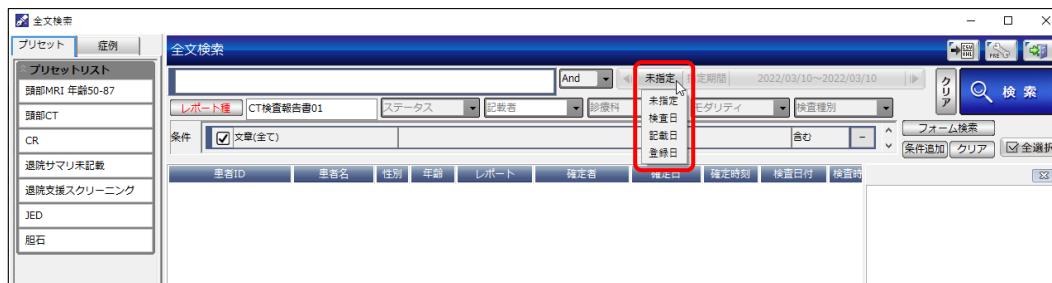

The screenshot shows the '全文検索' (Full Text Search) window. On the left is a 'プリセットリスト' (Preset List) with items like '頭部MRI 年齢50-87', '頭部CT', 'CR', etc. The main search area has fields for 'レポート種' (Report Type), 'ステータス' (Status), '記載者' (Recorder), '診療科' (Department), 'モダリティ' (Modality), and '検査種別' (Exam Type). A dropdown menu is open for the date field, showing options: '未指定' (Not Specified), '検査日' (Exam Date), '記載日' (Recording Date), and '登録日' (Registration Date). The '未指定' option is highlighted with a red box.


[未指定]以外を選択した場合、指定期間を以下から選択できるようになります。

[本日]・[指定期間]・[昨日]・[過去3日間]・[過去1週間]・[過去1ヶ月]・[過去3ヶ月]・[過去6ヶ月]・[過去1年]・[〇〇日前]

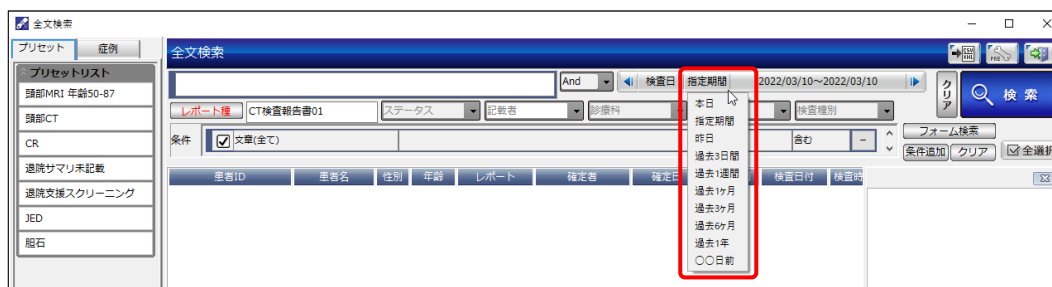

The screenshot shows the same search interface as before, but the date dropdown menu is open, showing a list of date range options: '本日' (Today), '指定期間' (Specified Period), '昨日' (Yesterday), '過去3日間' (Past 3 days), '過去1週間' (Past 1 week), '過去1ヶ月' (Past 1 month), '過去3ヶ月' (Past 3 months), '過去6ヶ月' (Past 6 months), '過去1年' (Past 1 year), and '〇〇日前' (XX days ago). The '指定期間' option is highlighted with a red box.


日付は直接入力、またはカレンダーから指定します。

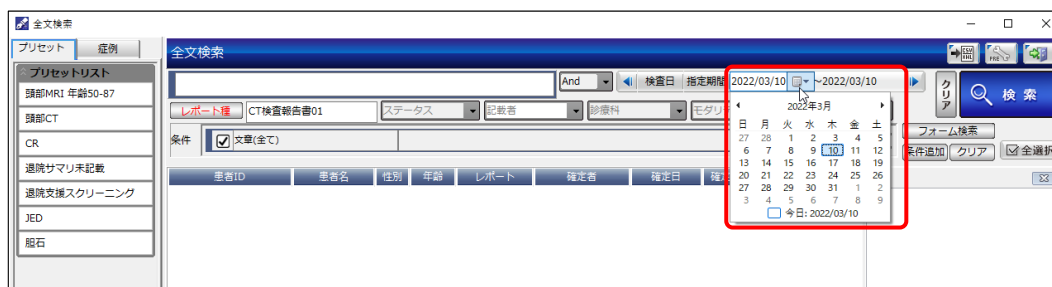

The screenshot shows the same search interface, but the date dropdown menu is open, showing a calendar for March 2022. The date '2022/03/10' is selected and highlighted with a red box.

・[レポート種]ボタン

[レポート種]ボタンをクリックすると、レポート検索画面が表示されます。

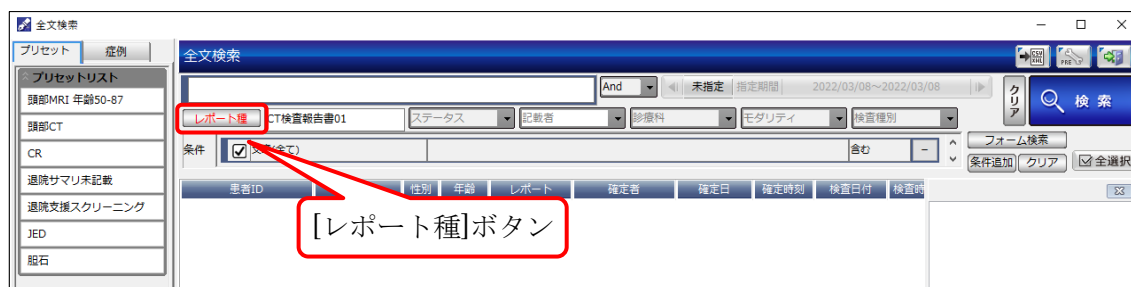


＜レポート種を追加する場合＞

下部リストをダブルクリック、またはチェックボックスを☑にして[追加]ボタンをクリックします。




＜レポート種を削除する場合＞

上部リストをダブルクリック、またはチェックボックスを☑にして[削除]ボタンをクリックします。

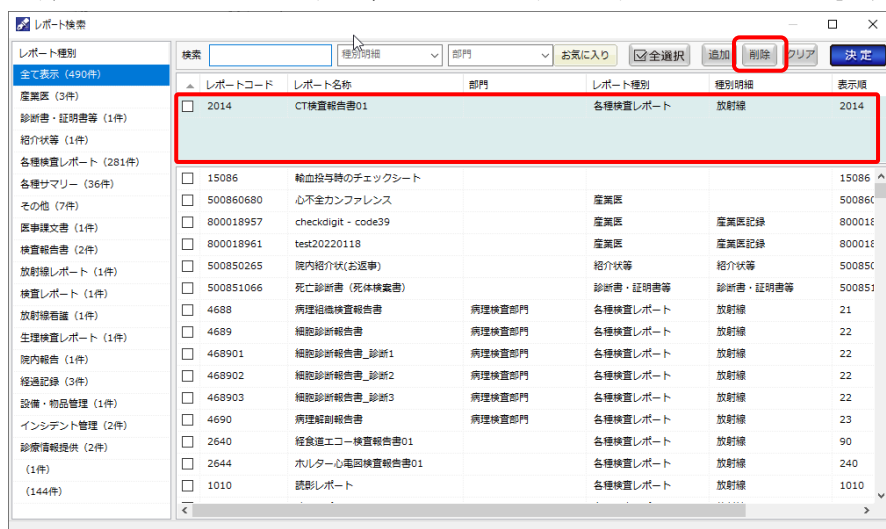

・ステータス

プルダウンからステータスを選択します（複数選択可）。

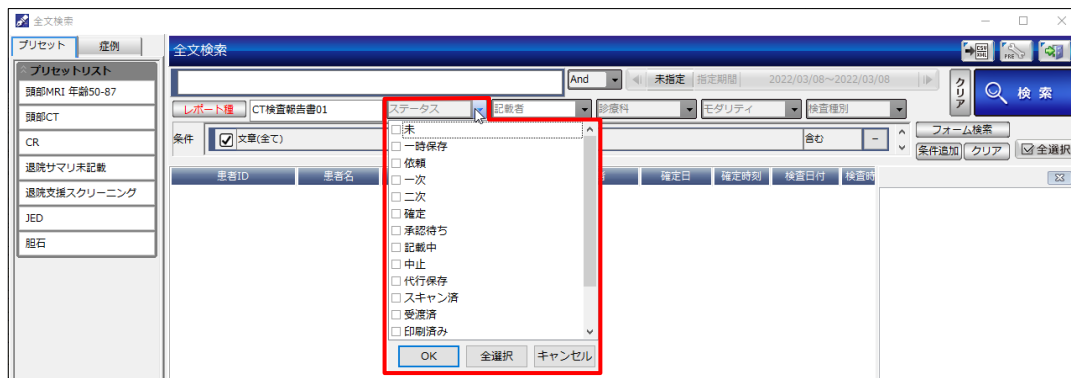


・記載者

プルダウンから記載者を選択、または直接入力します。




・診療科

プルダウンから診療科を選択します（複数選択可）。

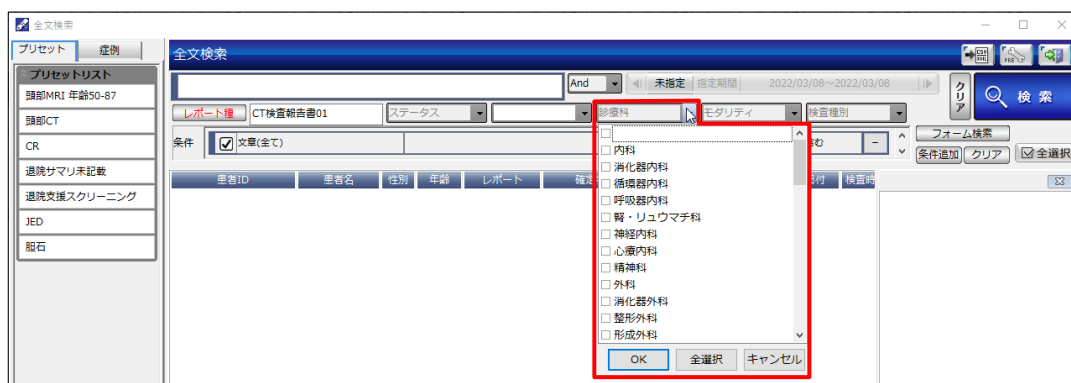


・モダリティ

プルダウンからモダリティを選択します（複数選択可）。

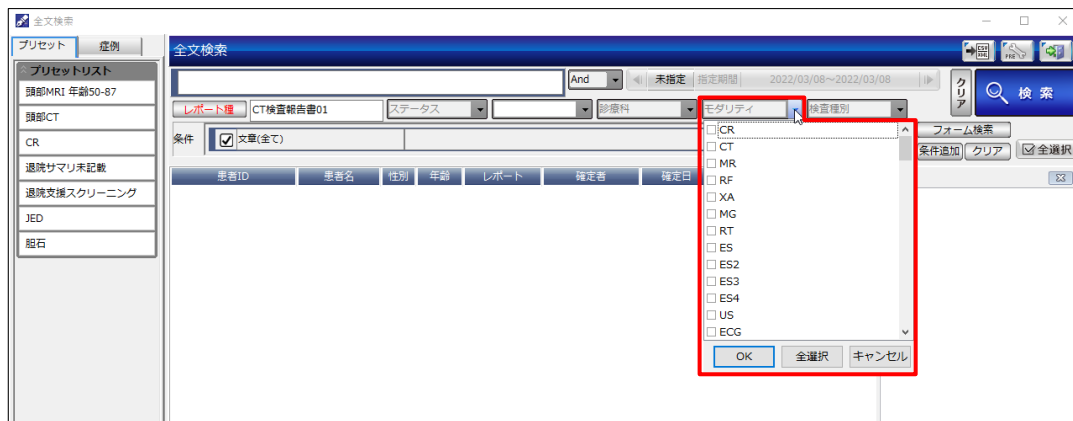


・検査種別

プルダウンから検査種別を選択します。

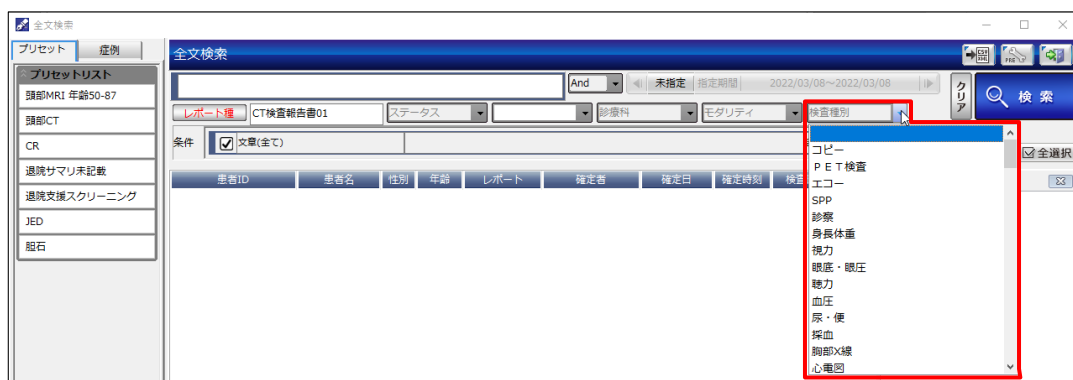


5.2.3 条件枠


レポート種に登録されている項目内の検索を行います。

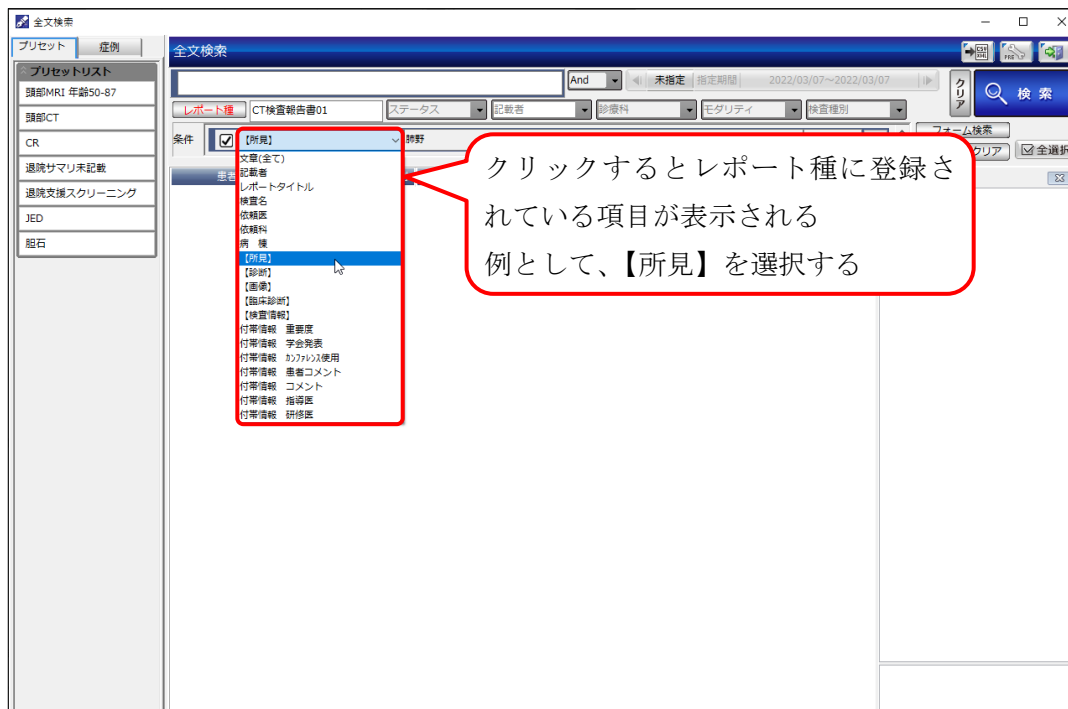

条件に検索文字を入力します。

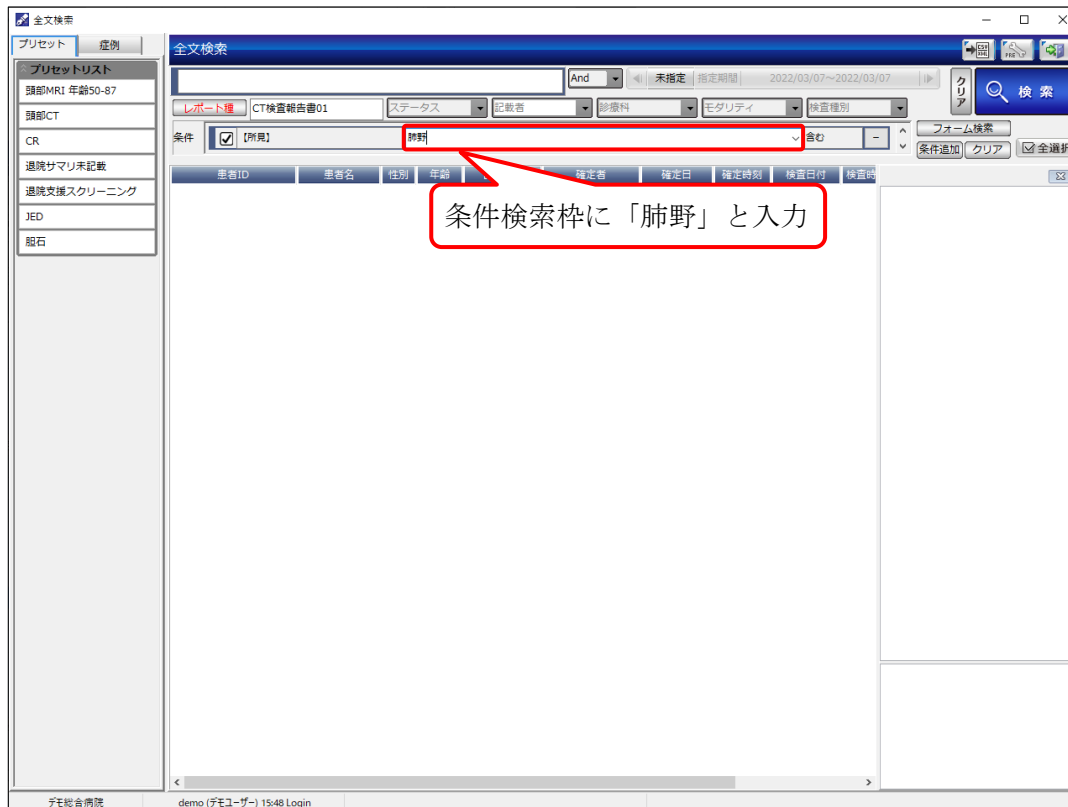

条件で項目【所見】を選択、検索文字に「肺野」を入力した場合

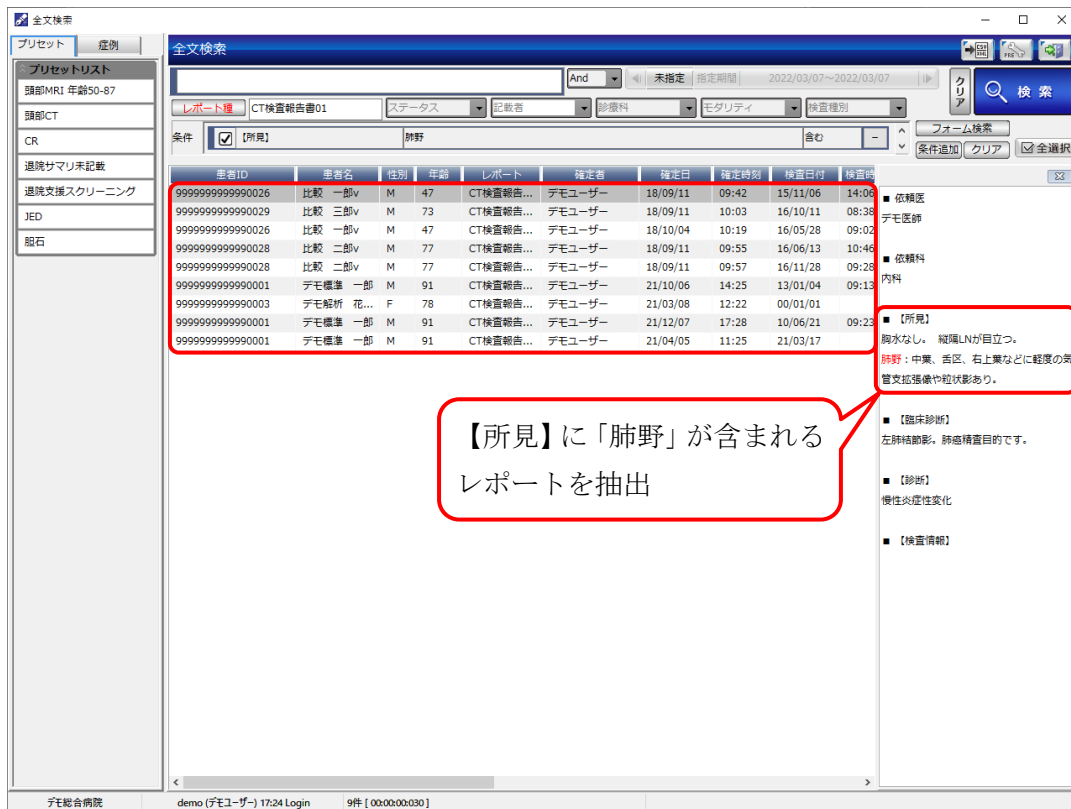

The screenshot shows the ASTROSTAGE search interface. On the left, there is a sidebar with a 'プリセット' (Preset) button and a list of preset conditions including '頭部MRI 年齢50-87', '頭部CT', 'CR', '退院サマリ未記載', '退院支援スクリーニング', 'JED', and '股石'. The main area is titled '全文検索' (Full-text search) and contains a search bar with 'And' and a date range '2022/03/07~2022/03/07'. Below the search bar, there are filters for 'レポート種' (Report type) set to 'CT検査報告書01', 'ステータス' (Status), '医師' (Doctor), '診療科' (Department), 'モダリティ' (Modality), and '検査種別' (Exam type). The search results are displayed in a table with columns: '患者ID' (Patient ID), '患者名' (Patient Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), 'レポート' (Report), '検査者' (Examiner), '検査日' (Exam Date), '検査時刻' (Exam Time), '検査日付' (Exam Date), and '検査時刻' (Exam Time). The table shows several rows of results, with the first row highlighted in red. A red box highlights the '所見' (Findings) column, which contains the text '肺野：中葉、舌区、右上葉などに軽度の気管支拡張像や粒状影あり。' (Lung field: mild bronchiectasis or nodular shadows in the middle lobe, lingula, and right upper lobe). A red callout box points to this text with the text '【所見】に「肺野」が含まれるレポートを抽出' (Extract reports containing 'lung field' in the findings). On the right side of the interface, there are buttons for 'クリア' (Clear), '検索' (Search), 'フォーム検索' (Form search), '条件追加' (Add condition), 'クリア' (Clear), and '全選択' (Select all).

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	検査者	検査日	検査時刻	検査日付	検査時刻
9999999999990026	比較 一郎v	M	47	CT検査報告...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:08
9999999999990029	比較 三郎v	M	73	CT検査報告...	デモユーザー	18/09/11	10:03	16/10/11	08:38
9999999999990026	比較 一郎v	M	47	CT検査報告...	デモユーザー	18/10/04	10:19	16/05/28	09:02
9999999999990028	比較 二郎v	M	77	CT検査報告...	デモユーザー	18/09/11	09:55	16/06/13	10:46
9999999999990028	比較 二郎v	M	77	CT検査報告...	デモユーザー	18/09/11	09:57	16/11/28	09:28
9999999999990001	デモ標準 一郎	M	91	CT検査報告...	デモユーザー	21/10/06	14:25	13/01/04	09:13
9999999999990003	デモ標準 花...	F	78	CT検査報告...	デモユーザー	21/03/08	12:22	00/01/01	09:13
9999999999990001	デモ標準 一郎	M	91	CT検査報告...	デモユーザー	21/12/07	17:28	10/06/21	09:23
9999999999990001	デモ標準 一郎	M	91	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/05	11:25	21/03/17	09:13

【所見】
胸水なし。縦隔LNが目立つ。
肺野：中葉、舌区、右上葉などに軽度の気管支拡張像や粒状影あり。


【臨床診断】
左肺結節影。肺癌精査目的です。

【診断】
慢性炎症性変化

【検査情報】

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 17:24 Login 9件 [00:00:00:030]


条件が複数必要な場合は[条件追加]ボタンをクリックします。

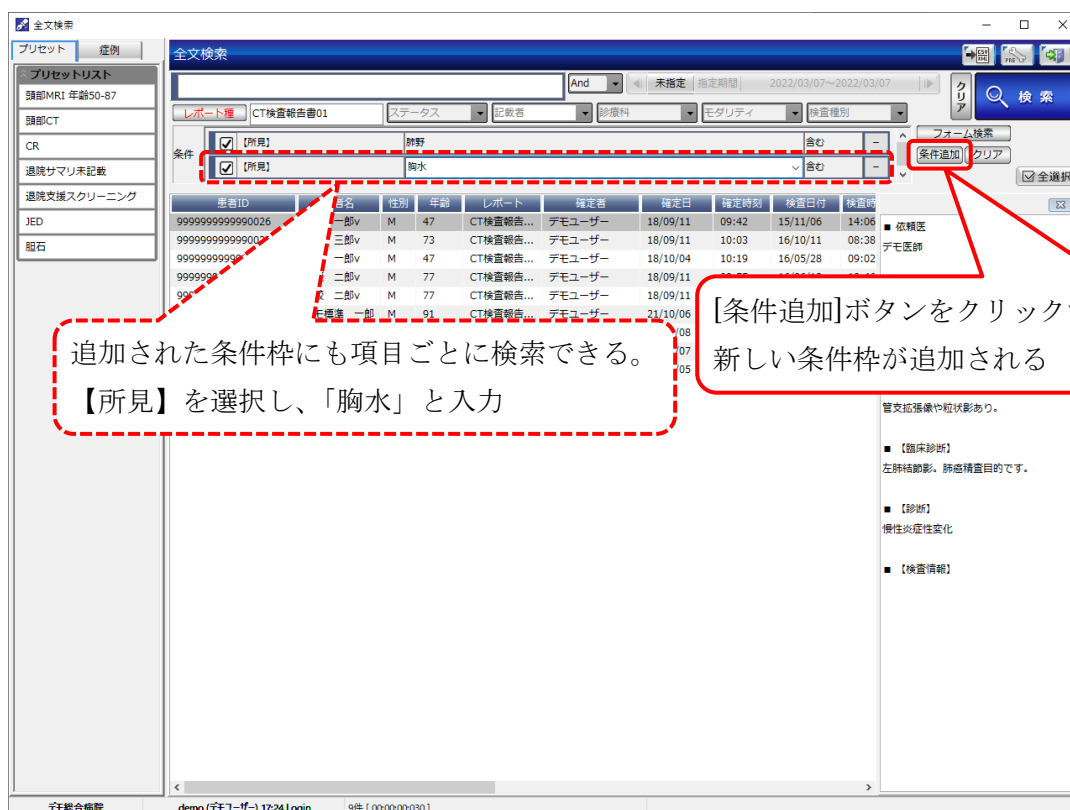

追加された条件枠にも項目ごとに検索できる。
【所見】を選択し、「胸水」と入力

[条件追加]ボタンをクリックすると、新しい条件枠が追加される

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	確定者	確定日	確定時刻	検査日付	検査時刻	検査所見
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:06	■ 依頼医 デモ医師
9999999999990029	比較 三部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:03	16/10/11	08:38	
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/10/04	10:19	16/05/28	09:02	
9999999999990028	比較 二部v	M	77	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:55	16/06/13	10:46	
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/10/06	14:25	13/01/04	09:13	■ 依頼科 内科
9999999999990003	デモ艇竹 花...	F	78	CT検査報告書...	デモユーザー	21/03/08	12:22	00/01/01	09:23	
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/12/07	17:28	10/06/21	09:23	

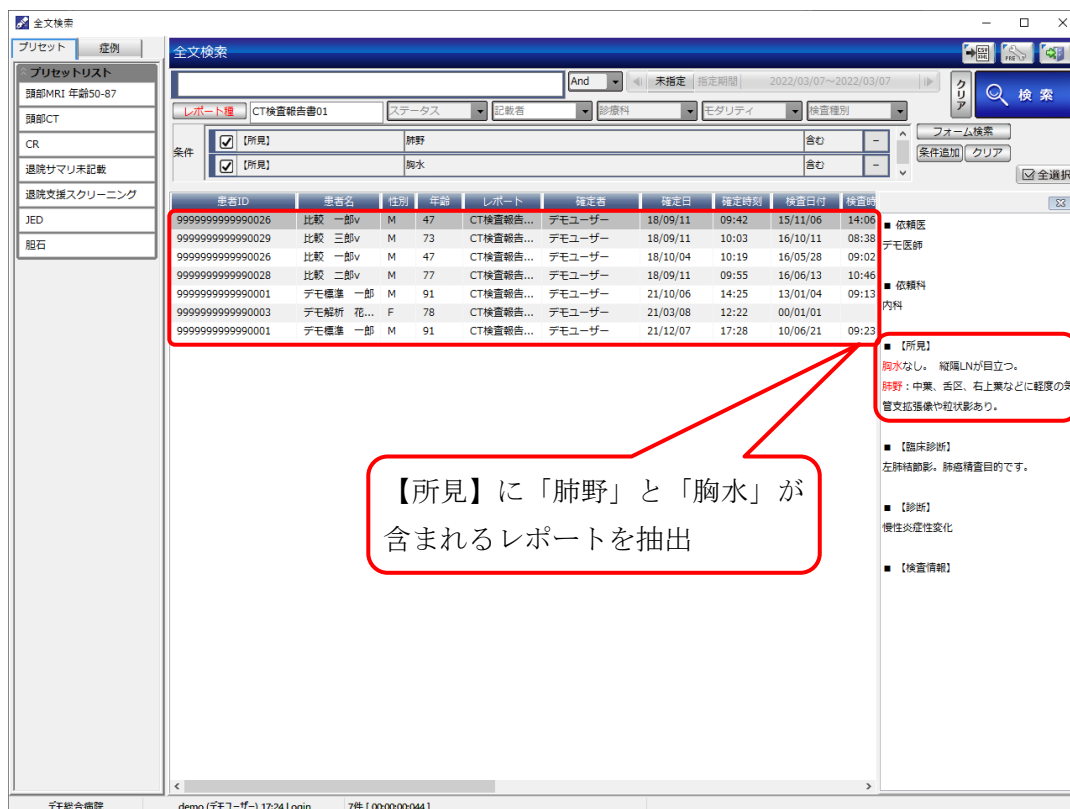

【所見】に「肺野」と「胸水」が含まれるレポートを抽出

【所見】
胸水なし。縦隔LNが目立つ。
肺野：中葉、舌区、右上葉などに軽度の気管支拡張像や粒状影あり。

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	確定者	確定日	確定時刻	検査日付	検査時刻	検査所見
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:06	■ 依頼医 デモ医師
9999999999990029	比較 三部v	M	73	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	10:03	16/10/11	08:38	
9999999999990026	比較 一部v	M	47	CT検査報告書...	デモユーザー	18/10/04	10:19	16/05/28	09:02	
9999999999990028	比較 二部v	M	77	CT検査報告書...	デモユーザー	18/09/11	09:55	16/06/13	10:46	
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/10/06	14:25	13/01/04	09:13	■ 依頼科 内科
9999999999990003	デモ艇竹 花...	F	78	CT検査報告書...	デモユーザー	21/03/08	12:22	00/01/01	09:23	
9999999999990001	デモ標準 一部	M	91	CT検査報告書...	デモユーザー	21/12/07	17:28	10/06/21	09:23	

例3：条件「記載者 一次」を「デモユーザ」、「記載者 最終記載者」を「読影 医師」で検索した場合

条件に「一次記載者」を「デモユーザ」、
「最終記載者」を「読影 医師」でそれぞれ入力

「一次記載者」に「デモユーザ」、
「最終記載者」に「読影 医師」を含んだレポートを抽出

患者ID	検査日時	読影日時	読影時刻	モダリティ	部位	一次記載者	二次記載者	最終記載者
ザー	21/01/15	12:56	10/06/21 09:23	CT	CHEST	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/02/03	13:18	13/01/04 09:23	CT	CHEST	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/12/07	17:28	10/06/21 09:23	CT	CHEST	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/04/02	15:57	21/03/24 10:04	US	CAROTID	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/04/19	16:57	06/12/05 09:13	CT	CHEST	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/04/16	11:37	13/01/04 10:04	US	CAROTID	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/06/16	15:37	18/09/28 08:59	CR	HAND	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/10/27	14:00	21/10/27 10:04	CT	CHEST	デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ
ザー	21/11/01					デモユーザ	デモユーザ	デモユーザ

※文章（全て）・レポートタイトル・記載者：同項目で検索を行うと「or 検索」になります。
詳細は次頁の表をご確認ください。

条件は以下の設定で変更できます。

※レポート種が指定されている場合、項目内容が変わります。



項目	含む	等しい	等しくない	以上	以下	範囲
文章（全て）	○	×	×	×	×	×
記載者※	○	○	×	×	×	×
レポートタイトル	○	×	×	×	×	×
各付帯情報	○	○	○	○	○	○


※：「記載者」には「一次記載者」「二次記載者」「確定者」「最終記載者」が含まれます。

・[フォーム検索]ボタン

レポート入力画面に合わせて検索をします。



全文検索に反映させる入力枠等を指定し、[条件設定]ボタンをクリックします。

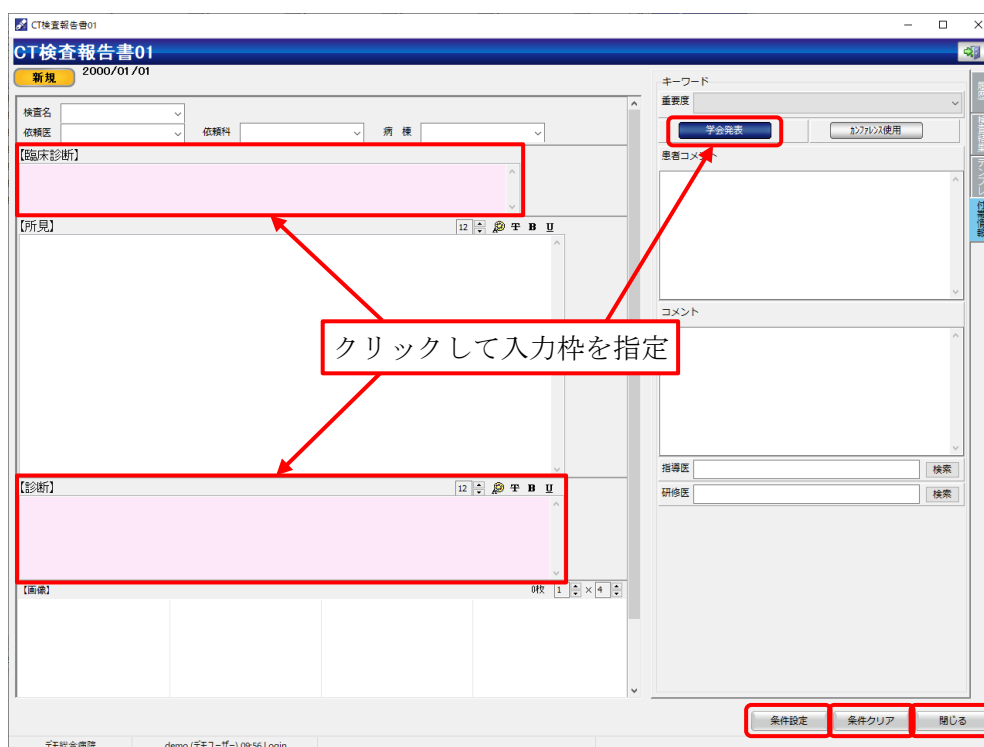

[条件設定]ボタン…選択した条件を全文検索に反映

[条件クリア]ボタン…選択した条件を削除する

[閉じる]…フォーム検索画面を閉じる

追加された条件に文字を入力します。

The screenshot shows the '全文検索' (Full Text Search) interface. On the left is a 'プリセットリスト' (Preset List) with items like '頭部MRI 年齢50-87', '頭部CT', 'CR', '遠隔サマリ未記載', '遠隔支援スクリーニング', 'JED', and '脳石'. The main area has a search bar and filters. The '条件' (Conditions) section is highlighted with a red box, showing three conditions: '【臨床診断】' (Clinical Diagnosis), '【診断】' (Diagnosis), and '付帯情報 学会発表' (Supplementary Information Academic Presentation). Below this is a table of search results with columns: '患者ID', '患者名', '性別', '年齢', 'レポート', '検定者', '検定日', and '検定時刻'. The results show multiple entries for 'デモ標準 一部 M 90' with various report dates and times. On the right, there are buttons for 'フォーム検索', '条件追加', and 'クリア', and a '全選択' (Select All) button.


[条件追加]ボタン

検索条件を1行ずつ追加します。


The screenshot shows the '全文検索' (Full Text Search) interface. The '条件' (Conditions) section is highlighted with a red box, showing five conditions: '【文章(全て)】' (Article (All)), '【文章(全て)】', '【文章(全て)】', '【文章(全て)】', and '【文章(全て)】'. Below this is a table of search results with columns: '患者ID', '患者名', '性別', '年齢', 'レポート', '検定者', '検定日', and '検定時刻'. The results show multiple entries for 'デモ標準 一部 M 90' with various report dates and times. On the right, there are buttons for 'フォーム検索', '条件追加', and 'クリア', and a '全選択' (Select All) button.

[クリア]ボタン

条件を一括削除します。

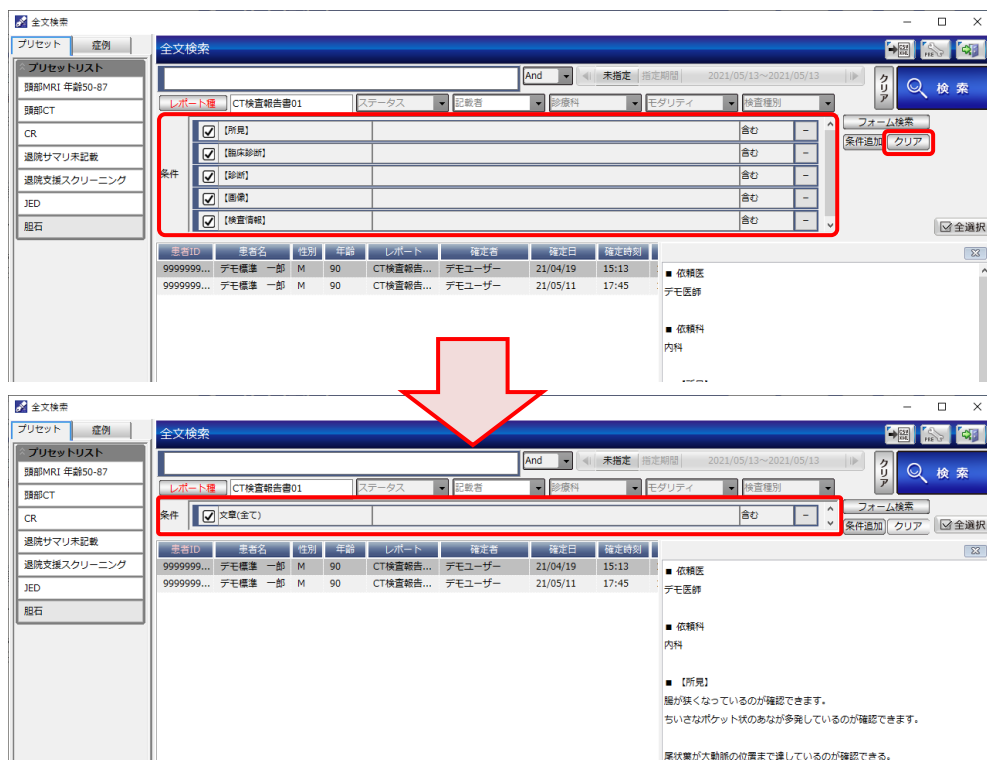


条件枠を右クリックして「詳細条件クリア」を選択すると、[クリア]ボタンと同じ動きをします。

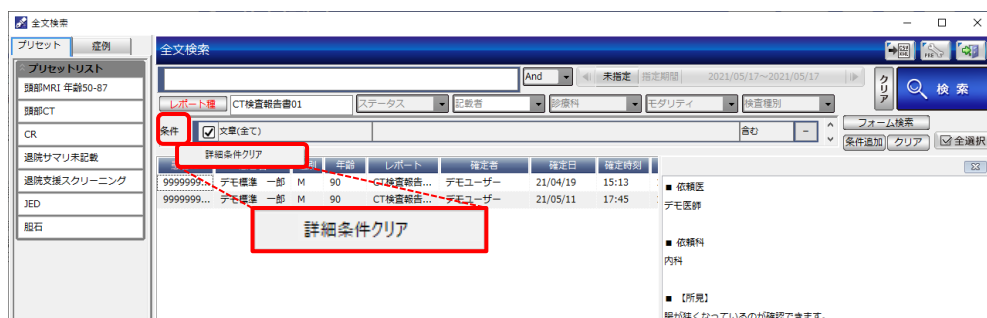

5.2.4 検索結果

右クリックメニューの動作を説明します。

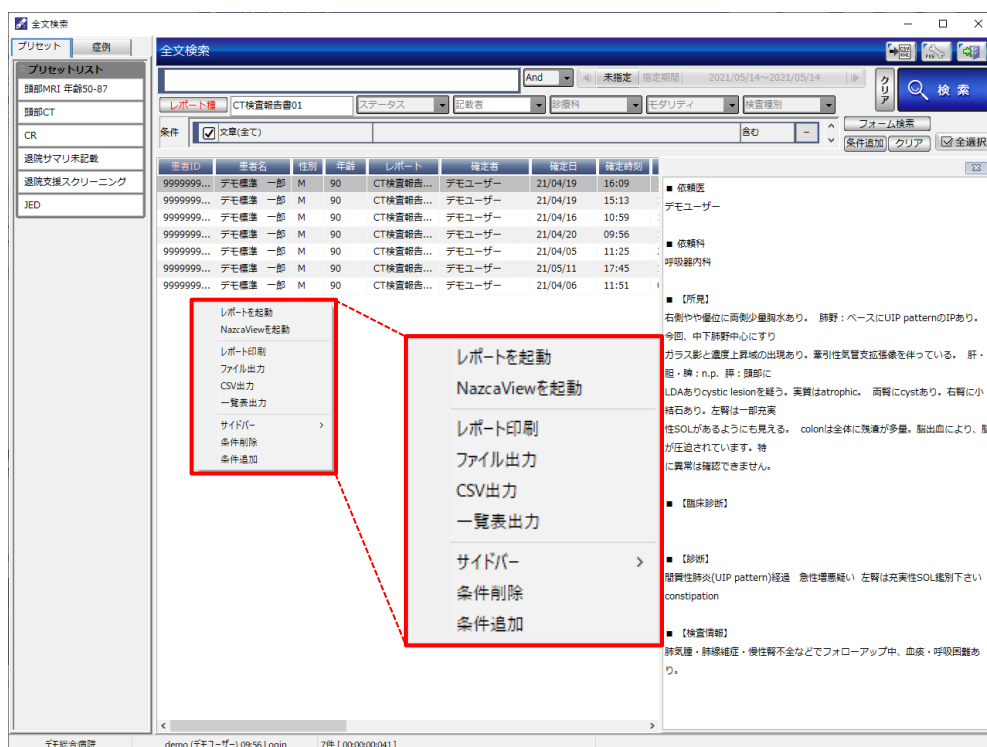

レポートを起動…SOPHIAReport を起動します。

(SOPHIAReport 以外から全文検索を立ち上げた場合に使用できます。)

NazcaView を起動…NazcaView を起動します。

①レポート印刷…レポートを印刷します。

②ファイル出力…XML 形式、CSV 形式で保存します。

CSV 出力…検索結果を CSV 出力します。([外部出力]ボタンと同じ)

③一覧表出力…レポート一覧を印刷します。

レポート一覧を CSV 出力します。


④サイドバー>無し・プレビュー画面・テキスト画面

…サイドバー表示を選択します。

条件削除…条件を削除します。([条件削除]ボタンと同じ)

条件追加…条件を追加します。([条件追加]ボタンと同じ)


①レポート印刷

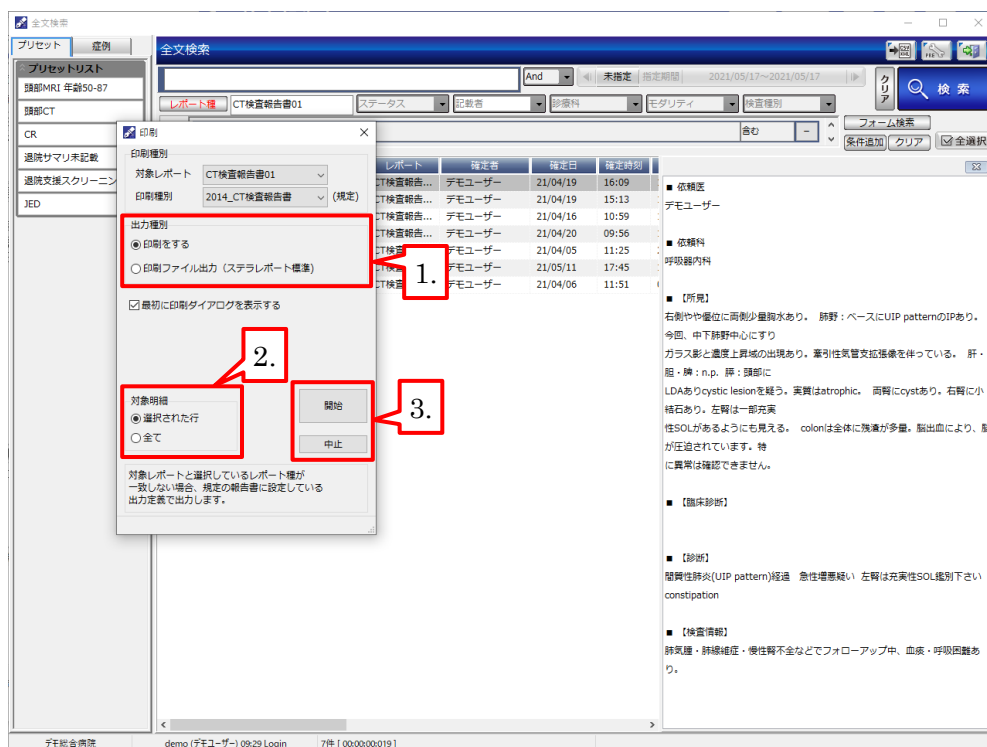

レポートを印刷します。

1. 出力種別で「印刷をする」を選択すると、プリンタに出力命令を送ります。
「印刷ファイル出力（ステラレポート標準）」を選択すると PDF で保存します。
2. 対象明細で「選択された行」を選択すると、選択したレポートを対象にします。
「全て」を選択した場合はリスト上のすべてのレポートを対象にします。
3. [開始]ボタンで印刷を開始し、[中止]ボタンで印刷を中止します。


②ファイル出力

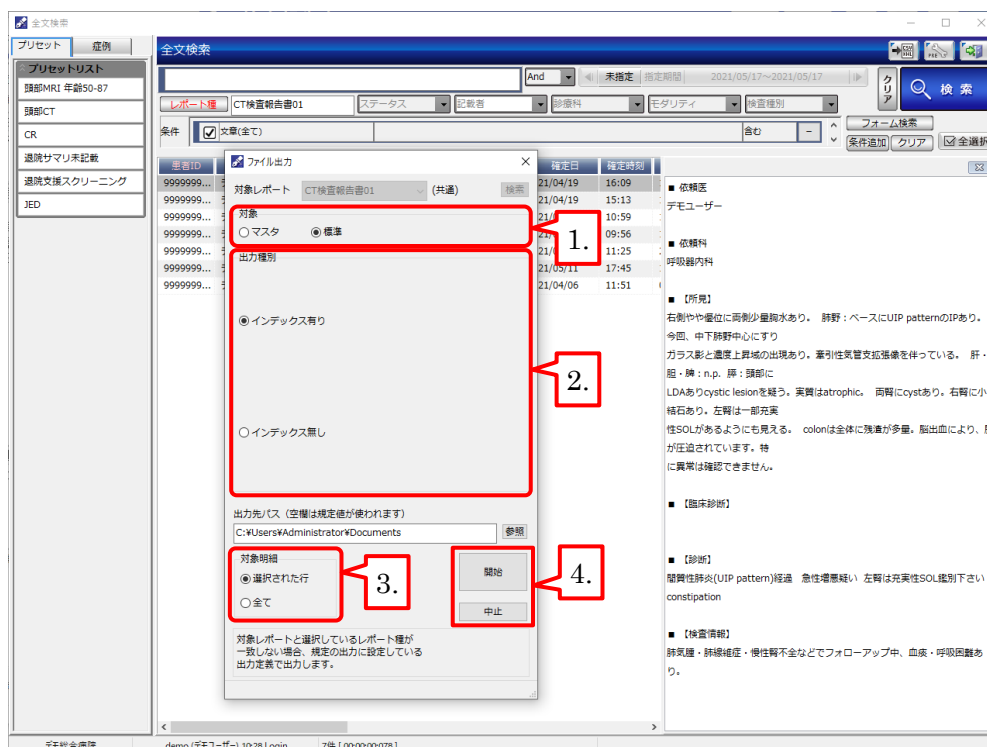

1. 対象は「標準」を選択します。
2. 出力種別で「インデックス有り」・「インデックス無し」を選択します。
3. 対象明細で「選択された行」を選択すると、リストで選択したレポートを対象にします。
「全て」を選択した場合はリスト上のすべてのレポートを対象にします。
4. [開始]ボタンで出力を開始し、[中止]ボタンで中止します。

③一覧表出力

選択したレポート一覧を出力します。

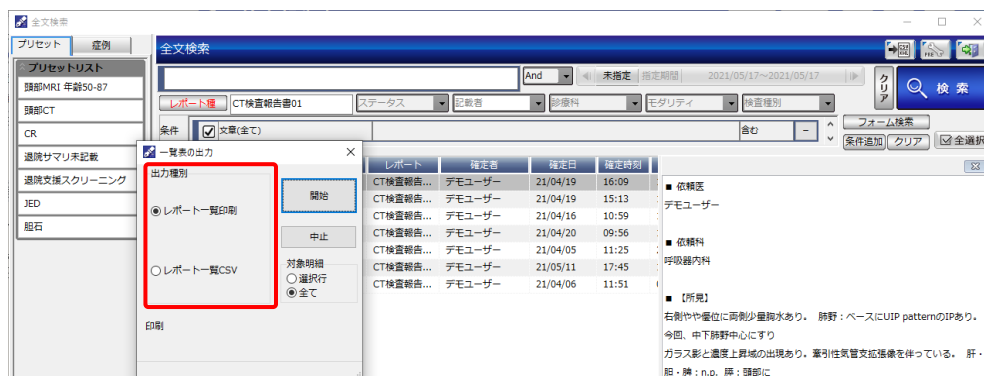

1. レポート一覧印刷

レポート一覧をバーコード付きで印刷します。

※印刷情報をファイルに出力、ファックス送信、画像・PDFとして保存することもできます。

レポート一覧						
2021/5/17 P.1/1						
No	患者番号	患者名	性別・年齢	検査	レポート	記載者
1		デモヒョウジュン イチロウ デモ標準 一郎	男 90歳 昭6年2月18	CT 13年01月04日	CT検査報告書 確定	
2		デモヒョウジュン イチロウ デモ標準 一郎	男 90歳 昭6年2月18	CT 12年07月03日	CT検査報告書 確定	
3		デモヒョウジュン イチロウ デモ標準 一郎	男 90歳 昭6年2月18	CT 13年01月04日	CT検査報告書 一時保存	
4		デモヒョウジュン イチロウ デモ標準 一郎	男 90歳 昭6年2月18	CT 10年06月21日	CT検査報告書 承認待ち	
5		デモヒョウジュン イチロウ デモ標準 一郎	男 90歳 昭6年2月18	CT 21年03月17日	CT検査報告書 承認待ち	

2. レポート一覧 CSV

レポート一覧を CSV で保存します。


※CSV 出力ではバーコードを出力することができません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	CT	2013/1/4	CT検査報告書01	確定	
2		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	CT	2012/7/3	CT検査報告書01	確定	
3		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	CT	2013/1/4	CT検査報告書01	一時保存	
4		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	CT	2010/6/21	CT検査報告書01	承認待ち	
5		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	CT	2021/3/17	CT検査報告書01	承認待ち	
6		99999999999999999999	デモヒョウジュン イチロウ	デモ標準 一郎	男	90歳	昭6年2月18日	OT	2013/1/4	CT検査報告書01	一時保存	


④ サイドバー

サイドバーの表示を変更します。

- ・無し…サイドバーを表示しません

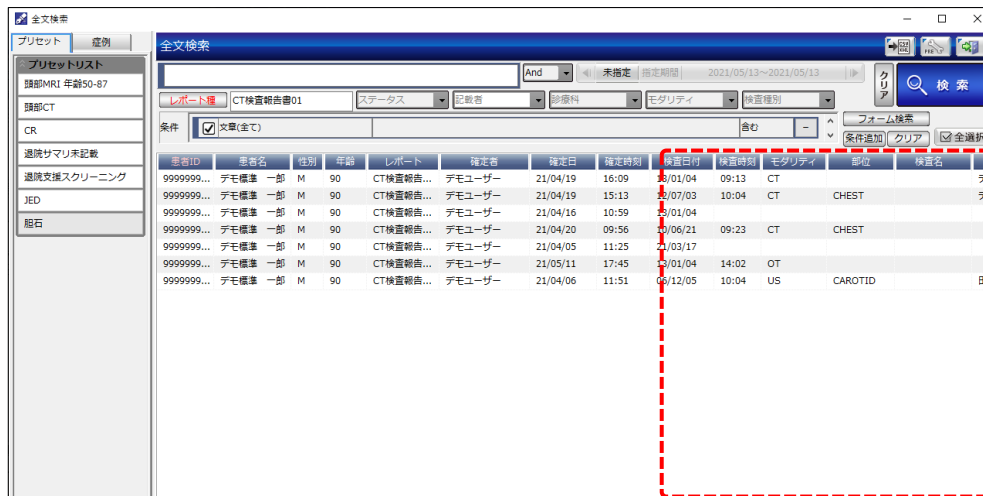

- ・プレビュー画面…サイドバーにプレビュー画面を表示します。

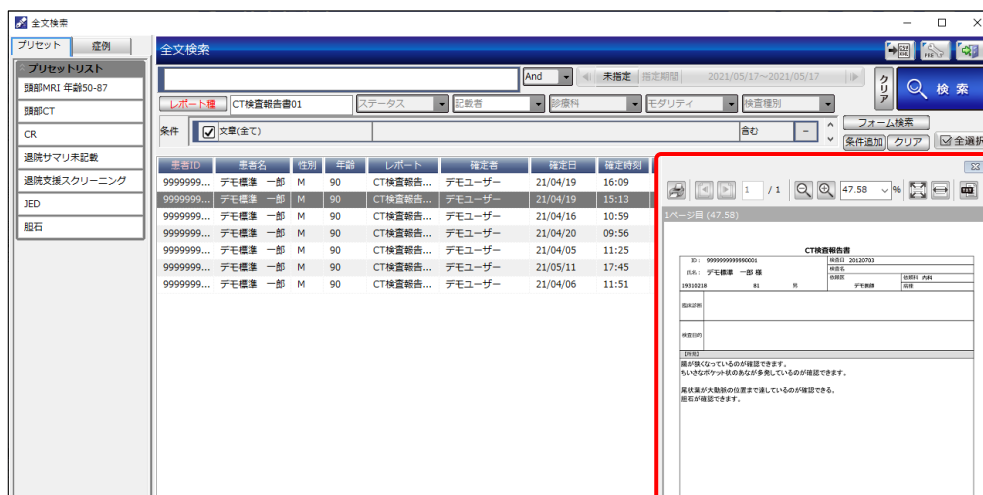

- ・テキスト画面…サイドバーにテキスト画面を表示します。



[×]ボタン

サイドバー（簡易表示画面）を閉じます。

全文検索

検索

検索結果

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	検定者	検定日	検定時刻
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/19 16:09
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/19 15:13
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/16 10:59
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/20 09:56
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/05 11:25
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/05/11 17:45
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/06 11:51

全文検索

検索

検索結果

患者ID	患者名	性別	年齢	レポート	検定者	検定日	検定時刻	検査日時	検査時刻	モダリティ	部位	検査名
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/19 16:09	21/01/04	09:13	CT		デ
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/19 15:13	21/07/03	10:04	CT	CHEST	デ
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/16 10:59	21/01/04				
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/20 09:56	21/06/21	09:23	CT	CHEST	
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/05 11:25	21/03/17				
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/05/11 17:45	21/01/04	14:02	OT		
9999999...	デモ標準	一郎	M	90	CT検査報告...	デモユーザー	21/04/06 11:51	21/12/05	10:04	US	CAROTID	田

※再表示するには、検索結果を右クリックし、サイドバー▶テキストを選択します。


5.2.5 プリセット・症例

・プリセット登録


プリセットの新規作成・編集を行います。

例として、

検索文字を「胆石」、レポート種を「CT 検査報告書 01」、条件を「文書(全て)」とします。

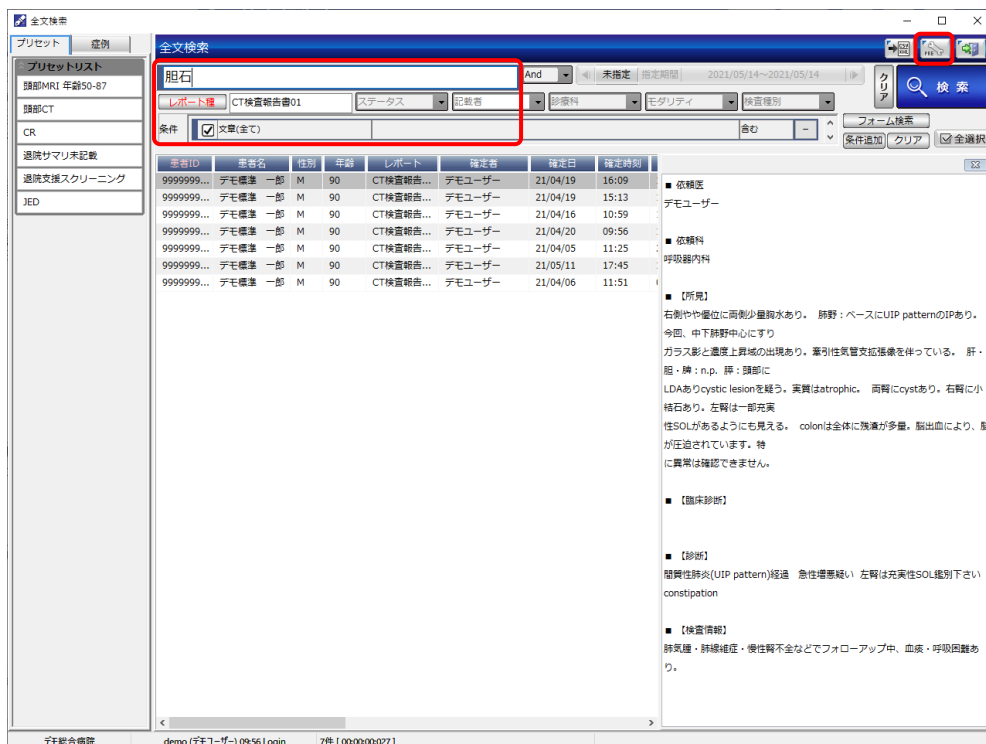

[プリセットボタン編集]ボタンをクリックします。

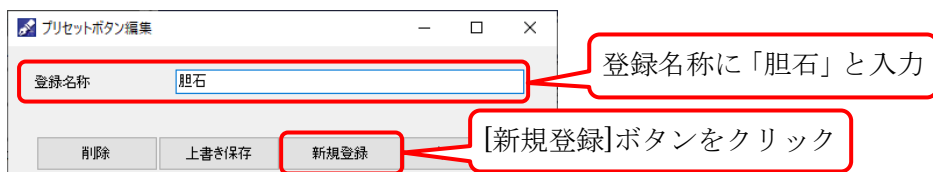


[削除]ボタン…プリセットを削除します。


[上書き保存]ボタン…プリセットの内容を変更後保存します。

[新規登録]ボタン…プリセットを新規登録します。

プリセットリストに「胆石」が追加され、クリックすると同じ条件で検索をします。

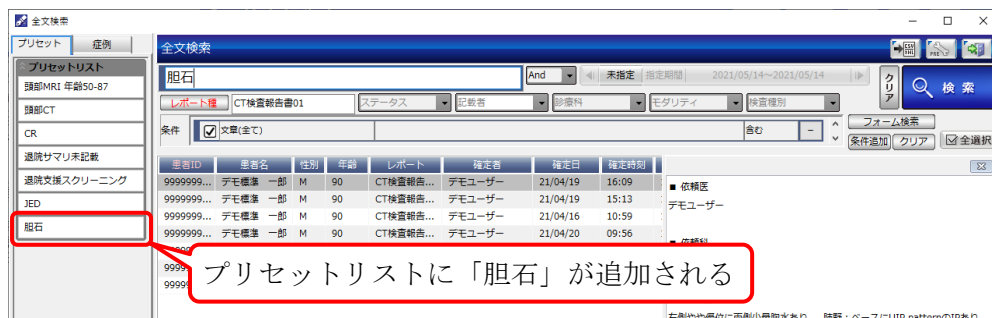

プリセットリストを右クリックすると、登録したプリセットを編集します。

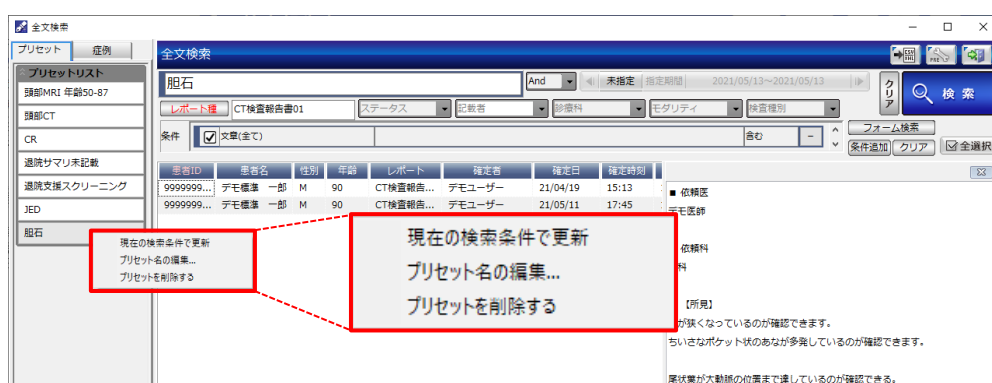

現在の検索条件で更新…検索条件を更新します。

([プリセット登録]▶[上書き保存]ボタンと同じ)

プリセット名の編集…プリセット名を変更します。

プリセットを削除する…プリセットを削除します。

([プリセット登録]▶[削除]ボタンと同じ)

・症例

前述「3.1.4 登録症例」で登録したレポートを抽出します。

レポート	確定者	確定日	確定時刻	検査日付	検査時刻	モダリティ	部位	症例タイトル
CT検査報告...	デモユーザー	18/09/11	09:42	15/11/06	14:06	CT	CHEST	胸水
読影レポート	デモユーザー	17/08/23	16:14	12/12/21	11:27	CT		喘息
胸部X線検査...	デモユーザー	20/10/22	17:02	07/11/01	09:32	CR	CHEST	症例デモ 2
胸部X線検査...	デモユーザー	19/03/14	13:21	11/11/05	09:52	CR	CHEST	症例デモ
胸部X線検査...	デモユーザー	19/03/14	13:21	12/01/20	09:08	CR	CHEST	症例デモ
CT検査報告...	デモユーザー	21/07/15	16:27	06/12/05	10:04	US	CAROTID	腫瘍

①[分類作成]ボタン：分類を作成します。


②[分類修正]ボタン：分類の名称を修正と削除をします。

③抽出リスト枠：検索結果を表示します。


④症例タイトル欄：症例タイトルを表示します（通常非表示）。

⑤分類枠：チェックボックスに☑を入れることで、症例タイトルに登録したレポートを抽出します。

①[分類作成]ボタン

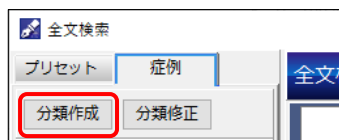


[分類作成]ボタンで分類を作成します。

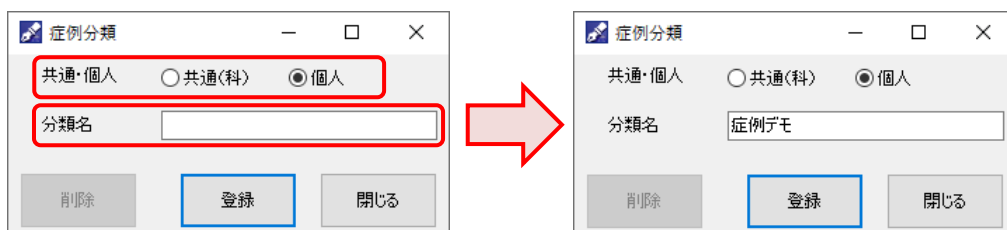


[分類作成]ボタンをクリックすると、症例分類のダイアログが表示されます。


共通・個人のラジオボタンを選択、分類名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

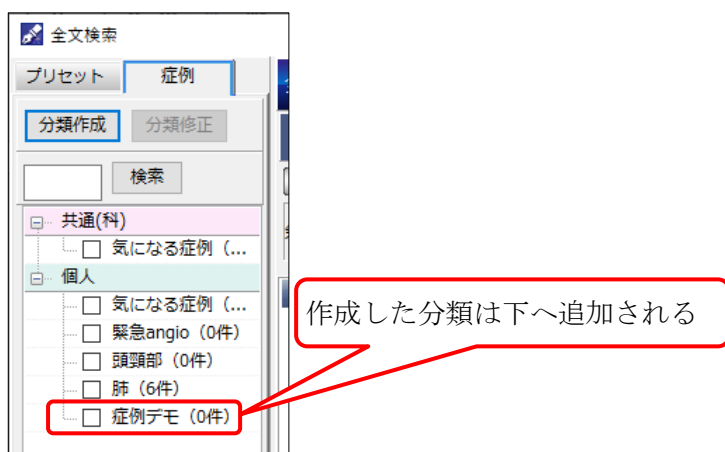

②[分類修正]ボタン

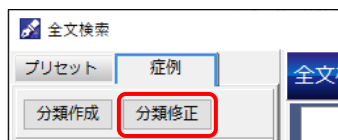

[分類修正]ボタンをクリックすると、分類名の変更、削除ができます。

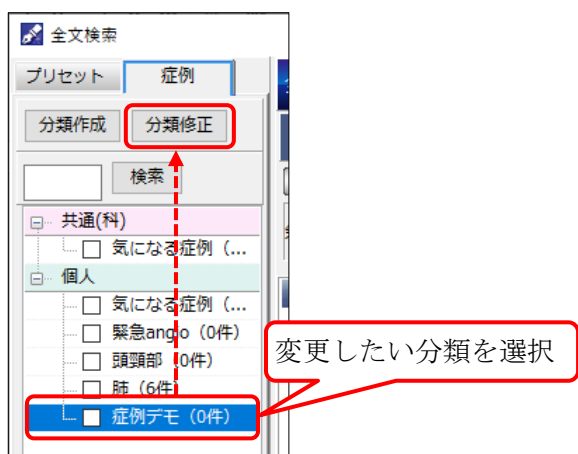


変更する分類名を選択し、[分類修正]ボタンをクリックします。



共通・個人を変更するにはラジオボタンを再選択し、分類名を変更する場合は分類名を上書きし、[登録]ボタンをクリックします。

[削除]ボタンをクリックすると選択した分類名を削除します。

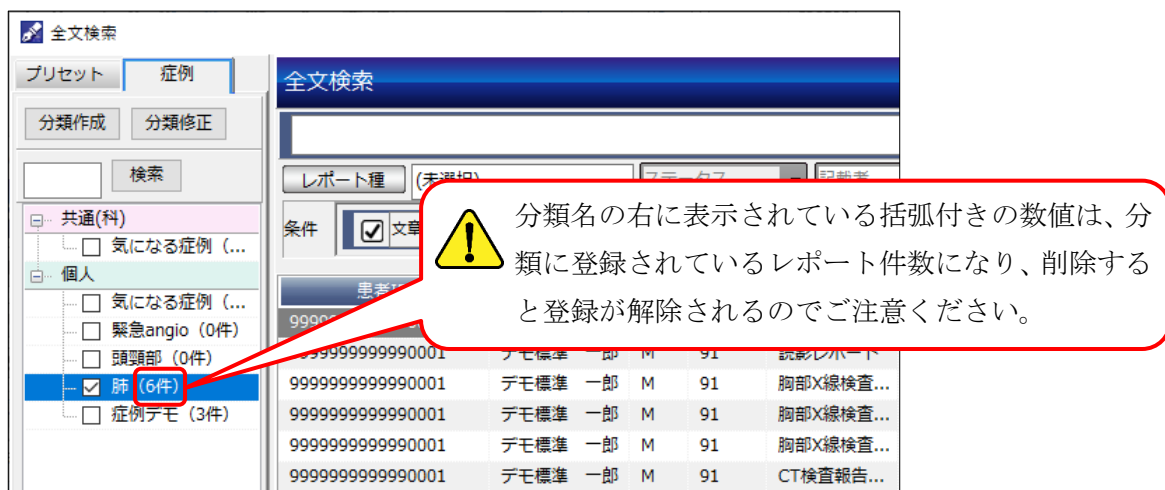


6. 過去比較


画面を左右に分けて過去比較を行います。

[過去報告]タブ

過去報告タブのプルダウンから「同一レポート」を選択します。

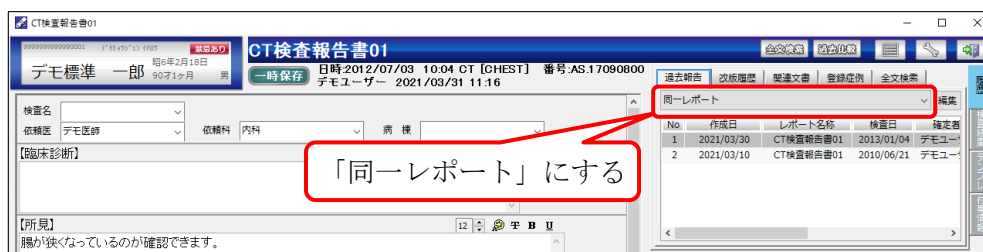


比較対象の過去レポートを選択します。

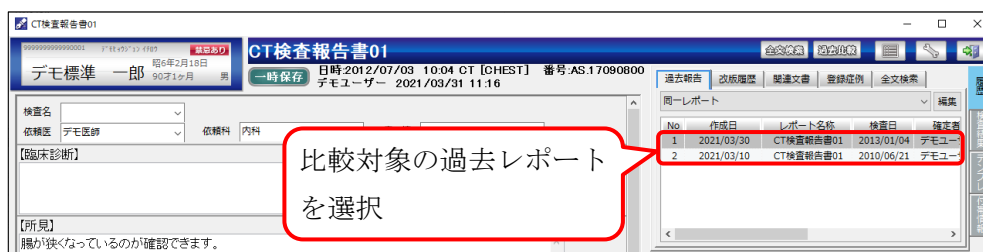

[過去比較]ボタンをクリックすると画面右側が過去比較画面となり、過去報告で選択したレポートを表示します。



①[過去比較]ボタン OFF ([プレビュー]ボタン OFF 時)

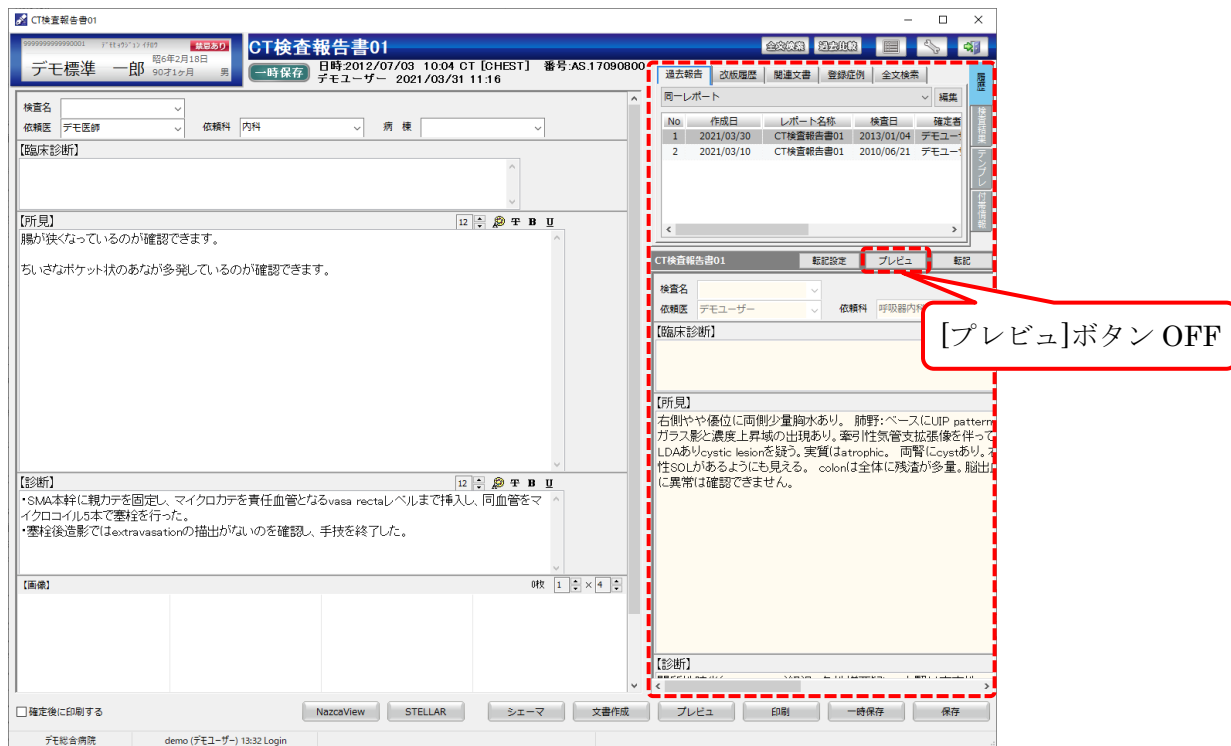

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時: 2012/07/03 10:04 CT [CHEST] 番号: AS.17090800

一時保存

デモユーザー 2021/03/31 11:16

検査名: デモ医師 依頼科: 内科 病棟:

【臨床診断】

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。

ちいさなポケット状のあなが多発しているのが確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親力カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。

・塞栓後造影では extravasation の描出がみられ、手技を終了した。

【画像】

1 2 3 4

確定後に印刷する

NazcaView STELLAR シュエマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 13:32 Login

過去比較 次版履歴 関連文書 登録証明 全文検索

同一レポート

No	作成日	レポート名称	検査日	検査者
1	2021/03/30	CT検査報告書01	2021/03/04	デモユーザー
2	2021/03/10	CT検査報告書01	2010/06/21	デモユーザー

CT検査報告書01

転記設定

検査名: デモユーザー 依頼科: 呼吸器内科

【臨床診断】

【所見】

右側やや低位に両側少量胸水あり。肺野:ベースにUIP pattern ガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴ったLDAありcystic lesionを疑う。実質(atrophic、両腎にcystあり、慢性SOLがあるように見える。colonは全体に残渣が多量。脳出血に異常は確認できません。


【診断】

間質性肺炎(UIP pattern)経過 急性増悪疑い 左腎は充実性SOL

プレビュー

[プレビュー]ボタン OFF

②[過去比較]ボタン ON ([プレビュー]ボタン OFF 時)

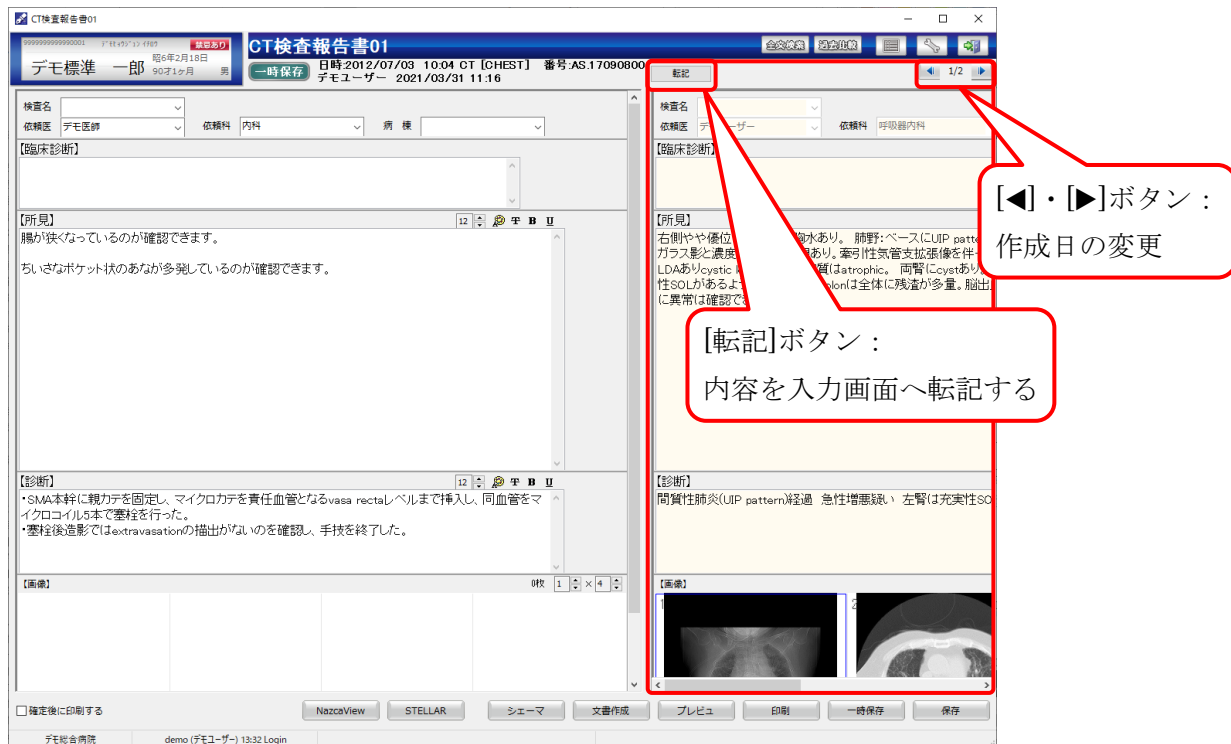

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時: 2012/07/03 10:04 CT [CHEST] 番号: AS.17090800

一時保存

デモユーザー 2021/03/31 11:16

検査名: デモ医師 依頼科: 内科 病棟:

【臨床診断】

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。

ちいさなポケット状のあなが多発しているのが確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親力カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。

・塞栓後造影では extravasation の描出がみられ、手技を終了した。

【画像】

1 2 3 4

確定後に印刷する

NazcaView STELLAR シュエマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 13:32 Login

過去比較 次版履歴 関連文書 登録証明 全文検索

同一レポート

No	作成日	レポート名称	検査日	検査者
1	2021/03/30	CT検査報告書01	2021/03/04	デモユーザー
2	2021/03/10	CT検査報告書01	2010/06/21	デモユーザー

CT検査報告書01

転記設定

検査名: デモユーザー 依頼科: 呼吸器内科

【臨床診断】

【所見】

右側やや低位に両側少量胸水あり。肺野:ベースにUIP pattern ガラス影と濃度上昇域の出現あり。牽引性気管支拡張像を伴ったLDAありcystic lesionを疑う。実質(atrophic、両腎にcystあり、慢性SOLがあるように見える。colonは全体に残渣が多量。脳出血に異常は確認できません。

【診断】

間質性肺炎(UIP pattern)経過 急性増悪疑い 左腎は充実性SOL


プレビュー

[転記]ボタン: 内容を入力画面へ転記する

【◀・▶】ボタン: 作成日の変更


[改版履歴] タブ

改版履歴タブから、比較対象の過去レポートを選択します。

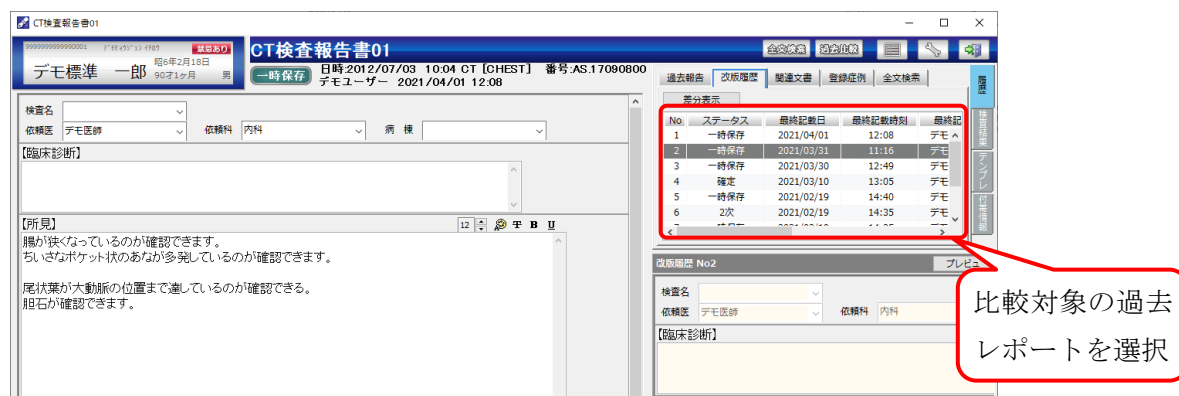


過去報告タブと同じように、[過去比較]ボタンをクリックすると画面右側が過去比較画面となり、改版履歴で選択したレポートを表示します。

①[過去比較]ボタン OFF ([プレビュー]ボタン OFF 時)

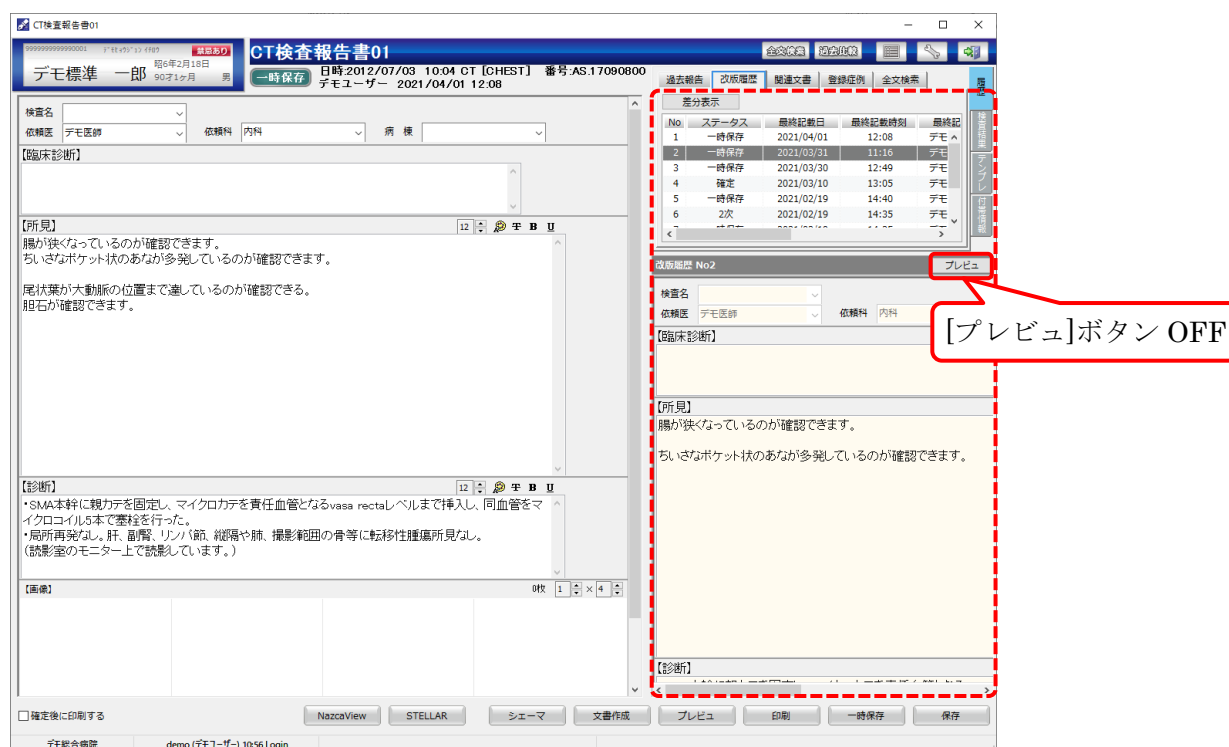

②[過去比較]ボタン ON ([プレビュー]ボタン OFF 時)

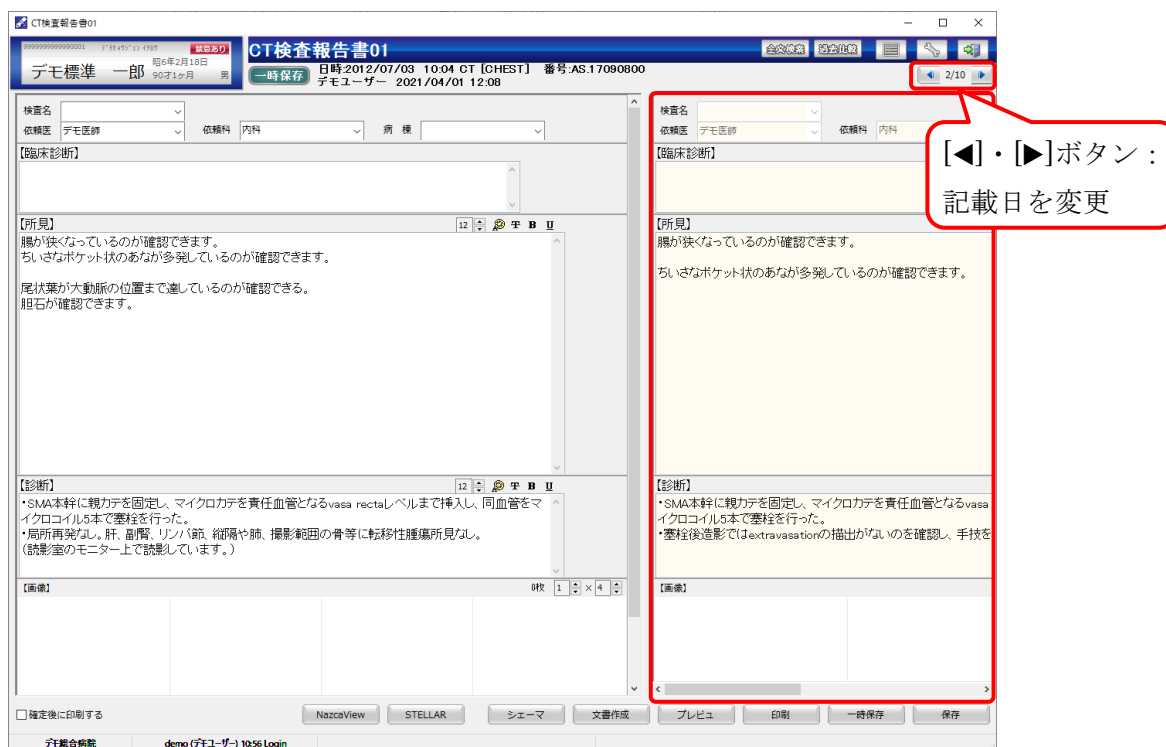

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時2012/07/03 10:04 CT [CHEST] 番号:AS.17090800

デモ標準 一郎 2021/04/01 12:08

検査名: 依頼医: デモ医師 依頼科: 内科 病棟:

【臨床診断】

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。
 小さいポケット状のあなが多発しているのが確認できます。
 尾状葉が大動脈の位置まで達しているのが確認できる。
 胆石が確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。
 ・局所再発なし。肝、副腎、リンパ節、縦隔や肺、撮影範囲の骨等に転移性腫瘍所見なし。
 (読影室のモニター上で読影しています。)

【画像】

2/10

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。
 小さいポケット状のあなが多発しているのが確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。
 ・塞栓後造影で extravasation の描出がないのを確認し、手技を終了した。

【画像】

2/10


確定後に印刷する

NazcaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 10:56 Login

【◀・▶】ボタン：記載日を変更

③[過去比較]ボタン ON ([プレビュー]ボタン ON 時)

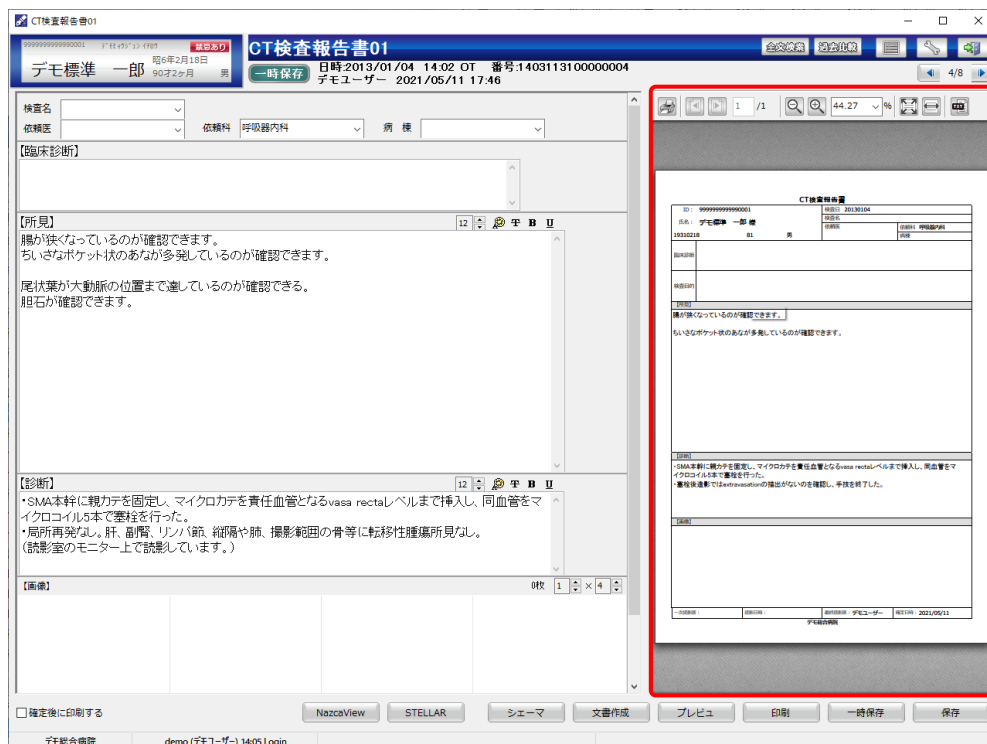

CT検査報告書01

CT検査報告書01

日時2013/01/04 14:02 CT 番号:1403113100000004

デモ標準 一郎 2021/05/11 17:46

検査名: 依頼医: デモ医師 依頼科: 呼吸器内科 病棟:

【臨床診断】

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。
 小さいポケット状のあなが多発しているのが確認できます。
 尾状葉が大動脈の位置まで達しているのが確認できる。
 胆石が確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。
 ・局所再発なし。肝、副腎、リンパ節、縦隔や肺、撮影範囲の骨等に転移性腫瘍所見なし。
 (読影室のモニター上で読影しています。)

【画像】

44.27

CT検査報告書

ID: 99999999999999999999 10001 20130104

患者名: デモ標準 一郎 性別: 男 年齢: 50 依頼科: 呼吸器内科

検査日時: 20130104 14:02

読影日時: 20210511 17:46

読影者: デモ標準 一郎

読影室: 読影室

【所見】

腸が狭くなっているのが確認できます。
 小さいポケット状のあなが多発しているのが確認できます。

【診断】

・SMA本幹に親カテを固定し、マイクロカテを責任血管となる vasa recta レベルまで挿入し、同血管をマイクロコイル5本で塞栓を行った。
 ・塞栓後造影で extravasation の描出がないのを確認し、手技を終了した。

【画像】

44.27

確定後に印刷する

NazcaView STELLAR シェーマ 文書作成 プレビュー 印刷 一時保存 保存

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 14:05 Login