

STELLAROrder 操作説明書

Users Manual

Version 5.0.0.5

株式会社アストロステージ
東京都千代田区神田司町 2-8-1
PMO 神田司町 5F
TEL : 03-5289-7740

目次

1. 概要	3
2. STELLAROrder の操作について	3
2.1 起動方法	3
2.2 初期画面	4
2.3 検索.....	5
2.3.1 ID・氏名枠.....	5
2.3.2 目的種類（プルダウン）	6
2.3.3 日付プリセット（プルダウン）	7
2.3.4 日付と[カレンダー]ボタン.....	7
2.3.5 検索種類（プルダウン）	8
2.3.6 [割込み検索]ボタン	10
2.3.7 [他施設]ボタン.....	11
2.3.8 [選択]・[解除]ボタン.....	12
2.3.9 デフォルトアクションボタン・[▶]ボタン.....	13
2.3.10 任意項目・プリセット等のプルダウン.....	14
2.3.11 [クリア]ボタン・[検索]ボタン	26
2.3.12 [簡易表示]ボタン.....	26
2.3.13 アクションボタン（タブ連動）	27
2.4 タブ操作（追加・移動・削除・検索条件保存）	29
2.5 メインリスト.....	38
2.6 リストの配色.....	56
2.7 サブ画面	58
2.7.1 履歴リスト.....	61
2.7.2 サムネイル.....	63
2.7.3 レポート.....	64
2.7.4 シリーズリスト.....	65
2.7.5 依頼情報.....	65
2.7.6 ランチャー.....	66
2.7.7 検査履歴（患者一覧のみ）	67
2.7.8 名寄せ（患者一覧のみ）	67
2.7.9 紹介履歴.....	68
2.7.10 開封リスト.....	68
2.7.11 リスト一覧.....	69
2.8 ナビゲーション	71
2.9 設定画面	74

1. 概要


STELLAROrder は、リスト表示された患者、検査のレコードから各種アプリケーションの起動を行います。

※運用方針、操作権限により一部機能が使用できない場合がございます。

2. STELLAROrder の操作について

2.1 起動方法

デスクトップより“STELLAROrder”のショートカットをダブルクリックするとログイン画面が立ち上がります。

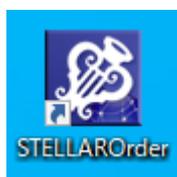

STELLAROrder の
ショートカットアイコンを
ダブルクリック



①施設の検索欄はデフォルト設定では検索ボックスとなっています。何も入力が無い場合はコンボボックス下に何も表示されません。文字列を入力すると施設マスタ上を部分検索します。

②ユーザ ID 及びパスワードを入力し、[開始]ボタンまたは[Enter]キーを押下してください。

2.2 初期画面

画面全体の構成を説明します。

ここでは[患者一覧]タブの画面を表示しています。

The screenshot shows the STELLAR Order application interface. At the top, there is a navigation bar with the application name and a search icon (1). Below this is a search and filter section with various dropdown menus and buttons (2). The main area is a table of patient data with columns for patient ID, name, gender, birth date, age, department, doctor, ward, and admission date. A red circle (3) highlights the first row. Below the main table is a sub-screen for the selected patient's history, with a red circle (4) highlighting the '履歴リスト' (History List) tab. The status bar at the bottom shows the user is logged in as 'demo' and has 203 search results.

①左から、[ナビゲーション起動]ボタン：ナビゲーションウィンドウを表示します。

[初期表示]ボタン：画面表示の変更箇所を初期表示に戻します。

[設定(スパン)]ボタン：STELLAROrder 設定画面を表示します。

[閉じる]ボタン：STELLAROrder を終了します。

②患者検索・絞り込み検索・アクションボタン

③メインリスト・タブ等

④サブ画面（履歴リスト・サムネイル等）



※ナビゲーションについて


全体画面の手前にナビゲーションが表示されます。このウィンドウは「手前に表示」のチェックが入っていると、どのアプリケーションを起動しても常に前面に表示します。（詳細は後述します。）

2.3 検索


以下の方法で患者を検索することができます。

2.3.1 ID・氏名枠

「ID・氏名」左のチェックボックスに☑を入れると、タブ移動時に枠内の文字を引き継いで検索を行います。

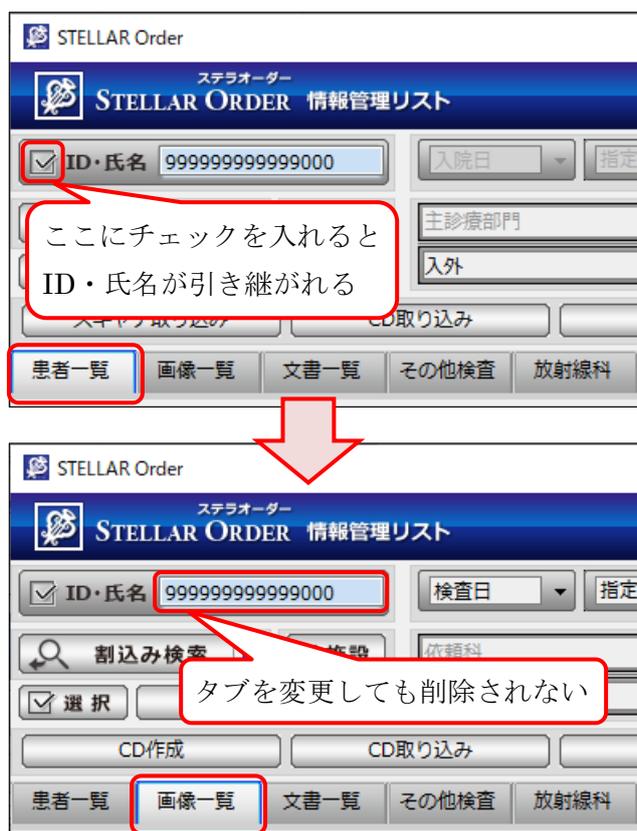

入力枠上で右クリックをすると“通常検索”と“ID,氏名全検索”を切り替えることができます。

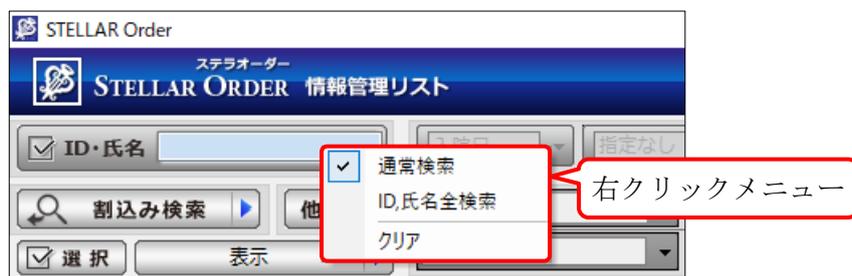

通常検索：患者の ID・氏名（ふりがな・カナ・漢字）で検索します。

ID,氏名全検索：通常検索にアルファベット（英語）が加わります。

クリア：検索枠内を消去します。

2.3.2 目的種類（プルダウン）

タブ項目によりプルダウンの内容が変わります。


[患者一覧]タブの場合：

「入院日」・「退院日」




[画像一覧]タブの場合：

「検査日」・「オーダー日」

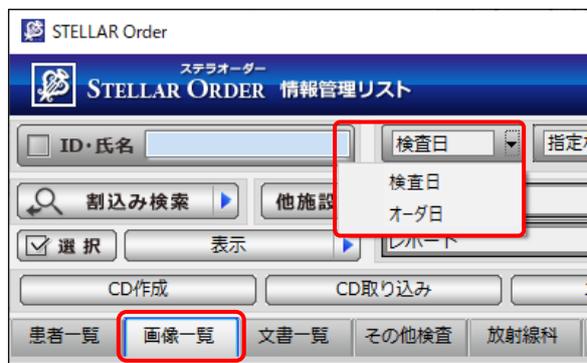


[文書一覧]タブの場合：

「記載日」・「印刷日」・「検査日」・「登録日」

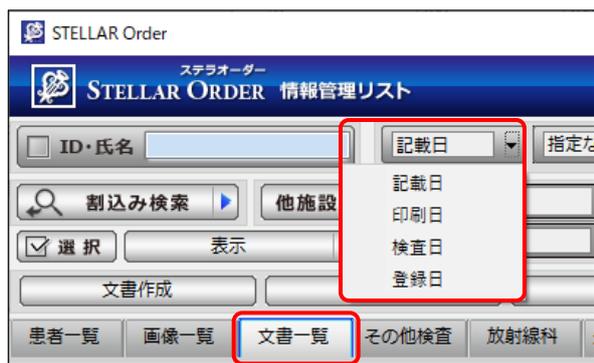

2.3.3 日付プリセット（プルダウン）

任意の期間を指定し検索することができます。プルダウンから期間を選択すると、右側の日付が自動で変更され検索まで行われます。

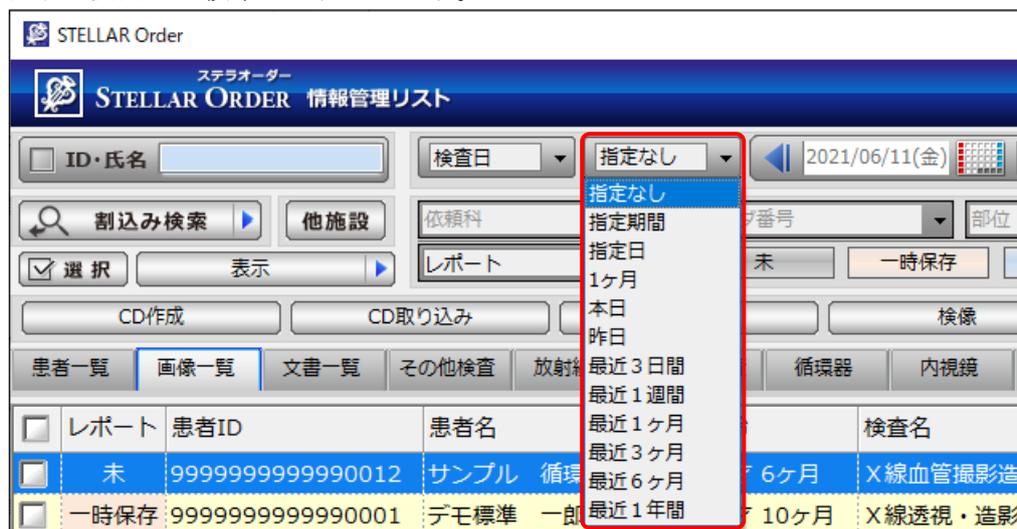

指定なし：全ての期間を表示します。

指定期間：期間を指定します。

指定日：日付を指定します。

1ヶ月：指定月の初めから月末までを表示します。

本日：現在の日付を表示します。

昨日：現在の1日前を表示します。

最近3日間：本日含む3日間を表示します。


最近1週間：本日含む7日間を表示します。

最近1ヶ月（3ヶ月・6ヶ月）：現在の日付から1ヶ月（3ヶ月・6ヶ月）間を表示します。

最近1年間：現在の日付から1年間を表示します。

2.3.4 日付と[カレンダー]ボタン

日付を指定することができます。

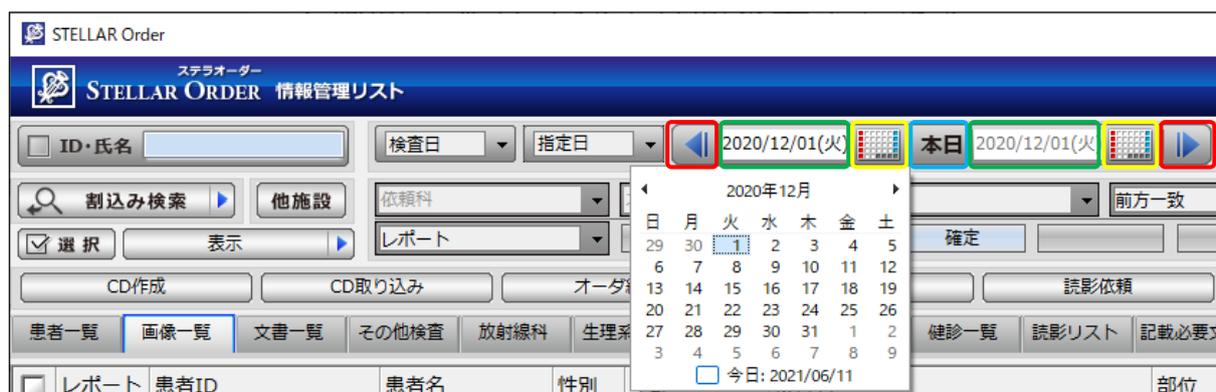

赤枠：[◀] (▶) … 1日ずつ動かします。

緑枠：開始日（終了日）指定…（西暦）年／月／日を数値入力します。


黄枠：[カレンダー]ボタン…カレンダー表示で指定します。

青枠：[本日]ボタン…本日の日付を表示します。

2.3.5 検索種類（プルダウン）

検索種類をプルダウンから指定し、その中から検索対象を選択します。検索種類はモダリティ・検査手技・文書名称・関連文書の中から指定することができ、検索ダイアログを表示します。

※[患者一覧]タブでは選択できません。

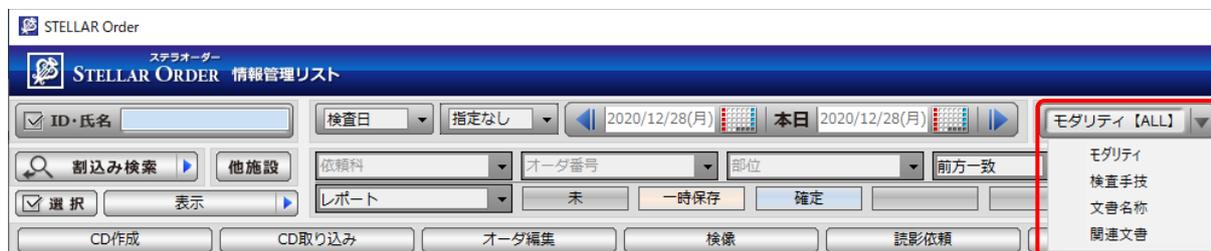

モダリティ検索



- ① 検索枠：モダリティコード・モダリティ名称を入力すると、赤字で表示・抽出されます。
 - ② [お気に入り]ボタン：選択項目枠のみ表示し、候補一覧枠を非表示にします。
 - ③ [全選択]ボタン：モダリティコードの左側の全てのチェックボックスに☑を入れます。チェックが入ると[全解除]ボタンに変わります。
 - ④ [追加]ボタン：候補一覧枠中のモダリティを選択項目に追加します。
 - ⑤ [削除]ボタン：選択項目枠中のモダリティを削除します。
- ※モダリティ名称をダブルクリックしても選択項目へ追加、または選択項目から削除が可能。
- ⑥ [クリア]ボタン：選択項目枠にある全てのモダリティを削除します。
 - ⑦ [決定]ボタン：モダリティ検索の操作終了後、画面を STELLAROrder に戻します。

検査手技検索

- ・検査手技検索は「モダリティ検査」のボタン操作に加え「検査種」のプルダウンで抽出します。
- ・検索枠には「手技コード」・「名称」・「施設管理番号」等で検索します。

手技コード	名称	ふりがな	検査種	施設管理番号
<input type="checkbox"/>	856	身長体重		C0802
<input type="checkbox"/>	857	視力		C0808
<input type="checkbox"/>	851	コピー		C0520
<input type="checkbox"/>	852	P E T検査		C0710
<input type="checkbox"/>	853	エコー		C0700
<input type="checkbox"/>	854	SPP		C0181
<input type="checkbox"/>	855	診察		C0801
<input checked="" type="checkbox"/>	858	聴覚・眼圧		C0810
<input type="checkbox"/>	859	聴力		C0812
<input type="checkbox"/>	860	血圧		C0814
<input type="checkbox"/>	861	尿・便		C0816
<input type="checkbox"/>	862	採血		C0818
<input type="checkbox"/>	863	胸部X線		C0819
<input type="checkbox"/>	864	心電図		C0820
<input type="checkbox"/>	865	肺機能		C0821
<input type="checkbox"/>	866	エコー		C0823
<input type="checkbox"/>	867	腹部X線		C0828
<input type="checkbox"/>	868	耳小骨筋反射検査		C0530
<input type="checkbox"/>	869	治療計画		C0511
<input type="checkbox"/>	870	聴覚		C0450

文書名称と関連文書

- ・文書名称と関連文書は「モダリティ検査」のボタン操作に加え、「種別明細」・「部門」のプルダウンで抽出します。
- ・検索枠には、「レポートコード」・「レポート名称」・「レポート種別」・「種別明細」等で検索します。

レポートコード	レポート名称	部門	レポート種別	種別明細	表示順
<input type="checkbox"/>	100005	発注依頼一覧			100005
<input type="checkbox"/>	100006	調整依頼一覧			100006
<input type="checkbox"/>	1110000001	カンファレンス画面1			111000
<input type="checkbox"/>	1110000002	カンファレンス画面2			111000
<input type="checkbox"/>	1110000003	カンファレンス画面3			111000
<input type="checkbox"/>	1110000010	カテ台帳テスト			111000
<input type="checkbox"/>	900010085	職業性ストレス層別調査表	産業医	チェックリスト	900010
<input type="checkbox"/>	900010004	産業医報告	産業医	産業医記録	900010
<input type="checkbox"/>	31308	病理診断報告書	各種検査レポート		31308
<input type="checkbox"/>	31309	細胞診検査報告書	各種検査レポート		31309
<input type="checkbox"/>	2645	CAG_LVG	各種検査レポート	放射線	2645
<input type="checkbox"/>	2646	圧データ	各種検査レポート	放射線	2646
<input type="checkbox"/>	2716	基本	各種検査レポート	放射線	2716
<input type="checkbox"/>	3942	3942_放射線治療チェックリスト	各種検査レポート	放射線	3942

2.3.6 [割込み検索]ボタン

検索内容を保存し、別の検索を行うことができます。

保存できる検索内容は、タブ・患者 ID・検査日・モダリティになります。

▶ボタンで保存した割込み履歴の呼び出しと、割込み履歴をクリア（消去）することができます。

①患者 ID とモダリティ（CT）で検索

②クリックすると、現在の検索条件を保存

③[OK]ボタンをクリックすると検索条件がクリアされる

④別の患者 ID とモダリティ（CT）で検索

⑤別患者の検索結果が表示されるが、[割込み検索]の右にある▶をクリックすると、検索履歴が表示され、検索結果を戻すことができます。
※検査条件は複数保存することができます

一時保存	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	56才 8ヶ月	X線CT 検査心臓
確定	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	70才 5ヶ月	X線CT 検査上腹部
確定	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	70才 6ヶ月	X線CT 検査脳
未	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	63才 11ヶ月	X線CT 検査上腹部
未	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	70才 6ヶ月	
未	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	68才 9ヶ月	
未	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	73才 1ヶ月	CT
未	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	71才 7ヶ月	CTWPT

2.3.7 [他施設]ボタン

[他施設]ボタンをクリックすると、他施設データを含んだリストで表示されます。

[他施設]ボタンのクリック前

STELLAR Order

STELLAR ORDER 情報管理リスト

ID・氏名

他施設

[他施設]ボタンをクリック

自施設のみで検索します

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	施設名	病棟	病室
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモキョウイチ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科	医師	デモ総合病院	西3階病棟	W3001
9999999999990002	デモ経過表 二郎	デモキョウジ	M	1961/05/05	60才 1ヶ月			デモ総合病院		
9999999999990003	デモ解析 花子q	デモカイカ	F	1943/04/20	78才 1ヶ月	内科	デモ医師	デモ総合病院	西4階病棟	W4003
9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンシ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	医師	デモ総合病院		
9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモサンギョウ	M	1974/12/31	46才 5ヶ月	内科		デモ総合病院		
9999999999990006	デモ内視 一郎	デモナイシ	M	1945/06/05	76才 0ヶ月			デモ総合病院		
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプルナイシキョウ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			デモ総合病院	東3階病棟	E3003
9999999999990008	サンプル 病理	サンプルボリ	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	デモ総合病院	西5階病棟	W5002
9999999999990009	サンプル 眼科	サンプルガンカ	F	1937/04/15	84才 1ヶ月	眼科	医師	デモ総合病院	東3階病棟	E3011
9999999999990010	サンプル 耳鼻	サンプルジビ	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師	デモ総合病院		
9999999999990011	サンプル 生理	サンプルセイ	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師	デモ総合病院		
9999999999990012	サンプル 循環器	サンプルジュンカキ	M	1957/11/20	63才 6ヶ月		循環器 医師	デモ総合病院		W1001
9999999999990013	サンプル 治療	サンプルリョウ	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科		デモ総合病院		
9999999999990014	サンプル 放射線	サンプルホウシャ	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		デモ総合病院	西5階病棟	W5001

[他施設]ボタンのクリック後

STELLAR Order

STELLAR ORDER 情報管理リスト

他施設

[他施設]ボタンが反転します

他施設を含め検索します

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	施設名	病棟	病室
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモキョウイチ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科	医師	デモ総合病院	西3階病棟	W3001
9999999999990001		デモキョウイチ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月			CC病院		
9999999999990001		デモキョウイチ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月			BB診療所		
9999999999990002	デモ経過表 二郎	デモキョウジ	M	1961/05/05	60才 1ヶ月			デモ総合病院		
9999999999990003	デモ解析 花子q	デモカイカ	F	1943/04/20	78才 1ヶ月	内科	デモ医師	デモ総合病院	西4階病棟	W4003
9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンシ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	内科 医師	デモ総合病院		
9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンシ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月			CC病院		
9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンシ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月			BB診療所		
9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモサンギョウ	M	1974/12/31	46才 5ヶ月	内科		デモ総合病院		
9999999999990005		デモサンギョウ	M	1974/12/31	46才 5ヶ月			法務省共済組合診療所		
9999999999990006	デモ内視 一郎	デモナイシ	M	1945/06/05	76才 0ヶ月			デモ総合病院		
9999999999990006	デモ内視 一郎	デモナイシ	M	1945/06/05	76才 0ヶ月			BB診療所		
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプルナイシキョウ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			デモ総合病院	東3階病棟	E3003
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプルナイシキョウ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			BB診療所		

2.3.8 [選択]・[解除]ボタン

[選択]ボタンをクリックすると、左側の全てのチェックボックスに☑が付きます。

全てのチェックボックスに☑が入っている場合は[解除]ボタンとなり、クリックすると☑が解除されます。

※タイトル行にあるチェックボックスも同様の動作をします。

このスクリーンショットは、STELLAR ORDERの患者情報管理リスト画面を示しています。上部には検索条件や操作メニューがあり、「選択」ボタンが赤い枠で強調されています。下部の患者リストテーブルの最初の行（タイトル行）のチェックボックスが赤い枠で囲まれ、その中に「[選択]ボタンをクリックすると全てに☑が入る」という説明が記されています。

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院
<input type="checkbox"/>	9999999999990001	三木 雅之 一郎	三木ノリヒコ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科 医師	西3階病棟	W3001	入	2013/01/21	
<input type="checkbox"/>	9999999999990002	三木 雅之 一郎	三木ノリヒコ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科 医師	西3階病棟	W3001	入	2013/01/21	
<input type="checkbox"/>	9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンケンキコ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	内科 医師	西4階病棟	W4003	入	
<input type="checkbox"/>	9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモサンギョウ タロウ	M	1974/12/31	46才 5ヶ月	内科					
<input type="checkbox"/>	9999999999990006	デモ内視 一郎	デモナイシ イチロウ	M	1945/06/05	76才 0ヶ月				外	2016/07/07	20
<input type="checkbox"/>	9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプルナイシキョウ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			東3階病棟	E3003	入	2018/03/13
<input type="checkbox"/>	9999999999990008	サンプル 病理	サンプルパシ	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西5階病棟	W5002	入	
<input type="checkbox"/>	9999999999990009	サンプル 眼科	サンプルガンカ	F	1937/04/15	84才 1ヶ月	眼科 医師	東3階病棟	E3011	入	2017/09/08	
<input type="checkbox"/>	9999999999990010	サンプル 耳鼻	サンプルジビ	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師		外		
<input type="checkbox"/>	9999999999990011	サンプル 生理	サンプルセイ	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師		入		
<input type="checkbox"/>	9999999999990012	サンプル 循環器	サンプルジュンカキ	M	1957/11/20	63才 6ヶ月		循環器 医師	W1001	入	2018/12/07	
<input type="checkbox"/>	9999999999990013	サンプル 治療	サンプルリョウ	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科			外		
<input type="checkbox"/>	9999999999990014	サンプル 放射線	サンプルホウシャセン	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		西5階病棟	W5001	入	


このスクリーンショットは、STELLAR ORDERの患者情報管理リスト画面を示しています。上部には検索条件や操作メニューがあり、「解除」ボタンが赤い枠で強調されています。下部の患者リストテーブルの最初の行（タイトル行）のチェックボックスが赤い枠で囲まれ、その中に「タイトル行のチェックボックスも[選択 (解除)]と同様の働きをする」という説明が記されています。

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990001	三木 雅之 一郎	三木ノリヒコ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科 医師	西3階病棟	W3001	入	2013/01/21	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990002	三木 雅之 一郎	三木ノリヒコ	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科 医師	西3階病棟	W3001	入	2013/01/21	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンケンキコ	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	内科 医師	西4階病棟	W4003	入	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモサンギョウ タロウ	M	1974/12/31	46才 5ヶ月	内科					
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990006	デモ内視 一郎	デモナイシ イチロウ	M	1945/06/05	76才 0ヶ月				外	2016/07/07	20
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプルナイシキョウ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			東3階病棟	E3003	入	2018/03/13
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990008	サンプル 病理	サンプルパシ	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西5階病棟	W5002	入	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990009	サンプル 眼科	サンプルガンカ	F	1937/04/15	84才 1ヶ月	眼科 医師	東3階病棟	E3011	入	2017/09/08	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990010	サンプル 耳鼻	サンプルジビ	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師		外		
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990011	サンプル 生理	サンプルセイ	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師		入		
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990012	サンプル 循環器	サンプルジュンカキ	M	1957/11/20	63才 6ヶ月		循環器 医師	W1001	入	2018/12/07	
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990013	サンプル 治療	サンプルリョウ	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科			外		
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990014	サンプル 放射線	サンプルホウシャセン	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		西5階病棟	W5001	入	

2.3.9 デフォルトアクションボタン・▶]ボタン

ボタンを押すことで設定したアクションを行います（図は[表示]に設定）。

アクションの項目は、ボタン上の右クリックメニューから変更可能です。

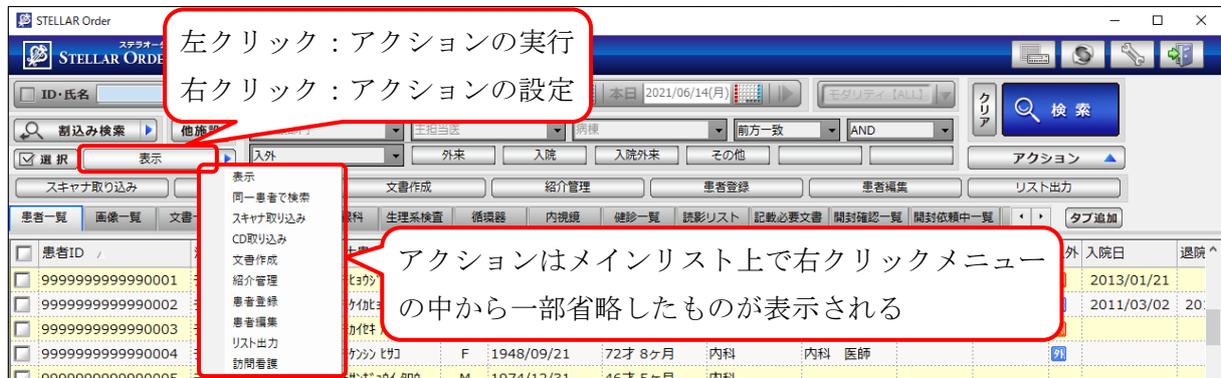

▶]ボタンは、メインリストで右クリックした時の表示するメニュー表示を行います。



2.3.10 任意項目・プリセット等のプルダウン


任意条件、プリセットの条件で絞込みを行います

ボタンをクリックすることで条件の ON/OFF を行います。

任意項目はタブ項目によりプルダウン・ボタンの内容が変わります。




任意項目枠を右クリックし、任意条件検索の項目を選択します。

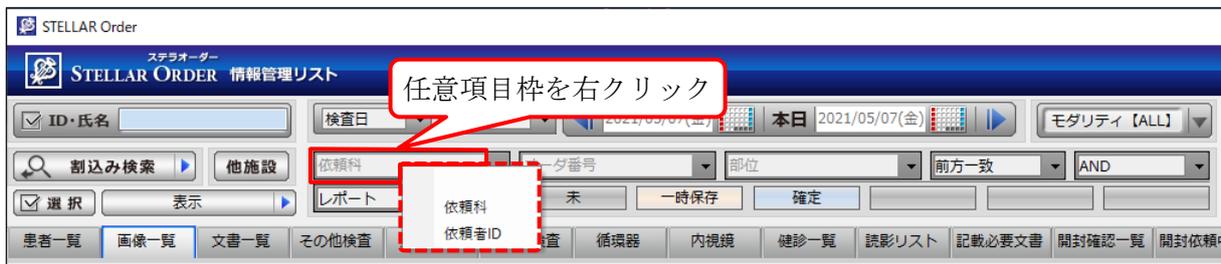

任意項目枠の[▼]ボタンをクリックし、検索対象の項目を選択して検索を行います。

(下図では、選択されている任意条件検索「依頼科」から検索しています)

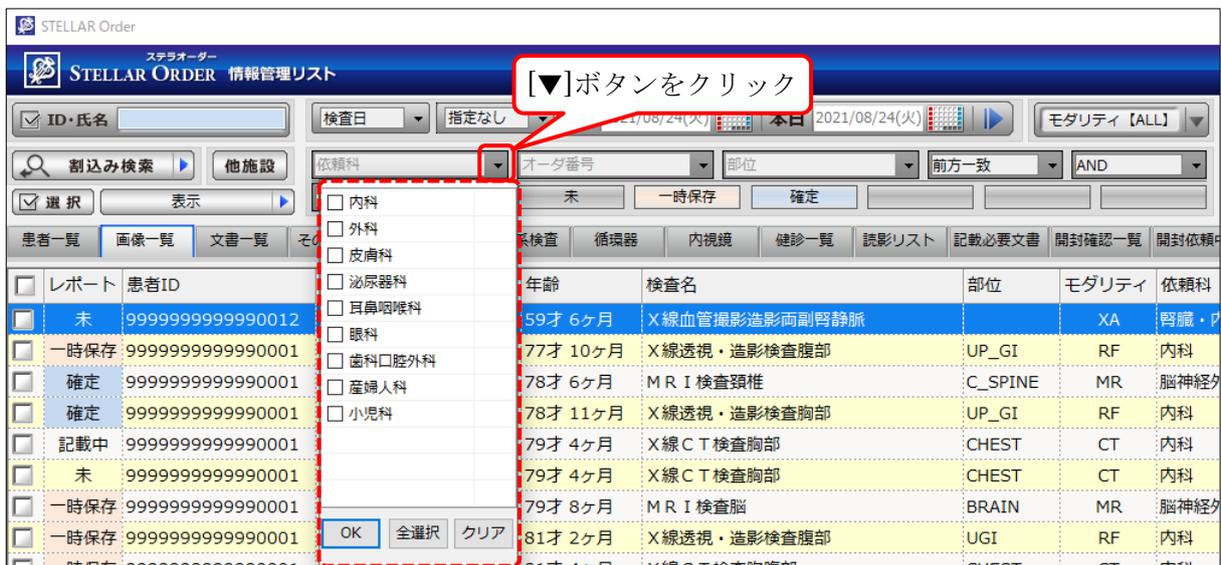

任意項目枠をクリックし、検索対象の項目を直接入力して検索を行うこともできます。

STELLAR Order

ステラオーダー 情報管理リスト

ID・氏名 検査日 指定なし 2021/08/24(火) 本日 2021/08/24(火) モダリティ【ALL】

割込み検索 他施設 脳神経外科 オーダ番号 部位 前方一致 AND

選択 表示 レポート 一時保存 確定

CD作成 CD取り込み

患者一覧 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科

レポート	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科
<input checked="" type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一部	M	78才 6ヶ月	MRI 検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経外
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一部	M	79才 8ヶ月	MRI 検査脳	BRAIN	MR	脳神経外

任意条件検索について

任意1～任意4のプルダウンの項目と内容を、[設定(スパナ)]ボタンから変更することができます。

STELLAR Order 設定

基本設定

全般設定 **タブ設定**

端末設定

全般設定

アクション設定

説明

タブ毎に検索条件 起動アプリ等を設定します

タブ設定

リストの追加 表示順の変更

患者一覧 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器 内視鏡

タブ名称 タブ名称 患者一覧

動作設定 先読み しない(規定)

検索条件 デフォルト設定 追加検索 する

起動アプリ 検査種別マスタの規定ビューアを使用 規定値を使用しない ダブルクリック STELLAR メニュー Nazca,STELLAR,STELLAR Report ランチャー

表示設定 複数行表示 しない(規定) 履歴に名寄せ患者表示 しない(規定) タブの日付使用 しない(規定) 開封通知の複数行表示 しない(規定) 開封通知(目ユーザを表示) しない(規定) サブ画面表示項目 履歴リスト

初期設定

任意1 任意2 任意3


主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

任意4 入外 外来 入院 入院外来 その他


確定 終了

デモ総合病院 demo(デモユーザー) 16:37 Login


任意条件検索の項目を追加する場合、プルダウンを右クリックし「追加」を選択します。
 例として、[放射線科]タブの「任意1」のプルダウンに「検査手技」の検索項目を追加します。

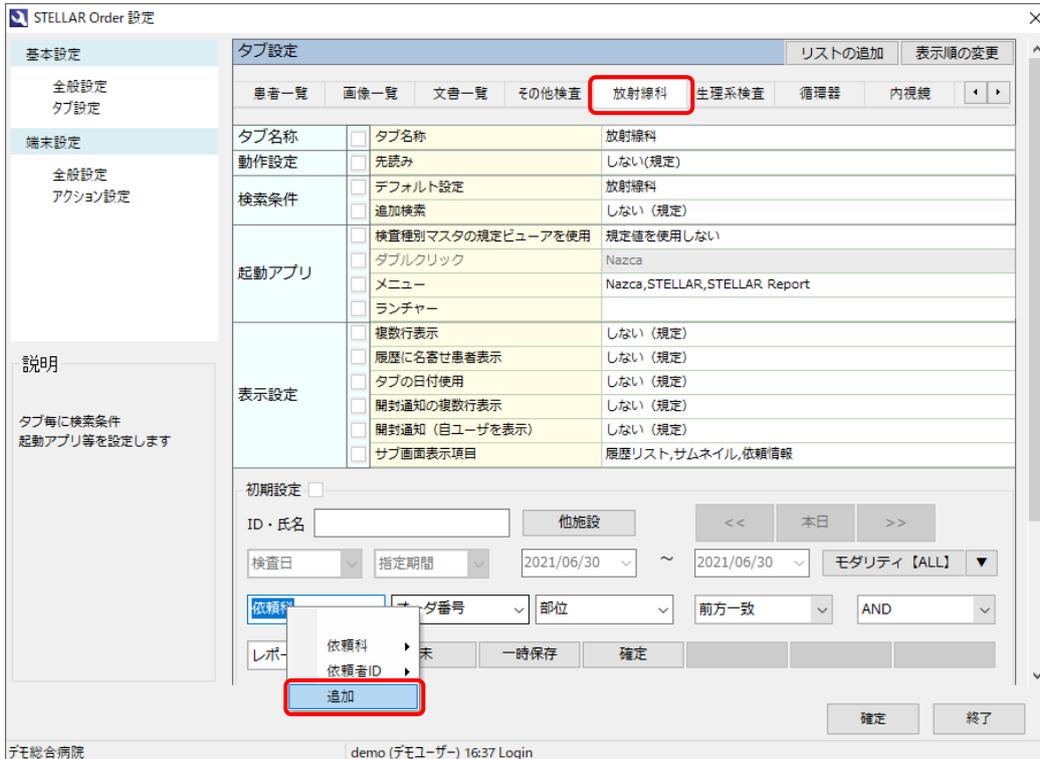

「任意1」のプルダウンを右クリックし、「追加」をクリックすると選択すると任意検索 編集画面が表示されます。

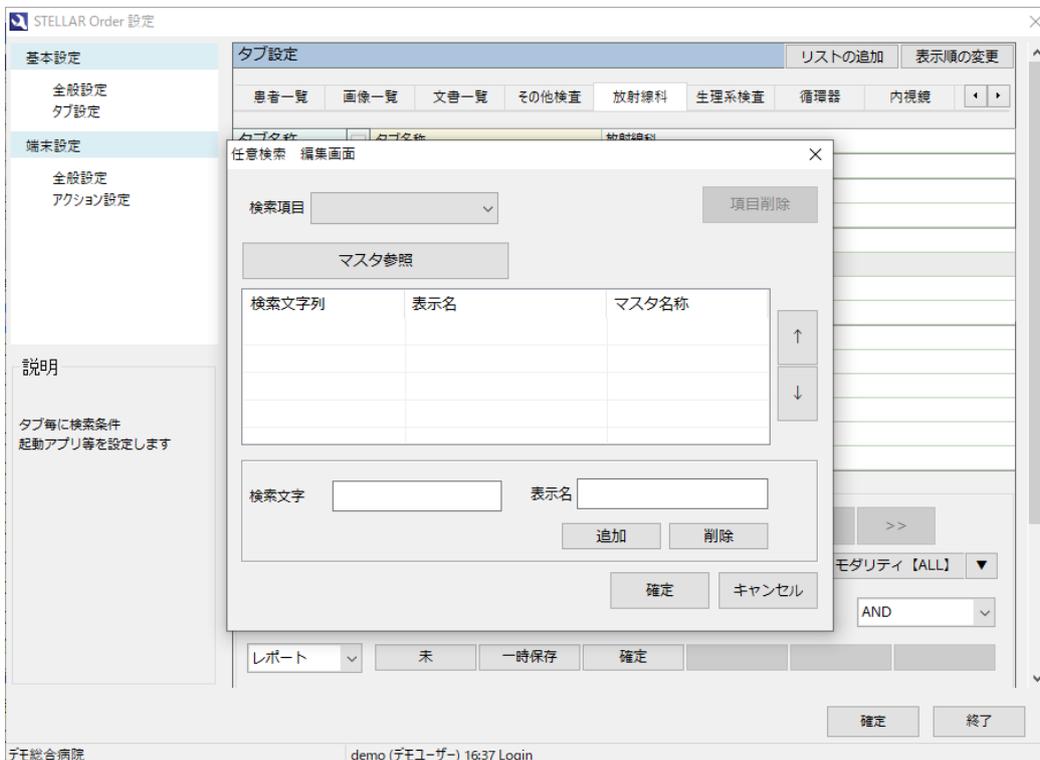


検索項目のプルダウンから「検査手技」を選択します。

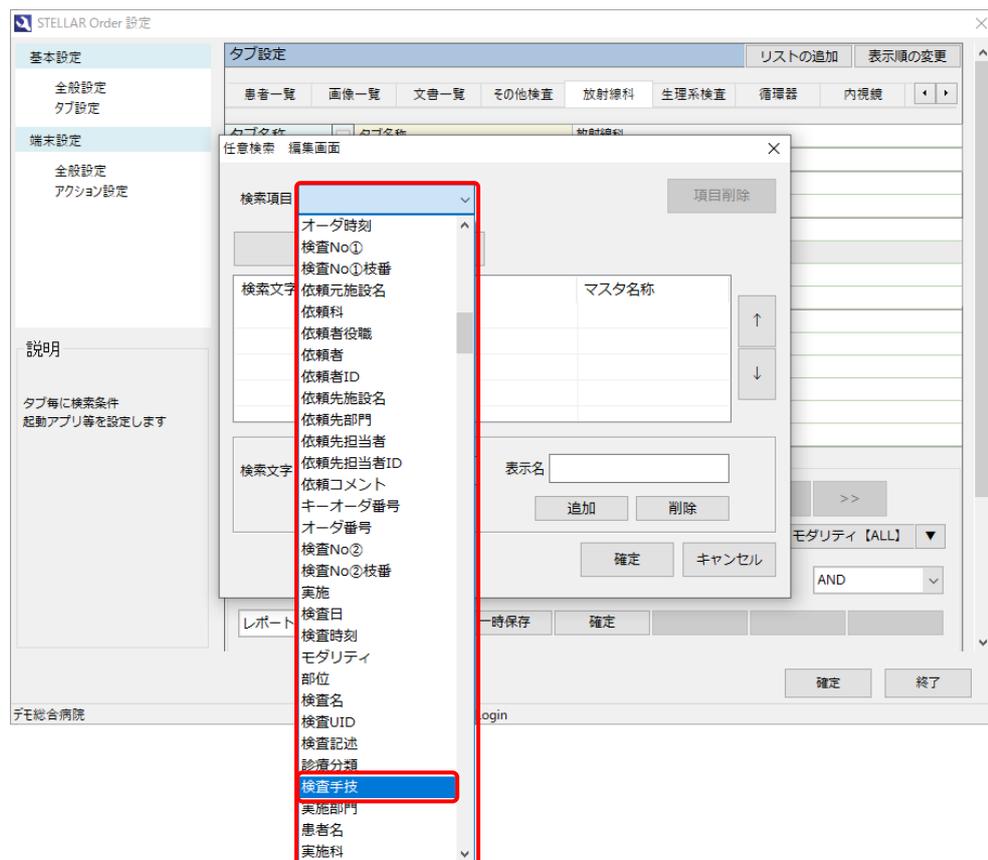

[マスタ参照]ボタンをクリックすると、マスタ選択画面が表示されます。

マスタ選択画面から[検査手技]ボタンをクリックすると、検査手技検索画面が表示されます。

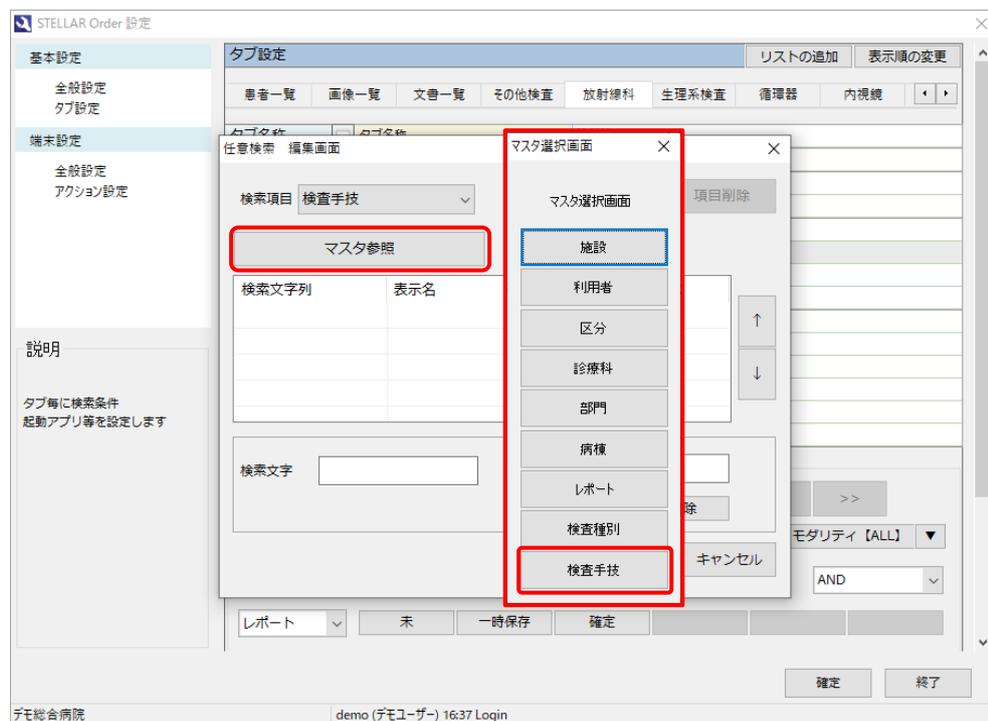

検査手技検索画面で項目を追加します。

検査手技検索

検索 検査種 お気に入り 全選択 **追加** 削除 クリア 決定

手技コード	名称	ふりがな	検査種	施設管理番号
<input type="checkbox"/>	851	コピー		C0520
<input type="checkbox"/>	852	P E T 検査		C0710
<input type="checkbox"/>	853	エコー		C0700
<input type="checkbox"/>	854	SPP		C0181
<input type="checkbox"/>	855	診察		C0801
<input checked="" type="checkbox"/>	856	身長体重		C0802
<input type="checkbox"/>	857	視力		C0808
<input type="checkbox"/>	858	眼底・眼圧		
<input type="checkbox"/>	859	聴力		
<input type="checkbox"/>	860	血圧		
<input type="checkbox"/>	861	尿・便		
<input type="checkbox"/>	862	採血		
<input type="checkbox"/>	863	胸部X線		
<input type="checkbox"/>	864	心電図		
<input type="checkbox"/>	865	肺機能		
<input type="checkbox"/>	866	エコー		
<input type="checkbox"/>	867	胃部X線		
<input type="checkbox"/>	868	耳小骨筋反射検査		

項目を追加するには、白地部の項目を選択し、[追加]ボタンをクリックする。
項目を青地部へドラッグする。
項目をダブルクリックする。
複数項目を追加する場合は、チェックボックスにチェックを入れ、[追加]ボタンをクリックする。

作業終了後は[決定]ボタンをクリックし、この画面を閉じます。

検査手技検索

検索 検査種 お気に入り 全選択 **追加** **削除** クリア **決定**

手技コード	名称	ふりがな	検査種	施設管理番号
<input type="checkbox"/>	851	コピー		C0520
<input type="checkbox"/>	852	P E T 検査		C0710
<input type="checkbox"/>	853	エコー		C0700
<input type="checkbox"/>	854	SPP		C0181
<input type="checkbox"/>	855	診察		C0801
<input type="checkbox"/>	856	身長体重		C0802
<input type="checkbox"/>	857	視力		C0808
<input type="checkbox"/>	858	眼底・眼圧		C0810
<input type="checkbox"/>	859	聴力		C0812
<input type="checkbox"/>	860	血圧		C0814
<input type="checkbox"/>	861	尿・便		C0816
<input type="checkbox"/>	862	採血		
<input type="checkbox"/>	863	胸部X線		
<input type="checkbox"/>	864	心電図		
<input type="checkbox"/>	865	肺機能		
<input type="checkbox"/>	866	エコー		
<input type="checkbox"/>	867	胃部X線		
<input type="checkbox"/>	868	耳小骨筋反射検査		
<input type="checkbox"/>	869	治療計画		
<input type="checkbox"/>	870	眼検		
<input type="checkbox"/>	871	眼圧GA		

項目を削除するには、赤枠内から項目を選択し、[削除]ボタンをクリックする。
項目を白地部へドラッグする。
項目をダブルクリックする。
複数項目を削除する場合は、チェックボックスにチェックを入れ、[削除]ボタンをクリックする。

[確定]ボタンをクリックして画面を閉じます。

任意検索 編集画面

検索項目: 検査手技

検索文字列	表示名	マスタ名称
851	コピー	検査手技マスタ
852	P E T 検査	検査手技マスタ
853	エコー	検査手技マスタ
854	SPP	検査手技マスタ

追加された項目は詳細項目へ追加される

確定

[確定]ボタンをクリックし、最後に[終了]ボタンをクリックすると設定画面を閉じます。

※任意条件項目の追加後は STELLAROrder を立ち上げ直す必要があります。

STELLAR Order 設定

タブ設定

患者一覧 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器 内視鏡

タブ名称: 放射線科

動作設定: 先読み: しない(規定)

検索条件: デフォルト設定: 放射線科

検査条件: 追加検索: しない(規定)

検査種別マスタの規定ビューアを使用: 規定値を使用しない

起動アプリ: ダブルクリック: Nazca

メニュー: Nazca, STELLAR, STELLAR Report

ランチャー

表示設定: 複数行表示: しない(規定)

履歴に名寄せ患者表示: しない(規定)

タブの日付使用: しない(規定)

開封通知の複数行表示: しない(規定)

開封通知(目ユーザを表示): しない(規定)

サブ画面表示項目: 履歴リスト, サムネイル, 依頼情報

初期設定

ID・氏名: 他施設

検査日: 2021/06/30 指定期間: 2021/06/30

モダリティ: 【ALL】

依頼科: オーク番号: 部位: 前方一致

AND

レポート: 未 一時保存 確定


確定 終了

任意条件検索項目を編集します。

例として[患者一覧]タブの「任意1」のプルダウンを編集します。

「任意1」のプルダウンを右クリックすると、登録されている検索項目が表示されます。

「編集」をクリックすると登録内容を編集することができます。

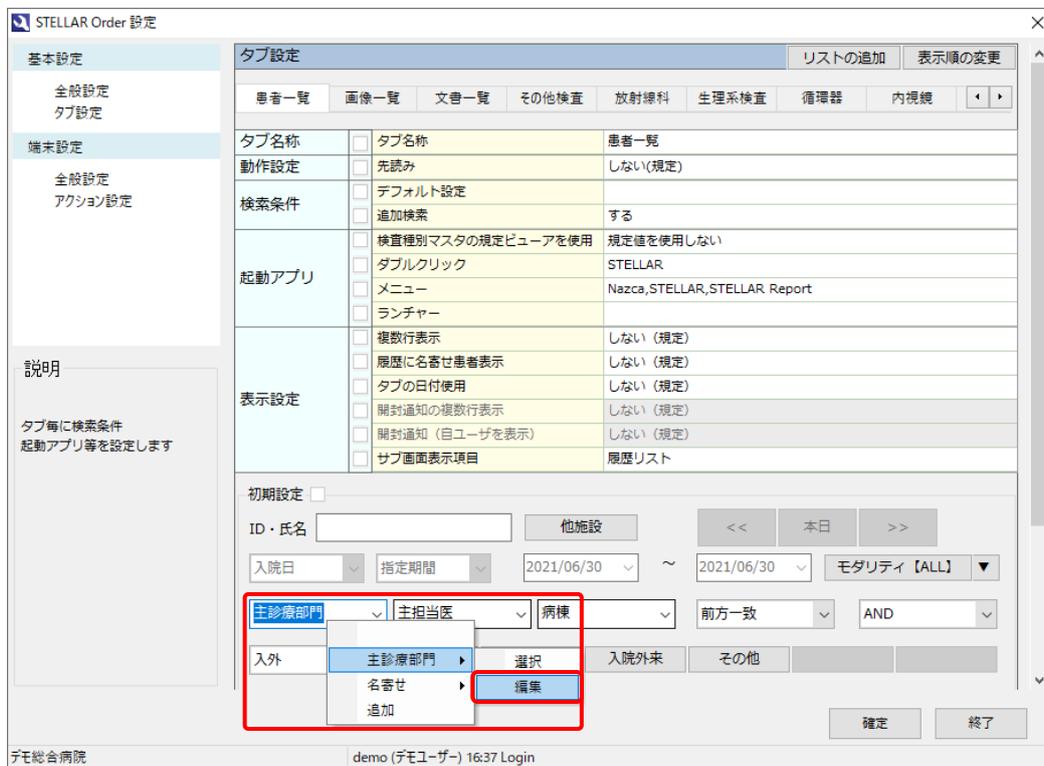

The screenshot shows the 'STELLAR Order 設定' window. The 'タブ設定' (Tab Settings) section is active, showing various configuration options for the '患者一覧' (Patient List) tab. A red box highlights the '任意1' dropdown menu, which is open, showing options like '主診療部門' (Main Department), '名寄せ' (Merge), and '追加' (Add). The '編集' (Edit) option is highlighted in blue.

設定項目	設定内容
タブ名称	患者一覧
動作設定	先読み: しない(規定)
検索条件	追加検索: する
起動アプリ	検査種別マスタの規定ビューアを使用: 規定値を使用しない
	ダブルクリック: STELLAR
	メニュー: Nazca, STELLAR, STELLAR Report
	ランチャー:
表示設定	複数行表示: しない(規定)
	履歴に名寄せ患者表示: しない(規定)
	タブの日付使用: しない(規定)
	開封通知の複数行表示: しない(規定)
	開封通知(目ユーザを表示): しない(規定)
	サブ画面表示項目: 履歴リスト

初期設定 ID・氏名 他施設 << 本日 >>

入院日 指定期間 2021/06/30 ~ 2021/06/30 モダリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 主診療部門 選択 入院外来 その他


名寄せ 追加 編集

確定 終了

デモ総合病院 demo(デモユーザー) 16:37 Login

「編集」をクリックすると任意検索 編集画面が表示され、検索文字列の追加・削除を行うことができます。

[マスタ参照]ボタンをクリックすると、指定マスタを参照します。

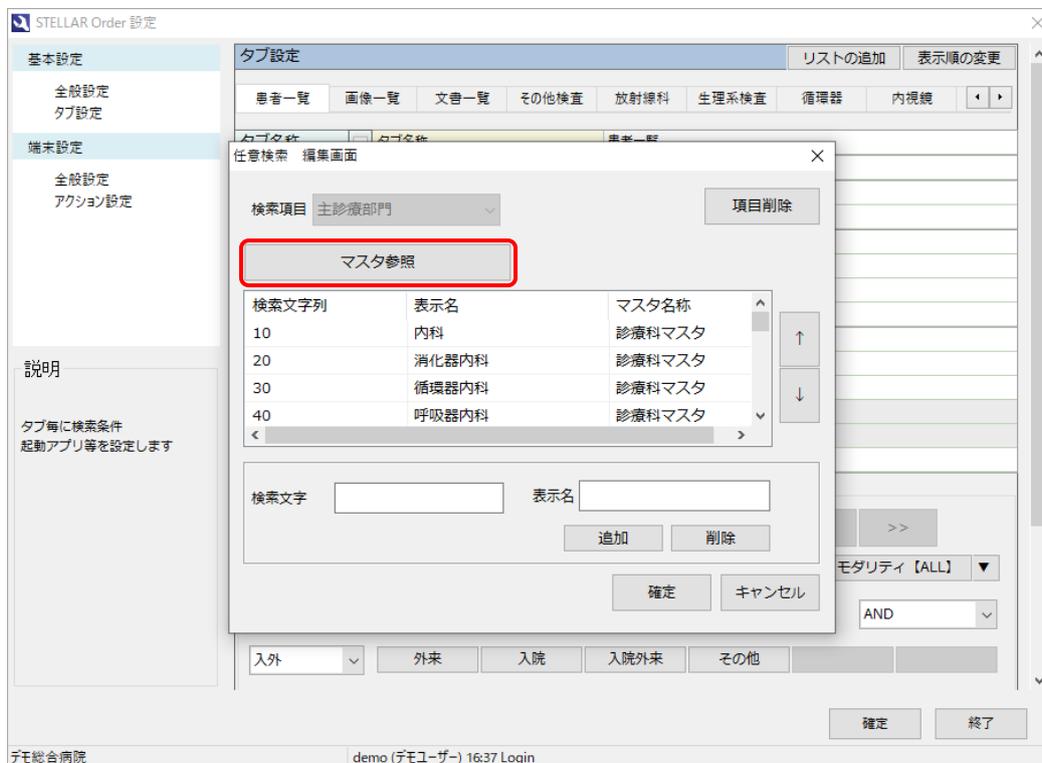

指定マスタに存在しない場合は追加することもできます。

枠内に追加表示される

[[↑]・[[↓]ボタで選択した項目を移動


検索文字、表示名を入力し、[[追加]ボタンをクリック

追加されるとリスト内に表示されます。


「放射線科」と「麻酔科」が追加される

患者ID	漢字患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院
9999999999990001	デモ標準	M	1931/02/18	90才 4ヶ月	内科 医師	西 3 階病棟	W3001	入	外	2013/01/21	
9999999999990010	サンプル	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師			外		
9999999999990011	サンプル				内科 医師				外		
9999999999990012	サンプル				内科 医師				外		
9999999999990013	サンプル				内科 医師				外		
9999999999990014	サンプル				内科 医師				外		
9999999999990051	サンプル				内科 医師				外		
9999999999990016	サンプル	M	1947/09/16	73才 9ヶ月	内科	内科 医師	東 5 階病棟	W5001	入	外	
9999999999990017	サンプル	M	1945/10/01	75才 8ヶ月	呼吸器内科		西 5 階病棟	W5011	入	外	
9999999999990018	サンプル	F	1941/07/18	79才 11ヶ月	内科	内科 医師	東 5 階病棟		外		
9999999999990019	サンプル	F	1970/03/03	51才 3ヶ月					外		
9999999999990004	デモ健診 久子	F	1948/09/21	72才 9ヶ月	内科	内科 医師			外		
9999999999990002	デモ経過表 二郎	M	1961/05/05	60才 1ヶ月					外	2011/03/02	20:
9999999999990006	デモ腫瘍 一郎	M	1945/06/05	76才 0ヶ月					外	2016/07/07	20:
9999999999990008	サンプル	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西 5 階病棟	W5002	入	外	
9999999999990009	サンプル	F	1937/04/15	84才 2ヶ月	眼科	眼科 医師	東 3 階病棟	E3011	入	外	2017/09/08
9999999999990020	サンプル	F	1944/02/10	77才 4ヶ月	内科		東 5 階病棟		外		
9999999999990021	サンプル	F	1930/06/26	90才 11ヶ月	内科		東 5 階病棟		外		

削除する場合は削除項目を選択し[削除]ボタンをクリックします。

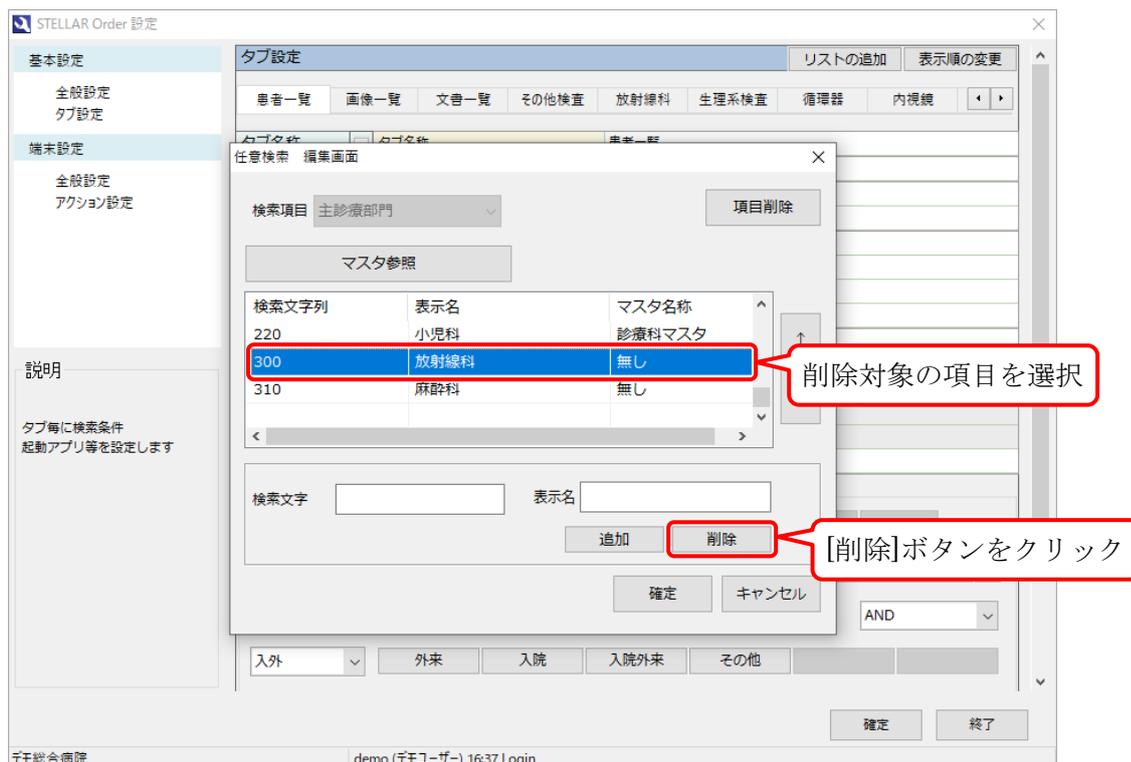

[削除]ボタンをクリックするとダイアログで「検索文字列の削除を行いますか?」と表示されるので[OK]をクリックします。([キャンセル]ボタンをクリックすると削除を行わず、このダイアログを閉じます。)

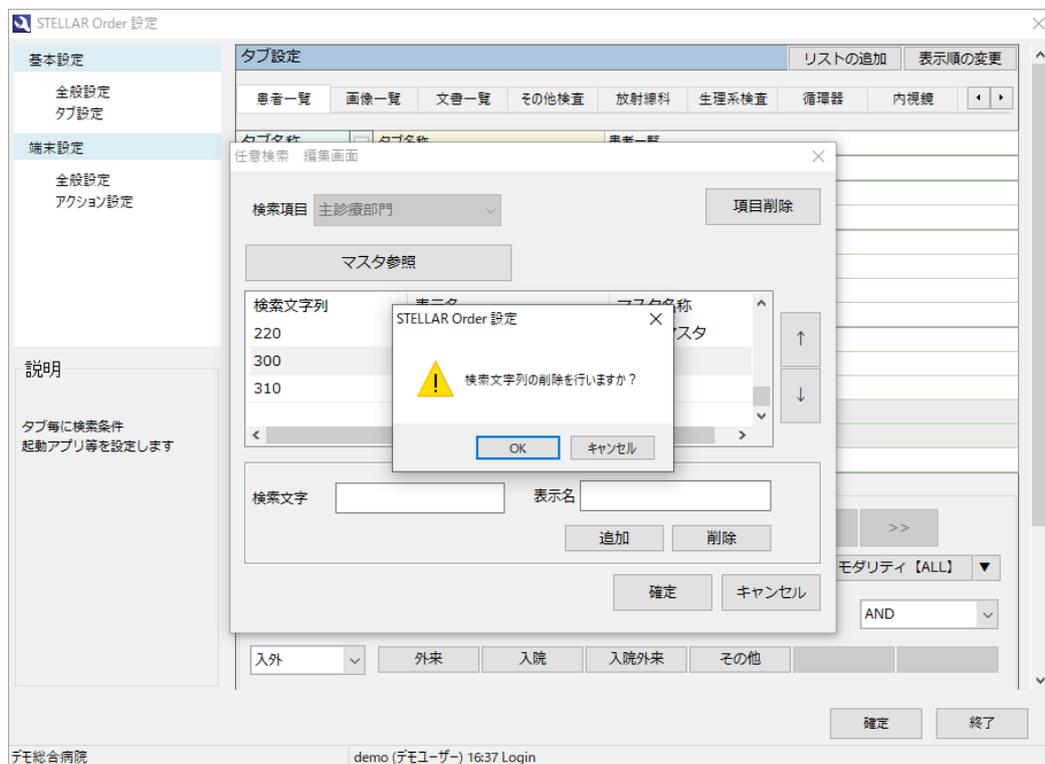


削除するとリスト内からも削除されます。

[項目削除]ボタンをクリックすると、編集集中の検索項目を削除します。


検索文字列	表示名	マスタ名称
10	内科	診療科マスタ
20	消化器内科	診療科マスタ
30	循環器内科	診療科マスタ
40	呼吸器内科	診療科マスタ

[項目削除]ボタンをクリックすると、ダイアログで「検索項目の削除を行いますか?」と表示され、[OK]ボタンをクリックすると検索項目を削除します。([キャンセル]ボタンをクリックすると削除は行わず、このダイアログを閉じます。)

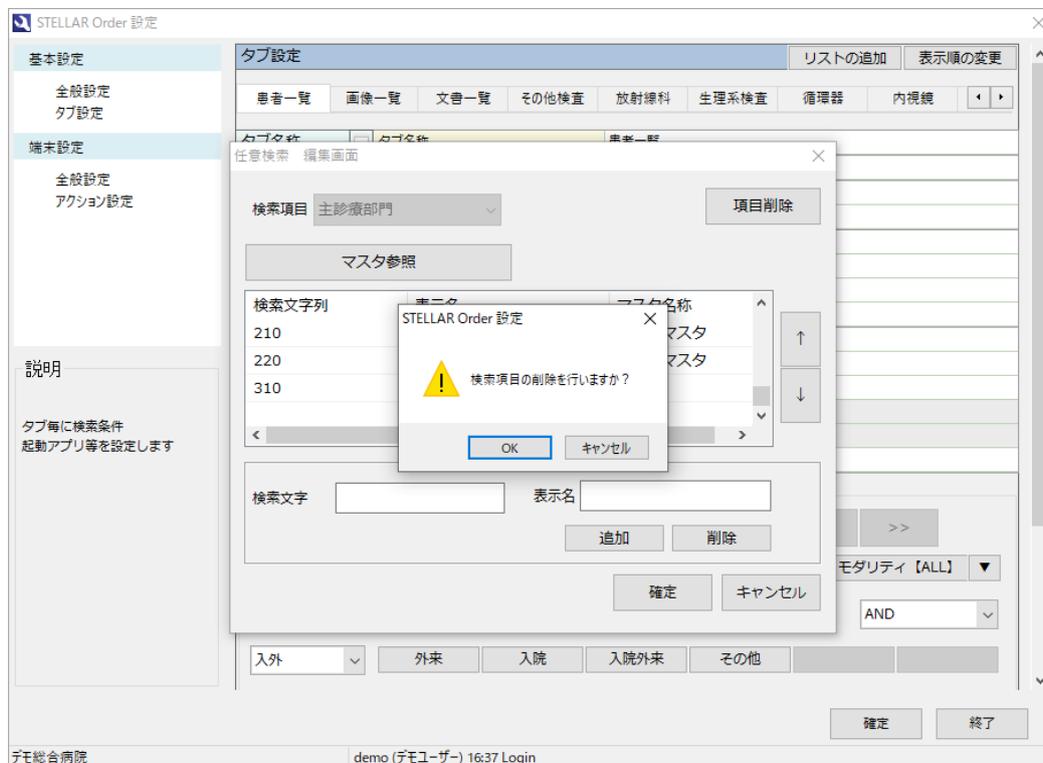

検索項目から削除されます。


※任意条件検索項目を削除した場合は立ち上げ直す必要があります。

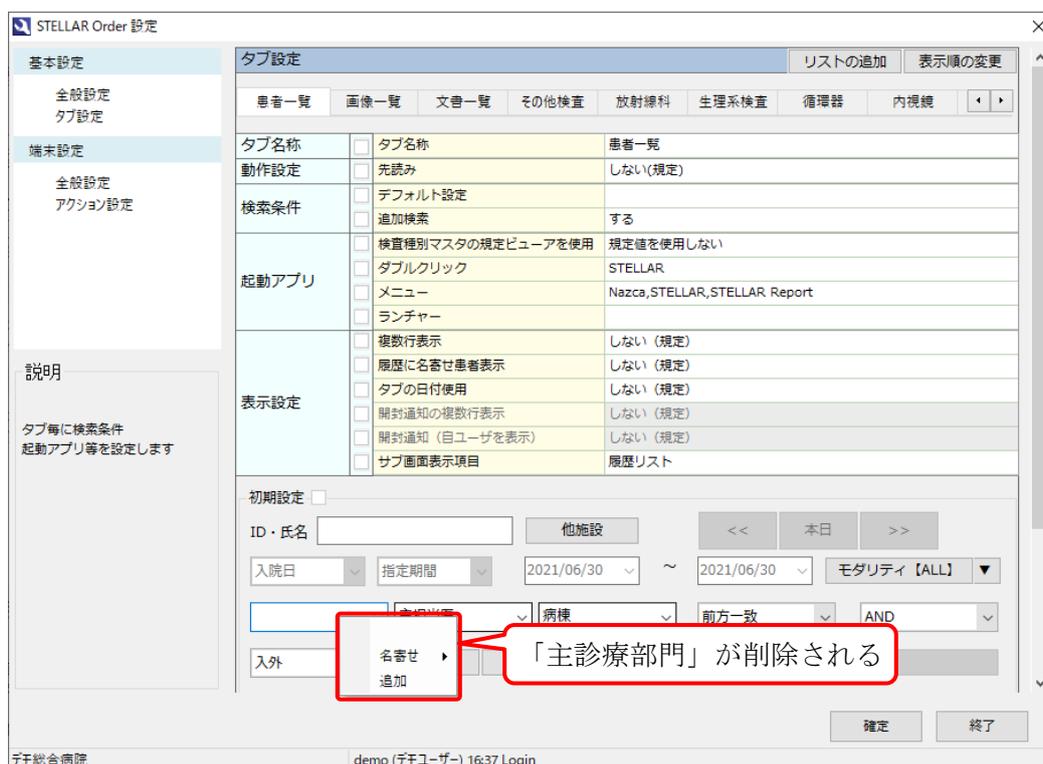

2.3.11 [クリア]ボタン・[検索]ボタン

[クリア]ボタンは検索条件を全て削除します。


[検索]ボタンは検索条件に基づいて検索を開始します。検索条件が設定されていない場合は全て表示します。

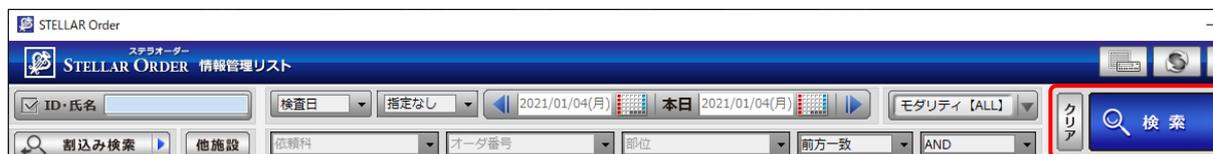


2.3.12 [簡易表示]ボタン

※[設定(スパナ)]ボタン▶全般設定▶検索画面の簡易モードを「使用する」に設定する必要があります(通常は「使用しない」に設定されています)。

[簡易表示]ボタンをクリックすると、赤色部を省略した簡易表示となります。

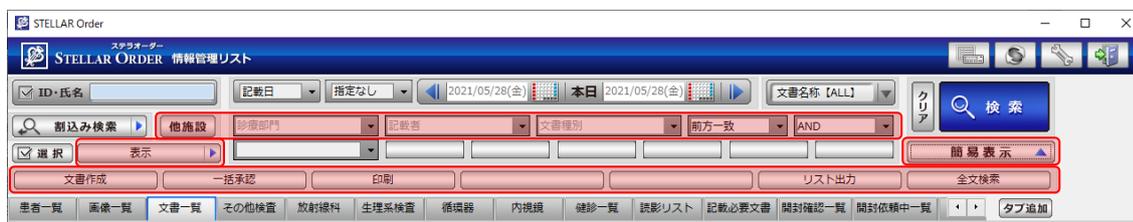

簡易表示では、[簡易表示]ボタンは [機能]ボタン ([クリア]ボタン下に配置) に変わり、クリックすると元の状態に戻ります。

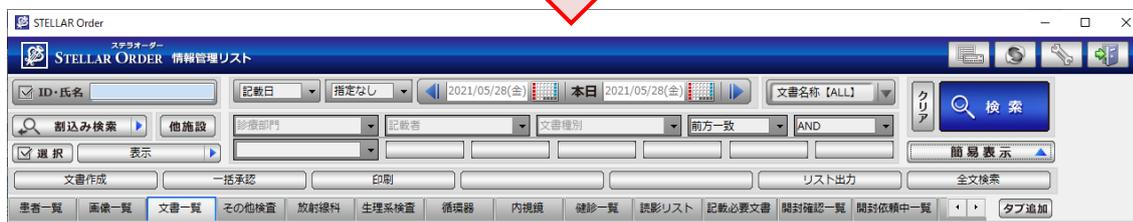


2.3.13 アクションボタン（タブ連動）

タブ項目によりボタンの内容が変わります。

リスト内での右クリックメニュー表示から、使用頻度の高いものを登録できます。

[患者一覧]タブの場合

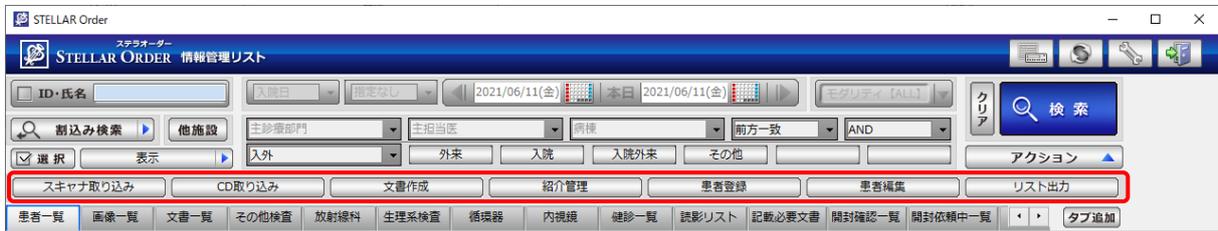


[画像一覧]タブの場合



[文書一覧]タブの場合



[その他検査]タブの場合

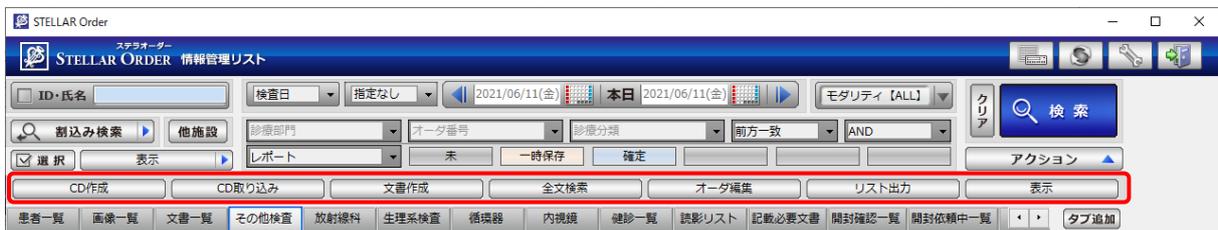

[放射線科]タブの場合



ワンポイント

アクションボタンの項目は[設定(スパナ)]ボタンから変更可能です。

※画面は基本設定から[タブ設定]を選択した状態です。

STELLAR Order 設定

基本設定 | **タブ設定** | リストの追加 | 表示順の変更

全般設定 | **タブ設定** | 編集

患者一覧 | 画像一覧 | 文書一覧 | その他検査 | 放射線科 | 生理系検査 | 循環器 | 内視鏡

② 「タブ設定」を選択する

③ タブを選択する

起動アプリ

<input type="checkbox"/>	検査種別マスタの規定ビューアを使用	規定値を使用しない
<input type="checkbox"/>	ダブルクリック	STELLAR
<input type="checkbox"/>	メニュー	Nazca,STELLAR,STELLAR Report
<input type="checkbox"/>	ランチャー	
<input type="checkbox"/>	複数行表示	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	履歴に名寄せ患者表示	しない (規定)

説明

主診療部門 | 主担当医 | 病棟 | 前方一致 | AND

入外 | 外来 | 入院 | 入院外来 | その他

④ 実行するアプリを選択する

<input type="checkbox"/>	ボタン1	スキャナ取り込み	Capella
<input type="checkbox"/>	ボタン2	CD取り込み	TransferTool
<input type="checkbox"/>	ボタン3	文書作成	STELLARReport
<input type="checkbox"/>	ボタン4	紹介管理	Regulus
<input type="checkbox"/>	ボタン5	患者登録	SMGPatientMaintenance
<input type="checkbox"/>	ボタン6	患者編集	SMGPatientMaintenance
<input type="checkbox"/>	ボタン7	リスト出力	STELLAROrder

確定 | 終了

① [編集] ボタンをクリックする
(クリック後は[確定]ボタンに変わる)

⑤ [確定]・[終了]ボタンの順にクリックする

2.4 タブ操作（追加・移動・削除・検索条件保存）



・タブ追加

タブの追加を行う場合、3通りの方法があります。

- ①[タブ追加]ボタン
- ②タブ上で右クリック
- ③[設定(スパナ)]ボタン▶タブ設定▶リスト追加

①[タブ追加]ボタンの場合

[タブ追加]ボタンをクリックすると、タブ項目の追加ダイアログが表示されます。

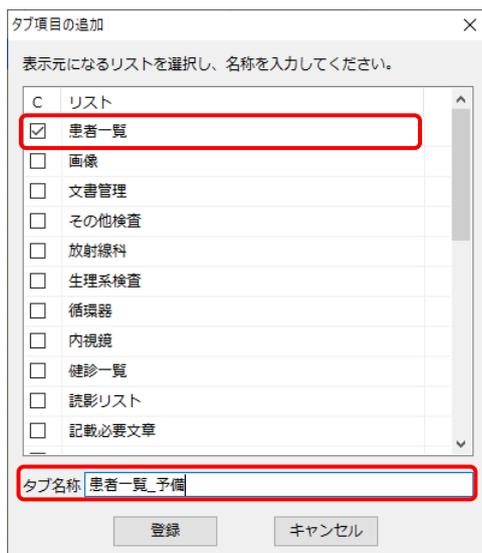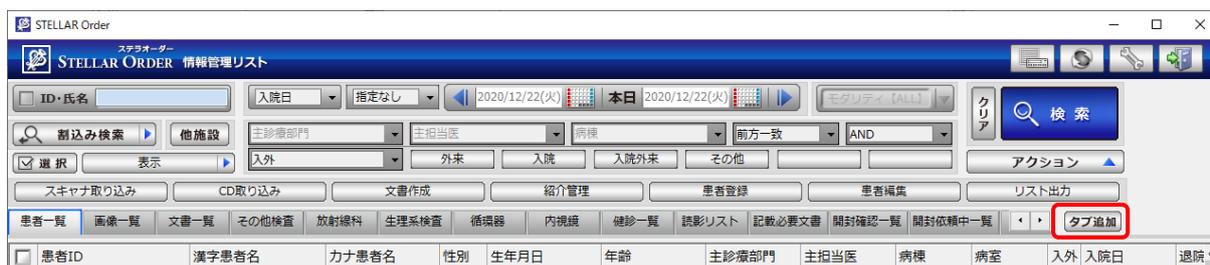


表示元になるリストを選択します。
(例として患者一覧にを入れます)

タブ名称枠に任意名称を入力します。
(今回は「患者一覧_予備」を入力)


終了したら[登録]ボタンをクリックし内容を確認します。

「患者一覧_予備」が最後尾に追加されます。

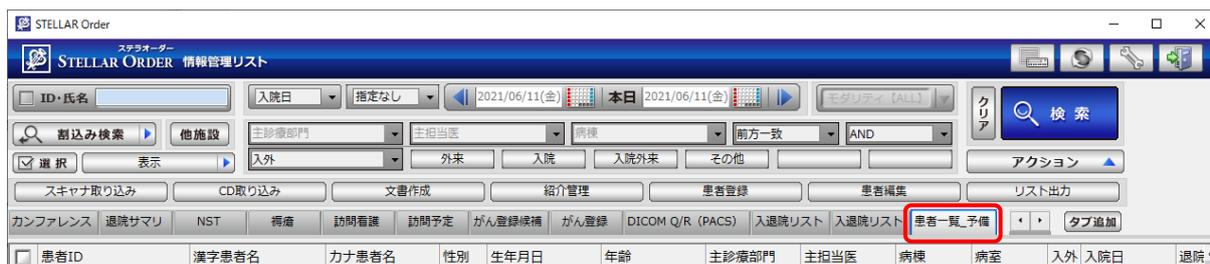

②タブ上で右クリック

タブ上で右クリックし、[タブの追加]を選択すると、①と同様にタブ項目の追加ダイアログが表示されます。

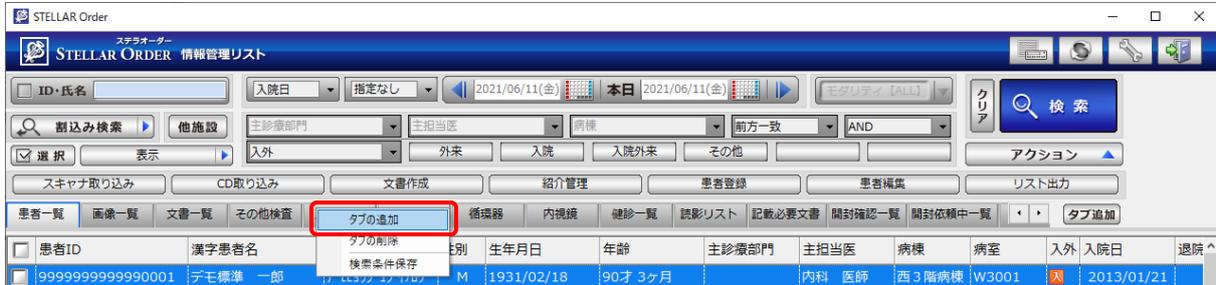


③[設定(スパナ)]ボタンから作成

※[設定(スパナ)]ボタン▶タブ設定を選択した状態です。

設定画面下の[編集]ボタンをクリックします ([編集]ボタンから[確定]ボタンへ変わります)。

[リストの追加]ボタンをクリックするとリスト選択ダイアログが表示されます。

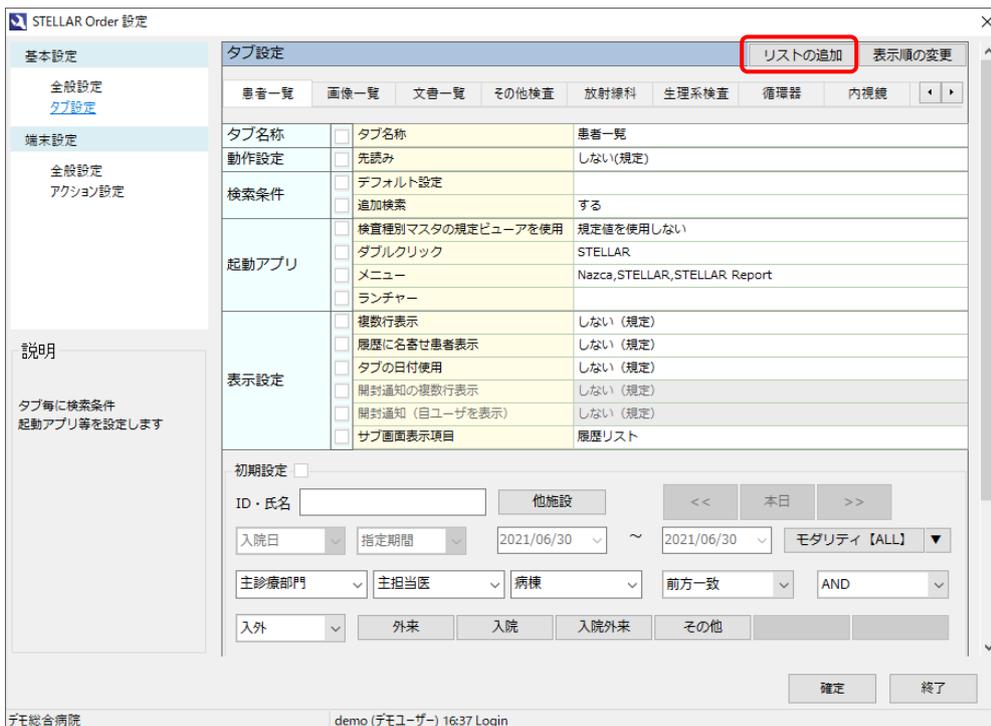

リスト選択

名称、ベースにするリストを選択して下さい。

名称

リスト

例として、

名称に「患者一覧_機能1」と入力し、
リストに表示元のタブを選択します。

最後に[OK]ボタンをクリックし内容を確定します。

作成したタブは最後尾に追加されます。

STELLAR Order 設定

基本設定

全般設定
タブ設定

端末設定

全般設定
アクション設定

説明

タブ毎に検索条件
起動アプリ等を設定します

タブ設定

リストの追加 表示順の変更

非公開患者一覧 病棟 訪問看護 訪問予定 がん登録候補 がん登録 **患者一覧_機能1**

タブ名称	<input type="checkbox"/>	タブ名称	患者一覧
動作設定	<input type="checkbox"/>	先読み	しない(規定)
検索条件	<input type="checkbox"/>	デフォルト設定	
	<input type="checkbox"/>	追加検索	する
起動アプリ	<input type="checkbox"/>	検査種別マスタの規定ビューアを使用	規定値を使用しない
	<input type="checkbox"/>	ダブルクリック	STELLAR
	<input type="checkbox"/>	メニュー	Nazca, STELLAR, STELLAR Report
表示設定	<input type="checkbox"/>	ランチャー	
	<input type="checkbox"/>	複数行表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	履歴に名寄せ患者表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	タブの日付使用	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	開封通知の複数行表示	しない(規定)
<input type="checkbox"/>	開封通知(目ユーザを表示)	しない(規定)	
<input type="checkbox"/>	サブ画面表示項目	履歴リスト	

初期設定

ID・氏名 他施設

<< 本日 >>

入院日 指定期間 2021/07/01 ~ 2021/07/01 モダリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 外来 入院 入院外来 その他

デモ総合病院 demo(デモユーザー) 09:09 Login

・タブ移動

作成したタブは所定の位置に配置することができます。

※[設定(スパナ)]ボタン▶タブ設定を選択し、[編集]ボタンをクリックした状態です。

[表示順の変更]ボタンをクリックすると、表示順変更のダイアログが表示されます。

①移動したいタブ名称を選択します。

②[↑]ボタン・[↓]ボタンで選択したタブを移動することができます。

③配置が決まったら[OK]ボタンをクリックし、表示順変更のダイアログを閉じます。

ワンポイント

名称左側ので、タブの表示・非表示を切り替えることができます。

移動したタブを確認し、[確定]ボタン・[終了]ボタンの順にクリックします。

STELLAR Order 設定

基本設定

全般設定
タブ設定

端末設定

全般設定
アクション設定

説明

タブ毎に検索条件
起動アプリ等を設定します

タブ設定

リストの追加 表示順の変更

患者一覧 **患者一覧_機能1** 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器

タブ名称	<input type="checkbox"/>	タブ名称	患者一覧_機能1
動作設定	<input type="checkbox"/>	先読み	しない(規定)
検索条件	<input type="checkbox"/>	デフォルト設定	
	<input type="checkbox"/>	追加検索	しない(規定)
起動アプリ	<input type="checkbox"/>	検査種別マスタの規定ビューアを使用	規定値を使用しない
	<input type="checkbox"/>	ダブルクリック	STELLAR
	<input type="checkbox"/>	メニュー	Nazca,STELLAR,STELLAR Report
表示設定	<input type="checkbox"/>	複数行表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	履歴に名寄せ患者表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	タブの日付使用	する
	<input type="checkbox"/>	関連通知の複数行表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	関連通知(目ユーザを表示)	しない(規定)
<input type="checkbox"/>	サブ画面表示項目	履歴リスト	

初期設定

ID・氏名 他施設 << 本日 >>

入院日 指定期間 2017/09/27 ~ 2017/09/27 モダリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 外来 入院 入院外来 その他

確定 終了

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 09:09 Login

STELLAROrder 上に反映されていることを確認します。

STELLAR Order

STELLAR ORDER 情報管理リスト

ID・氏名 入院日 指定なし 2021/06/11(金) 本日 2021/06/11(金) モダリティ【ALL】

割込み検索 他施設 主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

選択 表示 入外 外来 入院 入院外来 その他

スキャナ取り込み CD取り込み 文書作成 紹介管理 患者登録 患者編集 リスト出力


患者一覧 **患者一覧_機能1** 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器 内視鏡 健診一覧 読影リスト 記載必要文書 開封確認一覧

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院
------	-------	-------	----	------	----	-------	------	----	----	----	-----	----

・タブ削除

タブを削除します。

削除するタブ上で右クリックメニューを表示し、[タブの削除]を選択します。

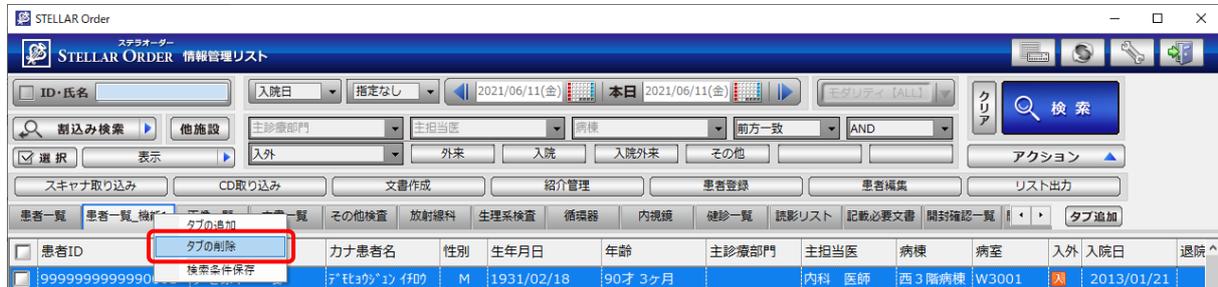


「(削除対象のタブ名) を削除しますが宜しいですか？」ダイアログが表示されます。



[はい]をクリックすると選択しているタブを削除します。

[いいえ]を選択すると元の画面に戻ります。

[患者一覧]タブと[画像一覧]タブの間のタブが削除されたことを確認します。

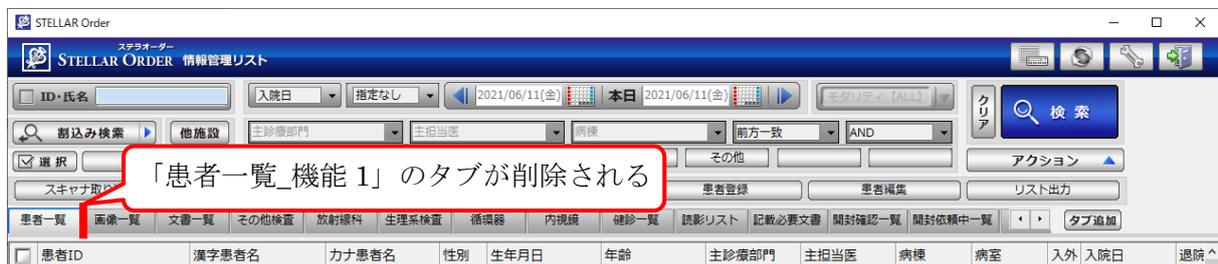

・ 検索条件保存

タブ毎に検索条件の内容を保存することができます。保存方法は2通りあります。

- ①タブ上を右クリックして保存
- ②[設定(スパナ)]ボタンから初期条件を入力

①タブ上を右クリックして保存

検索条件を指定した状態で、表示タブの上で右クリックメニューを表示します。

検査条件の例として、


[患者一覧]タブで検索条件を指定して検索を行うと、以下のようになります。

- (a) 「入院日」
- (b) 「指定期間」
- (c) 「2010/12/23(木)~2020/12/23(水)」

The screenshot shows the STELLAR ORDER system interface. At the top, there are search filters for '入院日' (Admission Date), '指定期間' (Specified Period), and a date range '2010/12/23(木) ~ 2020/12/23(水)'. Red callouts (a), (b), and (c) point to these filters. Below the filters is a table of search results with columns for Patient ID, Name, Sex, Birth Date, Age, Department, Doctor, Ward, and Admission/Discharge Dates. A red box highlights the first six rows of the table. Below the table, a red callout '検索結果' (Search Results) points to the table. At the bottom, there is a '履歴リスト' (History List) section which is currently empty, with the message 'このビューにはアイテムがありません。' (There are no items in this view).


患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院日
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモトクシロウ 一郎	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科 医師	西 3 階病棟	W3001		入	2013/01/21	
9999999999990012	サンプル 循環器	サンプル ショウカキ	M	1957/11/20	63才 6ヶ月	循環器 医師		W1001		入	2018/12/07	
9999999999990002	デモ経過表 二郎	デモトクシロウ 二郎	M	1961/05/05	60才 1ヶ月					外	2011/03/02	2011/03/02
9999999999990006	デモ内視 一郎	デモトクシロウ 一郎	M	1945/06/05	76才 0ヶ月					外	2016/07/07	2016/07/07
9999999999990009	サンプル 眼科	サンプル カンカ	F	1937/04/15	84才 1ヶ月	眼科 医師	東 3 階病棟	E3011		入	2017/09/08	
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプル ナシキ	M	1945/02/20	76才 3ヶ月		東 3 階病棟	E3003		入	2018/03/13	

この条件を保存する場合、現在のタブ上で右クリックメニューを表示させ、「検索条件保存」をクリックします。

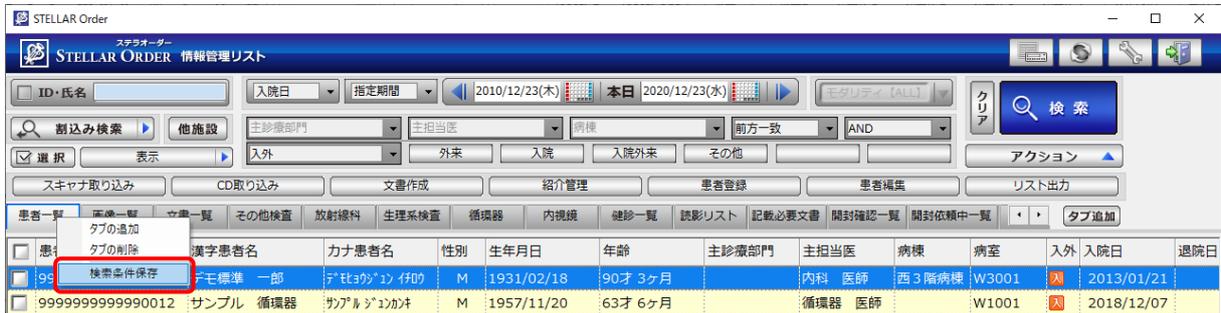

「現在の検索条件を保存しました」とダイアログが表示されるので、[OK]ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。

※検索条件の保存は、すべての条件を保存します。一部のみの保存はできません。

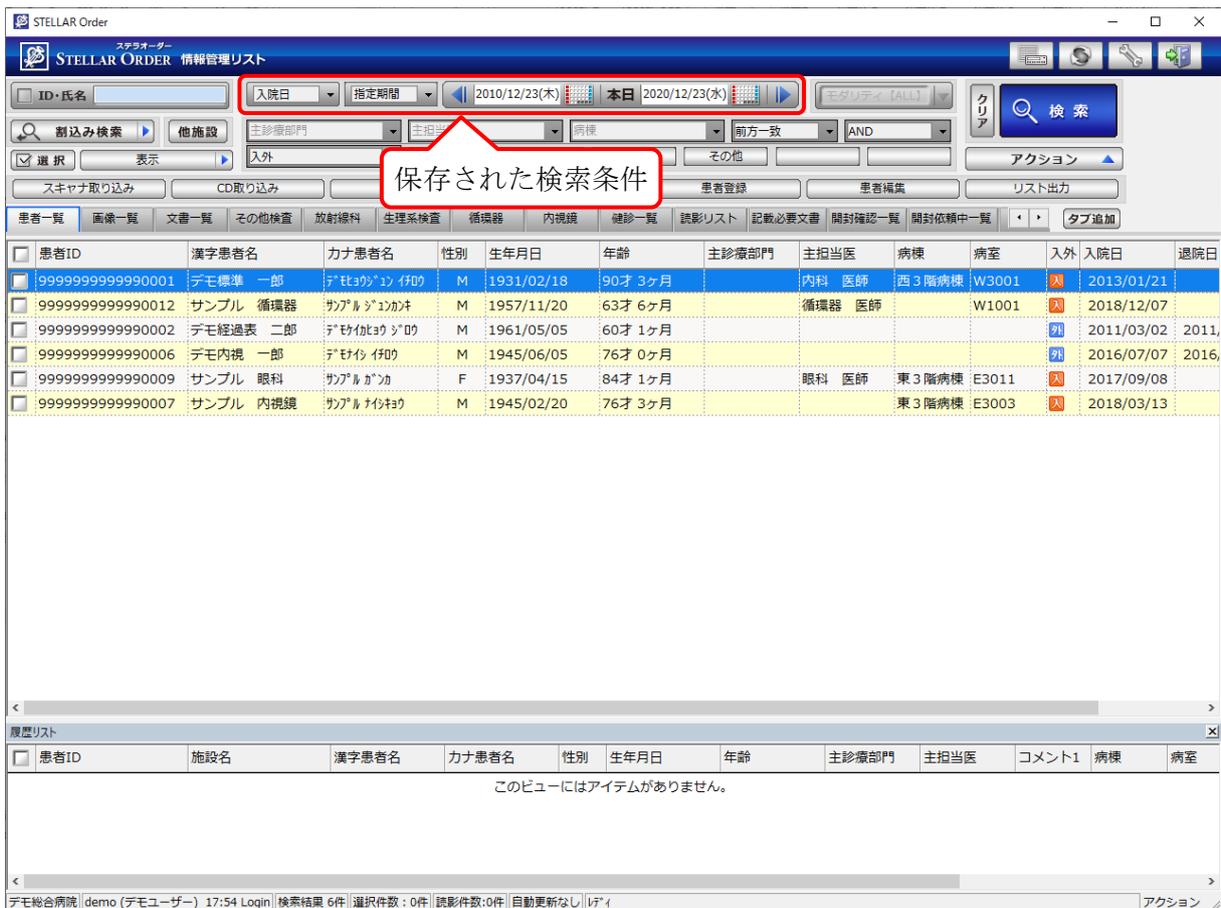

②[設定(スパナ)]ボタンから初期条件を入力

[設定(スパナ)]ボタン▶タブ設定▶タブ項目の指定▶[編集]ボタンの順で編集可能な状態とします。
検索条件を入力します。

入力後は[確定]・[終了]ボタンの順にクリックします。

STELLAR Order 設定

基本設定

全般設定
タブ設定

端末設定

全般設定
アクション設定

説明

タブ毎に検索条件
起動アプリ等を設定します

タブ設定

リストの追加 表示順の変更

患者一覧 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器 内視鏡

タブ名称 タブ名称 患者一覧

動作設定 先読み しない(規定)

検索条件 デフォルト設定

追加検索 する

起動アプリ 検査種別マスタの規定ビューアを使用 規定値を使用しない

タブルクリック STELLAR

メニュー Nazca, STELLAR, STELLAR Report

ランチャー

表示設定 複数行表示 しない(規定)

履歴に名寄せ患者表示 しない(規定)

タブの日付使用 しない(規定)

開封通知の複数行表示 しない(規定)

開封通知(目ユーザを表示) しない(規定)

サブ画面表示項目 履歴リスト

初期設定

ID・氏名 他施設

入院日 指定期間 2021/07/01 ~ 2021/07/01 モタリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 外来 入院 入院外来 その他

確定 終了

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 09:09 Login

日付を指定する場合は「タブの日付使用」を「する」に変更

2.5 メインリスト

■【患者一覧】タブ

患者情報をメインリストに表示し、履歴リストは選択した患者の関連施設を表示します。

リスト上の右クリックメニュー (※1～6は後述)

項目	内容
表示	※2
同一患者で検索	患者 ID から同一患者を検索します。
スキャナ取り込み	Capella を起動し、スキャン取り込みをします。
CD 取り込み	Transfer Tool を起動し、他院 CD 等を取り込みます。
文書作成	SOPHIA Report を起動し、レポートを作成します。
紹介管理	Regulus (紹介管理) を起動します。
患者登録	STELLARManager メンテナンス (患者登録) を起動します。
患者編集	STELLARManager メンテナンス (患者編集) を起動します。
リスト出力	選択した情報を CSV 型式で出力します。
訪問看護	Iris (訪問看護) を起動します。
レイアウト設定	※3
サブ画面表示	※4
最新の情報に更新 (F5)	※5

■[画像一覧]タブ

患者の検査情報をメインリストに表示します。同一患者で複数検査が存在する場合は、検査毎に表示されます。

履歴リストの右側にはサムネイルが表示されます。

The screenshot shows the STELLAR Order software interface. At the top, there are search filters for patient ID, date, and department. Below this is a table of examination records with columns for Report, Patient ID, Patient Name, Sex, Age, Examination Name, Department, Modality, Referring Department, Referring Doctor, Examination Date, and Examination ID. A 'サムネイル' (Thumbnail) window is open at the bottom, showing a list of selected examinations and a corresponding image thumbnail.

レポート	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査ID
確定	9999999999990001	デモ標準 一部	M	81才 7ヶ月	X線血管撮影冠動脈		XA	循環器内科	田中	2012/10/01	11
未	9999999999990001	デモ標準 一部	M	79才 4ヶ月	X線血管撮影冠動脈		XA	循環器内科	田中	2010/07/07	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一部	M	78才 6ヶ月	内視鏡検査上部内視鏡	GF	ES	消化器内科	田中	2009/09/11	14
確定	9999999999990001	デモ標準 一部	M	79才 8ヶ月	内視鏡検査下部内視鏡	CF	ES	消化器内科	田中	2010/11/06	15
確定	9999999999990001	デモ標準 一部	M	81才 10ヶ月	内視鏡検査下部内視鏡	CF	ES	消化器内科	田中	2012/12/28	12
確定	9999999999990001	デモ標準 一部	M	81才 11ヶ月	内視鏡検査上部内視鏡	GF	ES	消化器内科	田中	2013/01/22	13
確定	9999999999990006	デモ内視 一部	M	65才 0ヶ月	X線CT検査股関節	PELVIS	CT	内科	デモ医師	2010/07/02	10
確定	9999999999990006	デモ内視 一部	M	71才 2ヶ月	X線CT検査上腹部	ABDOMEN	CT	消化器内科	デモ医師	2016/08/12	15
未	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 5ヶ月	X線透視・造影検査腹部	Upper GI	RF	消化器内科	デモ医師	2016/08/16	11
未	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 6ヶ月	X線透視・造影検査腹部		RF	消化器内科	デモ医師	2016/08/20	09
確定	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 6ヶ月	X線CT検査上腹部	CHEST	CT	消化器内科	デモ医師	2016/08/21	12
一時保存	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	75才 5ヶ月	内視鏡検査上部内視鏡	GF	ES	消化器内科	デモ医師	2020/08/01	11
未	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 6ヶ月	内視鏡検査上部内視鏡異物摘出術上部...	GF	ES	消化器内科	デモ医師	2016/08/22	13
確定	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 5ヶ月	内視鏡検査上部内視鏡	GF	ES	消化器内科	デモ医師	2016/07/27	10
確定	9999999999990007	サンプル 内視鏡	M	71才 4ヶ月	内視鏡検査気管支内視鏡 (透視あり)	GF	ES	消化器内科	デモ医師	2016/07/05	09
確定	9999999999990006	デモ内視 一部	M	71才 2ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UGI	RF	消化器内科	デモ医師	2016/08/15	11
確定	9999999999990006	デモ内視 一部	M	71才 2ヶ月	MR I 検査胸腰椎移行部	CHEST	MR	消化器内科	デモ医師	2016/08/16	14
確定	9999999999990006	デモ内視 一部	M	71才 2ヶ月	MR I 検査腹部	PELVIS	MR	消化器内科	デモ医師	2016/08/22	11

リスト上の右クリックメニュー

項目	内容
起動ソフト	※1
表示	※2
同一患者で検索	患者IDから同一患者を検索します。
CD作成	Nazca Exporter を起動します。
CD取り込み	Transfer Tool を起動し、他院CD等を取り込みます。
文書作成	SOPHIA Report を起動し、レポートを作成します。
全文検索	STELLAR Report (全文検索) を起動します。
オーダ編集	STELLARManager メンテナンス (オーダ編集) を起動します。
検像	NazcaQA (検像) を起動します。
検査出力	選択した検査情報を、画像を含めてXML形式で出力します。
読影依頼	Miras (読影依頼) を起動します。
リスト出力	選択した情報をCSV形式で出力します。
レイアウト設定	※3
サブ画面表示	※4
最新の情報に更新 (F5)	※5
過去履歴フィルタ	※6

■[文書管理]タブ

患者に関するレポートをメインリストに表示します。

メインリストの下部は履歴リストとサムネイルが表示されます。

The screenshot shows the 'STELLAR ORDER' web application. The main window displays a table of document management records. The table has columns for '進捗' (Progress), '患者ID' (Patient ID), '患者名' (Patient Name), '性別' (Gender), '年齢' (Age), '検査日' (Exam Date), '文書名称' (Document Name), '診療部門' (Department), '記載日' (Record Date), '記載者' (Recorder), and '依頼者' (Requester). Below the main table, there is a '履歴リスト' (History List) and a 'サムネイル' (Thumbnail) section. The history list shows a list of documents with columns for 'レポート' (Report), '診療部門' (Department), '文書種別' (Document Type), '文書名称' (Document Name), '記載日' (Record Date), and '記載者' (Recorder). The thumbnail section shows a chest X-ray image labeled '1 CHEST'.

リスト上の右クリックメニュー

項目	内容
起動ソフト	※ 1
表示	※ 2
同一患者で検索	患者 ID から同一患者を検索します。
文書作成	SOPHIA Report を起動し、レポートを作成します。
一括承認	選択した文書を「確定」にします。
印刷	印刷を行います。
全文検索	STELLAR Report (全文検索) を起動します。
オーダ編集	STELLARManager メンテナンス (オーダ編集) を起動します。
印刷履歴	印刷履歴を表示します。
開封先一括変更	選択したレポートの開封依頼を一括で変更します。
リスト出力	選択した情報を CSV 型式で出力します。
レイアウト設定	※ 3
サブ画面表示	※ 4
最新の情報に更新 (F5)	※ 5
過去履歴フィルタ	※ 6

■[その他検査]タブ

その他の検査情報をメインリストに表示します。

メインリストの下部は履歴リストと依頼情報が表示されます。

リスト上の右クリックメニュー

項目	内容
起動ソフト	※1
表示	※2
同一患者で検索	患者 ID から同一患者を検索します。
CD 作成	Nazca Exporter を起動します。
CD 取り込み	Transfer Tool を起動し、他院 CD 等を取り込みます。
文書作成	SOPHIA Report を起動し、レポートを作成します。
全文検索	STELLAR Report (全文検索) を起動します。
オーダー編集	STELLARManager メンテナンス (オーダー編集) を起動します。
リスト出力	選択した情報を CSV 型式で出力します。
レイアウト設定	※3
サブ画面表示	※4
最新の情報に更新 (F5)	※5
過去検索フィルタ	※6

■[放射線科]タブ

放射線に関わる検査情報をメインリストに表示します。

メインリストの下部に履歴リストと依頼情報が表示されます。


The screenshot displays the STELLAR ORDER web application. The main window shows a table of medical orders with columns for status, report, patient ID, name, sex, age, examination name, department, modality, department, and date. Below the main table, there is a '履歴リスト' (History List) window and an '依頼情報' (Request Information) window. The History List window shows a list of orders with columns for status, report, department, and examiner. The Request Information window shows a list of orders with columns for status, report, department, and examiner.

リスト上の右クリックメニュー

項目	内容
起動ソフト	※ 1
表示	※ 2
同一患者で検索	患者 ID から同一患者を検索します。
CD 作成	Nazca Exporter を起動します。
CD 取り込み	Transfer Tool を起動し他院 CD 等を取り込みます。
文書作成	SOPHIA Report を起動しレポートを作成します。
全文検索	STELLAR Report (全文検索) を起動します。
オーダ編集	STELLARManager メンテナンス (オーダ編集) を起動します。
検像	NazcaQA (検像) を起動します。
検査出力	選択した検査情報を、画像を含めて XML 形式で出力します。
読影依頼	Miras (読影依頼) を起動します。
リスト出力	選択した情報を CSV 形式で出力します。
レイアウト設定	※ 3
サブ画面表示	※ 4
最新の情報に更新 (F5)	※ 5
過去検索フィルタ	※ 6

※1：起動ソフト


設定したソフトを起動します。

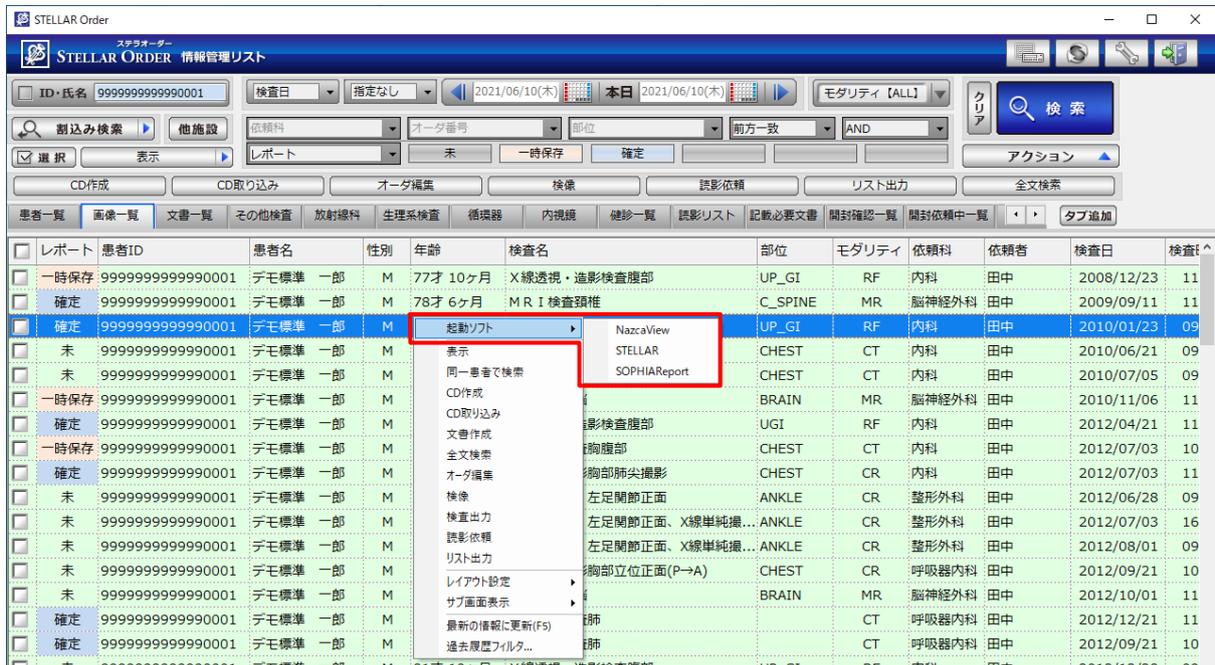

ワンポイント

[患者一覧]タブ上で[起動ソフト]は表示されません。

STELLAROrder 設定画面からタブ毎に起動ソフトを設定できます。

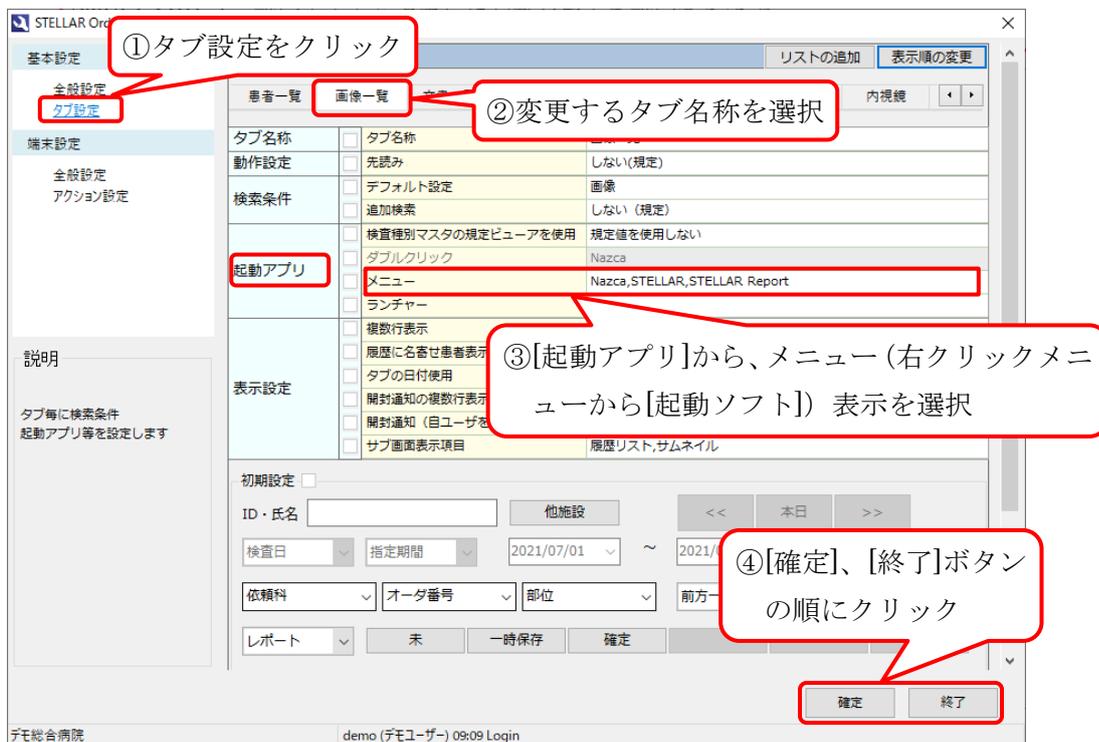

※2：表示


設定したソフトで表示します。

ワンポイント


STELLAROrder 設定画面からアプリを設定できます。

※3：レイアウト設定（列の表示設定）

表示項目設定のダイアログから、追加・削除を行います。

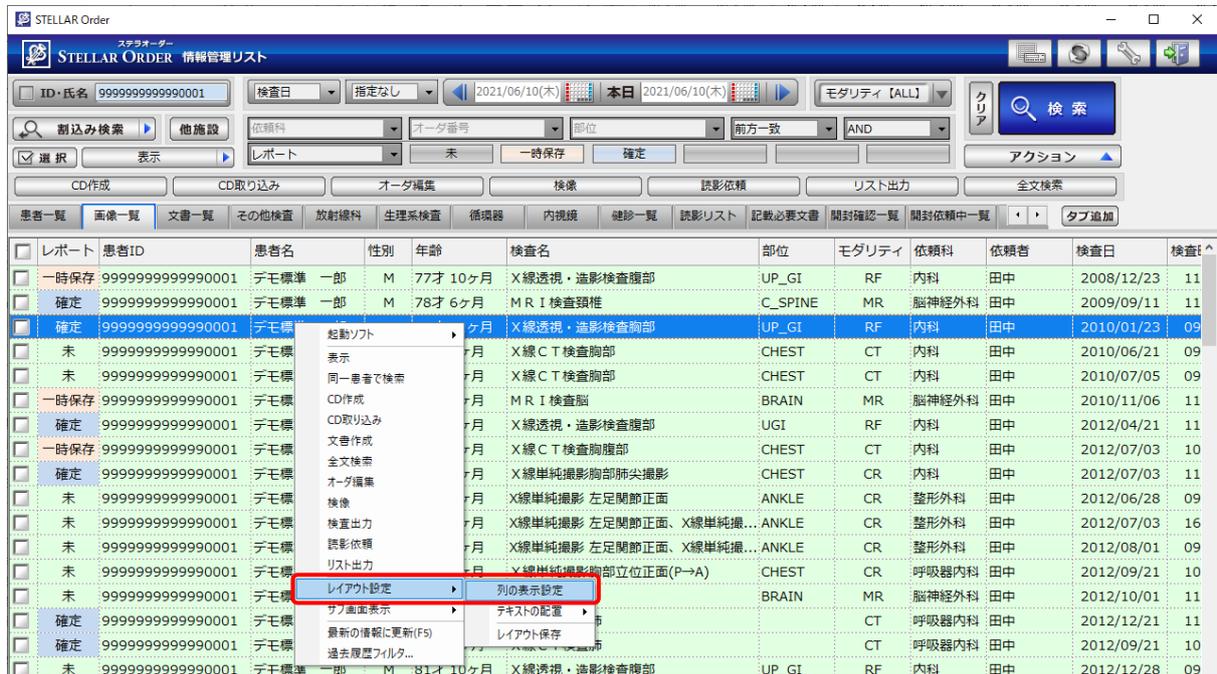

列の表示項目設定ダイアログ

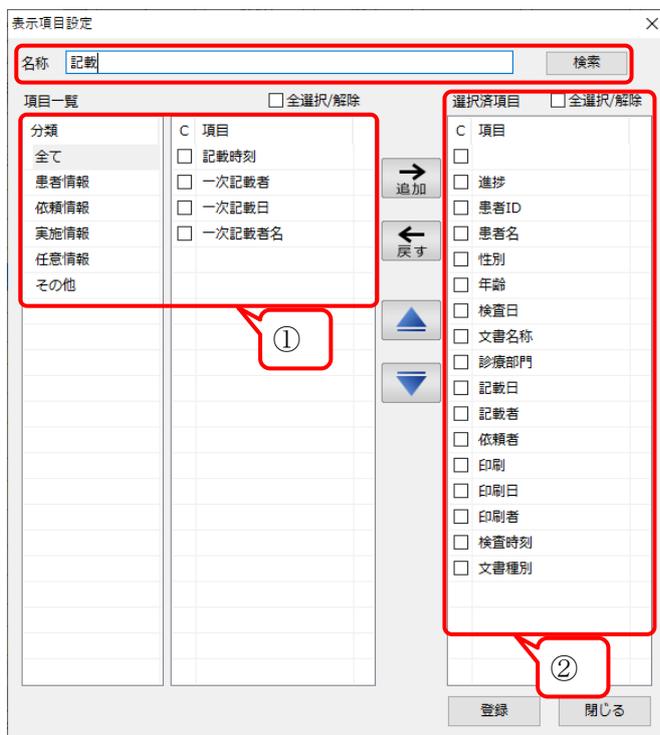

名称枠に項目名を入力し、[検索]ボタンをクリックする（省略可）。

分類▶項目①の順に選択。

項目①から必要な項目を選択し（複数選択可）、[追加]ボタンをクリックすると項目②の最下行に追加される。

（ドラッグ&ドロップでも追加可能）

項目②から必要のない項目を削除する場合は、削除する項目を選択し（複数選択可）[戻す]ボタンをクリックする。


（ドラッグ&ドロップでも削除可能）

▲・▼ボタンで選択中の項目②を上下に移動。（複数選択不可）

（ドラッグ&ドロップで並べ替え可能）


※3：レイアウト設定（テキストの配置）

メインリスト内の文字を左端・中央・右端に寄せます。

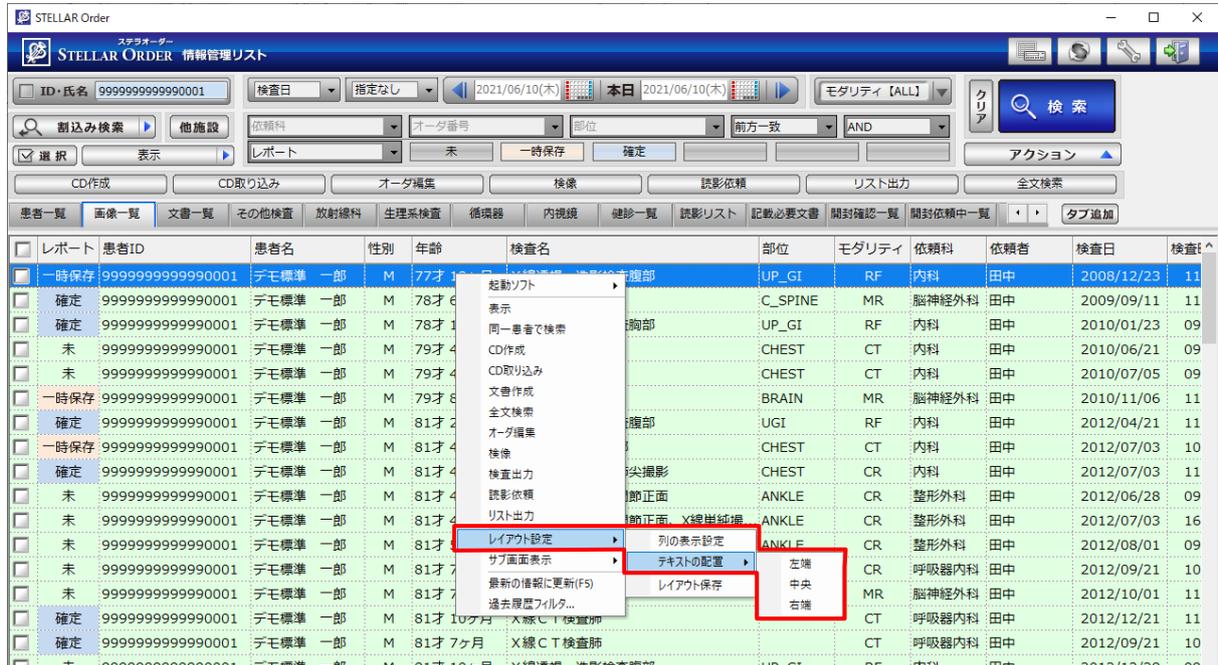

※3：レイアウト設定（レイアウト保存）

現在のレイアウトを保存します。

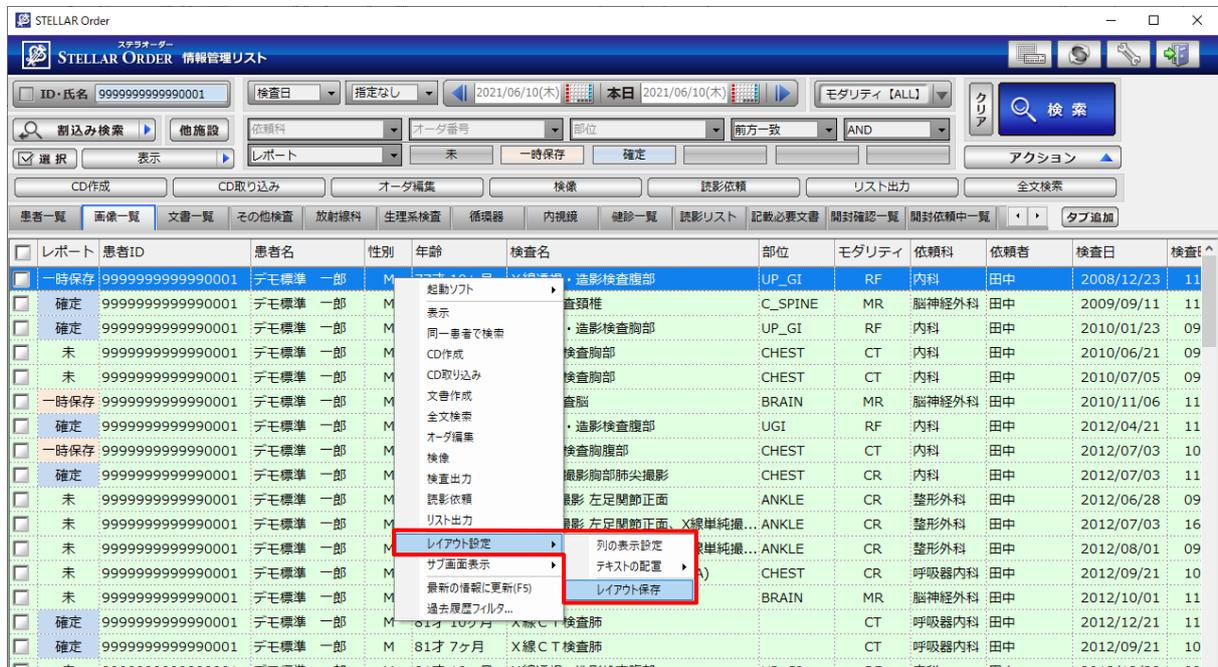

※4：サブ画面表示

サブ画面の追加・削除を行います。（「2.7 サブ画面」をご参照ください。）

※5：最新の情報に更新 (F5)

メインリストのリフレッシュ検索を行います。

※6：過去履歴フィルタ

履歴リストをモダリティで絞り込むための設定を行います。

The screenshot shows the STELLAR ORDER application window. The main area displays a table of patient history records. A right-click context menu is open over one of the records, showing various actions. Two red callout boxes provide instructions:

- Left callout: 過去履歴フィルタをかける前は、全ての履歴が表示される (Before applying the past history filter, all history is displayed).
- Right callout: 右クリックメニューから過去履歴フィルタを選択 (Select the past history filter from the right-click menu).

レポ	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 10ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UP_GI	RF	内科	田中	2008/12/23	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 6ヶ月	MRI検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経外科	田中	2009/09/11	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 11ヶ月	X線透視・造影検査胸部	UP_GI	RF	内科	田中	2010/01/23	09
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/06/21	09
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査	CHEST	CT	内科	田中	2010/07/05	09
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 8ヶ月	MRI検査脳	BRAIN	MR	脳神経外科	田中	2010/11/06	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 2ヶ月	X線透視・造	UGI	RF	内科	田中	2012/04/21	11
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線CT検査	CHEST	CT	内科	田中	2012/07/03	10
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影	CHEST	CR	内科	田中	2012/07/03	11
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/06/28	09
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	16
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 5ヶ月	X線単純撮影	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	09
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	CHEST	CR	整形外科	田中	2012/07/03	10
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	BRAIN	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	BRAIN	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	BRAIN	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	BRAIN	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
未	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影	UP_GI	RF	内科	田中	2012/12/28	09

過去履歴フィルタ

モダリティ: CT

CR
 CT
 MR
 RF
 XA
 DX
 MG
 NM

全てOFF 閉じる

対象のモダリティを選択

履歴リストで絞り込みされるモダリティを選択

メインリストで選択したモダリティの場合に動作する

STELLAR Order 情報管理リスト

検索日: 2021/06/09(水) 今日 2021/06/09(水)

モダリティ: [ALL]

検索

CD作成 CD取り込み オータム編集 検査 読影依頼 リスト出力 全文検索

レポ	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査時
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 10ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UP_GI	RF	内科	田中	2008/12/23	11
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 6ヶ月	MR I 検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経外科	田中	2009/09/11	11
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 11ヶ月	X線透視・造影検査胸部	UP_GI	RF	内科	田中	2010/01/23	09
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/06/21	09
<input checked="" type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/07/05	09
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 8ヶ月	MR 検査脳	BRAIN	MR	脳神経外科	田中	2010/11/06	11
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 2ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UGI	RF	内科	田中	2012/04/21	11
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線CT検査腹部	CHEST	CT	内科	田中	2012/07/03	10
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影胸部肺尖撮影	CHEST	CR	内科	田中	2012/07/03	11
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影左足関節正面	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/06/28	09
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影				田中	2012/07/03	16
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 5ヶ月	X線単純撮影				田中	2012/08/01	09
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影				田中	2012/09/21	10
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	MR 検査脳				田中	2012/10/01	11
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 10ヶ月	X線CT検査				田中	2012/12/21	11
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線CT検査				田中	2012/09/21	10
<input type="checkbox"/>	未 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 10ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UP_GI	RF	内科	田中	2012/12/28	09

過去履歴フィルタをかけた後は、設定した絞り込み条件で表示される

履歴リスト(選択中)

レポ	診療部門	依頼者	検査名	モダリティ	部
<input type="checkbox"/>	未	内科	田中	X線CT検査胸部	CT
<input checked="" type="checkbox"/>	未	内科	田中	X線CT検査胸部	CT
<input type="checkbox"/>	一時保存	内科	田中	X線CT検査胸部	CT
<input type="checkbox"/>	確定	呼吸器内科	田中	X線CT検査肺	CT
<input type="checkbox"/>	確定	呼吸器内科	田中	X線CT検査肺	CT


サムネイル: 1 CHEST 2 CHEST 3 CHEST 4 CHEST 5 CHEST

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 18:27 Login 検索結果 498件 選択件数: 0件 読影件数: 1件 自動更新なし

※ 1～5 以外の起動画面の説明をします。

- ・ スキャナ取り込み

Capella を起動し、スキャン取り込みをします。

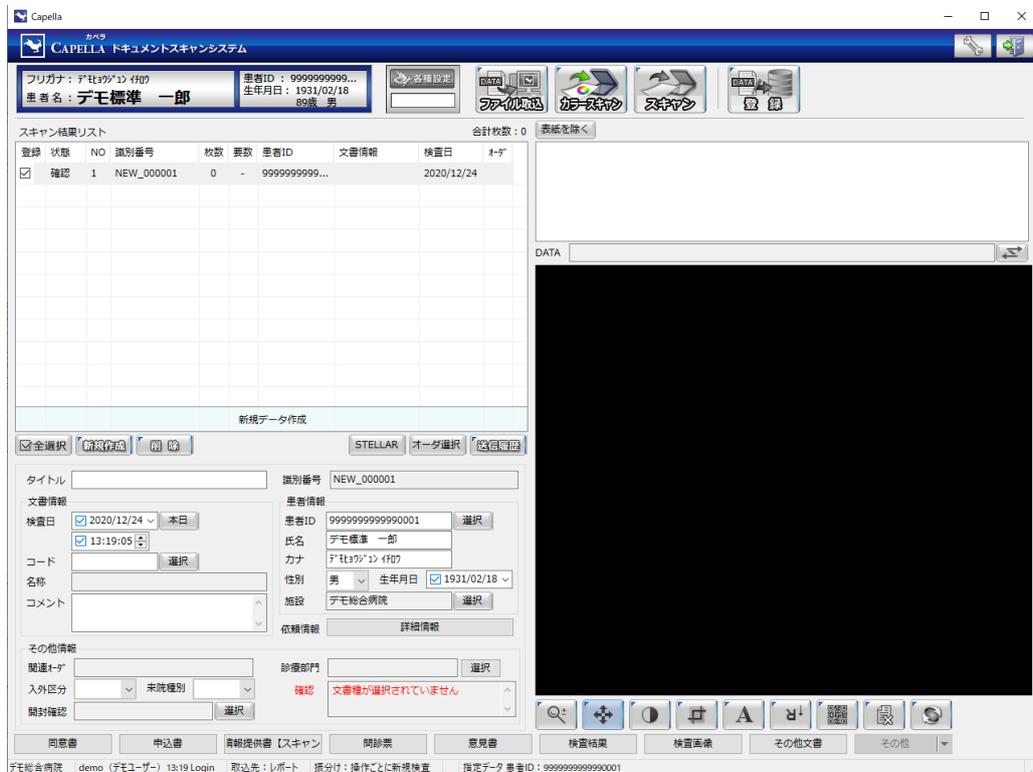


- ・ CD 作成

Nazca Exporter を起動し、CD 作成をします。




・ CD 取り込み

Transfer Tool を起動し他院 CD 等を取り込みます。

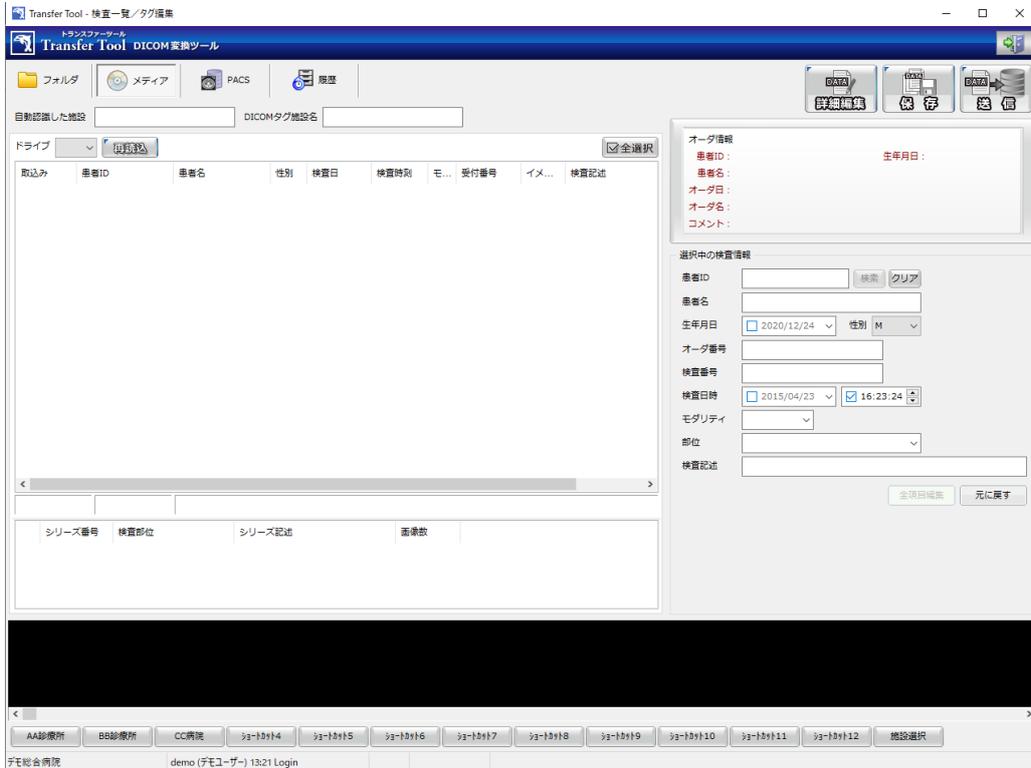

・ 文書作成

SOPHIA Report を起動し、レポートを作成します。

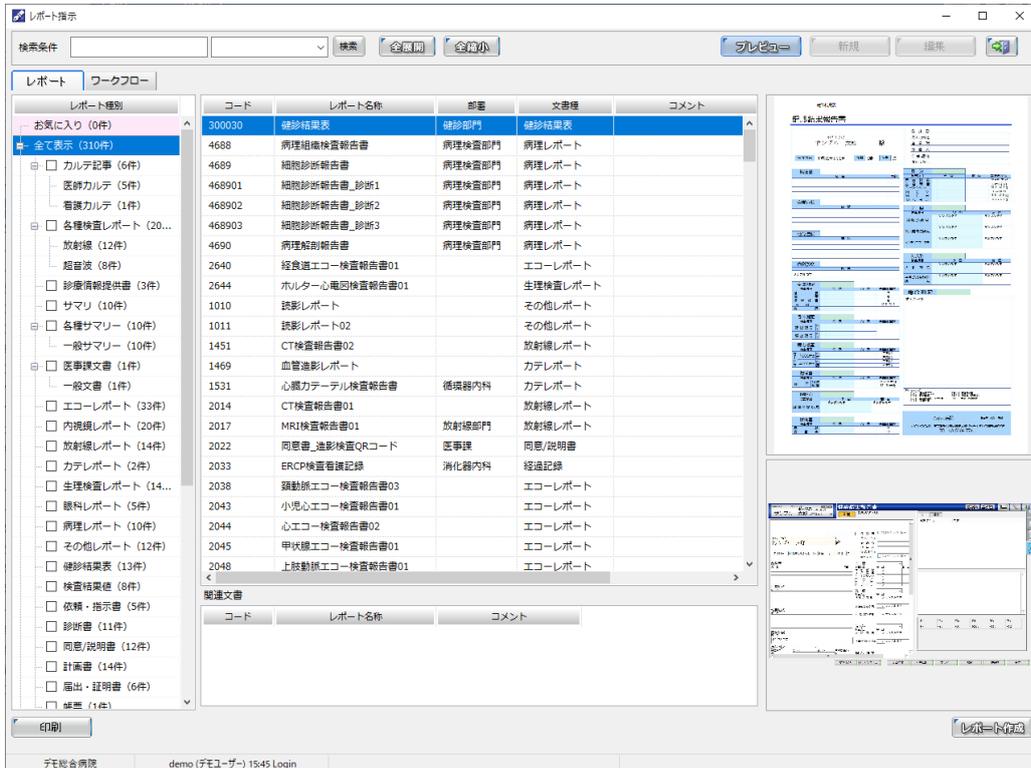

・ 紹介管理


Regulus（紹介管理）を起動します。

・ 患者登録

STELLARManager メンテナンス（患者登録）を起動します。


・ 全文検索

SOPHIAReport（全文検索）を起動します。

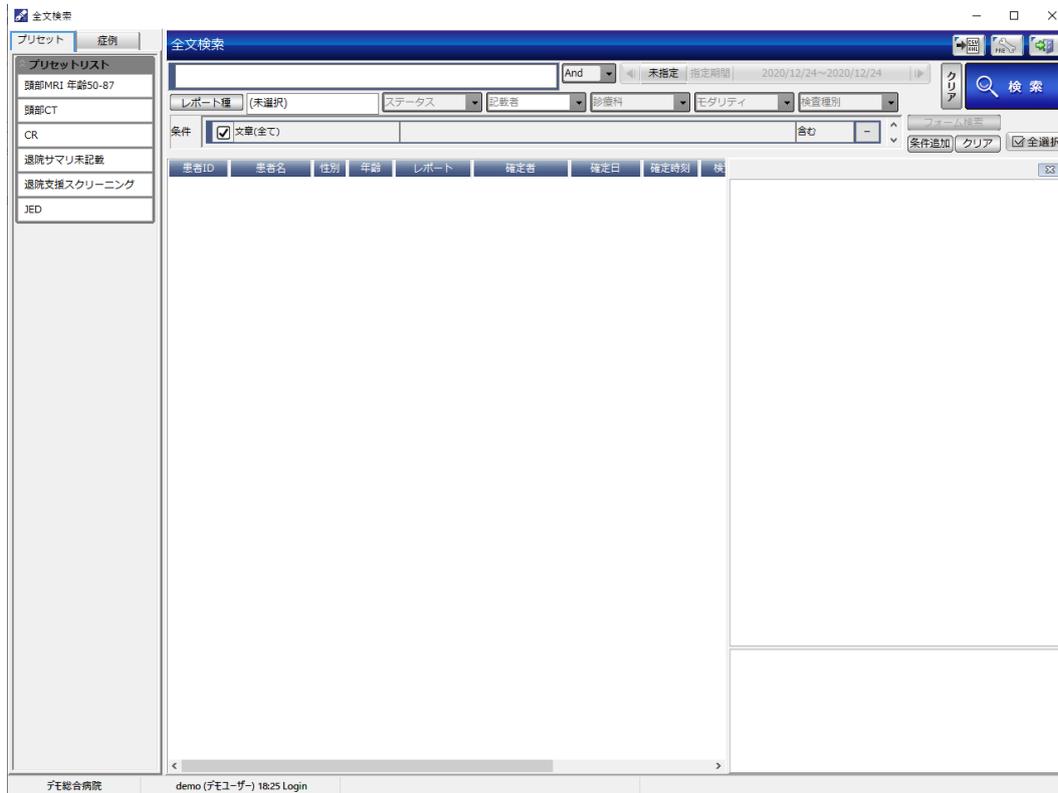


・ オーダ編集

STELLARManager メンテナンス（オーダ編集）を起動します。

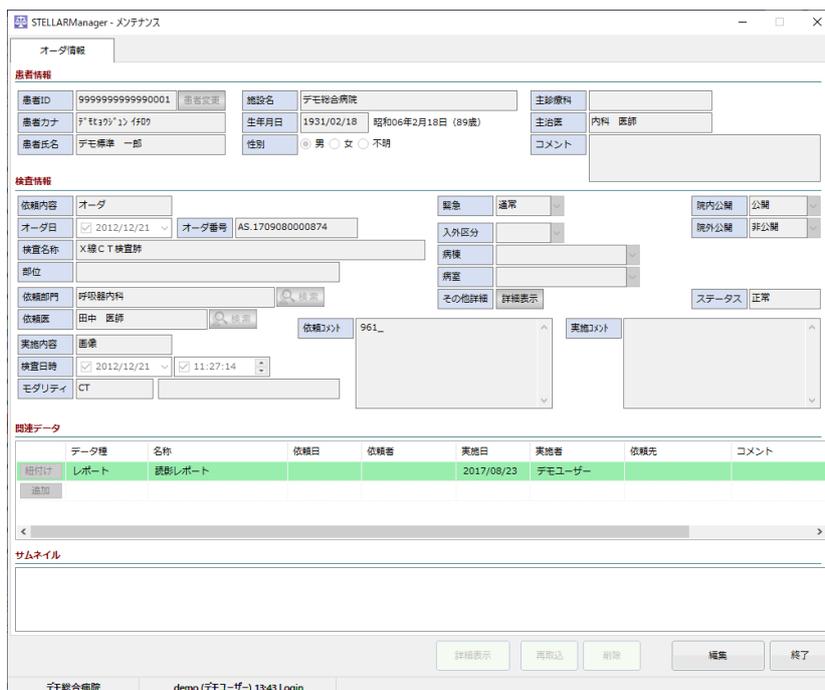


・ 検像

NazcaQA (検像) を起動します。

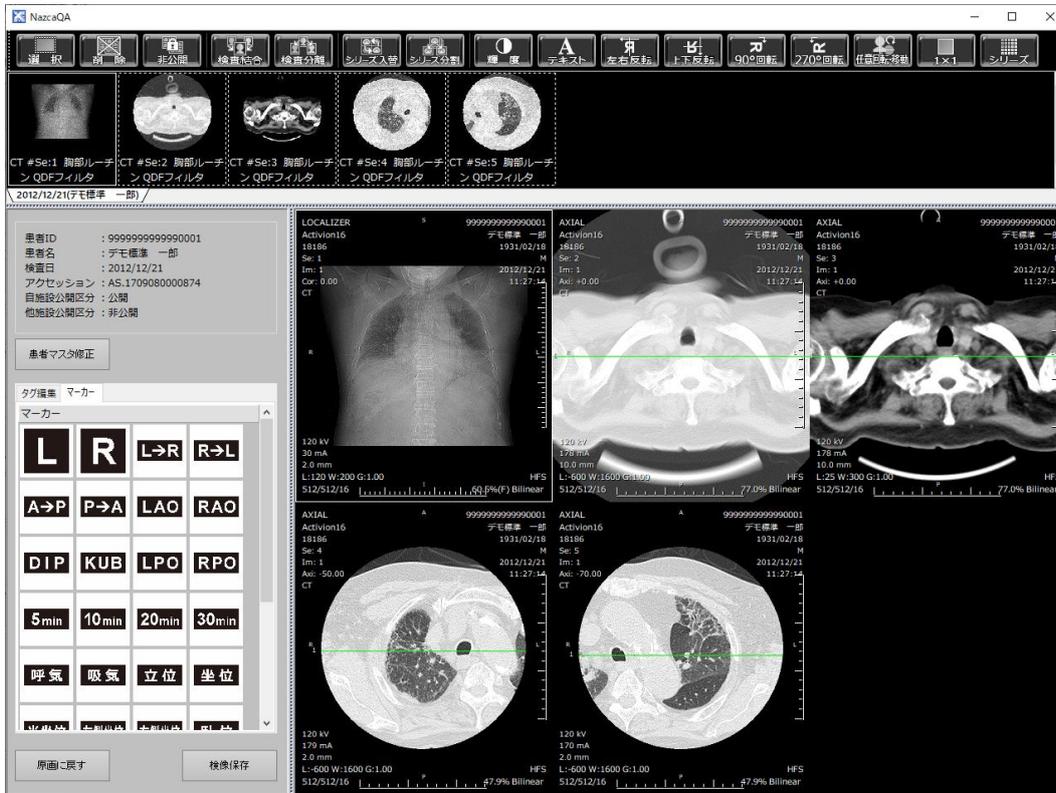

・ 読影依頼

Miras (読影依頼) を起動します。

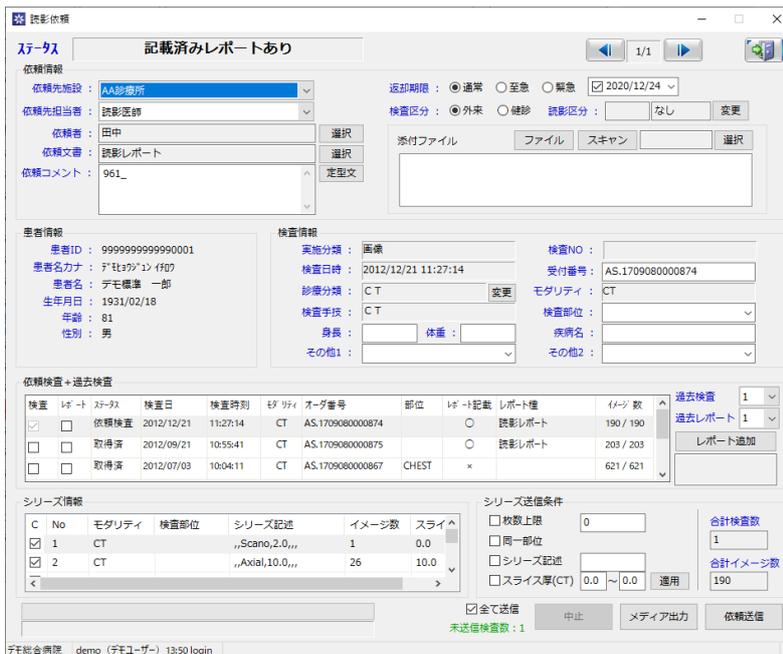

・印刷履歴

印刷履歴を表示します。

ログ参照
— □ ×

日時

日付指定 最近3日種 2020/12/21 ~ 2020/12/24 << 末日 >>

時刻指定 13:00:48 ~ 14:00:48

その他条件

取り込み イベント

ログ種別 全て 処理結果 全て

検索 設定

条件クリア CSV出力

最大表示件数：3000
検索数：942

2.6 リストの配色

メインリストの配色は以下のように分けられます。

※デフォルト設定になります。配色の変更は可能です。

各項目の配色は次の通りです。

項目名	値	色	[患者一覧]	[画像]	[文書管理]	[その他検査]	[放射線科]
リスト	奇数行	サンプル	全リスト共通	全リスト共通	全リスト共通	全リスト共通	全リスト共通
リスト	偶数行	サンプル					
リスト	選択行	サンプル					
リスト	同一患者	サンプル					

[画像]、[その他検査]、[放射線科]タブ

項目名	値	色	一行全体	背景色
保留フラグ	登録中	サンプル	○	
保留フラグ	論理エラー	サンプル	○	
保留フラグ	エラー	サンプル	○	
アクションステータス	処理中	サンプル		○
アクションステータス	完了	サンプル		○
相違フラグ	属性が曖昧	サンプル	○	
レポート	確定	サンプル		○
レポート	依頼	サンプル		○
レポート	一時保存	サンプル		○
レポート	一次	サンプル		○
レポート	二次	サンプル		○
状態	途中	サンプル		○
状態	実施済み	サンプル		○
状態	中止	サンプル		○

[文書管理]タブ

項目名	値	色	一行全体	背景色
保留フラグ	登録中	サンプル	○	
保留フラグ	論理エラー	サンプル	○	
保留フラグ	エラー	サンプル	○	
アクションステータス	処理中	サンプル		○
アクションステータス	完了	サンプル		○
相違フラグ	属性が曖昧	サンプル	○	
進捗	確定	サンプル		○
進捗	依頼	サンプル		○
進捗	一時保存	サンプル		○
進捗	一次	サンプル		○
進捗	二次	サンプル		○
開封	未開封	サンプル		○
開封	開封済み	サンプル		○
状態	途中	サンプル		○
状態	実施済み	サンプル		○
状態	中止	サンプル		○

2.7 サブ画面

サブ画面は必要に応じ、右クリックメニューの「サブ画面表示」から表示・非表示を切り替えることができます。

The screenshot shows the STELLAR ORDER application window. At the top, there are search filters for patient ID, date, and department. Below is a table of patient records with columns for report status, patient ID, name, sex, age, examination name, department, modality, and date. A right-click context menu is open over one of the rows, listing various actions like '履歴リスト' (History list), 'サムネイル' (Thumbnail), 'レポート' (Report), etc. The 'サブ画面表示' (Sub-screen display) option is highlighted, and a red box around it contains a checkmark. A callout box with a red border contains the text: '選択すると☑が入り、画面に表示される' (When selected, a checkmark appears and the screen is displayed).

サブ画面のタイトルバーをドラッグすると、対象ウィンドウを自由に動かすことができます。

ドラッグ&ドロップ操作・ダブルクリックで切り離すことができます。またメインリストの端にドラッグ&ドロップすると吸着します。

例) 履歴リストを移動する

ドラッグで移動先を指定

レポ	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査計
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 10ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UP_GI	RF	内科	田中	2008/12/23	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 6ヶ月	MR I 検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経	田中	2009/09/11	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 11ヶ月	X線透視・造影検査胸部	UP_GI	RF	内科	田中	2010/01/23	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/06/21	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/07/05	09
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 8ヶ月	MR I 検査脳	BRAIN	MR	脳神経	田中	2010/11/06	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 2ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UGI	RF	内科	田中	2012/04/21	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2012/07/03	10
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/06/28	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	16
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 5ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/08/01	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影胸部立位正面(P→A)	CHEST	CR	呼吸器内	田中	2012/09/21	10
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	MR I 検査脳	BRAIN	MR	脳神経	田中	2012/10/01	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 10ヶ月	X線CT検査肺	CT	CT	呼吸器内	田中	2012/12/21	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線CT検査肺	CT	CT	呼吸器内	田中	2012/09/21	10

レポ	患者ID	患者名	性別	年齢	検査名	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査計
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 10ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UP_GI	RF	内科	田中	2008/12/23	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 6ヶ月	MR I 検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経	田中	2009/09/11	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 11ヶ月	X線透視・造影検査胸部	UP_GI	RF	内科	田中	2010/01/23	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/06/21	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2010/07/05	09
一時保存	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 8ヶ月	MR I 検査脳	BRAIN	MR	脳神経	田中	2010/11/06	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 2ヶ月	X線透視・造影検査腹部	UGI	RF	内科	田中	2012/04/21	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線CT検査胸部	CHEST	CT	内科	田中	2012/07/03	10
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/06/28	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/07/03	16
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 5ヶ月	X線単純撮影 左足関節正面、X線単純撮...	ANKLE	CR	整形外科	田中	2012/08/01	09
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線単純撮影胸部立位正面(P→A)	CHEST	CR	呼吸器	田中	2012/09/21	10
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	MR I 検査脳	BRAIN	MR	脳神経	田中	2012/10/01	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 10ヶ月	X線CT検査肺	CT	CT	呼吸器	田中	2012/12/21	11
確定	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	X線CT検査肺	CT	CT	呼吸器	田中	2012/09/21	10

サブ画面のタイトルバーを、別のサブ画面のタイトルバーにドラッグ&ドロップすることにより、サブ画面を重ねて表示し、タブで切り替えることができます。

サブ画面のタイトルバーをドラッグ

サブ画面をタブで切り替えることができる

2.7.1 履歴リスト

[患者一覧]タブでは、メインリストで選択している患者の他施設の患者情報を表示します。
 検査タブでは選択した患者の検査履歴、文書タブでは同様にレポート履歴が表示されます。

The screenshot displays the STELLAR ORDER application interface. At the top, there are search filters for patient ID, name, and date. Below this is a main table of patients with columns for ID, name, sex, birth date, age, department, doctor, and hospital. A red box highlights the first row of the main table, with a callout bubble pointing to it that says "現在選択している患者" (Patient currently selected). Below the main table is a "履歴リスト" (History List) section, which is also highlighted with a red box and a callout bubble saying "他施設での患者情報" (Patient information at other facilities). This list shows patient IDs and facility names like "AA診療所", "CC病院", "BB診療所", and "デモ総合病院".

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	担当医師	病棟	病室	入外	入院日	退院
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモカクン 伊助	M	1931/02/18	90才 4ヶ月	内科	医師	西3階病棟	W3001	入	2013/01/21	
9999999999990002	デモ経遠表 二郎	デモケイエン 表	M	1961/05/05	60才 1ヶ月					外	2011/03/02	2011/03/02
9999999999990003	デモ解折 花子q	デモカイセツ 花子	M	1945/02/20	76才 3ヶ月	内科	デモ医師	西4階病棟	W4003	入		
9999999999990004	デモ健診 久子	デモケンシん 久子	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師			外		
9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモサンギョウイ 太郎	M	1945/06/05	76才 0ヶ月	内科				外	2016/07/07	2016/07/07
9999999999990006	デモ腫瘍 一郎	デモショウヤウ 一郎	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			東3階病棟	E3003	入	2018/03/13	
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプル ナイシキョウ	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西5階病棟	W5002	入		
9999999999990008	サンプル 病理	サンプル ヒョウリ	M	1937/04/15	84才 2ヶ月	消化器内科	消化器 医師	東3階病棟	E3011	入	2017/09/08	
9999999999990009	サンプル 眼科	サンプル ガンカク	F	1937/04/15	84才 2ヶ月	眼科	眼科 医師			外		
9999999999990010	サンプル 耳鼻	サンプル ナビ	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師			外		
9999999999990011	サンプル 生理	サンプル ショウリ	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師			外		
9999999999990012	サンプル 循環器	サンプル ジョウカンキ	M	1957/11/20	63才 6ヶ月	循環器	循環器 医師		W1001	入	2018/12/07	
9999999999990013	サンプル 治療	サンプル リョウリョウ	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科				外		
9999999999990014	サンプル 放射線	サンプル ホウシャセン	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		西5階病棟	W5001	入		
9999999999990015	サンプル 内視X	サンプル ナイシキョウ	F	1943/04/20	78才 1ヶ月	内科		西4階病棟	W4003	入		
9999999999990016	サンプル 税	サンプル ゼ	M	1947/09/16	73才 9ヶ月	内科	内科 医師	東5階病棟		外		
9999999999990017	サンプル 尚	サンプル ショウ	M	1945/02/01	77才 9ヶ月	呼吸器内科		西5階病棟	W5011	入		
9999999999990018	サンプル 学子	サンプル ガクシ	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科	内科 医師	東5階病棟		外		

患者ID	施設名	漢字患者名	カナ患者名	生年月日	年齢	主診療部門	担当医師	コメント1	病棟	病室
9999999999991001	AA診療所	デモ標準 一郎	デモカクン 伊助	1931/02/18	90才 4ヶ月					
9999999999990001	CC病院		デモカクン 伊助	1931/02/18	90才 4ヶ月					
9999999999990001	BB診療所		デモカクン 伊助	1931/02/18	90才 4ヶ月					
99990001	デモ総合病院									

- 起動ソフト
- 全選択**
- 表示
- 同一患者で検索
- スキャナ取り込み
- CD取り込み
- 文書作成
- 紹介管理
- 患者登録
- 患者編集
- リスト出力
- 訪問看護

履歴リスト上で右クリックメニューを表示すると、メインリストの右クリックメニューに加えて「全選択」の項目が追加されます。

「全選択」をクリックすると、履歴リスト内の全てのチェックボックスにチェックが入ります。

履歴リストのチェックボックスが全て選択状態になる

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	担当医師	病棟	病室	入外	入院日	退院
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモ標準 一郎	M	1931/02/18	90才 4ヶ月	内科	医師	西 3 階病棟	W3001	入	2013/01/21	
9999999999990002	デモ経過表 二郎	デモ経過表 二郎	M	1961/05/05	60才 1ヶ月					外	2011/03/02	20
9999999999990003	デモ解析 花子q	デモ解析 花子q	F	1943/04/20	78才 1ヶ月	内科	デモ医師	西 4 階病棟	W4003	入		
9999999999990004	デモ健診 久子	デモ健診 久子	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	内科 医師			外		
9999999999990005	デモ産業医 太郎	デモ産業医 太郎	M	1974/12/31	46才 5ヶ月	内科						
9999999999990006	デモ腸癌 一郎	デモ腸癌 一郎	M	1945/06/05	76才 0ヶ月					外	2016/07/07	20
9999999999990007	サンプル 内視鏡	サンプル 内視鏡	M	1945/02/20	76才 3ヶ月			東 3 階病棟	E3003	入	2018/03/13	
9999999999990008	サンプル 病理	サンプル 病理	M	1967/06/29	53才 11ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西 5 階病棟	W5002	入		
9999999999990009	サンプル 眼科	サンプル 眼科	F	1937/04/15	84才 2ヶ月		眼科 医師	東 3 階病棟	E3011	入	2017/09/08	
9999999999990010	サンプル 耳鼻	サンプル 耳鼻	M	1982/12/31	38才 5ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師			外		
9999999999990011	サンプル 生理	サンプル 生理	F	1938/04/11	83才 2ヶ月	内科	内科 医師			外		
9999999999990012	サンプル 循環器	サンプル 循環器	M	1957/11/20	63才 6ヶ月		循環器 医師		W1001	入	2018/12/07	
9999999999990013	サンプル 治療	サンプル 治療	F	1944/07/01	76才 11ヶ月	内科				外		
9999999999990014	サンプル 放射線	サンプル 放射線	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		西 5 階病棟	W5001	入		
9999999999990015	サンプル 内視X	サンプル 内視X	F	1943/04/20	78才 1ヶ月	内科		西 4 階病棟	W4003	入		
9999999999990016	サンプル 内視	サンプル 内視	M	1947/09/16	73才 9ヶ月	内科	内科 医師	東 5 階病棟		外		
9999999999990017	サンプル 呼吸器	サンプル 呼吸器	M	1950/10/01	75才 8ヶ月	呼吸器内科		西 5 階病棟	W5011	入		
9999999999990018	サンプル 内視	サンプル 内視	M	1947/09/16	73才 9ヶ月	内科	内科 医師	東 5 階病棟		外		

患者ID	施設名	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	担当医師	コメント1	病棟	病室
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999991001	AA診療所	デモ標準 一郎	デモ標準 一郎	M	1931/02/18	90才 4ヶ月				
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990001	CC病院	デモ標準 一郎	デモ標準 一郎	M	1931/02/18	90才 4ヶ月				
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999999990001	BB診療所	デモ標準 一郎	デモ標準 一郎	M	1931/02/18	90才 4ヶ月				
<input checked="" type="checkbox"/>	999990001	デモ総合病院			M						

2.7.2 サムネイル

検査画像のサムネイルを表示します。


サムネイルをダブルクリックすると NazcaView が起動します。

ワンポイント

サムネイルの表示設定を変更することができます。設定方法は[設定(スパナ)]ボタン▶全般設定▶サブ画面▶サムネイル表示設定から「シリーズ No」・「部位」・「シリーズ名」・「プロトコル名」を選択することができ、サムネイル画面サイズではサムネイルのサイズを変更することができます。


2.7.3 レポート

患者の診療記録等の文書を表示します。

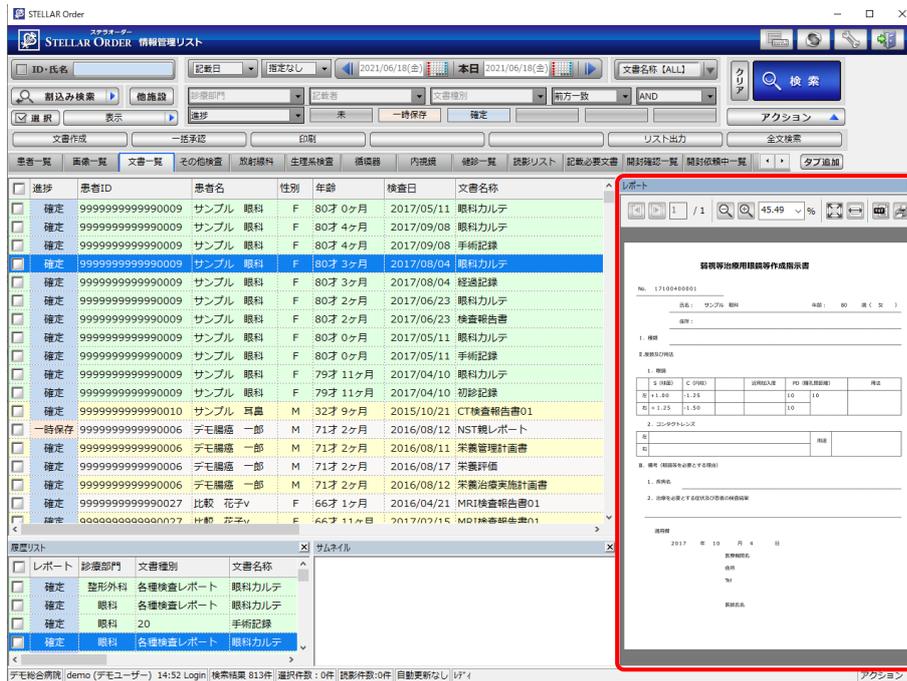

ワンポイント

レポートの表示設定を変更することができます。設定方法は[設定(スパナ)]ボタン▶全般設定▶サブ画面の「レポート表示」で[全体を表示]・[横幅に合わせて表示]・[サイズ指定 (サイズ設定)]へ変更することができ、「レポート表示 (サイズ指定)」では大きさを指定することができます。

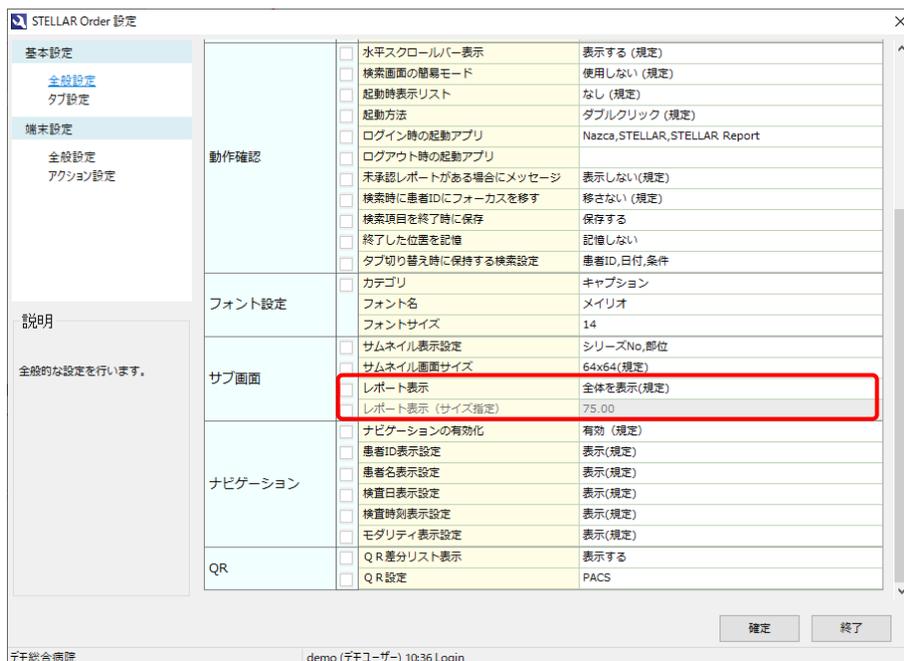

2.7.4 シリーズリスト

メインリストまたは履歴リストで選択している検査画像のシリーズ情報を表示します（選択検査が画像以外の場合は表示されません）。ダブルクリックすると NazcaView が起動します。

シリーズ	モダリティ	検査部位	シリーズ記述	イメージ数
1	MR	C_SPINE	01 Scano GE ST 6	
2	MR	C_SPINE	02 Scano SE CS 6	
3	MR	C_SPINE	anon	7
4	MR	C_SPINE	04 T1 55mm# 7	
5	MR	C_SPINE	* T2* T5mm# 5 11	
6	MR	C_SPINE	* T1 T5mm# 5 11	

2.7.5 依頼情報

メインリストから選択された依頼情報（コメント）を表示します。

依頼情報
<ul style="list-style-type: none"> ■ オフタ日 2020/08/01 ■ オフタ時刻 11:38:10 ■ 依頼コメント

2.7.6 ランチャー

使用頻度の高いアプリを10個まで登録し、起動することができます。

The screenshot shows the STELLAR Order application interface. At the top, there are search filters for ID, name, and date. Below that is a table of patients with columns for patient ID, name, gender, birth date, age, department, doctor, and room. A sidebar on the right contains a 'ランチャー' (Launcher) section with a list of applications: NazcaView, STELLAR, Capella, STELLAROrder, and SOPHIAReport Workflo. The 'ランチャー' section is highlighted with a red box.



ランチャーの設定を変更することができます。設定方法は[設定(スパナ)]ボタン▶タブ設定▶「起動アプリ」の「ランチャー」で登録するアプリを指定することができます。

The screenshot shows the STELLAR Order settings interface. The '起動アプリ' (Startup App) section is highlighted with a red box. It contains a table with columns for '起動アプリ' (Startup App) and 'メニュー' (Menu). The 'ランチャー' (Launcher) option is selected in the '起動アプリ' column, and its corresponding menu items are listed in the 'メニュー' column: Nazca, STELLAR, STELLAR Report, and SOPHIAReport Workflo. The 'ランチャー' option is also highlighted with a red box.

2.7.7 検査履歴（患者一覧のみ）

検査履歴を表示します。

The screenshot shows the STELLAR Order interface. The main window displays a list of patients with columns for ID, name, sex, birth date, age, department, and admission date. A pop-up window titled '検査履歴' (Test History) is open, showing a table of test results for a selected patient.

患者ID	漢字患者名	カナ患者名	性別	生年月日	年齢	主診療部門	主担当医	病棟	病室	入外	入院日	退院日
9999999999990001	デモ標準 一郎	デモ標準 一郎	M	1931/02/18	90才 3ヶ月	内科	医師	西3 階病棟	W3001	入	2013/01/21	
9999999999990010	サンプル 耳聾	サンプル 耳聾	M	1982/12/31	38才 4ヶ月	耳鼻咽喉科	デモ医師					
9999999999990011	サンプル 生理	サンプル 生理	F	1938/04/11	83才 1ヶ月	内科	内科 医師					
9999999999990012	サンプル 循環器	サンプル 循環器	M	1957/11/20	63才 6ヶ月	循環器	医師		W1001		2018/12/07	
9999999999990013	サンプル 治療	サンプル 治療	F	1944/07/01	76才 10ヶ月	内科						
9999999999990014	サンプル 放射線	サンプル 放射線	M	1940/11/28	80才 6ヶ月	呼吸器内科		西5 階病棟	W5001			
9999999999990051	サンプル 隆二	サンプル 隆二	M	1949/04/25	72才 1ヶ月	内科		東5 階病棟				
9999999999990016	サンプル 祝	サンプル 祝	M	1947/09/16	73才 8ヶ月	内科	内科 医師	東5 階病棟				
9999999999990017	サンプル 尚	サンプル 尚	M	1945/10/01	75才 7ヶ月	呼吸器内科		西5 階病棟	W5011			
9999999999990018	サンプル 栄子	サンプル 栄子	F	1941/07/18	79才 10ヶ月	内科	内科 医師	東5 階病棟				
9999999999990019	サンプル 香子	サンプル 香子	F	1970/03/03	51才 2ヶ月	内科						
9999999999990004	デモ健診 久子	デモ健診 久子	F	1948/09/21	72才 8ヶ月	内科	内科 医師					
9999999999990002	デモ経遠表 二郎	デモ経遠表 二郎	M	1961/05/05	60才 0ヶ月						2011/03/02	20
9999999999990006	デモ内視 一郎	デモ内視 一郎	M	1945/06/05	75才 11ヶ月						2016/07/07	20
9999999999990008	サンプル 病理	サンプル 病理	M	1967/06/29	53才 10ヶ月	消化器内科	消化器 医師	西5 階病棟	W5002			
9999999999990009	サンプル 眼科	サンプル 眼科	F	1937/04/15	84才 1ヶ月	眼科	医師	東3 階病棟	E3011		2017/09/08	
9999999999990020	サンプル 美智子	サンプル 美智子	F	1944/02/10	77才 3ヶ月	内科		東5 階病棟				
aaaaaaaaaaaaaa0011	サンプル 藤江	サンプル 藤江	F	1930/06/26	90才 11ヶ月	内科		東5 階病棟				

患者ID	施設名	漢字患者名	カナ患者名	性別	紹介状	作成日	作成時刻	未読日	連携先施設	連携先部署
					<input type="checkbox"/>	2017/10/28	13:40:11		AA診療所	
					<input type="checkbox"/>	2020/08/01	11:35:30	2018/10/03		
					<input type="checkbox"/>	2020/08/01	11:38:10	2018/10/03		
					<input type="checkbox"/>	2016/02/10	11:41:00			

2.7.8 名寄せ（患者一覧のみ）

選択した患者の名寄せ情報を表示します。

The screenshot shows the STELLAR Order interface. The main window displays a list of patients. A pop-up window titled '名寄せリスト' (Name Merge List) is open, showing a table of name merge information for a selected patient.

患者ID	施設名	漢字患者名	カナ患者名	性別	施設名	患者ID	カナ患者名	漢字患者名
					<input type="checkbox"/>	AA診療所	9999999999991001	デモ標準 一郎
					<input type="checkbox"/>	CC病院	9999999999990001	デモ標準 一郎
					<input type="checkbox"/>	BB診療所	9999999999990001	デモ標準 一郎
					<input type="checkbox"/>	デモ総合病院	9999990001	

2.7.9 紹介履歴

紹介履歴を表示します。

紹介状況	作成日	作成時刻	来院日	連携先施設	連携先部門
検査済	2020/09/06	14:41:32			
検査済	2020/07/31	11:51:14			
予約	2020/08/01	09:00:00			
中止	2021/01/27	17:50:54			

2.7.10 開封リスト

開封リストを表示します。

レポート	診療部門	文書種別	文書名称	開封先医師
一時保存		各種検査レポート	NST総レポート	2
確定	20	栄養管理計画書		2
確定	20	栄養評価		2
確定	20	栄養治療実施計画書		2

2.7.11 リスト一覧

※[設定(スパナ)]ボタン▶全般設定▶エクスプローラ表示を「表示する」に設定すると表示されます。




タブ表示方法をエクスプローラ形式に変更します。

従来のタブ表示



エクスプローラ表示 (縦配置)

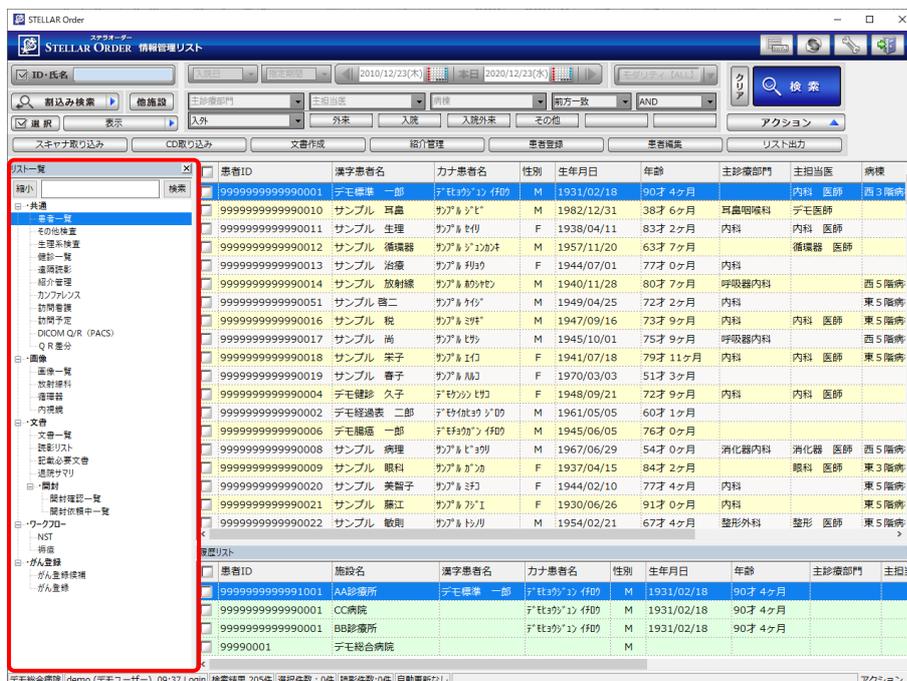


2.8 ナビゲーション

ナビゲーションは STELLAROrder での情報観覧を簡易に行えるようにするための操作画面になります。

操作画面より設定したアプリの起動、STELLAROrder で選択されている検査情報から次の検査を表示する等が行えます。

[リスト]ボタンをクリックすることで簡易版の STELLAROrder 画面も表示することができます。STELLAROrder よりも画面サイズが小さいので別アプリ (NazcaView など) を開きながらの操作が可能です。

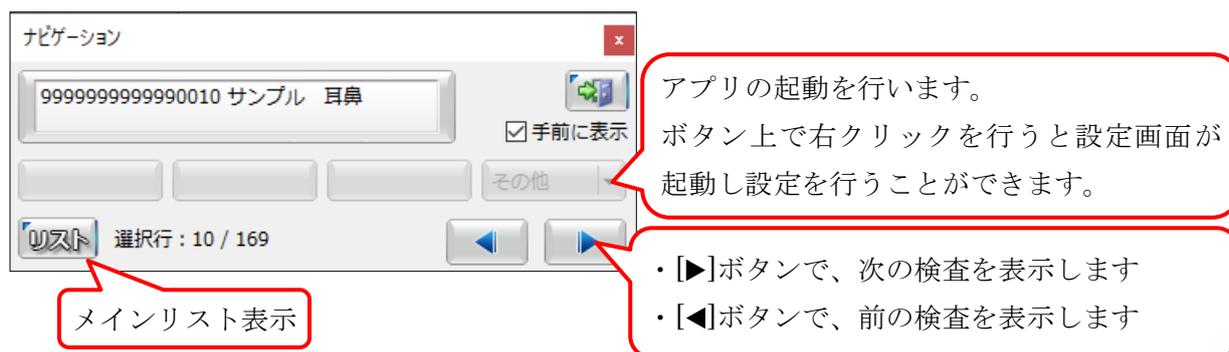

b. メインリスト表示

ナビゲーション

999999999990009 サンプル 眼科 (Sample 2020/10/02 13:37:35)

手前表示

NazcaView STELLAR スキャナ取込み その他

リスト 選択行: 1 / 42

検索 指定なし

<input type="checkbox"/>	レポート	患者ID	患者名
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990009	サンプル 眼科
<input type="checkbox"/>	一時保存	999999999990001	デモ標準 一郎
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990007	サンプル 内視
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990007	サンプル 内視
<input type="checkbox"/>	依頼	999999999990007	サンプル 内視
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990007	サンプル 内視
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990012	サンプル 循環
<input type="checkbox"/>	依頼	999999999990012	サンプル 循環
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990009	サンプル 眼科
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990009	サンプル 眼科
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990009	サンプル 眼科
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990009	サンプル 眼科
<input type="checkbox"/>	依頼	999999999990006	デモ内視 一郎
<input type="checkbox"/>	依頼	000000000000006	三エ内視 一郎

[リスト]ボタンをクリックすると、STELLAROrder 上で選択されているタブのメインリストを表示します。

ナビゲーション

999999999990175 検証太郎5 (kensyoutarou 2020/10/28 14:11:53 CT#PT)

手前表示

NazcaView STELLAR スキャナ取込み その他

リスト 選択行: 1 / 473

検索 指定なし 未開封

<input type="checkbox"/>	レポート	患者ID	患者名	性別	年齢	診療部門	依頼者
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990012	サンプル 循環器	M	62才 8ヶ月	循環器内科	デモ医師
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990011	サンプル 生理	F	82才 3ヶ月	内科	デモ医師
<input type="checkbox"/>	承認待ち	999999999990064	サンプル 亜依	F	48才 1ヶ月	健診部門	
<input type="checkbox"/>	承認待ち	999999999990019	サンプル 春子	F	50才 4ヶ月	健診部門	
<input type="checkbox"/>	一時保存	999999999990007	サンプル 内視鏡	M	75才 5ヶ月	消化器内科	デモ医師
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990042	サンプル 久美子	F	65才 4ヶ月	健診部門	
<input type="checkbox"/>		999999999990094	サンプル 真帆	F	59才 3ヶ月	泌尿器科	放射線 医師
<input type="checkbox"/>	承認待ち	999999999990042	サンプル 久美子	F	65才 4ヶ月	健診部門	
<input type="checkbox"/>	確定	999999999990064	サンプル 亜依	F	48才 1ヶ月	健診部門	
<input type="checkbox"/>	承認待ち	999999999990094	サンプル 真帆	F	59才 3ヶ月	健診部門	

ナビゲーションウィンドウの縁をドラッグすると、ウィンドウサイズを大きくすることができます。

2.9 設定画面

[設定(スパナ)]ボタンをクリックすると STELLAROrder 設定画面が表示されます。

基本画面－全般設定（1）

設定項目	初期値
起動時に検索	検索する (規定)
日付プリセット選択時に検索	検索する (規定)
カレンダーで日付選択時に検索	検索しない (規定)
モダリティ選択時に検索	検索する (規定)
任意項目選択時に検索	検索する (規定)
タブ切り替え時に検索	検索する (規定)
ID・氏名検索方法	ID・氏名全検索
エクスプローラ表示	表示しない (規定)
自動更新	無効 (規定)
自動更新時間	10
水平スクロールバー表示	表示する (規定)
検索画面の簡易モード	使用しない (規定)
起動時表示リスト	なし (規定)
起動方法	ダブルクリック (規定)
ログイン時の起動アプリ	Nazca, STELLAR, STELLAR Report
ログアウト時の起動アプリ	
未承認レポートがある場合にメッセージ	表示しない (規定)
検索時に患者IDにフォーカスを移す	移さない (規定)
検索項目を終了時に保存	保存する
終了した位置を記憶	記憶しない
タブ切り替え時に保持する検索設定	患者ID, 日付, 条件
カテゴリ	キャプション
フォント名	メイリオ
フォントサイズ	14
サムネイル表示設定	シリーズNo, 部位
サムネイル画面サイズ	64x64 (規定)

全般設定		
設定内容	説明	初期値
起動時に検索	起動時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索する (規定)
日付プリセット選択時に検索	日付プリセットを選択時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索する (規定)
カレンダーで日付選択時に検索	カレンダー選択時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索しない (規定)
モダリティ選択時に検索	モダリティ項目を選択した時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索する (規定)
任意項目選択時に検索	任意項目を選択した時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索する (規定)

タブ切り替え時に検索	リストを切り替えた時に検索を行うか設定します。 (検索しない、検索する)	検索する (規定)
ID・氏名検索方法	ID・氏名検索方法の設定を行います。 (通常検査、ID・氏名全検索)	通常検査 (規定)
エクスプローラ表示	タブ表示方法をエクスプローラ形式に変更します。 (表示しない、表示する)	表示しない (規定)
自動更新	自動更新を使用するか設定を行います。 (有効、無効)	無効 (規定)
自動更新時間	自動更新の更新間隔の設定を行います。 (秒単位)	10
動作設定		
水平スクロールバー表示	リスト上に水平スクロールバーを表示するか設定を行います。 (表示しない、表示する)	表示する (規定)
検索画面の簡易モード	検索画面の簡易表示と通常表示を切り替えます。	使用しない (規定)
起動時表示リスト	起動時に表示するリストの設定を行います。 (なし、あり)	なし (規定)
起動方法	リストからアプリを起動する方法の設定を行います。 (ダブルクリック、シングルクリック)	ダブルクリック (規定)
ログイン時の起動アプリ	ログイン時に同時起動するアプリを設定します。 (チェックボックスで選択)	Nazca, STELLAR, STLLAR Report
ログアウト時の起動アプリ	ログアウト時に同時起動するアプリを設定します。 (チェックボックスで選択)	
未承認レポートがある場合にメッセージ	ログイン時に未承認レポートがある場合にメッセージを表示します。 (表示しない、表示する)	表示しない (規定)
検索時に患者 ID にフォーカスを移す	検索後、患者 ID にフォーカスを移動するか設定を行います。 (移さない、移す)	移さない (規定)
検索項目を終了時に保存	検索項目を終了した時に保存をするか設定を行います。 (保存しない、保存する、タブの初期条件を使用)	保存する
終了した位置を記憶	終了した時に終了位置を保存するか設定を行います。 (記憶しない、記憶する)	記憶する (規定)
タブ切り替え時に保存する検査設定	リスト切替時に、切替前の条件を保持するか設定を行います。 未選択の場合デフォルトの設定値が適用されます。 (モダリティ、他施設、条件、患者 ID、日付)	

基本画面－全般設定（2）

STELLAR Order 設定
×

基本設定

[全般設定](#)

タブ設定

端末設定

全般設定

アクション設定

説明

全般的な設定を行います。

動作確認	<input type="checkbox"/>	水平スクロールバー表示	表示する(規定)
	<input type="checkbox"/>	検索画面の簡易モード	使用しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	起動時表示リスト	なし(規定)
	<input type="checkbox"/>	起動方法	ダブルクリック(規定)
	<input type="checkbox"/>	ログイン時の起動アプリ	Nazca,STELLAR,STELLAR Report
	<input type="checkbox"/>	ログアウト時の起動アプリ	
	<input type="checkbox"/>	未承認レポートがある場合にメッセージ	表示しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	検索時に患者IDにフォーカスを移す	移さない(規定)
	<input type="checkbox"/>	検索項目を終了時に保存	保存する
	<input type="checkbox"/>	終了した位置を記憶	記憶しない
	<input type="checkbox"/>	タブ切り替え時に保持する検索設定	患者ID,日付,条件
	フォント設定	<input type="checkbox"/>	カテゴリ
<input type="checkbox"/>		フォント名	メイリオ
<input type="checkbox"/>		フォントサイズ	14
サブ画面	<input type="checkbox"/>	サムネイル表示設定	シリーズNo, 部位
	<input type="checkbox"/>	サムネイル画面サイズ	64x64(規定)
	<input type="checkbox"/>	レポート表示	全体を表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	レポート表示 (サイズ指定)	75.00
ナビゲーション	<input type="checkbox"/>	ナビゲーションの有効化	有効(規定)
	<input type="checkbox"/>	患者ID表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	患者名表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	検査日表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	検査時刻表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	モダリティ表示設定	表示(規定)
QR	<input type="checkbox"/>	Q R 差分リスト表示	表示する
	<input type="checkbox"/>	Q R 設定	PACS

確定 終了

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 10:36 Login

フォント設定		
設定内容	説明	初期値
カテゴリ	フォント設定の対象箇所を指定します。(キャプション、リスト)	キャプション
フォント名	指定したカテゴリのフォントを変更します。(プルダウンで選択)	メイリオ
フォントサイズ	指定したカテゴリのフォントサイズを変更します。(プルダウンで選択)	14
サブ画面		
サムネイル表示設定	サムネイルに表示する項目を指定します。(プロトコル名、シリーズ名、シリーズ No、部位)	シリーズ No, 部位
サムネイル画面サイズ	サムネイルの画面サイズを指定します。(32×32、48×48、64×64、96×96、128×128)	64×64
レポート表示	レポートプレビューの表示設定を行います。(全体を表示、横幅に合わせて表示、サイズ指定)	全体を表示
レポート表示 (サイズ指定)	レポートプレビューの表示サイズの設定を行います。 (25、50、75、100、150、200)	75

基本画面－全般設定（3）

STELLAR Order 設定
×

基本設定

[全般設定](#)

タブ設定

端末設定

全般設定

アクション設定

説明

全般的な設定を行います。

動作確認	<input type="checkbox"/>	水平スクロールバー表示	表示する (規定)
	<input type="checkbox"/>	検索画面の簡易モード	使用しない (規定)
	<input type="checkbox"/>	起動時表示リスト	なし (規定)
	<input type="checkbox"/>	起動方法	ダブルクリック (規定)
	<input type="checkbox"/>	ログイン時の起動アプリ	Nazca,STELLAR,STELLAR Report
	<input type="checkbox"/>	ログアウト時の起動アプリ	
	<input type="checkbox"/>	未承認レポートがある場合にメッセージ	表示しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	検索時に患者IDにフォーカスを移す	移さない (規定)
	<input type="checkbox"/>	検索項目を終了時に保存	保存する
	<input type="checkbox"/>	終了した位置を記憶	記憶しない
フォント設定	<input type="checkbox"/>	カテゴリ	キャプション
	<input type="checkbox"/>	フォント名	メイリオ
	<input type="checkbox"/>	フォントサイズ	14
サブ画面	<input type="checkbox"/>	サムネイル表示設定	シリーズNo, 部位
	<input type="checkbox"/>	サムネイル画面サイズ	64x64(規定)
	<input type="checkbox"/>	レポート表示	全体を表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	レポート表示 (サイズ指定)	75.00
ナビゲーション	<input type="checkbox"/>	ナビゲーションの有効化	有効 (規定)
	<input type="checkbox"/>	患者ID表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	患者名表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	検査日表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	検査時刻表示設定	表示(規定)
	<input type="checkbox"/>	モダリティ表示設定	表示(規定)
QR	<input type="checkbox"/>	Q R 差分リスト表示	表示する
	<input type="checkbox"/>	Q R 設定	PACS

確定 終了

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 10:36 Login

ナビゲーション		
設定内容	説明	初期値
ナビゲーションの有効化	ナビゲーションの有効化を設定します。	有効 (規定)
患者 ID 表示設定	ナビゲーション上に患者 ID を表示するか設定を行います。 (非表示、表示)	表示 (規定)
患者名表示設定	ナビゲーション上に患者名を表示するか設定を行います。 (非表示、表示)	表示 (規定)
検査日表示設定	ナビゲーション上に検査日付を表示するか設定を行います。 (非表示、表示)	表示 (規定)
検査時刻表示設定	ナビゲーション上に検査時刻を表示するか設定を行います。 (非表示、表示)	表示 (規定)
モダリティ表示設定	ナビゲーション上にモダリティを表示するか設定を行います。 (非表示、表示)	表示 (規定)

QR		
QR 差分リスト	QR 差分リストの表示をするか設定を行います。 (表示しない、表示する)	表示しない (規定)
QR 設定	QR に関する設定を行います。	


基本設定

■全般設定

・起動時に検索


検索する (規定)	起動時に検索をします。
検索しない	起動時に検索をしません

・日付プリセット選択時に検索

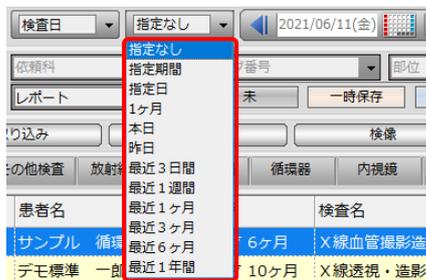

検索する (規定)	プルダウン選択時に検索をします。
検索しない	プルダウン選択時に検索をしません。

・カレンダーで日付選択時に検索

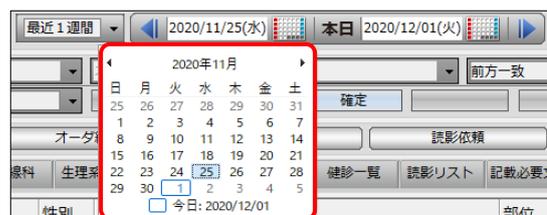

検索する	カレンダーから日付を選択後、検索をします。
検索しない (規定)	カレンダーから日付を選択後、検索をしません。

・モダリティ選択時に検索



検索する (規定)	モダリティ項目を設定した時に検索をします。
検索しない	モダリティ項目を設定した時に検索をしません。

・任意項目選択時に検索



検索する（規定） 任意項目を設定した時に検索をします。
 検索しない 任意項目を設定した時に検索をしません。

・タブ切り替え時に検索



検索する（規定） タブを切り替えた時に検索をします。
 検索しない タブを切り替えた時に検索をしません。

・ID・氏名検索方法



通常検索（規定） 患者の ID・氏名（ふりがな・カナ・漢字）で検索します。
 ID, 氏名全検索 通常検索にアルファベット（英語）を加えて検索します。

・ エクスプローラ表示

STELLAR Order 情報管理リスト

検索: [モダリティ: 選択中]

患者一覧 | 画像 | 文書管理 | その他検査 | 放射線科 | 生理系検査 | 循環器 | 内視鏡 | 健診一覧 | 読影リスト | 記載必要文章 | 開封確認一覧 | 開封依頼中一覧 | **タブ追加**

レポート	患者ID	患者名	性別	年齢	部位	モダリティ	依頼科	依頼者	検査日	検査日
<input type="checkbox"/>	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	66才 6ヶ月	HAND	CR			2009/11/18	12
<input type="checkbox"/>	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	70才 1ヶ月	HAND	CR			2013/06/19	09
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990003	デモ解析 花子q	F	73才 11ヶ月	BREAST	MG			2017/04/04	11
<input type="checkbox"/>	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	73才 11ヶ月	BREAST	MG			2017/04/18	12
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	80才 11ヶ月	心臓, 経皮的超音波造影検査	CARDIAC	US	循環器内科 田中	2012/02/13	10
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990003	デモ解析 花子q	F	70才 6ヶ月	X線 C T 検査脳	HEAD	CT	デモ医師	2013/11/06	10
<input type="checkbox"/>	確定 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	78才 6ヶ月	M R I 検査頸椎	C_SPINE	MR	脳神経外科 田中	2009/09/11	11
<input type="checkbox"/>	一時保存 9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 4ヶ月	X線 C T 検査胸部	CHEST	CT	内科 田中	2012/07/03	10

STELLAR Order 情報管理リスト

検索: [モダリティ: ALL]

リスト一覧 | 画像 | 文書管理 | その他検査 | 放射線科 | 生理系検査 | 循環器 | 内視鏡 | 健診一覧 | 読影リスト | 記載必要文章 | 開封確認一覧 | 開封依頼中一覧 | **タブ追加**

状態	レポート	患者ID	患者名	性別	年齢	診療部門	依頼者	検査名
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990012	サンプル 循環器	M	59才 6ヶ月	腎臓・内...	デモ医師	X線血管造影造影両側腎...
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 2ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	77才 8ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	80才 11ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 8ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	81才 7ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990001	デモ標準 一郎	M	79才 4ヶ月	循環器内科	田中	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済 確定	9999999999990003	デモ解析 花子q	F	73才 3ヶ月		デモ医師	X線血管造影造影冠動脈
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990011	サンプル 生理	F	82才 3ヶ月	内科	デモ医師	生理検査12誘導心電図安...
<input type="checkbox"/>	検査済	9999999999990011	サンプル 生理	F	77才 9ヶ月	内科	デモ医師	生理検査12誘導心電図安...

- 表示しない (規定) タブで表示します。
- 表示する タブ表示方法をエクスペローラ形式で変更します。

・ 自動更新

- 無効 (規定) 自動更新しません。
- 有効 自動更新します。

・ 自動更新時間

- 10 自動更新の更新間隔を秒単位で行います。
※但し自動更新が無効の場合は変更できません。

■動作確認

・水平スクロールバー表示

The screenshot shows the STELLAR ORDER application window. At the bottom of the main data table, a horizontal scrollbar is visible, indicating that the list of orders can be scrolled horizontally. The table contains columns for Report, Patient ID, Patient Name, Sex, Age, Examination Name, Department, Modality, Referring Department, Referring Doctor, Examination Date, and Examination Status.

- 表示する（規定） リスト上に水平スクロールバーを表示します。
- 表示しない リスト上に水平スクロールバーを表示しません。

・起動時表示リスト


The screenshot shows the STELLAR ORDER application window with the '患者一覧' (Patient List) tab selected in the navigation bar. The main area displays a list of medical orders, similar to the previous screenshot, but with the horizontal scrollbar hidden.

- なし（規定） 起動時に表示するリストの設定を行います。
- （タブ選択） [患者一覧]・[画像一覧]・[文書一覧]・[その他検査]等

・起動方法


- ダブルクリック（規定） ダブルクリックで起動します。
- シングルクリック シングルクリックで起動します。

・ ログイン時の起動アプリ

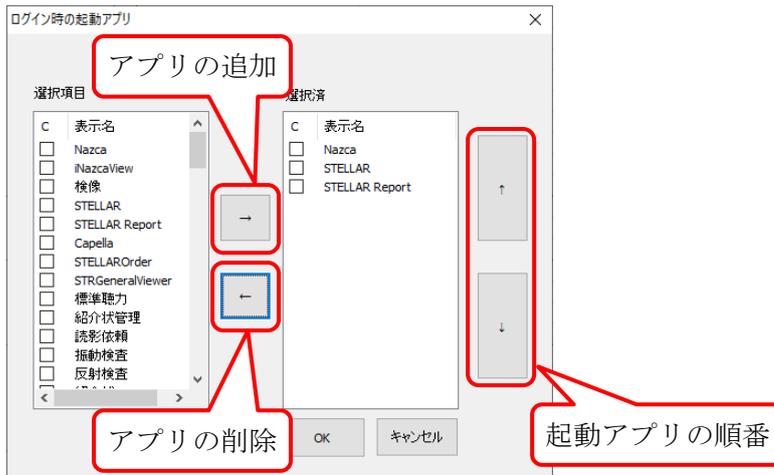

ログイン時に同時起動するアプリを設定します。

・ ログアウト時の起動アプリ

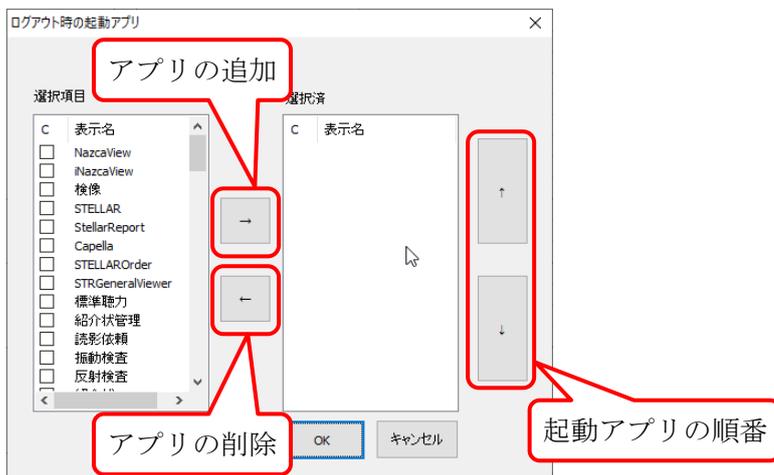

ログアウト時に同時起動するアプリを設定します。

・ 未承認レポートがある場合にメッセージ

表示しない (規定)	ログイン時に未承認レポートがある場合メッセージを表示しません。
表示する	ログイン時に未承認レポートがある場合メッセージを表示します。

・ 検索時に患者 ID にフォーカスを移す

<input type="checkbox"/> ID・氏名 9999999999990003	フォーカスを移さない状態
<input checked="" type="checkbox"/> ID・氏名 9999999999990003	フォーカスを移した状態
移さない (規定)	検索後、患者 ID にフォーカスを移しません。
移す	検索後、患者 ID にフォーカスを移します。

■サブ画面

・サムネイル表示設定

サムネイルに関する項目を指定します。




例えば「シリーズ No」と「部位」が選択済枠にある場合、サムネイルには選択済枠に追加された項目が表示される。

■ナビゲーション

ナビゲーション有効時の表示内容を設定します


- ①患者 ID の表示設定
- ②患者名表示設定
- ③検査日表示設定
- ④検査時刻表示設定
- ⑤モダリティ表示設定

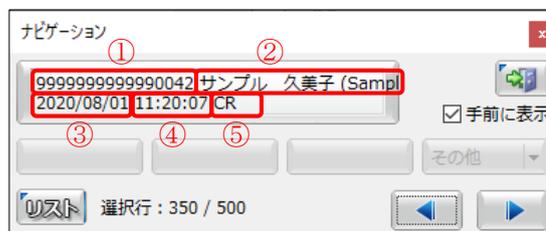

■QR

- ・QR 差分リスト表示

QR 差分リストの表示をするか設定を行います。(規定値：表示しない)

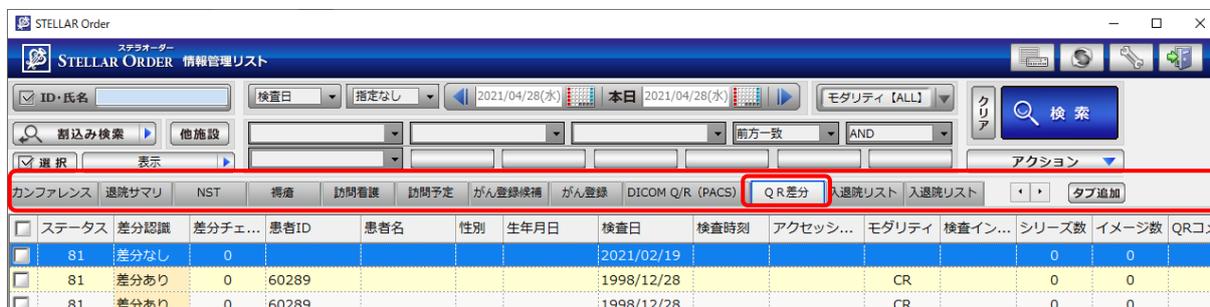


表示する QR 差分リストを表示します。
 表示しない (規定) QR 差分リストを表示しません。

- ・QR 設定

QR に関する設定を行います。

設定を行うには、全般設定の「QR 差分リスト表示」を「表示する」に選択します。

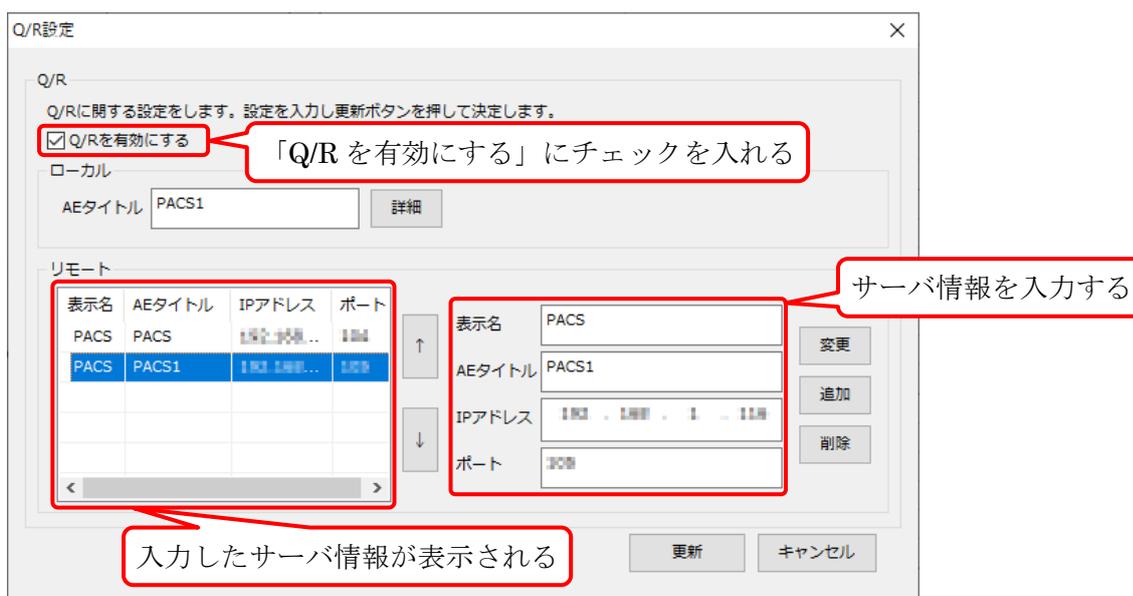

QR 設定の「Q/R を有効にする」にチェックを入れることで[DICOM Q/R]タブが表示されます。設定に関しては担当にお問い合わせください。

基本画面ータブ設定（1）

[リストの追加]ボタンはページ「2.4 ・タブ追加 ③[設定(スパナ)]ボタンから作成」をご参照ください。

[表示順の変更]ボタンはページ「2.4 ・タブ移動」をご参照ください。

動作設定		
設定内容	説明	初期値
タブ名称	※入力欄の名称を変更後、Enter を押下することで設定できます。	
先読み	各アプリで事前にデータを読み込む先読みを実施するか設定します。 (しない、10、50、100、300、500)	しない (規定)
検索条件		
デフォルト設定	必ず検査条件として指定されるデータ種を選択します (患者情報一覧、画像、文書管理など) (非公開患者、(空欄))	
追加検索	チェック状態の項目を検索結果に加えて表示します。	しない (規定)

基本画面－タブ設定（2）

STELLAR Order 設定
×

基本設定

全般設定
タブ設定

端末設定

全般設定
アクション設定

説明

タブ毎に検索条件
起動アプリ等を設定します

リストの追加 表示順の変更

患者一覧 画像一覧 文書一覧 その他検査 放射線科 生理系検査 循環器 内視鏡 < >

タブ名称	<input type="checkbox"/>	タブ名称	患者一覧
動作設定	<input type="checkbox"/>	先読み	しない(規定)
検索条件	<input type="checkbox"/>	デフォルト設定	
	<input type="checkbox"/>	追加検索	する
起動アプリ	<input type="checkbox"/>	検査種別マスタの規定ビューアを使用	規定値を使用しない
	<input type="checkbox"/>	ダブルクリック	STELLAR
	<input type="checkbox"/>	メニュー	Nazca,STELLAR,STELLAR Report
	<input type="checkbox"/>	ランチャー	NazcaView,STELLAR,Capella,STELLAROrder,SOPHIARepor Workfl
表示設定	<input type="checkbox"/>	複数行表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	履歴に名寄せ患者表示	する
	<input type="checkbox"/>	タブの日付使用	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	開封通知の複数行表示	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	開封通知(白ユーザを表示)	しない(規定)
	<input type="checkbox"/>	サブ画面表示項目	履歴リスト

初期設定

ID・氏名 他施設 << 本日 >>

入院日 指定期間 2021/07/01 ~ 2021/07/01 モダリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 外来 入院 入院外来 その他

確定 終了

デモ総合病院 demo(デモユーザー) 10:57 Login

起動アプリ		
設定内容	説明	初期値
検査種別マスタの規定ビューアを使用	データ種毎に設定した指定ビューアを使用するかを設定します。 (規定値を使用しない、規定値を使用する)	規定値を使用しない
ダブルクリック	ダブルクリック時に実行するアプリを設定できます(規定ビューア優先)。 (チェックボックスで選択)	STELLAR
メニュー	リスト上右クリック時に表示する起動アプリを設定できます。 (チェックボックスで選択)	Nazca, STELLAR, STELLAR Report
ランチャー	使用頻度の高いアプリを指定します。 (チェックボックスで選択)	

基本画面－タブ設定（3）

STELLAR Order 設定
×

基本設定

全般設定
[タブ設定](#)

端末設定

全般設定
アクション設定

説明

タブ毎に検索条件
起動アプリ等を設定します

起動アプリ	項目	値
<input type="checkbox"/>	ダブルクリック	STELLAR
<input type="checkbox"/>	メニュー	Nazca, STELLAR, STELLAR Report
<input type="checkbox"/>	ランチャー	

表示設定	項目	値
<input type="checkbox"/>	複数行表示	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	履歴に名寄せ患者表示	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	タブの日付使用	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	開封通知の複数行表示	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	開封通知 (自ユーザを表示)	しない (規定)
<input type="checkbox"/>	サブ画面表示項目	履歴リスト

初期設定

ID・氏名 他施設 << 本日 >>

入院日 指定期間 2021/07/01 ~ 2021/07/01 モダリティ【ALL】

主診療部門 主担当医 病棟 前方一致 AND

入外 外来 入院 入院外来 その他

アクション	項目	値
<input type="checkbox"/>	ボタン1	スキャナ取り込み Capella
<input type="checkbox"/>	ボタン2	CD取り込み TransferTool
<input type="checkbox"/>	ボタン3	文書作成 STELLARReport
<input type="checkbox"/>	ボタン4	紹介管理 Regulus
<input type="checkbox"/>	ボタン5	患者登録 SMGPatientMaintenance
<input type="checkbox"/>	ボタン6	患者編集 SMGPatientMaintenance
<input type="checkbox"/>	ボタン7	リスト出力 STELLAROrder

編集 終了

デモ総合病院 demo (デモユーザー) 13:29 Login

表示設定		
設定内容	説明	初期値
複数行表示	カラム内の文字列を改行して表示するかを設定できます。(しない、する)	しない (規定)
履歴に名寄せ患者表示	履歴に名寄せ患者を表示するかを設定できます。(しない、する)	しない (規定)
タブの日付使用	検索欄の日付使用を変更できます。(しない、する)	しない (規定)
開封通知の複数行表示	開封先が複数あった場合に開封先数の数だけ表示するかレポート単一で表示するかを切り替えます。(しない、する)	しない (規定)
開封通知 (自ユーザを表示)	自分宛の開封通知を表示するかを設定します。(しない、する)	しない (規定)
サブ画面表示項目	サブ画面に表示する項目の設定を行います。(プロトコル、シリーズ No、部位、シリーズ名)	
初期設定はページ「2.3.10 任意項目・プリセット等のプルダウン」、「2.4 タブ操作・検索条件保存」をご参照ください。		
アクションはページ「2.3.13 アクションボタン (タブ連動)」をご参照ください。		

端末設定－全般設定（端末設定の項目は担当にお問い合わせください。）

STELLAR Order 設定
×

基本設定	全般設定		
全般設定 タブ設定	ログイン選択	ユーザ選択	使用しない（規定）
		施設選択	使用する（リスト）
端末設定	Q/R	QR	有効（規定）
		画像登録先設定	
全般設定 アクション設定	色	暗室モード	使用しない（規定）
		暗室モード時の色使用	使用する（規定）
	アクションステータス	表示方法	最終アクション（規定）

説明

端末毎の
全般設定をします

確定
終了

デモ総合病院
demo (デモユーザー) 14:16 Login

ログイン選択		
設定内容	説明	初期値
ユーザ選択	ログイン時にユーザ選択を使用するか設定を行います。	使用しない（規定）
施設選択	ログイン時に施設選択を使用するか設定を行います。	使用する（規定）
Q/R		
Q/R	Q/Rの有効・無効設定を行います。	有効（規定）
画像登録先設定	画像登録先 AE の設定を行います。	
色		
暗室モード	画面の背景色を設定します。	使用しない（規定）
暗室モード時の色使用	画面テーマが暗室時に色付け設定を行います。	使用する（規定）
アクションステータス		
表示方法	アクションステータスの表示設定を行います。	最終アクション（規定）

端末設定－アクション設定

STELLAR Order 設定
×

基本設定	アクション設定		
全般設定 タブ設定	表示	メッセージ	する
端末設定	検査出力 (全般)	接続タイムアウト	30
全般設定 アクション設定	検査出力 (Nazca)	出力方法	XML (規定)
		出力パス	\$(AsSharedData)\Export
		新規連携方法	使用する (規定)
		XML出力タイプ	外部用標準XML (規定)
		画像出力パス	
	検査出力 (STELLAR)	出力パス	\$(AsSharedData)\Query\STELLAR\result
		新規連携方法	使用する (規定)
		XML出力タイプ	外部用標準XML (規定)
	検査出力 (Report)	出力パス	\$(AsSharedData)\Query\STELLARReport\result
		新規連携方法	使用する (規定)
		XML出力タイプ	外部用標準XML (規定)
	検査取り込み	取り込み先パス設定	
		オーダのXMLコピー先パス	\$(AsSharedData)\OrderXML\NazcaRIS\PilotIn
		Nazca登録タイムアウト	3000
	Q/R	画像取得方法	単一取得 (規定)
	リスト出力	画面表示	表示する (規定)

デモ総合病院
demo (デモユーザー) 14:16 Login

表示		
設定内容	説明	初期値
メッセージ	exe がインストールされていない場合のメッセージを表示するかどうか設定をします。	しない
検査出力 (全般)		
接続タイムアウト	接続タイムアウトの設定をします。	30
検査出力 (Nazca)		
出力方法	STN 連携における動作設定をします。	XML (規定)
出力パス	画像出力パスの設定をします。 \$(AsSharedData)\Export	
新規連携方法	Nazca において、新しい連携方法を使用するかどうかの設定を行います。	使用する (規定)
XML 出力タイプ	出力タイプの設定をします。	外部用標準 XML (規定)
画像出力パス	画像出力パスの設定をします。	
XML 出力パス	XML 出力パスの設定をします。	

検査出力 (STELLAR)		
出力パス	STELLAR 出力パスの設定を行います。 \$(AsSharedData)\Query\STELLAR\result	
新規連携方法	STELLAR において、新しい連携方法を使用するかどうかの設定を行います。	使用する (規定)
XML 出力タイプ	出力パスの設定を行います。	外部用標準 XML (規定)
検査出力 (Report)		
出力パス	Report 出力パスの設定を行います。 \$(AsSharedData)\Query\STELLARReport\result	
新規連携方法	Report において、新しい連携方法を使用するかどうかの設定を行います。	使用する (規定)
XML 出力タイプ	出力パスの設定を行います。	外部用標準 XML (規定)
検査取り込み		
取り込み先パス設定	取り込み先のパスの設定を行います。	
オーダーの XML コピー先パス	オーダーの XML 出力パスの設定を行います。 \$(AsSharedData)\OrderXML\NazcaRIS\PilotIn	
Nazca 登録タイムアウト	応答待ち時間の設定を行います。	3000
Q/R		
画像取得方法	画像取得方法の設定を行います。 ※複数取得の際、画像取得は速いが、メモリ使用消費量が大きいため注意してください。	単一取得 (規定)
リスト出力		
画面表示	画像表示設定を行います。	表示する (規定)